




**Die Anwendung der elektromagnetischen Stimulation ist kontraindiziert, wenn:**

- **Der Patient einen Herzschrittmacher trägt,**
- **Der Patient einen implantierten Defibrillator (I.C.D) trägt,**
- **Der Patient schwanger ist.**
- **Der Patient ein erhöhtes Thromboserisiko hat,**
- **Der Patient ein implantiertes Hörgerät hat.**
- **Bei i-LIGHT Anwendung:**
  - **Der Patient hatte in der Vergangenheit epileptische Anfälle**
  - **Unbedingt zu vermeiden ist die direkte Bestrahlung der offenen Augen**

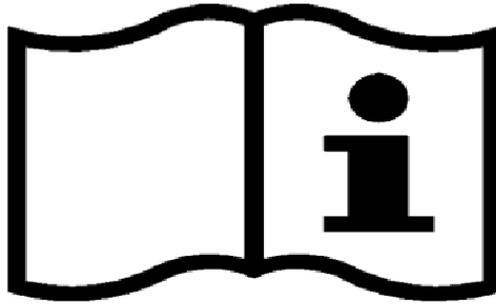

**Das i-Health® System darf nur nach angemessener Schulung angewandt werden.**

**Besuchen Sie die entsprechenden Seminare aus unserem Trainingsprogramm, welches Sie bei Ihrem i-Health-Repräsentant beziehen können.**

**Beachten Sie bei der Nutzung des Gerätes die im Handbuch genannten Warnungen und Kontraindikationen**

**Wenden Sie sich mit ihren Fragen zum Produkte an die i-Health Vertriebs GmbH in Würzburg.**

**Standardisierte Diagnoseverfahren und Protokolle, die von einem Professionellen Therapeuten verordnet wurden, sind während der Anwendung des Gerätes zu berücksichtigen.**

<b>1 INTERAKTIVE UND INTEGRIERTE BEHANDLUNGSPROGRAMME</b>	<b>7</b>
<b>1.2 MERIDIANE UND ORGANE</b>	<b>7</b>
<b>1. IQ BEAUTY SYS: ZUSAMMENFASSUNG VON BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN</b>	<b>9</b>
<b>2.1 COMPUTERBERECHNETE KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN</b>	<b>9</b>
<b>2.2 BEHANDLUNG MIT i-LIGHT UND i-MATRIX</b>	<b>9</b>
<b>3. AUSWAHL DES PASSENDEN PROGRAMMS</b>	<b>13</b>
<b>3.1 WANN WENDE ICH WELCHES PROGRAMM AN ?</b>	<b>13</b>
<b>3.2 KONTRAINDIKATIONEN</b>	<b>14</b>
<b>4. BEHANDLUNGSSEGMENTE/ZU BEHANDELNDE BEREICHE IM DETAIL</b>	<b>15</b>
<b>4.1 BEHANDLUNG DES BINDEGEWEBES</b>	<b>15</b>
<b>4.2 LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE</b>	<b>16</b>
<b>4.3 REVITALISIERUNG/REGENERATION</b>	<b>17</b>
<b>4.4. LOKALISATION DER GESICHTSZONEN</b>	<b>17</b>
<b>4.5 ELIMINATION ÜBER ABDOMEN UND THORAX</b>	<b>20</b>
<b>4.6. KONSOLIDIERUNG</b>	<b>20</b>
<b>4.7 START DES ENERGY SKIN CARE PROGRAMMS</b>	<b>20</b>
<b>5.1. REGENERATIONSPROGRAMM 1</b>	<b>23</b>
<b>5.2 REGENERATIONSPROGRAMM 2 – GESICHTSREVITALISIERUNG</b>	<b>28</b>
<b>5.3 REJUVENATION PROGRAMM</b>	<b>35</b>
<b>5.4 ANTI-FALTEN-PROGRAMM</b>	<b>41</b>
<b>5.5 ACNE PROTOCOL</b>	<b>48</b>
<b>5.6 CELLULITE-PROGRAMM</b>	<b>53</b>
<b>5.7 SPEZIELLE LÖSUNGEN</b>	<b>79</b>

**IQ BEAUTY SYS: Hautregeneration auf Basis der EDA (Electro Dermal Assessment)**



**Front Platine mit angeschlossenen Kabeln 1**



**Front Platine des IQ BEAUTY SYS 1**

Wie das Gerat angeschlossen und gewartet wird ist Teil der Schulung.



**Rueckseite des IQ BEAUTY SYS 1**



**Zubehoer 1**

Sicherheitstests:



<b>EN60601-1-2 : Medical electrical equipment , collateral standard : EMC- requirements and test</b>	
<b>Emission:</b>	
<b>Test or Technical Standard</b>	<b>Title</b>
EN 55011 (2007)	: Industrial , scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment : Electromagnetic disturbance characteristics Limits and methods of measurement .
EN 61000-3-2(2006)	Limits for harmonic current emissions (input current $\leq 16A$ )
EN 61000-3-3(1995) +am1	Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current $\leq 16A$ .
<b>Immunity:</b>	
<b>Test or Technical Standard</b>	<b>Title</b>
EN 61000-4-2 (1995) +am1	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test.
EN 61000-4-3 (2002)	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 3: Radiated, radio-frequency electromagnetic field immunity test.
EN 61000-4-4 (2004)	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test.
EN 61000-4-5(2005)	Electromagnetic compatibility (EMC) part4: Testing and measurement techniques- Section5 : Surge immunity test.
EN 61000-4-6 (2007)	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
EN 61000-4-8(2005)	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 8: Power frequency magnetic field immunity test.
EN61000-4-11(2004)	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variation immunity test.

### **EMISSION TEST**

The test has been performed according to the standard:

EN55011: Industrial , scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment : Electromagnetic disturbance characteristics Limits and methods of measurement .

Hiermit erklart i-Health das das i-Health IQ Beauty Sys die Bestimmungen der EWG entspricht.

## 1 INTERAKTIVE UND INTEGRIERTE BEHANDLUNGSPROGRAMME

Die i-health-Software für die elektronische Hautwiderstandsmessung wurde kombiniert mit den Geräten für die Anwendung von moduliertem galvanischem Strom, der rhythmischen Vakuummassage, der Stimulation mit Farbsequenzen und der elektromagnetische Regulation von Dermatomen, Reflexzonen und Akupunkturpunkten.


Alle Schritte des Programms wurden automatisiert; die Anweisungen des Programms sind dabei das direkte Ergebnis der letzten Messungen. Der Vergleich der Hautwiderstandsgrafiken vor, während und nach der kosmetischen Behandlung zeigt die genaue Reaktion des Klienten auf die Behandlung. Diese Herangehensweise gewährleistet eine wirksame und den aktuellen Erfordernissen entsprechende Behandlung.

### 1.2 MERIDIANE UND ORGANE

Der menschliche Körper ist ein offenes System in Bezug auf den Austausch von Energie und Information. Laut TCM sind Meridiane Kommunikationskanäle für Energie und Information. Sie sind wahrscheinlich das am längsten bekannte Regulationssystem innerhalb des Organismus. Seine Entwicklung beginnt im Embryonalstadium mit der Bildung der Blastomeren. Meridiane sind Proteinketten mit extrem hoher Leitfähigkeit, die den Bindegewebestrukturen folgen. Der elektrische Widerstand dieser Proteinketten liefert Information über den Zustand der Organe, die Funktion und Regulationsprozesse, die in Bezug zu diesen Meridianen stehen. Der Strom, der für die i-health-Messung verwendet wird, ist so minimal, dass er keine nennenswerte Wirkung auf Organe und Meridiane hat.

MERIDIAN	ORGAN	BEISPIELE FÜR DIE ZUSAMMENHÄNGE MERIDIAN-ORGAN-FUNKTION
Lunge	Lunge	Immunsystem, Haut, Gasaustausch
Dickdarm	Dickdarm	Lymphatisches System, Entgiftung
Magen	Magen	pH-Regulation
Milz/Pankreas	Milz, Pankreas, Blut	N. vagus, Kohlehydratstoffwechsel und Pankreas
Herz	Herz und Blutkreislauf	Emotionale Einflüsse, cardiale Blutversorgung
Dünndarm	Dünndarm	Enzymatische Verdauung
Blase	Blase	Urogenitalsystem, Nebenhöhlen, Augen, Wirbelsäule
Niere	Niere	Elimination von wasserlöslichen Substanzen, Flüssigkeitshaushalt
Kreislauf	Kreislauf und Epiphyse	Blutdruck, nervale Versorgung des arteriellen Systems, Kreislauf

Dreifach-Erwärmer	Hypophyse	Endokrines System
Leber	Leber	Proteinmetabolismen
Gallenblase	Gallenblase	Cholesterol- und Fettmetabolismen

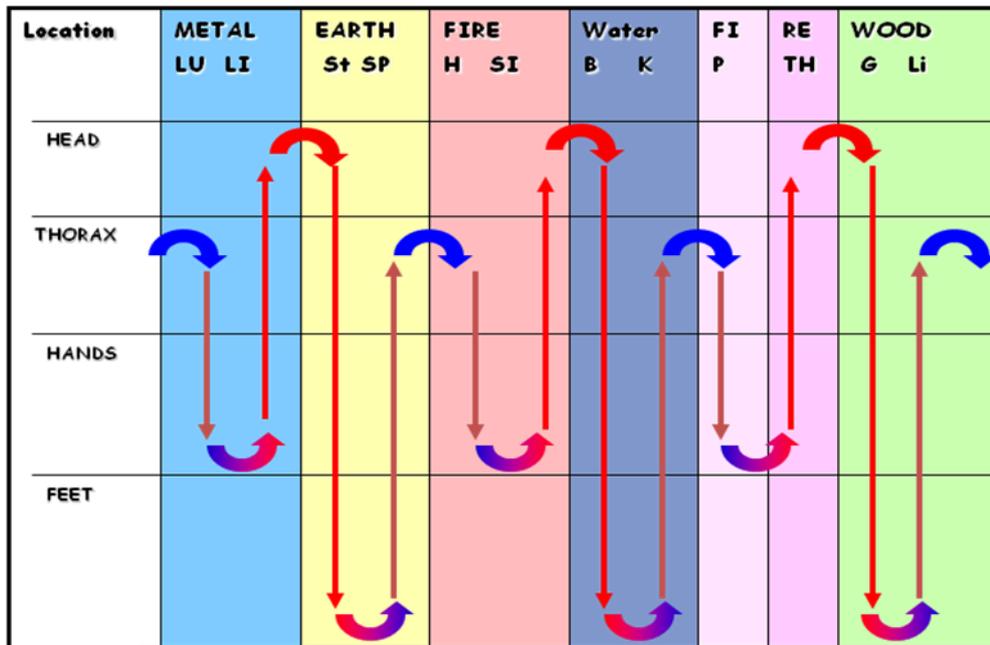

Topographie von Energie und Polarität im Meridiansystem der klassischen TCM. Der Kopf ist vollständig der Yang-Energie zugeordnet, die Brust zu 100% der Yin-Energie, während in Händen und Füßen die Polarität wechselt.

### 2.1 COMPUTERBERECHNETE KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN

-Bewertung von vegetativem Stress ( Verschlackungen, Defizite, mangelnde Durchblutung) und Übersäuerung mittels Hautwiderstandsmessungen, vorgenommen an den distalen Meridianpunkten an Händen und Füßen, wie sie in der TCM beschrieben sind.

-Verbesserung von vegetativer Stressregulation und Widerstandsfähigkeit, Optimierung von Blut- und Lymphkreislauf, Entgiftung, Entsäuerung und Hautregeneration mittels Elektromagnetismus, moduliertem galvanischem Strom, Vakuummassage und Farblichtsequenzen.

Das IQ BEAUTY SYS ist denkbar vielseitig und flexibel. Es bietet ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten.

### 2.2 BEHANDLUNG MIT I-LIGHT UND I-MATRIX

#### 2.2.1 DIE HARDWARE.

Speziell für das IQ BEAUTY SYS entwickelt wurden das i-LIGHT (eine sehr starker LED-Farb-Beamer) und das i-MATRIX, ein kompaktes Gerät mit eingebauter Vakuumpumpe (i-VAC), einem galvanischen Modulator (i-ON) fuer Iontophorese und einem Magnetfeldsender. Das i-VAC bietet digital gesteuertes rhythmisches Vakuumschröpfen der Haut und den damit verbundenen Bindegewebe- und Lymphstrukturen. Der modulierte galvanische Strom aus dem i-ON wird mit einem Dermaroller und Stabelektroden auf die Dermatome appliziert. Die Magnetfeldfrequenzen werden mit einem roten Beamer auf den Körper appliziert.

Die i-LIGHT-Batterie kann mit einem 5-Volt-Batterieladegerät aus dem Netz geladen werden. Wenn das Haut-Programm einmal gestartet und die beiden Geräte mit dem Laptop verbunden wurden, wird das passende Raymedy über die USB-Antenne auf das i-LIGHT heruntergeladen.

Das i-MATRIX-Gerät erhält seine Power ebenfalls aus dem Netz. Der modulierte galvanische Strom und die Magnetfeldsignale werden automatisch über die USB-Antenne an der Rückseite des Gerätes heruntergeladen.

#### 2.2.2.DIE SOFTWARE.

Die eigentliche Auswahl, der Befehl und die Dauer der Behandlungssignale ("Raymedys"), die während der kosmetischen Anwendung verwendet werden, werden automatisch (als Ergebnis einer EDA-Messung) angezeigt. Folgen Sie nur den Anweisungen auf dem Computerbildschirm. Die Raymedys sind verfügbar als Farbsequenzen, als modulierte galvanische Signale und als Magnetfeldsignale. Die Farbsequenzen werden mit dem i-LIGHT, die modulierten galvanischen Signale mit dem i-ON und die magnetischen Feldsignale mit dem Beamer appliziert.

Das IQ BEAUTY SYS beinhaltet angesichts der verschiedenen individuellen kosmetischen Probleme mehrere Programme.

Beispiel: Die Energy-Beauty-Care-Gesichtsrevitalisierung. Oft bringt schon die erste Behandlung mit diesem Protokoll sichtbare Ergebnisse. Darüber hinaus sind spezielle Programme verfügbar für die Behandlung von Cellulite, Falten, Verjüngung von Gesicht, Hals und Dekolleté, außerdem spezielle Vorschläge für die Hautfestigung an Brust, Armen, Beinen und Gesäß, Narben, Streifen, Male, (De-) Pigmentierungen, Couperose, Akne, Ekzem, Psoriasis und Rosacea. DISCLAIMER: Das IQ Beauty Sys ersetzt keine Therapie, sondern ist ein System zur Foerderung der Vitalitaet mittels Anregung der Durchblutung, Zellatmung und Entschlackung.

---

### 2.2.3 AUFBAU DES PROGRAMMS

Alle Programme sind ähnlich aufgebaut in Technologie und Durchführung wie die beiden Basis-Regenerationsprogramme, aber mit besonderem Augenmerk auf spezielle Problemzonen. In ca. 60-bis 90-minütigen Sitzungen werden Gesicht, Wirbelsäule, Bauch, Brust und Beine in 4 aufeinander folgenden Schritten auf angenehme, gründliche und effektive Art behandelt:

1. Lymphdrainage/Matrixregulation
2. Revitalisierung/Regeneration
3. Entgiftung
4. Festigung

Insbesondere dieser Aufbau und die Integration der Technologie werden für adäquate Stimulation von Fibroblasten und Kollagenen sorgen, die für die Revitalisierung und Hautverjüngung notwendig sind, ebenso wie Entsäuerung, Entgiftung und verbesserte Durchblutung für die Erhaltung der sichtbaren Ergebnisse.

---

### 2.2.4 LYMPHDRAINAGE/MATRIX-REGULATION

Im Regenerationsprogramm I wird die Entgiftung des Bindegewebes vorbereitet. Dieses Gewebe wird auch als Matrix, BBRS (Basic Bio Regulation System) oder Pischinger's Basic System bezeichnet.

Das Bindegewebe kontrolliert die Aufrechterhaltung der Homöostase, die durch kontinuierliche Anpassung den innerlichen biologischen Ausgleich darstellt zu den äußerlich wechselnden Gegebenheiten. Homöostase gewährleistet die Stabilität der Vitalfunktionen wie Temperaturregelung, Blutdruck, Blutzucker, Abwehr und pH-Wert. In vielen Situationen ist das Bindegewebesystem verschmutzt worden. Um Entgiftung zu fördern und Homöostase zu ermöglichen, werden spezifische Dermatome behandelt. Ein wichtiger und wirksamer Zugang zu diesen Dermatomen sind die sogenannten Back-Shu- oder YÜ-Punkte entlang der Wirbelsäule, auf dem inneren Ast des Blasenmeridians. Die Auswahl dieser Punkte wird vom Programm automatisch getroffen, als Ergebnis der vorangegangenen EDA-Messungen. Die unten stehende Tabelle zeigt die Korrelation zwischen YÜ-Punkten, Organen, Dermatomen und ihrer Lokalisation. Die verschiedenen Farben der Punkte auf dem Bild entsprechen den 5 Elementen: Metall (B13 und B25) silbergrau, Holz (B18 und B19) grün, Feuer (B14,15,22 und 27) rot und Wasser (B23 und B28) blau.

Name	Organ	Element	Bindegewebszone	Lokalisation
<b>B13</b>	Lunge	Metall	Lungen, Bronchien, Pleura, Brust	ICR 3
<b>B14</b>	Pericard	Feuer	Gallenblase, Magen und Milz	ICR 4
<b>B15</b>	Herz	Feuer	Leber, Magen, Solarplexus und Blut	ICR 5
<b>B18</b>	Leber	Holz	Nebennierenrinde	ICR 9
<b>B19</b>	Gallenblase	Holz	Nieren, Darm- und Gefäßwände	ICR 10
<b>B20</b>	Milz/Pankreas	Erde	Nieren, Blase, Urethra, Prostata	ICR 11
<b>B21</b>	Magen	Erde	Dünndarm, Ovarien, Lymphkreislauf	unterhalb der 12. Rippe
<b>B22</b>	Dreifach-Erwärmer	Feuer	Colon, Leisten	zwischen L1 und L2
<b>B23</b>	Nieren	Wasser	Appendix, Unterbauch, Oberschenkel	zwischen L2 und L3
<b>B25</b>	Dickdarm	Metall	Prostata, Unterschenkel, Knöchel, Füße, Zehen	zwischen L4 und L5
<b>B27</b>	Dünndarm	Feuer	Hüften, Becken, Hintern	neben der Unterkante von S1
<b>B28</b>	Blase	Wasser	Hüften, Becken, Hintern	neben der Unterkante von S2



- a. Die Matrix-Regulation in 3 Schritten: Frequenzmodulierte Elektrophorese mit dem *i-ON*-Dermaroller bringt einen direkten Strom in den Körper auf Zonen und mit Frequenzen, die der Körper selbst angezeigt hat (durch erhöhte Hautwiderstände), als Ergebnis der vorangegangenen EDA-Messungen. Die meisten dieser problembezogenen Dermatome wurden im Gesicht lokalisiert, entlang der Wirbelsäule und im Unterleib. Mit der Behandlung dieser Dermatome wird die Durchblutung unterstützt und damit auch Entgiftung und Entsäuerung. Die Stimulierung der Fibroblastenproduktion führt oft zu einer bemerkenswerten Kräftigung, Verjüngung und Verbesserung von Gesichtshaut und Bindegewebeelastizität. Belastungen als Folge von Rauchen, belastende Ernährung, Alkoholkonsum, Medikamenten, uA, können diesen Effekten zu nichte tun.
- b. Desweiteren wird die Homöostase kräftig unterstützt durch das *i-MATRIX*: rhythmisches, tiefes Vakuumschröpfen aktiviert Zellmetabolismus und Lymph- und Kapillarkreislauf. Es entfernt Ablagerungen und Knoten im Unterhautgewebe und reguliert das autonome Nervensystem über das Feedback der behandelten Dermatome.

- c. Alle problemrelevanten Wirbelsäulensegmente werden behandelt, vom Kopf bis zum Gesäßbereich. Zur energetischen Konstitution passende essentielle Öle verbessern das Behandlungsergebnis. Es gibt 15 Kombinationen, 3 pro Element, abhängig von den energetischen Zustand:

<b>HOLZ</b>	<b>HO 03 (hyper), HO 02 (normal), HO 01 (hypo)</b>
<b>FEUER</b>	<b>VU 03 (hyper), VU 02 (normal), VU 01 (hypo)</b>
<b>ERDE</b>	<b>AA 03 (hyper), AA 02 (normal), AA 01 (hypo)</b>
<b>METALL</b>	<b>ME 03 (hyper), ME 02 (normal), ME 01 (hypo)</b>
<b>WASSER</b>	<b>WA 03 (hyper), WA 02 (normal), WA 01 (hypo)</b>

- d. Dieselben ausgewählten Hautsegmente werden mit dem *i-LIGHT* bestrahlt. Dieser sehr kraftvolle LED-Farbbeamer führt zur Photomodulation der Mitochondrien und der DNA-Synthese und Photonentransport in Haut-, Bindegewebs- und Muskelzellen. Die Kraftstoffversorgung des Organismus wird buchstäblich wiederhergestellt. Flexibilität, Stabilität und Glanz werden sichtlich profitieren. Neben der Stressregulation führt die *i-LIGHT*-Behandlung auch zu Harmonisierung, Entspannung und Revitalisierung. Kontraindiziert ist diese Behandlung bei Krampfanfällen in der Anamnese. Das *i-LIGHT* darf nicht direkt auf die Augen gerichtet werden.

---

### 2.2.5 GESICHTSREGENERATION/REVITALISATION: "DAS GALVANISCHE FACELIFTING".

Das Regenerationsprogramm II startet mit der Behandlung der Halswirbelsäule, nacheinander mit dem *i-ON*, dem *i-VAC* und dem *i-LIGHT*. Diese Behandlung aktiviert indirekt die Gesichtsdermatome. Die drei vorausgegangenen Messungen sind notwendig, um die Gesichtsdermatome auszuwählen, die mit dem schwächsten Meridian zusammenhängen, außerdem auch für die Auswahl der Frequenz/des Raymedys, um ein direktes "galvanisches Lifting" durchzuführen.

Eine Verbesserung von Entsäuerung, Entgiftung, Durchblutung und Elastizität wird jetzt mit dem *i-ON*-Dermaroller und den Stabelektroden auf die problematischen Gesichtszonen in Gang gesetzt.

Danach wird das ganze Gesicht und der Hals mit den Vakuum-Schröpfköpfen des *i-VAC* massiert. Mit regulierbarer Saugkraft und Impulsfrequenz, kombiniert mit den zur energetischen Konstitution passenden essentiellen Ölen, wird eine Lymphdrainage und Massage des Bindegewebes erreicht.

Anschließend wird mit Hilfe des *i-LIGHT* die Verteilung der Photonen und die Stimulation der DNA-Synthese aktiviert, und zwar mit jenen Farbsequenzen, auf die der schwächster Meridian besonders ansprechen sollte.

---

### 2.2.6 ELIMINATION: BINDEGEWEBE- UND LYMPHDRAINAGE IM BAUCH- UND BRUSTBEREICH

Besondere abdominale und thorakale Entgiftungszonen werden ebenfalls mit der *i-VAC*-Schröpftechnik behandelt, unterstützt durch die individuell zusammengestellten essentiellen Öle. Die vorangegangenen Messungen sind notwendig, um die Bewegungsrichtung für diese Vorgänge zu ermitteln.

- Im Falle eines Energieüberschusses im Konstitutionselement werden Abwärtsbewegungen überwiegen.

- Im Falle eines Energiemangels oder eines normalen Energieniveaus im Konstitutionselement werden Aufwärtsbewegungen dominieren.

## **2.2.7 KONSOLIDIERUNG MIT MAGNETFELDFREQUENZEN UND INFRAROT**

Der letzte Schritt jedes Behandlungsprogramms ermöglicht dem Klienten, auf die Wirkung der Matrixregulation, Gesichtsrevitalisierung und Entgiftung mittels Bewertung der vegetativen Regulation zu antworten: Eine abschließende EDA-Messung errechnet das günstigste Magnetfeldsignal für eine optimale vegetative Regulation und zeigt so den bisherigen Behandlungserfolg.

Dieses spezielle Regulationssignal wird mit dem roten Beamer (dem EM-Transmitter) auf Brust-, Bauch- oder Halsregion appliziert. Die Durchblutung der peripheren Kapillaren wird so ausgeglichen, ebenso der zelluläre und der Neurotransmittermetabolismus. Es kommt zu einem tiefen und sehr angenehmen Gefühl von Ruhe und Entspannung.

## **3. AUSWAHL DES PASSENDEN PROGRAMMS**

### **3.1 WANN WENDE ICH WELCHES PROGRAMM AN?**

In den meisten Fällen wird empfohlen, mit dem Regenerationsprogramm I (allgemeine Entgiftung) zu beginnen. Daneben beinhaltet das IQ BEAUTY SYS besondere Programme für Cellulite, Falten, Verjüngung, Akne und "spezielle Lösungen" für Allergie, Couperose, Ekzeme, Narben, (De-) Pigmentierungen, Psoriasis und Rosacea. Alle Programme sind gleichartig aufgebaut und sorgen für eine ordentliche Reaktivierung und freien Energiefluss, indem saure und toxische Stoffe entfernt und stagnierende, festsitzende Energien ins Fließen gebracht werden. Der Körper reagiert darauf mit:

- Verbesserung der Regenerationsfähigkeit der Haut
- Steigerung von zellulärer Aktivität und Stoffwechsel
- Stimulation der natürlichen Fibroblastenproduktion
- Verbesserung des Feuchtigkeitshaushaltes der Haut
- Verbesserung von Hautdurchblutung und Stoffwechsel
- Verbesserte Oberfläche (weicher, elastischer, mehr Glanz)
- Verbesserte Bindegewebsstruktur
- Glättung von Linien und tiefen Falten
- Feinere Hautporen

## Die Programmoptionen

Hautzustand	mögliche Ursachen	welches Programm?
Trockene und schuppige Haut	Insuffizientes Flüssigkeits- und Entgiftungsmanagement	Detox Körper, Detox Gesicht Verjüngung
gespannte und rissige Haut	Flüssigkeitsmangel	Detox Körper, Detox Gesicht Verjüngung
Fleckige und irritierte Haut	Mangel an Schutz, hoher pH, mangelnde Balance zwischen Feuchtigkeit und Fett	Detox Körper, Detox Gesicht Verjüngung
farblose Haut	schlechte Durchblutung	Detox Körper, Detox Gesicht Verjüngung
schlechte Wundheilung	verminderte Fibroblastenaktivität	I Detox Körper, Detox Gesicht Verjüngung
Falten generell	Mangelnde Deckung der Zellschichten	Detox Körper, Detox Gesicht Verjüngung Anti-Falten
markante Nase-Mund-Falte	eingefallene schlaffe Wangen, verminderte Elastizität	Detox Körper, Detox Gesicht Verjüngung, Anti-Falten
Augenringe	verminderte Entschlackung, reduziertes Sauerstoff- und Nährstoffangebot	Detox Körper, Detox Gesicht V erjüngung
Stirnfalten	Risse und Verklebungen im Bindegewebe	Detox Körper, Detox Gesicht Verjüngung, Anti-Falten
Zornfalten	Verklebungen der Hautschichten	Detox Körper, Detox Gesicht Verjüngung Anti-Falten
Wangenfalten	Risse und Verklebungen des Bindegewebes	Detox Körper, Detox Gesicht Verjüngung Anti-Falten
Couperose	Vascular capillar sclerosis	Detox Körper, Detox Gesicht Verjüngung Couperosis,
Unregelmäßige Pigmentation	allgemeine Alterung der Haut und unausgeglichenes Fett-Flüssigkeits-Verhältnis	Detox Körper, Detox Gesicht Verjüngung Verjüngung
Oberlippenfalten	Lichenifikationen, Verdickungen	Detox Körper, Detox Gesicht Verjüngung , Anti-Falten
Akne vulgaris	Androgene Hormone, unausgeglichener Stoffwechsel, bakterielle Infektionen, äußere Umstände	Detox Körper, Detox Gesicht Akne
Cellulite	Hormone, Anhäufung und Verklebung von Fettzellen, Flüssigkeit und Toxinen	Detox Körper, Cellulite

## 3.2 KONTRAINDIKATIONEN

Einige Zustände oder Umstände sind nicht tauglich für die komplette oder partielle Energy-Beauty-Care-Anwendung, wie beispielsweise:

- Verbrennungen, Verbrühungen, offene Wunden
- Hautinfektionen oder Entzündungen, virale und bakterielle Hauterkrankungen
- Furunkel und andere ansteckende Hautausschläge
- ernsthafte organische und/oder ansteckende Erkrankungen
- Elektromagnetische Stimulation ist kontraindiziert in der Schwangerschaft, bei erhöhter Thromboseeigung, bei Patienten mit implantiertem Schrittmacher oder Defibrillator und bei Patienten mit implantiertem Hörgerät
- Die i-LIGHT-Anwendung im Gesicht ist kontraindiziert bei Klienten mit Epilepsie (Krampfanfälle) in der Anamnese.

## 4. BEHANDLUNGSSEGMENTE/ZU BEHANDELNDE BEREICHE IM DETAIL

### 4.1 BEHANDLUNG DES BINDEGEWEBES

#### 4.1.1 EINFÜHRUNG

Das Bindegewebesystem ist in der Tat unser größtes Organ. Zusammen mit der extrazellulären Flüssigkeit beinhaltet sie mehr als 60% des menschlichen Gewebes. Es verbindet Haut, Muskeln, Fett, Flüssigkeiten, Zellen und Organe. Es ist ein unabhängiges System und wird als B.B.R.S.(Basic-Bio-Regulation System), Matrix oder Pischinger's System.

Dieses System reguliert alle Vitalfunktionen wie Atmung, Kreislauf, Energiehaushalt, Stoffwechsel, Temperatur und pH.

Es kontrolliert den permanenten Austausch zwischen dem autonomen und dem zentralen Nervensystem, dem endokrinen System und dem Immunsystem.

Verteiler in diesem komplizierten Austausch sind Neurotransmitter und den Stoffwechsel betreffende, immunregulierende und endokrine Substanzen. Alle wesentlichen Gegenmaßnahmen gegen pathogene Faktoren wie Kälte, Wind, Hitze, Schwüle, Nässe, Infektionen, Verletzungen, Narben und Fremdstoffen werden innerhalb des Bindegewebes ergriffen.

Lebensstil, Gewohnheiten und Lebensumstände, die Einstellung zum Leben und die Ernährung spielen eine wesentliche Rolle in der Aufrechterhaltung der Effektivität dieser autonomen, sich selbst regulierenden Anpassungsfähigkeit.

Biochemische Verschmutzung des Bindegewebesystems durch ständige Überladung scheint eine der wichtigsten Ursachen von chronischer Krankheit zu sein.

Aus diesem Grund ist die gründliche und konsequente Entgiftung des Bindegewebesystems der erste Schritt auf dem Weg zurück zu Vitalität, Schönheit und Gesundheit.

---

#### 4.1.2 BINDEGEWEBEZONEN: EIN WESENTLICHER BEHANDLUNGSBEREICH

Chronische, durch permanente Fehlregulation verursachte Bindegewebsveränderungen können in bestimmten Hautzonen anhand von Verfärbungen, Änderungen in Struktur, Temperatur und Durchblutung beobachtet werden. Diese Hautzonen stehen durch die segmentale Innervation in Bezug zu den inneren Organen.

Das Verhältnis zwischen bestimmten inneren Organen und (sub)dermalen Bereichen wurde um 1900 von dem britischen Neurologen Head entdeckt. Daher werden diese Bindegewebebereiche auch als "Head'sche Zonen" bezeichnet.

Alle inneren Organe und Organfunktionen haben ihr eigenes Projektionsfeld in Bindegewebezonen, genau unter der Haut. Die integrative Behandlung dieser Bindegewebezonen fördert die Selbstheilungskräfte sämtlicher Körperteile auf hormonale, neurologische und immunologische Weise.

---

#### 4.1.3 DER URSPRUNG DER BINDEGEWEBEZONEN

Die embryonale Entwicklung zeigt in der Tat einen segmentalen Aufbau: eine aufeinanderfolgende Reihe miteinander verbundener Scheiben ähnlicher Zusammensetzung. Diese "slices" heißen auch "Somiten", "Ursegmente" und beinhalten verschiedene Strukturen. Diese Strukturen sind die Quellen besonderer Gewebe, die in einem späteren Entwicklungsstadium gebildet werden:

Sclerotome      die Quelle für die Bildung von Knochengewebe

Myotome:        die Quelle für die Bildung von Muskelgewebe

Dermatome:     die Quelle für die Bildung von Hautgewebe

Vasotome:      die Quelle für die Bildung von Blutgefäßen

Viscerotome:   die Quelle für die Bildung von inneren Organen

Neurotome:     die Quelle für die Bildung von Nervengewebe

Ein bestimmtes Segment enthält all diese Strukturen, was verständlich macht, dass jedes Teilchen von Haut, Muskel, Knochen, Nerv, Gefäß oder Organ aus einem Spinalsegment entspringt.

---

#### 4.2 LYMPHDRAINAGE ,BINDEGEWEBEMASSAGE UND MATRIXDRAINAGE

Lymphdrainage und Massage des gesamten Bindegewebesystems werden mit Vakuum-Schröpf-Technik mit rhythmisch wechselndem Sog (i-VAC) vorgenommen. Dies fördert die Gefäßdurchblutung, den extrazellulären Stoffwechsel, den Lymphabfluss und den interstitiellen Toxinabtransport, und erreicht damit eine tiefe und gründliche Reinigung sämtlicher Gewebe und der gesamten Haut.

Vorzeitige und beschleunigte Alterung wird signifikant gebremst durch systematische Anwendung von Lymphdrainage und Bindegewebemassage, zusammen mit "galvanischem Facelifting", Farbtherapie und elektromagnetischer Feldtherapie. Dadurch fühlt sich jeder Klient nach einer Energy-Beauty-Care-Behandlung sehr entspannt und fit.

### 4.3 REVITALISIERUNG/REGENERATION

Die Behandlung mit dem i-On bewirkt eine indirekte Alkalisierung und eine Verbesserung von Durchblutung und Elastizität in den korrespondierenden Gesichtszonen. Lymphdrainage und Bindegewebemassage von Gesicht und Hals werden mit dem i-VAC durchgeführt.

Die abschließende Behandlung des Gesichtes mit dem i-LIGHT fördert die Stimulation der Photonenverteilung und DNA-Synthese durch die Applikation von speziell die Haut revitalisierenden Farbsequenzen.

### 4.4. LOKALISATION DER GESICHTSZONEN

---

#### OBERE HORIZONTALE STIRNZONE, AM HAARANSATZ (QUER)

Diese Zone hat Bezug zur Blasenenergie. Horizontale Falten mit schuppiger und trockener Haut könnten das Resultat von stagnierender Flüssigkeit bei schwacher Nieren- und Blasenenergie sein.

---

#### MITTLERE HORIZONTALE STIRNZONE

Dieser Bereich hat Bezug zum Dünndarm. Schwache Verdauung durch Enzymmangel ist oft die Folge von unvollständiger Ausscheidung von Schlacken und Toxinen, und führt zu Falten und Pickel in diesem Bereich. Ausscheidung und Entgiftung können verbessert und erleichtert werden durch Korrektur der Ernährung, mehr körperlicher Aktivität und Zufuhr von natürlichem Wasser. Neben Erbfaktoren kann auch ein Zuviel an ungeeigneter, schlecht organisierter oder subjektiv ermüdender Arbeit frühzeitige Faltenbildung in diesem Bereich verursachen.

Eine blasse oder rote Stirn kann ein Anzeichen sein für gesteigerte Durchblutung oder emotionale Unausgeglichenheit.

---

## TEMPORAL ZONE (SCHLÄFE)

Dieser Bereich hat Bezug zur Gallenblase. Hauterscheinungen an dieser Stelle können eine Anhäufung von Fettschlacken anzeigen und eventuelle Enttäuschungen aufgrund von zu hohen Erwartungen und Ungeduld.

---

## ZONE ZWISCHEN DEN AUGENBRAUEN

Diese Zone hat Bezug zur Leber. Vertikale Falten zeugen von exzessivem Essen und Trinken, chronischem Stress, Schlafmangel und emotionaler Unausgeglichenheit durch nicht ausgedrückten, angestauten Ärger und dem Gefühl, generell unfähig zu sein.

---

## ZONE UM DIE AUGEN

Der Bereich unter den Augen hat Bezug zu den Nieren. Schwarz-blaue Augenringe können ein Zeichen sein für schwache Nieren- und Blasenenergie. Diese dunklen Ringe sind oft erblich bedingt und zeigen eine Dehydratation, Flüssigkeitsstau und eine geringe Flüssigkeitsausscheidung an. Der Bereich oberhalb der Augen steht in Zusammenhang mit der Milz-Pankreas-Energie. Flüssigkeitsstau an dieser Stelle dürfte auf Probleme mit dem Kohlehydrat- und Zuckerstoffwechsel hinweisen. Gelb-braune Fettansammlungen um die Augen könnten chronische Probleme mit Leber- und Gallenblasenfunktion bedeuten. Ist der Bereich um die Augen grau gefärbt, dürften Erschöpfung, Stress und Durchblutungsstörungen vorliegen.

---

## NASE

Die Nase steht in Verbindung mit der Lunge bzw. der Atmung.

Nasenspitze und -rücken stehen in Bezug zur Herzenergie. Eine rote Nase mit weiten Kapillaren könnte ein Zeichen sein für ein Gefäßproblem, möglicherweise in Zusammenhang mit Blutdruck- oder Ernährungsproblemen.

---

## NASEN-MUNDWINKEL-FALTE (NASOLABIAL)

Dieser Bereich steht in Bezug zum Dickdarm. Hauterscheinungen oder eine tiefe Falte entlang der Nase könnten auf angestauten Müll und Toxine hinweisen, verursacht durch mangelhafte Colonaktivität (Obstipation oder Dysbiose).

---

## WANGEN

Falten im Bereich des Kieferknochens dürften auf unausgeglichene Lungenenergie hinweisen. Der Teil oberhalb des Kieferknochens, aber unterhalb der Nierenzone gehört zum Magen.

Empfindliche Couperose-Wangen könnten Ausdruck einer unausgeglichene Lungen-, Magen-, Milz- und/oder Herzenergie sein. Leichte Schwellungen dürften auf eine gestörte Kolonenergie hinweisen.

---

## ZONE UM DEN MUND

Die Haut um den Mund steht in Bezug zum Kreislaufmeridian.

Vertikale Falten um den Mund dürften hormonale Probleme anzeigen.

Pickel und Entzündungen in den Mundwinkeln können auf eine gestörte Herzenergie und/oder Colonenergie hinweisen.

---

## KINN

Diese Zone steht, zusammen mit dem Augenbereich, in Bezug zu den Nieren. Entzündungen und Obstruktionen dürften auf Toxinansammlungen in den Nieren hinweisen, auf schwachen Flüssigkeitskreislauf und Menstruationsprobleme. Hautprobleme wie extremer Bartwuchs können mit hormonalen Dysbalancen zu tun haben. Hautunreinheiten können eine schwache intestinale Funktion bedeuten.

---

## ÄUSSERER KIEFERWINKEL

Diese Zone bezieht sich auf die Gallenblasenenergie.

---

## HALS

Rote Flecken oder unreine Haut mit Pickel stehen oft in Bezug zum Stresshormon Cortisol. Hauteruptionen im Hals- oder Brustbereich haben oft zu tun mit emotionaler Unausgeglichenheit und Problemen mit Lunge und Kreislauf.

---

## GESICHTSZONEN

Gesichtszonen	Lokalisation	RAYMEDY
Blasenzone	Oberer horizontaler Stirnbereich	Renastimutron
Nierenzone	Unterhalb von Augen und Kinn	Renastimutron
Leberzone	Zwischen den Augen	Hepastimutron
Gallenblasenzone	Schläfenbereich Kieferwinkel	Hepastimutron
Herzzone	Nasenspitze und -rücken	Corstimutron
Dünndarmzone	Mittlerer horizontaler Stirnbereich	Lienostimutron
Kreislaufzone	Bereich um den Mund	Thalastimutron
Dreifach-Erwärmer-Zone	Äußerer Augenbrauenwinkel	Corstimutron
Magenzone	Wangen oberhalb des Wangenknochens	Lienostimutron
Milzzone	Oberhalb der Augenlider	Lienostimutron

Lungenzone	Wangenknochen, Nase	Pneumastimutron
Dickdarmzone	Nasen-Mundwinkel-Falte	Pneumastimutron

#### 4.5 ELIMINATION ÜBER ABDOMEN UND THORAX

Bindegewebemassage und Lymphdrainage im Abdominal- und Thorakalbereich mit dem i-VAC.

#### 4.6. KONSOLIDIERUNG

Der letzte Schritt jedes Behandlungs-Programms gilt der Konsolidierung mittels Magnetfeldfrequenzen. Dies gibt dem Klienten das Gefühl von tiefer Ruhe und Entspannung, während das Vegetativum nachreguliert. Das Programm berechnet das hierfür günstigste Magnetfeldsignal und zeigt, wo es mit dem roten Beamer zu applizieren ist.

---

#### LOKALISATION DER AKUPUNKTURPUNKTE FÜR DIE KONSOLIDIERUNG

JM-3	vordere Mittellinie, 1 cun oberhalb des Schambeins
JM-8	auf den Nabel
JM-12	vordere Mittellinie, auf halbem Weg zwischen Brustbein und Nabel
JM-17	vordere Mittellinie, in der Mitte des Brustbeins
DM-14	rückwärtige Mittellinie, unterhalb von Vertebra C7 (Hals-Schulter-Niveau)

## 4.7 START DES ENERGY BEAUTY CARE - PROGRAMMS

### Die TDP Lampe

**Nach neuester wissenschaftlicher Forschung hat die Infrarot-Wärmebehandlung einen signifikant revitalisierenden Effekt auf die Gesichtshaut. Deswegen empfehlen wir nachdrücklich, jede Energy-Beauty-Care-Behandlung mit einer 8-minütigen Bestrahlung des Gesichtes mit der TDP-Lampe zu beginnen.**

Die TDP-Minerallampe ist als Ferninfrarot-Wärmetherapiegerät ein medizinisch-technisches Gerät der FDA-Klasse II. Die Lampe ist NICHT Bestandteil der Hardware des Behandlungsprogramms.

Während die meisten Lampen eine gewöhnliche Nahinfrarotbirne nutzen, gibt die TDP-Lampe eine besondere



Bandbreite ferninfraroter elektromagnetischer Energie ab (im 2-50 Mikrometerbereich). Dieses Spektrum ähnelt dem der heilsamen Ferninfrarot-Strahlung der Moorbad-Anwendungen in der Balneotherapie. Analysen der Tonerde und spätere Versuche führten zur Entwicklung von medizinischem Gerät, das nun als TDP-Minerallampe bekannt ist, als eine therapeutische Ergänzung der Moxabustion. Die Lampe weist eine Mineralplatte auf, die mit einer einzigartigen geschützten mineralischen Rezeptur aus 33 Spurenelementen beschichtet ist. Diese Spurenelemente finden sich in verschiedenen chemischen Verbindungen auch im menschlichen Körper. Da der menschliche Körper Ferninfrarotenergie leichter

absorbiert als Nahinfrarotenergie, werden mögliche Defizite an Spurenelementen aufgefüllt. Klinische Untersuchungen bestätigen, dass die Kombination aus Ferninfrarot mit Spurenelementemission die Mikrozirkulation steigert und den Stoffwechsel ausgleicht, die Aktivität spezieller Enzyme steigert, Immunfunktion und Zellerneuerung fördert, die Haut regeneriert und das Bindegewebeverklebungen löst und so den natürlichen Heilungsprozess beschleunigt.

TDP ist ein Akronym für "Teding Diancibo Pu", was in etwa das spezielle elektromagnetische Spektrum meint. Die TDP-Minerallampe wurde 1978 in China erfunden und dort 1992 patentiert.

Sie wird von Akupunkteuren, asiatischen Körpertherapeuten und anderem medizinischen Fachpersonal genutzt. Der Stand der Forschung von 1985 zeigte, dass die Behandlung mit der TDP-Minerallampe bei über 30 verschiedenen Erkrankungen bei Mensch und Tier erfolgreich war.

In den USA ist die Behandlung mit der TDP-Minerallampe mit den Versicherern abrechenbar. Die Geräteklasse, der sie zugeordnet ist, ist von der FDA anerkannt für die zeitweise Linderung von Schmerzen und Arthritis.

### Die aktuellen Änderungen im Energy Skin Care Modul ab 15. Februar 2011

#### HARDWARE

Lieferung eines zusätzlichen schwarzen Kabels.

Die praktische Erfahrung hat einen deutlich verstärkten Lifting-Effekt während und nach der galvanischen i-ON – Behandlung gezeigt, wenn beide Stabelektroden die selbe (negative) Polarität haben. Auf diese Weise wird der Ionenaustausch nicht auf das lokal behandelte Gebiet beschränkt, sondern ausgedehnt bis zur (positiven) Null-Elektrode, die am Handgelenk befestigt ist. Verbinden Sie den Stecker des zusätzlichen schwarzen Kabels mit dem Stecker des anderen schwarzen Kabels.

#### SOFTWARE

Wir haben das Raymedy Acidiatron in allen EnergySkinCare-Programmen durch ein neues alkalisierendes Raymedy (Basetron) ersetzt. Die richtige Reihenfolge von Gesicht-Lymphdrainage und Bindegewebsbehandlung und Matrixdrainage mit dem i-VAC wird mit den Zahlen in den zugehörigen Bildern gezeigt. Die Bildschirmtexte wurden in allen EnergySkinCare-Programmen deutlich erweitert. Das Akne 2-Programm ist aktualisiert und versetzt worden nach SPECIAL SOLUTIONS.

In **“special solutions”** werden demnächst drei weitere Hautprobleme angegangen:

***Cellulite Arme und Schultern***

***Cellulite Arme***

***STRIAE (Schwangerschaftsstreifen)***

***COUPEROSE/ ROSACEA***

***SPIDER VEINS (BESENREISER)***

In diesen Programmen wird insbesondere die typische kapilläre Bindegewebsschwäche behandelt, mit ergänzenden Raymedys

**Zusätzliche synergistische Kosmetikprodukte**

Wir empfehlen synergistische Kosmetikprodukte, die online [www.907.pm-international.com](http://www.907.pm-international.com) oder telefonisch mit Unterstützung von Frau Itt (Raber) unter 00352 621 140 737 bestellt werden können.

- RESTORATE für die Remineralisierung und Alkalisierung der Haut, entsäuernd
- ACTIVIZE OXYPLUS, verbesserte Sauerstoffversorgung und Durchblutung
- Q10 Tropfen, Zellregeneration und Zellfunktion
- Beauty Line12 h Aktiv Serum für optimale Ergebnisse bei der Antifaltenbehandlung
- CC CELL LOTION für die Optimierung der Cellulitebehandlung. Wirkt stark erwärmend und durchblutungsfördernd auf Fett- und Bindegewebe.

---

Diese Produkte in Kombination mit den i-ON-Behandlungen zeigten einen derart bemerkenswerten synergistischen Therapieeffekt, dass wir sie in die Behandlungsprotokolle integrierten.

Folgenden Mischungen müssen für die i-ON-Anwendung zubereitet werden:

- Für alle Protokolle: Aloe vera (2 KL) + Restorate (1 TL)
- Akne: Aloe vera (1 TLL) + Q10 (7 Tropfen)
- Rejuvenation, Falten u. Sonderprogramme: Aloe vera (1TL) + Q10 (7) + Beauty Line 12h aktiv Serum (6 Hübe)
- Cellulite: Aloe vera + CC Cell Lotion (1:2) + 1TL Zimt + 1TL Activize oxy plus

---

Jedes Behandlungsprogramm startet mit der Durchführung von 3 EDA-Messungen. Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil erscheint die Energy-Beauty-Care-Alkaline-Balance-Einführung auf dem Bildschirm, die Ihr Klient lesen sollte. Wir empfehlen, diese Einführung dem Klienten mindestens eine Woche vor seinem ersten Praxisbesuch zu mailen, um eine gute Vorbereitung sicherzustellen. Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil gelangen Sie auf das Auswahl-Menü des IQ BEAUTY SYS.



Das linke Bild heißt "SkinCare-Protokoll". Mit Klick auf dieses Bild öffnet sich der nächste Bildschirm:

**Anzeige von Elementtyp, Energiemenge und schwächstem Meridian**

**Option für die Auswahl von Regenerationsprogramm1 oder 2**

## 5.1. REGENERATIONSPROGRAMM I




### 5.1.1 Regenerationsprogramm I, Schritt 1

Für den ersten Schritt der Matrix-Regeneration werden, basierend auf den vorangegangenen EDA-Messungen, Frequenzen ("Raymedys") ausgewählt und in Form von galvanischem Strom angewandt.

- Der Klient liegt auf dem Bauch.
- Tragen Sie die Aloe-Restorate-Mischung (2TL:1TL, eventuell angewärmt) auf die angezeigten Hautareale auf.

- Behandeln Sie die gezeigten Punkte mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Bewegen Sie das i-LIGHT dabei von der Wirbelsäule aus nach rechts und links außen.
- **Schließen Sie den Dermalroller (-) an die schwarze i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes an.**
- **Mit der Null-Elektrode (+) verbinden Sie das Handgelenk des Klienten mit der roten i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes mit.**
- Stellen Sie den Schalter auf "ON". Stellen Sie sicher, dass die Stabantenne an der Rückseite des Gerätes angeschlossen ist. Wenn die kabellose Übertragung nicht ausreichend arbeitet, erscheint eine Error-Meldung, die wieder verschwindet, sobald die notwendigen Maßnahmen durchgeführt worden sind. (siehe Bild).
- **Passen Sie die Amplitude an.** Die Stromamplitude kann mittels Cursor entlang der vertikalen Säule auf der rechten Seite des Bildschirms angepasst werden. Abhängig von Klient und der zu behandelnden Körperregion wird die Stromstärke unterschiedlich stark empfunden. Die Amplitude muss daher immer gerade eben unterhalb des sensiblen Levels eingestellt werden.

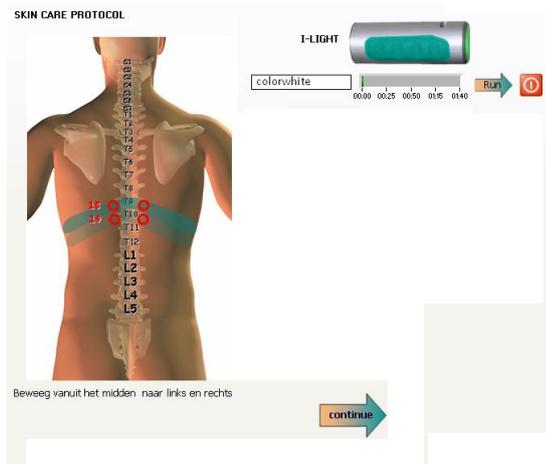


- Behandeln Sie die gezeigten Punkte mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Bewegen Sie das i-LIGHT dabei von der Wirbelsäule aus nach rechts und links außen
- Klicken Sie auf den RUN-Pfeil neben dem oben angezeigten Raymedy.



- Behandeln Sie die angegebene Zone mit dem Dermalroller. Bewegen Sie den Dermalroller den **angezeigten Hautzonen entlang**, von der Wirbelsäule aus nach links und rechts. Die Behandlungszeit ist voreingestellt, aber Sie können das Procedere für jedes Dermatom wiederholen oder auch jederzeit abbrechen. Mit Klick auf den RUN-Pfeil neben dem zweiten angezeigten Raymedy wird dieses

aktiviert.

- **Klicken Sie auf den Continue-Pfeil, um zum nächsten Schritt zu kommen**

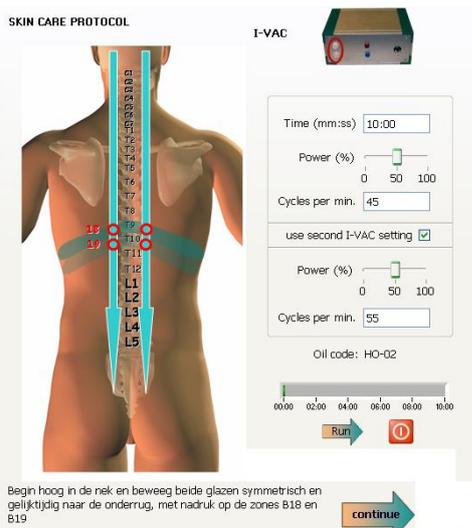

## 5.1.2 REGENERATIONSPROGRAMM 1, SCHRITT 2 DIE PULSIERENDE VACUUMMASSAGE

- Entfernen Sie die Aloe-Restorate-Mischung sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch.


- Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken auf.
- Aktivieren das i-VAC mit Klick auf den RUN-Pfeil
- Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian/ in Höhe des 7.Halswirbels und des Steisbeins))und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.
- Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil rechts unten fahren Sie im Programm fort.



- Arbeiten Sie nun mit einem Schröpfglas weiter
- Bewegen Sie das Schröpfglas 1. von außen zu Wirbelsäule hin im gesamten Rückenbereich, 2.auf dem Blasenmeridian in angegebener Richtung und 3.auch direkt auf der Wirbelsäule (Matrixdrainage),
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)

### 5.1.3 REGENERATIONSPROGRAMM 1, SCHRITT 3

SKIN CARE PROTOCOL

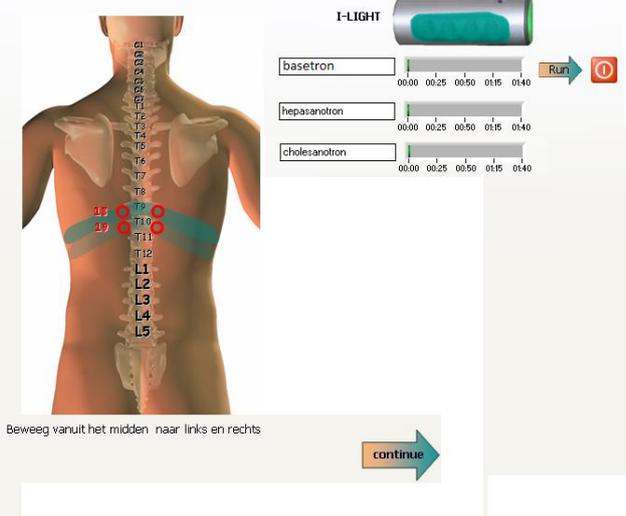

- Aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den RUN-Pfeil.
- Behandeln Sie die gezeigten Punkte mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Bewegen Sie das i-LIGHT dabei von der Wirbelsäule aus nach rechts und links außen.
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den CONTINUE-Pfeil.
- Das Programm bittet Sie, eine weitere EDA-Messung vorzunehmen.


Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.




- Klicken Sie wieder auf den großen Pfeil.

### 5.1.4 REGENERATIONSPROGRAMM 1, SCHRITT 4 ELIMINATION

- Klicken Sie auf den blinkenden Pfeil in der oberen Bildschirmhälfte, um in das 4. Stadium des Regenerationsprogramms zu gelangen, die Elimination. Ihr Klient liegt auf dem Rücken, der Bauch ist frei.
- Tragen Sie die dazugehörige Ölkombination auf die unten angegebenen Hautzonen auf (in diesem Fall Öl mit Essenz AA-3).
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den kleinen RUN-Pfeil.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:
  1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
  2. Zwischen dem Großzeh und 2. Zeh /Akupunkt Leber 3): 7-8x pumpen
- Wechseln Sie bitte auf das große Schröpfglas:
  1. Auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8): 7-8x pumpen
  2. Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Verlauf von Lebermeridian)
  3. In den Achselhöhlen
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite an und bewegen Sie diese wie angezeigt zur Bauchmitte hin, dann von der linken und rechten Bauchseite nach oben und wieder von der linken und rechten Bauchseite seitwärts bis zum Schambein.
- Folgen Sie dann mit den Schröpfköpfen der im Bild angegebenen Pfeilrichtung auf dem Konzeptionsgefäß
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)

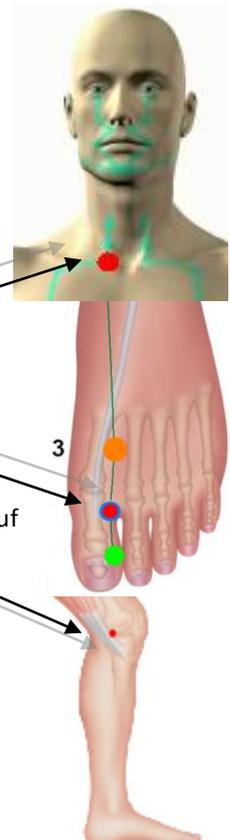

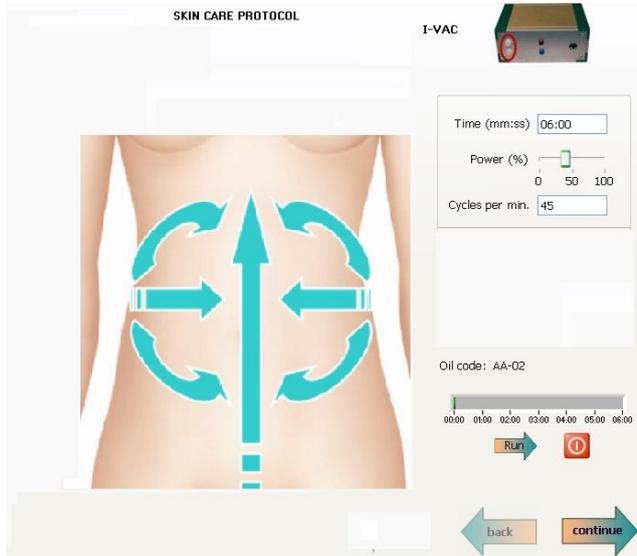


- Das Programm bittet Sie wieder, eine EDA-Messung vorzunehmen. Danach führt ein Klick auf den "continue"-Pfeil Sie zum 5. Schritt dieses Programms.



5.1.4

Help		
Text 1 meerdan		
Middelen instellen		
5109	Lo 11	3540
4937	Di 1	3498
4144	C 9	3926
3634	3E 1	4588
3383	H 9	4869
3419	Du 1	4873
4889	MP 1	4941
4726	Le 1	5086
4844	M 45	5852
4836	G 44	6827
4912	N 1	7203
4928	B 67	6319

### 5.1.5 REGENERATIONSPROGRAMM 1, SCHRITT 5 KONSOLIDIERUNG

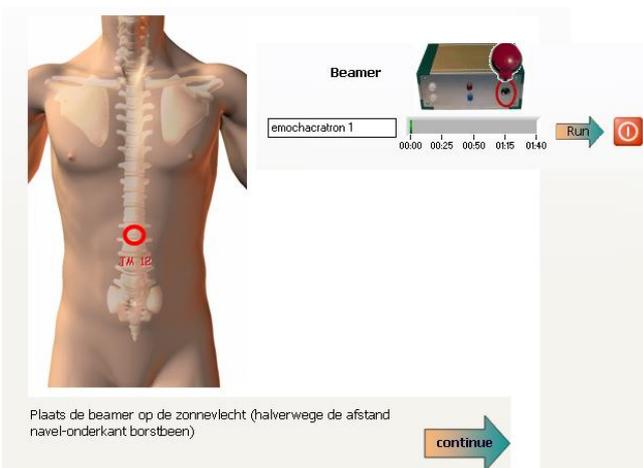

dass das Protokoll zu Ende ist:

- Protocoll is finished.

- Verbinden Sie den Stecker des roten Beamers mit dem **i-Matrix-Gerät**.
- Klient in Rückenlage
- Halten Sie den Beamer auf den auf dem Bild angezeigten Punkt.
- Aktivieren Sie das entsprechende Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil neben dem angezeigten Raymedy.
- Da das „ProgrammDetox Körper“ eher abkühlend wirkt, geben Sie mit der „China-Lampe“ 15 Minuten Wärme auf den Bauch!
- Mit Klick auf den "continue"-Pfeil erfahren Sie,

## 5.2 REGENERATIONSPROGRAMM 2 –GESICHTSREVITALISIERUNG

### 5.2.1 Regenerationsprogramm 2 Schritt 1 Nacken

Behandlung des Halses mit i-ON, i-VAC und i-LIGHT


Folgende Mischung muss vor der i-ON-Anwendung zubereitet werden:

- Aloe vera (2 kL) + Restorate (1 kL)

#### Vorbereitung der i-ON-Behandlung mit dem i-LIGHT

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie die Aloe+Restoratemischung auf den Nacken auf
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals ( Ständer)

- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**

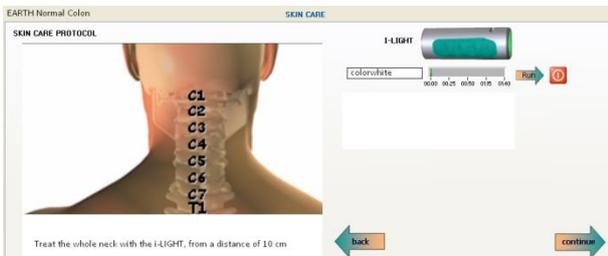

#### Nackenbehandlung mit i-ON




- Klient in Bauchlage
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Verbinden Sie das ROTE Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy Basetron mit dem Dermaroller im ganzen Halsbereich ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. Schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken

die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf

- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt passend zu den einzelnen Halswirbeln.
- Klicken Sie auf den "run"-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch
- Mit Klick auf den "Continue"-Pfeil kommen Sie weiter

## Nackenbehandlung mit dem I-VAC

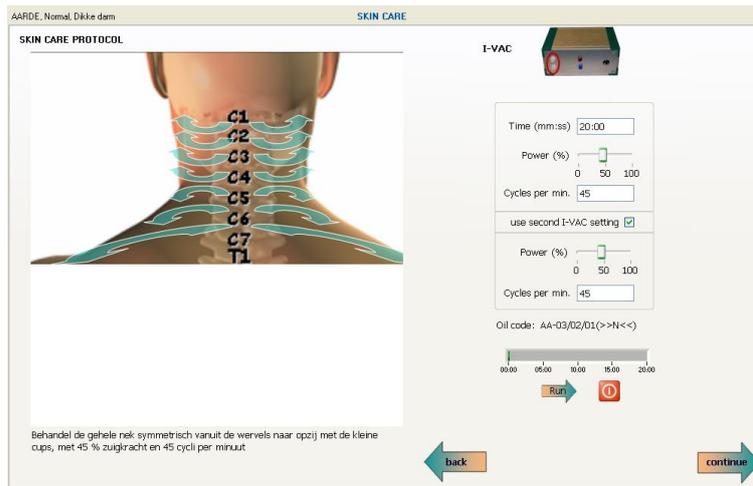


warmen Tuch (reflektiert)

- Klicken Sie auf "Continue" um weiterzukommen


- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie die angegebene aufgewärmte Ölkombination (2Kl :8Tr.) auf die Behandlungszone auf (in diesem Fall Erde-normal-AA-02)
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-VAC**
- Verwenden Sie die mittleren Schröpfköpfe nach Anweisung an (siehe Bild)
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht

## Nackenbehandlung mit i-LIGHT

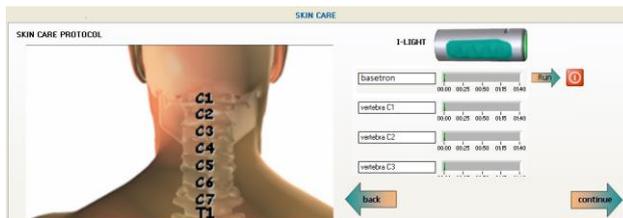


- Klient in Bauchlage
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals (Ständer)
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**

- Mit Klick auf "Continue" kommen Sie zur nächsten **EDA-Messung**

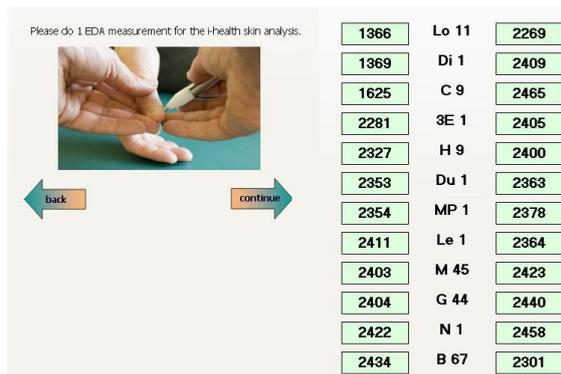


## 5.2.2 REGENERATIONSPROGRAMM 2, SCHRITT 2A: GESICHTSBEHANDLUNG MIT I-ON

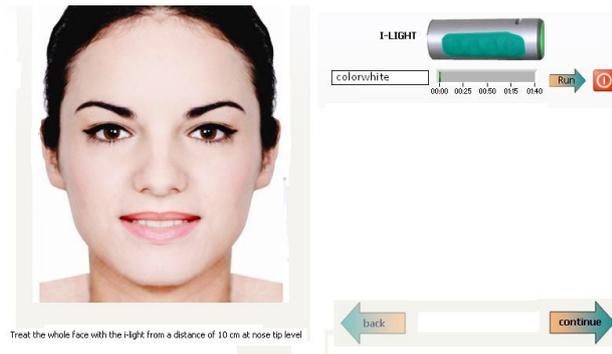

- Reinigen Sie die Gesichtshaut
- Tragen Sie ausreichend eventuell angewärmte Aloe-Restorate-Mischung (2KL :1KL) auf das Gesicht auf
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf das Gesicht (Ständer) Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT

### I-On

- Passen Sie die Amplitude an. Verbinden Sie **das ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie die ersten beiden Raymedy Basetron und Cicatron mit dem Dermaroller im ganzen Gesicht ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. Schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf.
- Behandeln Sie nun die angegebenen Zonen im Gesicht mit den beiden Flach-Stabelektroden des **i-ON**.
- Achten Sie darauf, dass immer genug Aloe –Mischung aufgetragen ist
- Klicken Sie auf den "run"-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
- **Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch**

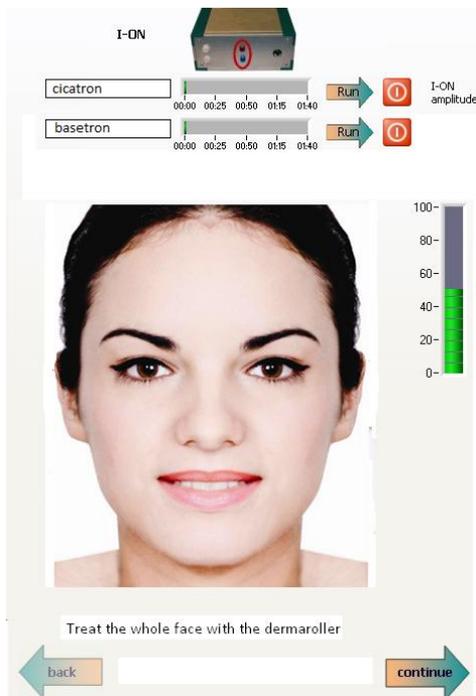


Passend zu dem laut vorangegangener EDA-Messung schwächsten Meridian werden 3 Gesichtszonen nacheinander mit den beiden Stabelektroden behandelt.



### 5.2.3 REGENERATIONSPROGRAMM 2, SCHRITT 2B. GESICHTSSCHRÖPFUNG


Behandlung mit dem i-VAC in 2 Schritten: Lymphdrainage und Bindegewebemassage. **Je nach Saugkraft, Pulsation und Bewegungsrichtung hat die i-VAC-Behandlung einen Drainageeffekt auf das lymphatische System oder eine entgiftende und regenerierende Wirkung auf das Bindegewebe.**

- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf. Dann schröpfen Sie mit den kleinsten runden Gläschen wie folgt:
- Lymphdrainage
  1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
  2. Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
  3. Dann weiter mit beiden kleinsten Schröpfgläschen von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
  4. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
  5. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
  6. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17)
  7. Von dort zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
  8. Dann vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang)
  9. Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext. Yin Tang) bis zum Haaransatz
  10. Von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext. Tai Yang: 3-4x Pumpen
  11. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen
  12. Zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen

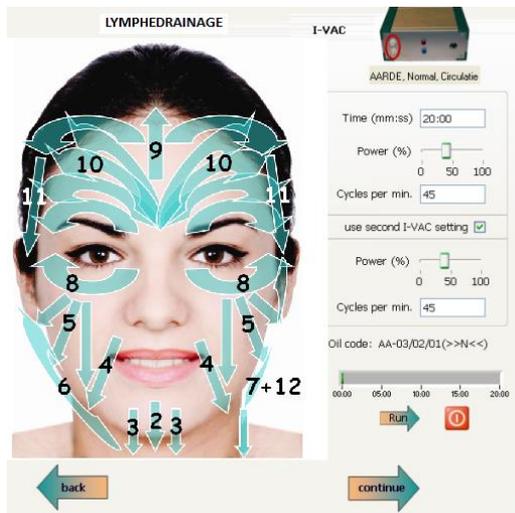


• **Bindegewebsmassage Stufe 1 (55 Zyklen)**

1. Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
2. Ebenso an den Wangen
3. Von der Mitte der Stirn aus nach außen

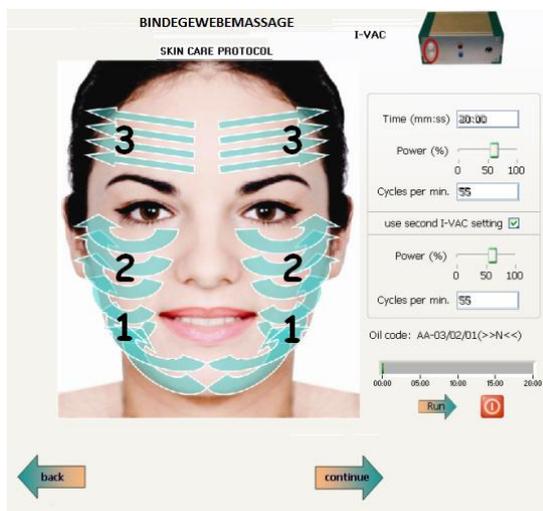


• **Bindegewebsmassage Stufe 2 (550 Zyklen)**

1. Benutzen Sie nur ein flaches Schröpfgläschen
2. Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
3. Ebenso an den Wangen
4. Von der Mitte der Stirn aus nach außen

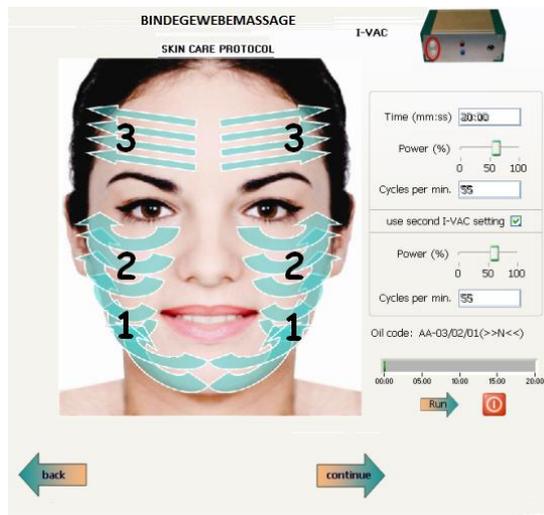


- Entfernen Sie sorgfältig das restliche Öl mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)

### 5.2.3 REGENERATIONSPROGRAMM 2 SCHRITT 2C. GESICHTSBEHANDLUNG MIT I-LIGHT.

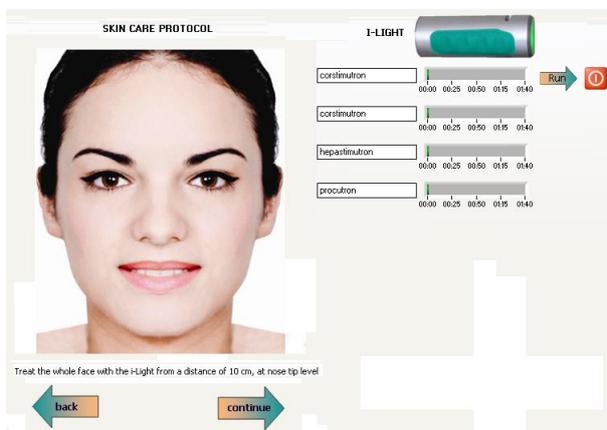


- Das Gesicht wird mit ähnlich meridianregulierenden Raymedys wie in Schritt 2a behandelt, nun aber mit Farblicht, mit einem kräftigen hautvitalisierendem Raymedy als Abschluss
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht (Ständer)
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**

- Mit einer weiteren EDA-Messung wird das Raymedy für die Konsolidierung bestimmt.

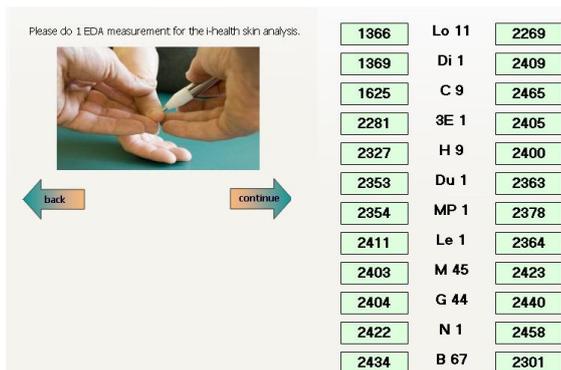

## 5.2.5 REGENERATIONSPROGRAMM 2; SCHRITT 3 KONSOLIDIERUNG

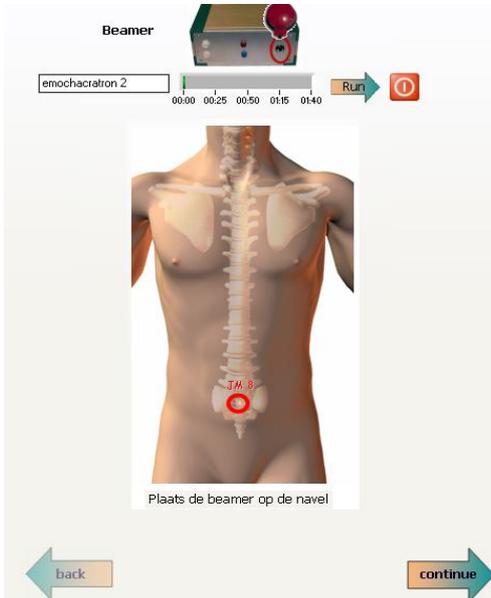

- Klient in Rückenlage
- Verbinden Sie den roten Beamer mit dem **i-Matrix-Gerät**
- Halten Sie den Beamer auf den angezeigten Bereich.
- Aktivieren Sie das entsprechende Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil neben diesem Raymedy.

Procoll is finished.

- Mit Klick auf den "continue"-Pfeil wird Ihnen mitgeteilt, dass das Programm zu Ende ist.



### Das REJUVENATION-PROGRAMM (ANTI-AGE) im Überblick


1. Bestrahlung des Gesichtes für 10 Minuten mit der Infrarot-Lampe (TDP-lamp)
2. 3 EDA-Messungen
3. Auftragen der Aloe+Restorate-Mixtur auf den Hals
4. Weißes Licht mittels i-LIGHT
5. I-ON nach Protokoll: Der gesamte Nacken wird mit dem Dermaroller mit dem ersten Raymedys (Cicatron+Basetron) behandelt.
6. I-ON siehe Bild: die ersten drei Halswirbel +Dermatom mit dem zugehörigen Raymedy und den flachen Stabelektroden
7. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
8. I-LIGHT nach Protokoll
9. Gesichtsmaske mit Aloe+Restorate
10. I-LIGHT mit weißem Licht
11. i-ON mit dem Dermaroller mit Cicatron und Basetron
12. Entfernung der Reste von Aloe+Restorate, dann weiter mit dem I-ON Protokoll, mit Aloe + Q10 + Beauty Line 12h aktiv Serum
13. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
14. I-LIGHT nach Protokoll
15. EDA-Messung
16. Emochacraton mit Beamer

Starten Sie das Rejuvenation Programm

- Nehmen Sie 3 EDA-Messungen vor, um den Elementtyp, das Energielevel und die Energieverteilung des Klienten zu bestimmen.


**Dann klicken Sie auf "Rejuvenation".**

**Im Fenster „select“ wählen Sie die 1**

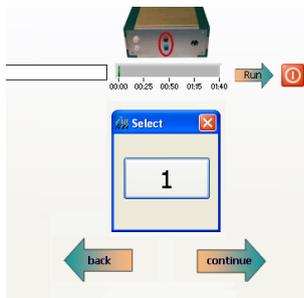


## 5.3.1 VERJÜNGUNG DES HALSES MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

### VORBEREITUNG I-ON-BEHANDLUNG MIT I-LIGHT WEISS

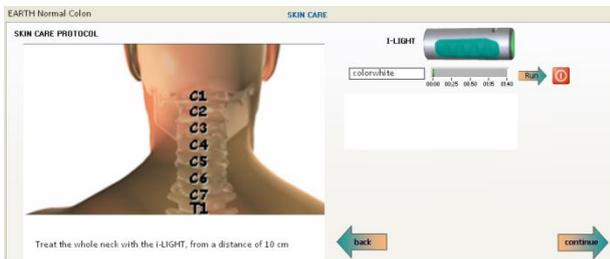

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf die zu behandelnden Zonen auf (2KI Aloe :1KI Restorate)
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals (Ständer)
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**

### Nackenbehandlung mit i-ON

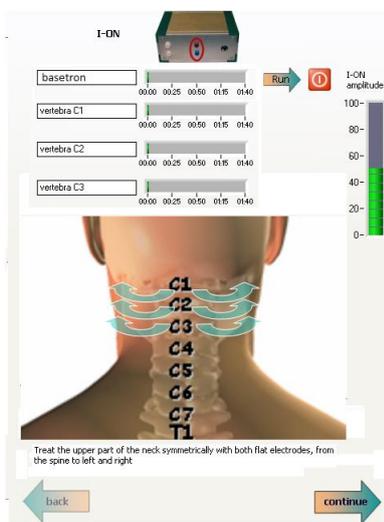


- Klient in Bauchlage
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy Basetron mit dem Dermaroller im ganzen Halsbereich ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf
- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt, passend zu den einzelnen Vertebrae. (Raymedy C1 auf den Wirbel C1 plus das Dermatom)
- Klicken Sie auf den "run"-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht

warmen Tuch

- Mit Klick auf den "Continue"-Pfeil kommen Sie weiter

### HALSBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC


- Bereiten Sie 2KI Mandelöl : 8Tropfen der angegebenen Elementessenz vor (in diesem Fall Erdennormal-AA-02)

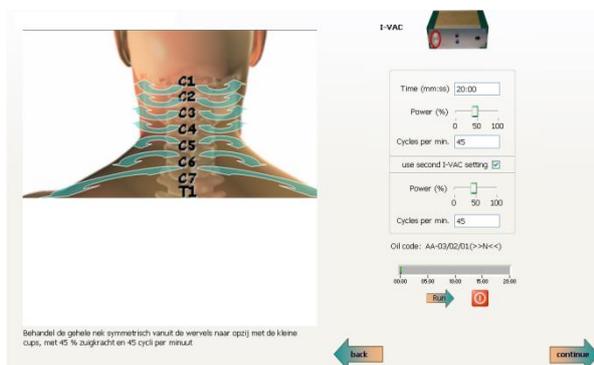

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie die angesagte aufgewärmte Ölkombination auf die Behandlungszone auf
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-VAC**
- Verwenden Sie die mittleren Schröpfköpfe nach Anweisung an (siehe Bild)
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)

- Klicken Sie auf "Continue" um weiterzukommen

## HALSBEHANDLUNG MIT i-LIGHT

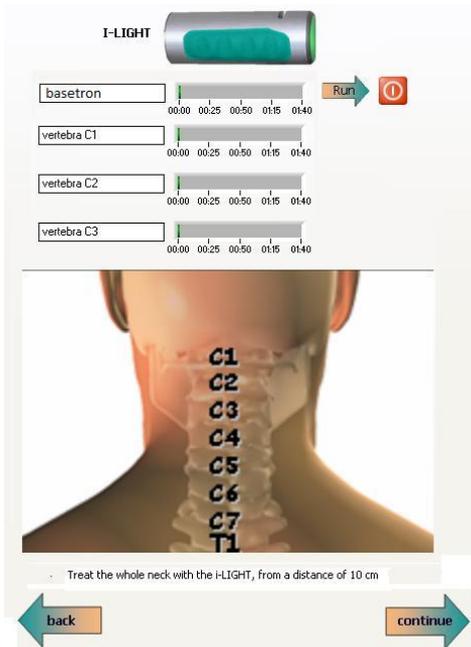

- Klient in Bauchlage
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT
- Behandeln Sie den Hals mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand (Ständer)

## 5.3.2 GESICHTSVERJÜNGUNG MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT




### i-ON Vorbehandlung mit i-LIGHT WEISS

#### Klient in Rückenlage

- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser
- Tragen Sie die Aloe+Restoratemischung auf das Gesicht auf (2KL Aloe : 1KL Restorate)
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**

### I-On Gesichtsbehandlung

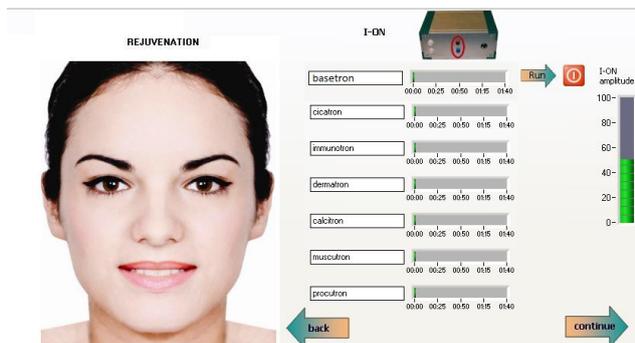


- Passen Sie die Amplitude an. Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie die ersten beiden Raymedys Basetron und Cicatron mit dem Dermaroller im ganzen Gesicht ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch

- Tragen Sie nun großzügig eine angewärmte Mischung aus Aloe-Q10-Beauty Line 12h Serum (2Kl : 1:7Tr:6Hübe) auf das ganze Gesicht auf
- Behandeln Sie weiter das ganze Gesicht mit den verbliebenen Raymedys
- Entfernen Sie die restliche Aloe-Mischung mit einem feucht warmen Tuch

### 5.3.3 I-VAC-BEHANDLUNG IN 2 SCHRITTEN: LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE.

Je nach Saugkraft, Pulsation und Bewegungsrichtung hat die i-VAC-Behandlung einen Drainageeffekt auf das lymphatische System oder eine entgiftende und regenerierende Wirkung auf das Bindegewebe.


Passen Sie die Pumpintensität an die Hautbeschaffenheit Ihres Klienten an!

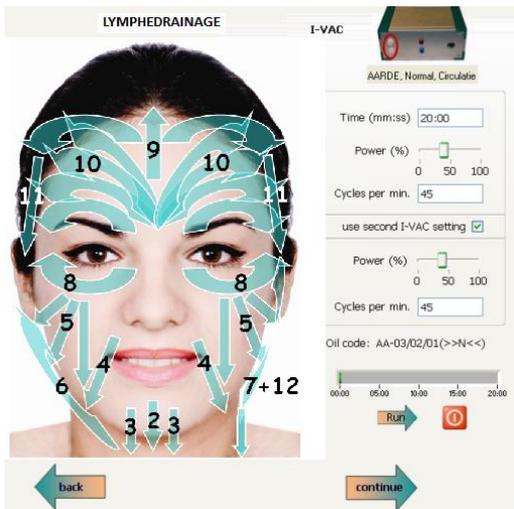

- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf. Dann schröpfen Sie mit den kleinsten runden Gläschen wie folgt:


- **Lymphdrainage**

1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
2. Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
3. Dann weiter mit beiden kleinsten Schröpfgläschen von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinn's (Siehe Bild)
4. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
5. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
6. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen(Akupunkt 3E17)
7. Von dort zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
8. Dann vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang)
9. Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext.Intrang) bis zum Haaransatz
10. Von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext. Taiyang: 3-4xPumpen
11. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen(Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen
12. Zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen

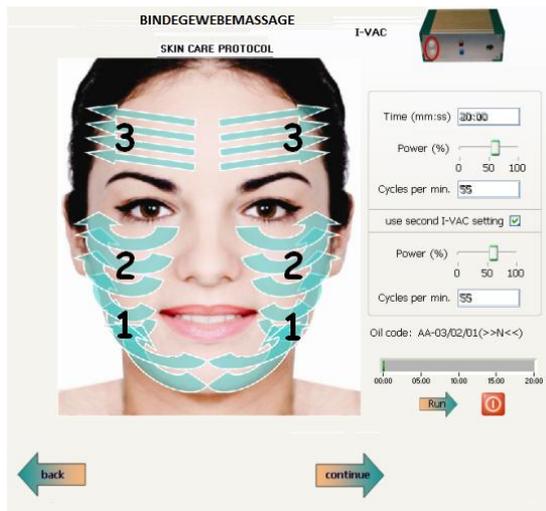

- **Bindegewebemassage Stufe 1 (55 Cycle)**


1. Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
2. Ebenso an den Wangen
3. Von der Mitte der Stirn aus nach außen

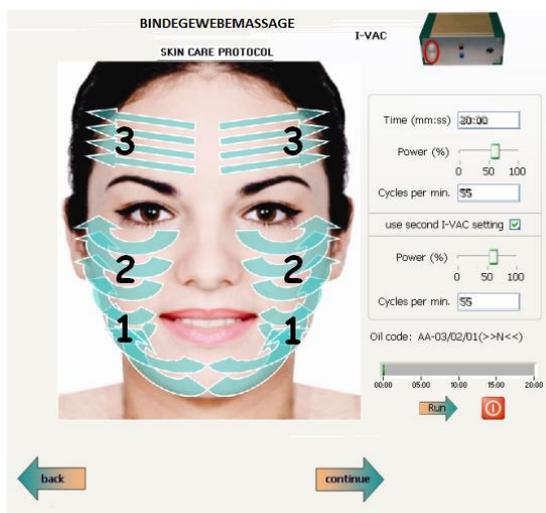

- **Bindegewebemassage Stufe 2 (550 Cycle)**


1. Benutzen Sie nur ein flaches Schröpfgläschen
2. Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
3. Ebenso an den Wangen
4. Von der Mitte der Stirn aus nach außen

### 5.3.4 I-LIGHT GESICHT

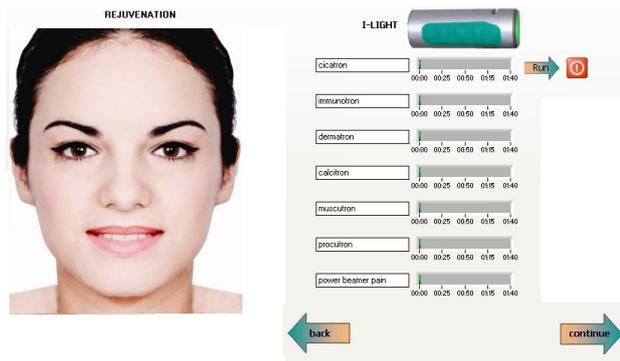


- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht (Ständer)
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT mit den Raymedys

### EDA-MESSUNG

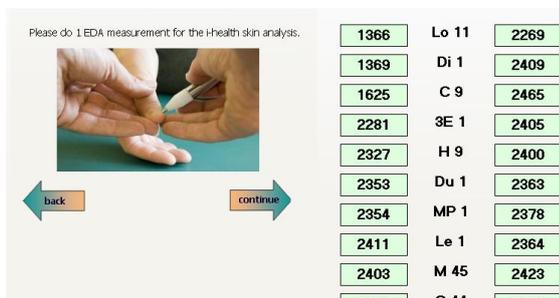

Machen Sie eine EDA Messung

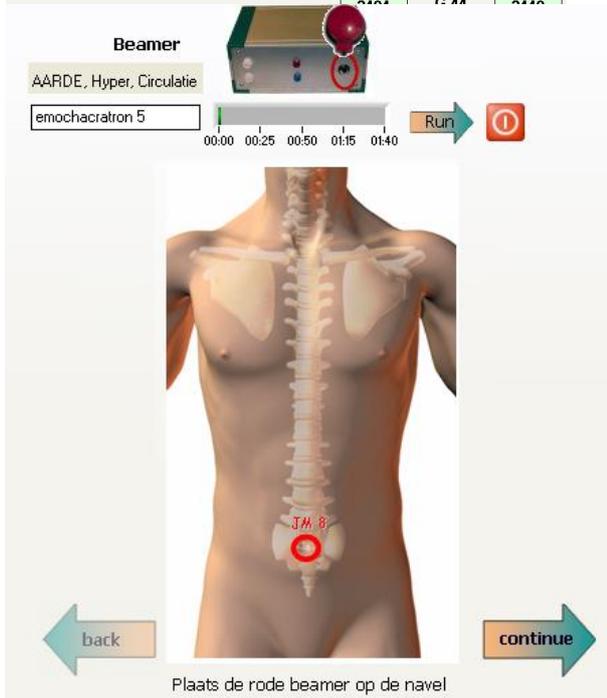

### 5.3.5 KONSOLIDIERUNG MIT DEM BEAMER

In diesem Beispiel hat das Programm, passend zum aktuellen Energieüberschuss im Erde-Element, automatisch das Raymedy Emochakratron 5 gewählt: Abführung des Energieüberschusses an das Metall.

- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"- Pfeil

Nach Klick auf den "continue"-Pfeil ist das Programm beendet:

**Protocoll is finished.**

## 5.4 ANTI-FALTEN-PROGRAMM



ANTI-WRINKLE


### Das ANTI-WRINKLE-PROGRAMM im Überblick

Wählen Sie mit Ihrer Klientin eine, bis max zwei Faltenpartien aus, die in einer Sitzung bearbeitet werden sollen.


1. Bestrahlung des Gesichtes für 10 Minuten mit der Infrarot-Lampe (TDP-Lampe)
2. 3 EDA-Messungen
3. Auftragen der Aloe+Restorate-Mixtur auf den Hals
4. Weißes Licht mittels i-LIGHT
5. I-ON nach Protokoll: Der gesamte Nacken wird mit dem Dermaroller mit dem ersten Raymedys (Basetron) behandelt.
6. I-ON siehe Bild: die ersten drei Halswirbel +Dermatom mit dem zugehörigen Raymedy und den flachen Stabelektroden
7. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
8. I-LIGHT nach Protokoll
9. Gesichtsmaske mit Aloe+Restorate
10. I-LIGHT mit weißem Licht
11. i-ON mit dem Dermaroller mit Cicatron und Basetron
12. Entfernung der Reste von Aloe+Restorate, dann weiter mit dem I-ON Protokoll, mit Aloe + Q10 + Beauty Line 12h aktiv Serum und den runden Stabelektroden
13. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
14. I-LIGHT nach Protokoll
15. EDA-Messung
16. Emochakraton mit Beamer

### 5.4.1 VORBEREITENDE HALSBEHANDLUNG MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

#### VORBEREITUNG I-ON-BEHANDLUNG MIT I-LIGHT WEISS

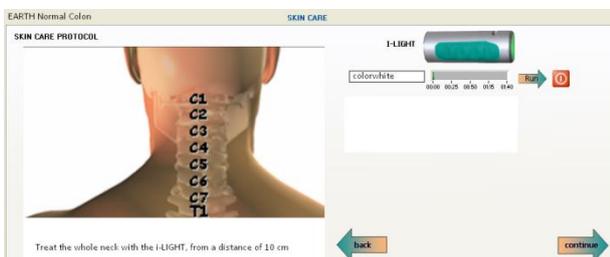

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf die zu behandelnden Zonen auf (2KL Aloe :1KL Restorate)
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals (Ständer)
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**

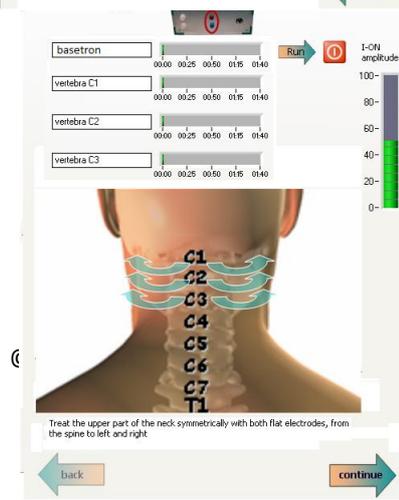


#### Nacknenbehandlung mit i-ON

- Klient in Bauchlage
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy Basetron mit dem Dermaroller im ganzen Halsbereich ein. Drücken Sie auf Stopp.

- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf
- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt, passend zu den einzelnen Vertebrae. (Raymedy C1 auf den Wirbel C1 plus das Dermatom)
- Klicken Sie auf den “run”-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch
- Mit Klick auf den “Continue”-Pfeil kommen Sie weiter

## HALSBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC


- Bereiten Sie 2KI Mandelöl : 8Tropfen der angegebenen Elementessenz vor (in diesem Fall Erdennormal-AA-02)

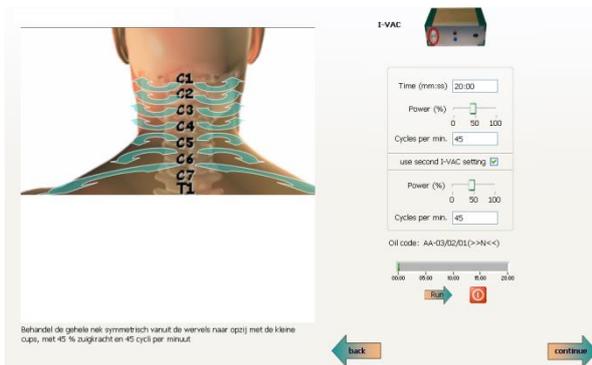

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie die angesagte aufgewärmte Ölkombination auf die Behandlungszone auf
- Mit Klick auf “run” aktivieren Sie das **i-VAC**
- Verwenden Sie die mittleren Schröpfköpfe nach Anweisung an (siehe Bild)
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)

- Klicken Sie auf “Continue” um weiterzukommen

## HALSBEHANDLUNG MIT i-LIGHT

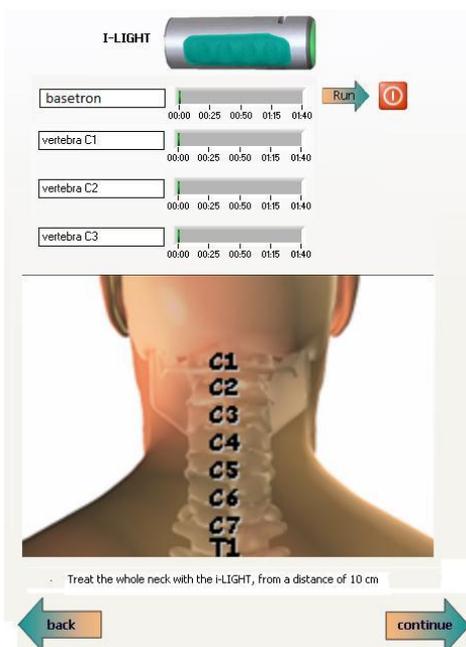


- Klient in Bauchlage
- Mit Klick auf “run” aktivieren Sie das i-LIGHT
- Behandeln Sie den Hals mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand (Ständer)

## 5.4.2 BEHANDLUNG DER GEWÜNSCHTEN FALTENPARTIE MIT DEM I-ON

Im üblichen zeitlichen Rahmen eines Praxisbesuches ist es nicht möglich, mehr als 2 Faltenpartien in einer Sitzung zu behandeln. Besprechen Sie also, welche Falten die Problemfälle darstellen, setzen Sie Prioritäten und folgen Sie den Behandlungsanweisungen auf den Screens, für die Sie sich eben entschieden haben. Die anderen überspringen Sie.





Bereiten Sie zwei Mischungen vor: eine Mischung aus Aloe + Restorate (2Kl:1Kl), eine andere aus Aloe + Q10 + Beauty Line 12h aktiv Serum. (2Kl :8Tropfen:8Hübe)



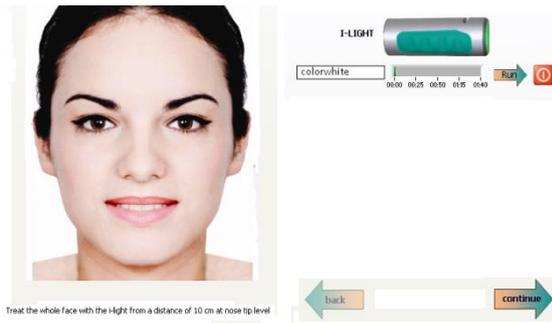


### Vorbehandlung mit I-Light weiß

#### Klient in Rückenlage mit geschlossenen Augen

- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser
- Tragen Sie die Aloe+Restoratemischung auf das Gesicht auf ( Hals, wenn er bearbeitet wird)
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht (Ständer)
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT

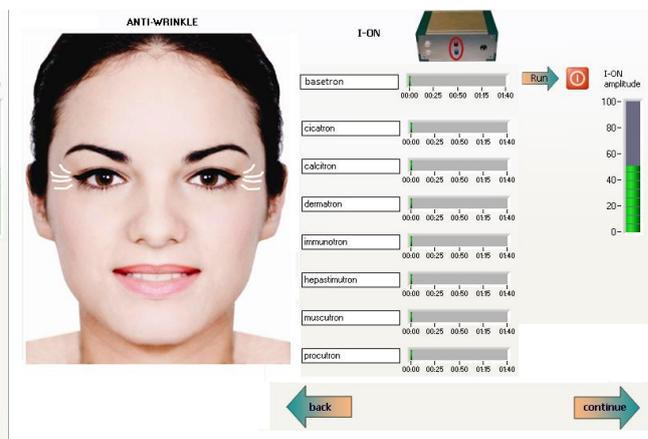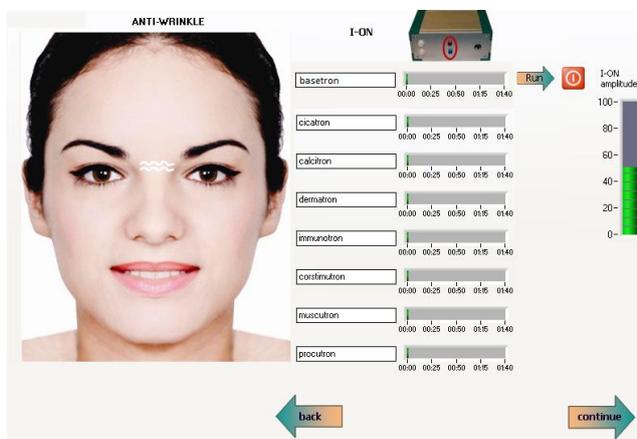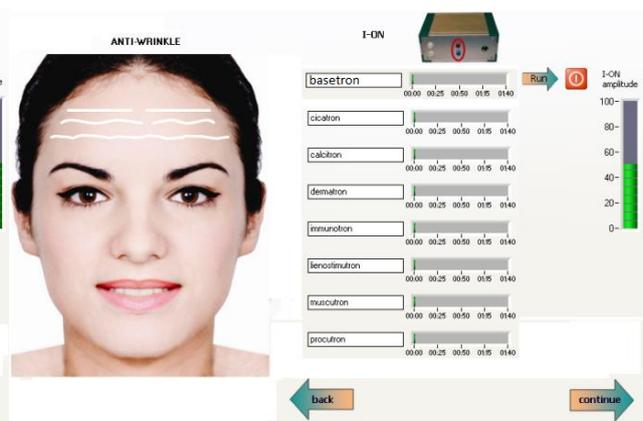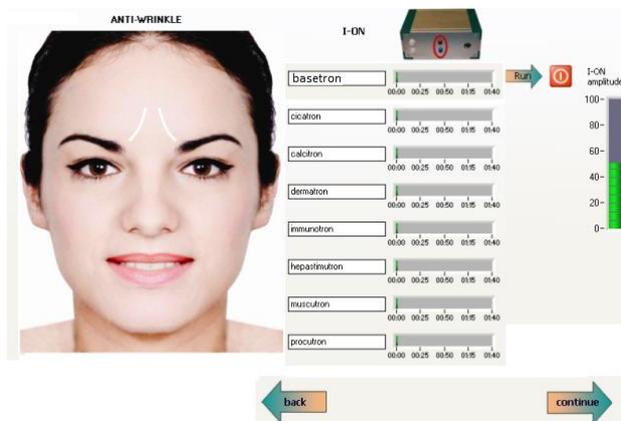

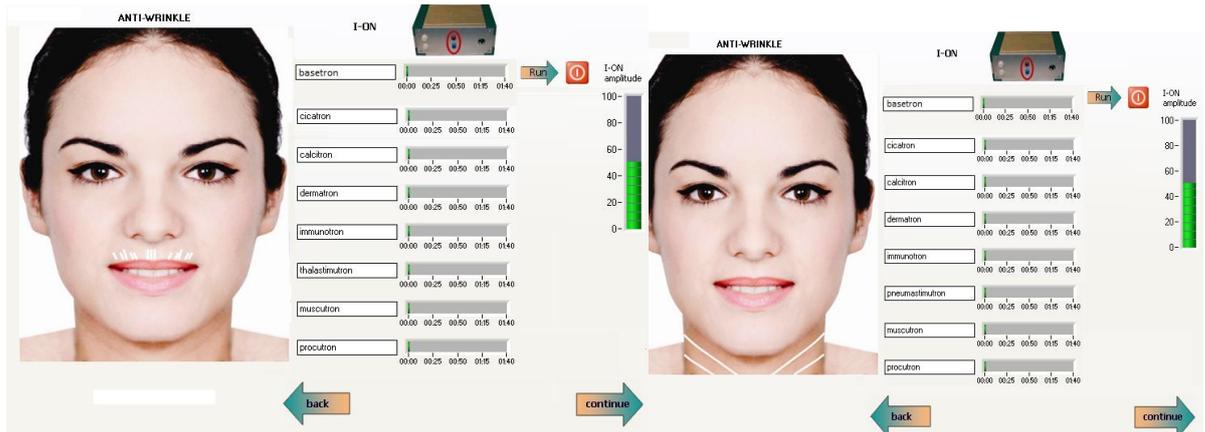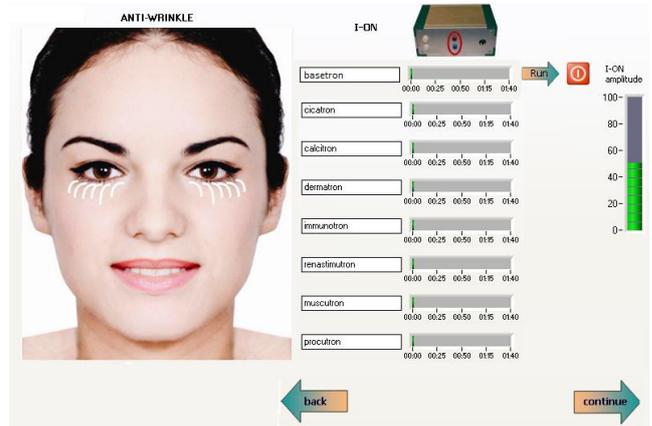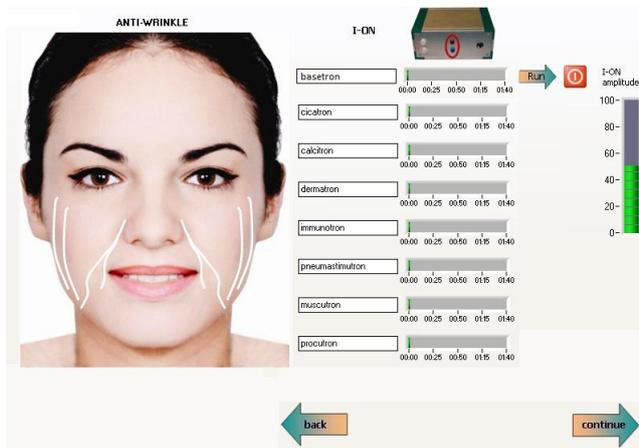

#### I-ON Schritt A

- Passen Sie die Amplitude an. Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie die ersten beiden Raymedy Basetron und Cicatron mit dem Dermaroller im ganzen Gesicht ein. Drücken Sie auf Stopp.


#### I-ON Schritt B

- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch
- Tragen Sie nun großzügig eine angewärmte Mischung aus Aloe-Q10-Beauty Line 12h Serum auf das ganze Gesicht auf, besonders auf die zu behandelnde Faltenpartie. (Sie können zusätzlich Beauty Line 12h aktiv Serum direkt auf die Falten auftragen.)
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken die beiden Stabelektroden mit den kugelförmigen Köpfen auf.
- Behandeln Sie nun die angegebenen Zonen im Gesicht mit den beiden Stabelektroden des **i-ON**. Achten Sie darauf, dass immer genug Aloe-Mischung vorhanden ist. Bewegen Sie von der Mitte nach beiden Enden der Falten und zurück.
- Klicken Sie auf den "run"-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
- Das letzte Raymedy tragen Sie wieder auf das ganze Gesicht mit dem Dermaroller auf.
- Entfernen Sie die restliche Aloe-Mischung mit einem feucht warmen Tuch

### 5.4.3 LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE MIT DEM I-VAC

Je nach Saugkraft, Pulsation und Bewegungsrichtung hat die i-VAC-Behandlung einen Drainageeffekt auf das lymphatische System oder eine entgiftende und regenerierende Wirkung auf das Bindegewebe.


Passen Sie die Pumpintensität an die Hautbeschaffenheit Ihres Klienten an! Vorsicht bei Cuperoze!!

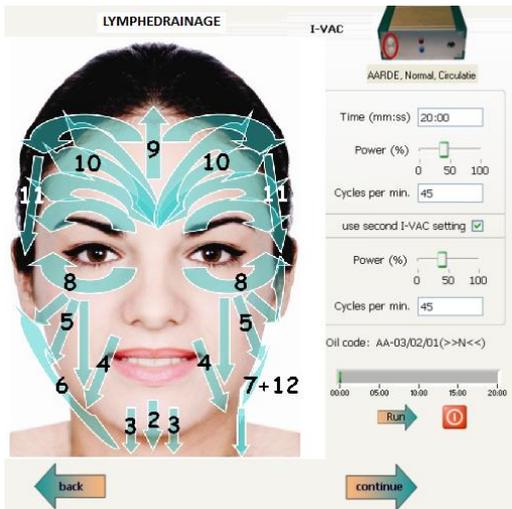

- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf. Dann schröpfen Sie mit dem kleinsten runden Gläschen wie folgt:


- **Lymphdrainage**

1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen;
2. Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
3. Dann weiter mit beiden kleinsten Schröpfgläschen von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinn's (Siehe Bild)
4. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
5. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
6. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17)
7. Von dort zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
8. Dann vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang)
9. Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext. Intrag) bis zum Haaransatz
10. Von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext.
  - a. Taiyang: 3-4x Pumpen
11. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen
12. Zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen

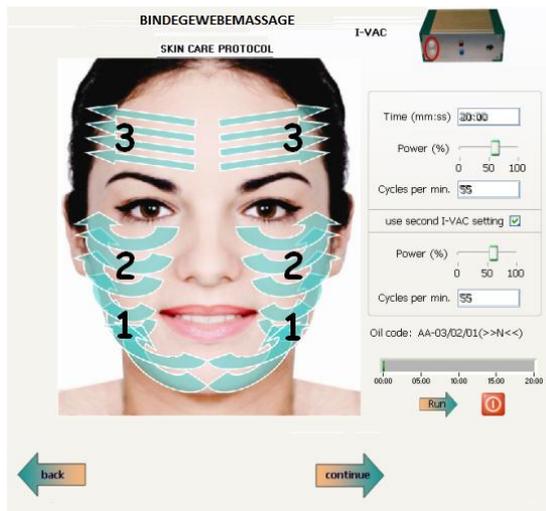

- **Bindegewebemassage Stufe 1 (55 Cycle)**

1. Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
2. Ebenso an den Wangen
3. Von der Mitte der Stirn aus nach außen

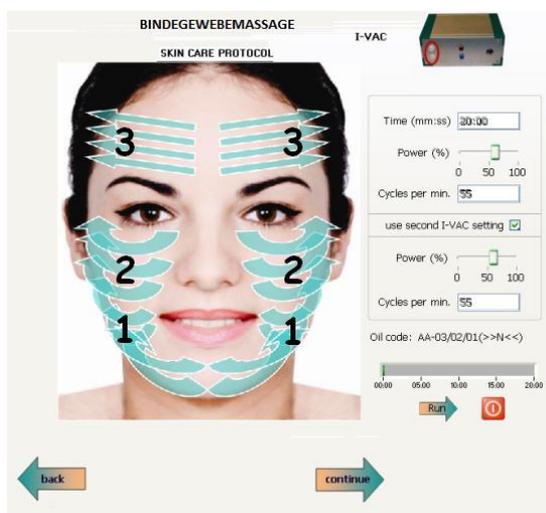


**Bindegewebemassage Stufe 2 (550 Cycle)**

Ändern Sie den Cycle auf 550 und benutzen Sie nur ein flaches Schröpfgläschen


- 1 Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
- 2 Ebenso an den Wangen
- 3 Von der Mitte der Stirn aus nach außen

## 5.4.4 GESICHTSBEHANDLUNG MIT DEM I-LIGHT

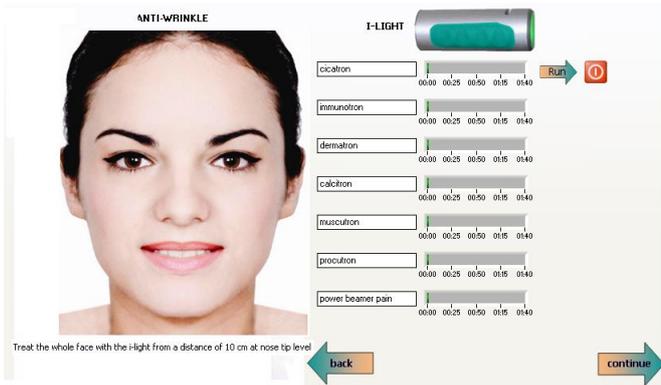

Klient in Rückenlage mit geschlossenen Augen

- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf Höhe der Nasenspitze auf das Gesicht (Ständer)
- Aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den "Run"-Pfeil
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

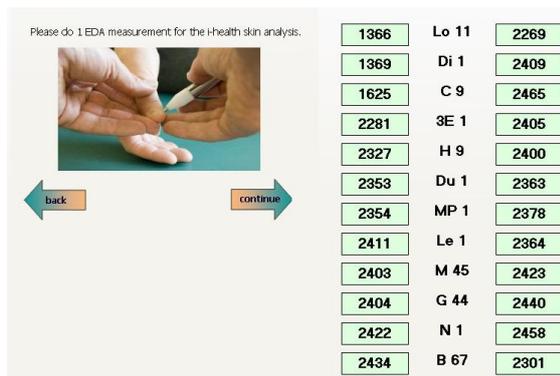

### NEUE EDA-MESSUNG

- Eine weitere EDA-Messung ist notwendig für die folgende Konsolidierungsphase
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

## 5.4.5 KONSOLIDIERUNG MIT DEM BEAMER UM DAS ANTI-FALTENPROGRAMM ABZUSCHLIESSEN



### KONSOLIDIERUNGSPHASE

Klient in Rückenlage

Passend zur aktuellen energetischen Balance im Erdelement wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Emochakraton 2: es stabilisiert die persönliche Elementenergie


Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil

Mit Klick auf den "continue"-Pfeil ist das Anti-Faltenprogramm beendet und

wird geschlossen:

**Procoll is finished.**

## 5.5 AKNE-PROTOKOLL

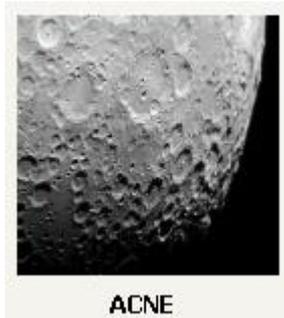


### Überblick über das Akne-Programm

1. Bestrahlung des Gesichtes für 10 Minuten mit der Infrarot-Lampe (TDP-lamp)
2. 3 EDA-Messungen
3. Auftragen der Aloe+Restorate-Mixtur auf den Hals
4. Weißes Licht mittels i-LIGHT
5. I-ON nach Protokoll: Der gesamte Nacken wird mit dem Dermaroller mit dem ersten Raymedys (Basetron) behandelt.
6. I-ON siehe Bild: die ersten drei Halswirbel +Dermatome mit dem zugehörigen Raymedy und den flachen Stabelektroden
7. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
8. I-LIGHT nach Protokoll
9. Gesichtsmaske mit Aloe+Restorate
10. I-LIGHT mit weißem Licht
11. i-ON mit dem Dermaroller mit Cicatron und Basetron
12. Entfernung der Reste von Aloe+Restorate, dann weiter mit dem I-ON Protokoll, mit Aloe + Q10
13. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
14. I-LIGHT nach Protokoll
15. EDA-Messung
16. Enochakraton mit Beamer


### 5.5.1 VORBEREITENDE AKNEBEHANDLUNG DES HALSES MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

#### Vorbereitung der i-ON-Behandlung mit i-LIGHT WEISS

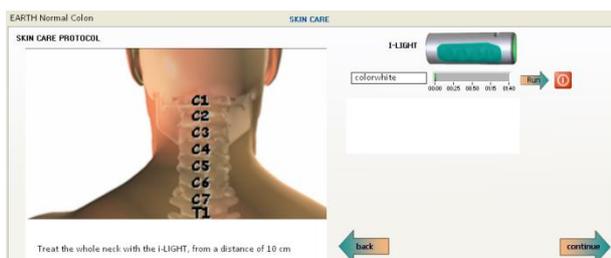

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung (2KI:1KI) auf die zu behandelnden Zonen auf
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals (Ständer)
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**


## Aknebehandlung des Nacken mit i-ON:

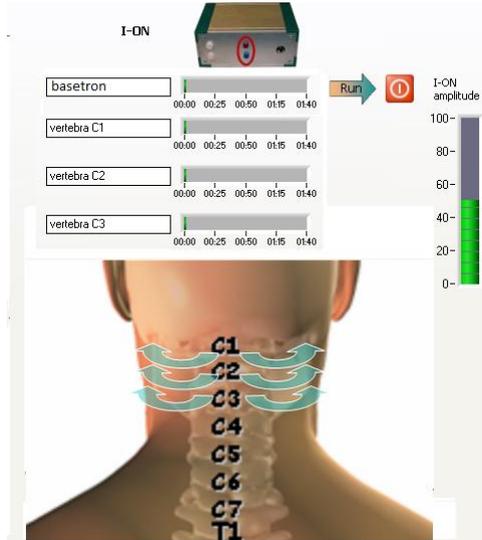

- Passen Sie die Stromamplitude an
- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy Basetron mit dem Dermalroller im ganzen Halsbereich ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf.
- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt, passend zu den einzelnen Halswirbeln. (Raymedy C1 auf den Wirbel C1 plus das Dermatome)

- Klicken Sie auf den "run"-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
- **Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch**
- Mit Klick auf den "Continue"-Pfeil kommen Sie weiter


## Nackenbehandlung mit dem i-VAC

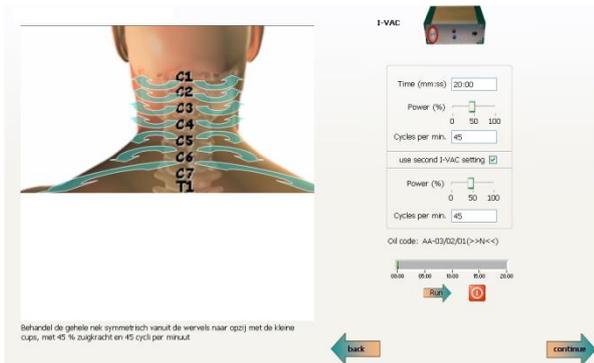

1. Klient in Bauchlage
2. Tragen Sie die angesagte aufgewärmte Ölkombination (2KI:8Tr) auf die Behandlungszone auf (in diesem Fall Erdennormal-AA-02)
3. Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-VAC**
4. Wenden Sie die mittleren Schröpfköpfe nach Anweisung an (siehe Bild)
5. Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)

6. Klicken Sie auf "Continue" um weiterzukommen


## Nackenbehandlung mit i-LIGHT

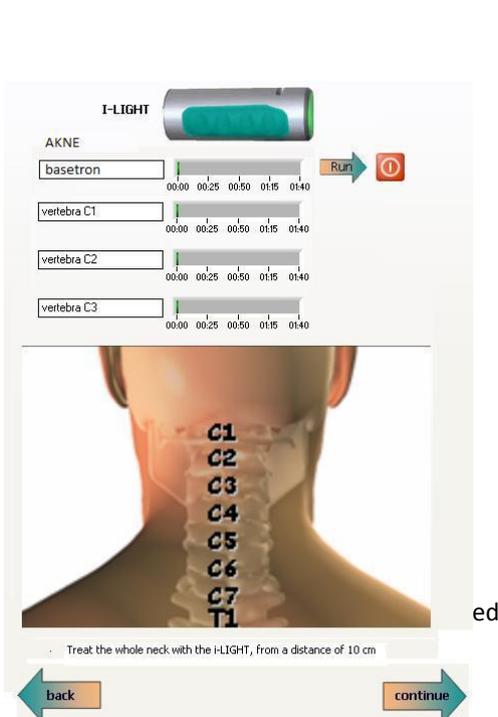

- Klient in Bauchlage
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**
- Behandeln Sie den Hals mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand (Ständer). Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil

## 5.5.2 BEHANDLUNG DER GESICHTSAKNE MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT


### i-ON Vorbehandlung mit i-LIGHT WEISS

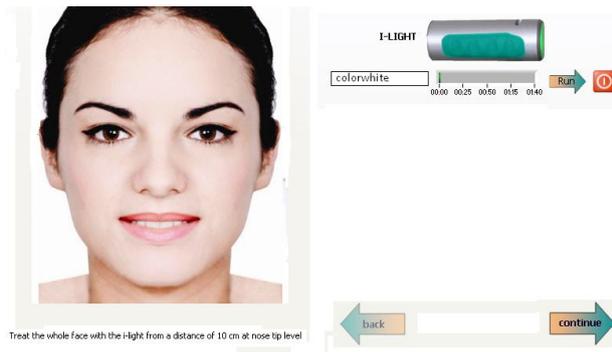

### Klient in Rückenlage mit geschlossenen Augen

- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser
- Tragen Sie der Aloe + Restoratemischung (2Kl:1Kl) auf Gesicht und Hals auf
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht (Ständer)
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT


### I-On Akne Gesicht:

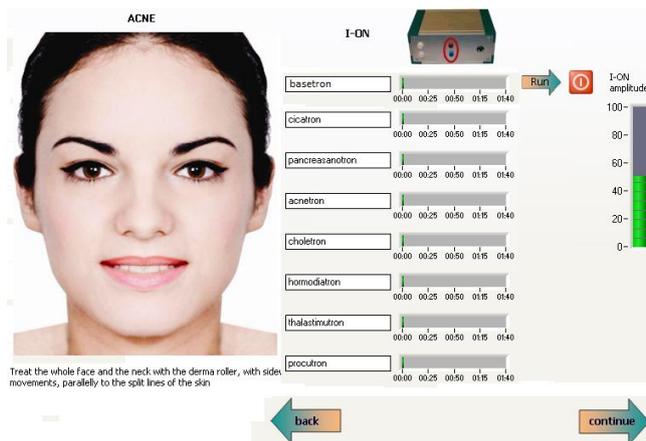

- Passen Sie die Amplitude an. Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie die ersten beiden Raymedy Basetron und Cicatron mit dem Dermaroller im ganzen Gesicht ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch
- Tragen Sie nun großzügig eine angewärmte Mischung aus Aloe-Q10 (2Kl:8Tr) auf

- Behandeln Sie weiter das ganze Gesicht mit den verbliebenen Raymedys
- Entfernen Sie die restliche Aloe-Mischung mit einem feucht warmen Tuch

### I-Vac Akne Gesicht

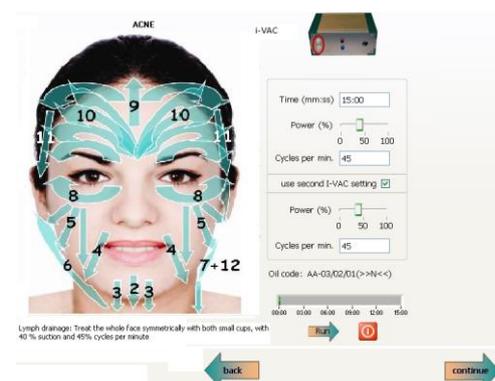

- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf. Dann schröpfen Sie mit dem kleinsten runden Gläschen wie folgt:
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-VAC
- Lymphdrainage
  1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
  2. Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
  3. Dann weiter mit beiden kleinsten Schröpfgläschen von der

Unterlippe bis unter die Kante des Kinn's (Siehe Bild)

4. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)

5. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)

6. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17)

7. Von dort zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen

8. Dann vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang)

9. Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext. Inrang) bis zum Haaransatz


10. Von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext.

Taiyang: 3-4x Pumpen

11. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen

12. Zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen

13. Entfernen Sie sorgfältig das verblieben Öl mit einem feucht warmen Tuch

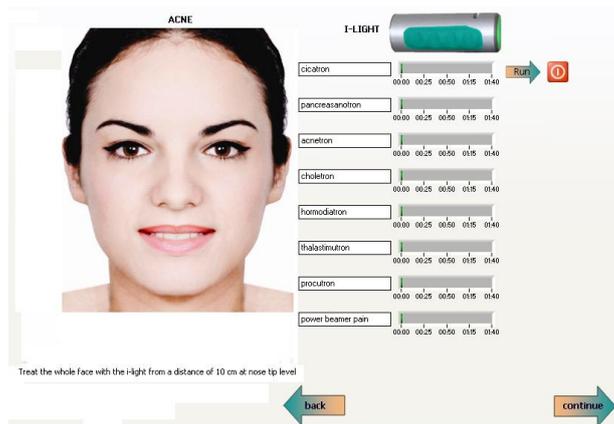

### I-Light Akne Gesicht

- aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den "run"-Pfeil neben den Raymedys
- Richten Sie das i-Light auf Höhe der Nasenspitze aus ca. 10 cm Distanz auf das Gesicht (Ständer)
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

### NEUE EDA-MESSUNG


Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301

- Es ist eine weitere EDA-Messung notwendig, um die Konsolidierungsphase abzuschließen  
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

## 5.5.3 AKNEPROGRAMM:KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

### KONSOLIDIERUNGSPHASE

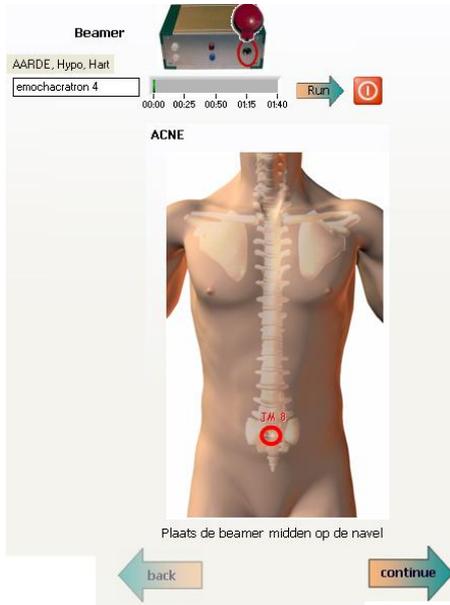

- Klient in Rückenlage
- Passend zum aktuellen Energiemangel im Erde-Element wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Emochakraton 4, um Energie aus dem Feuelement zuzuführen.
- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Nach Klick auf den "continue"-Pfeil ist das Akneprogramm beendet und wird geschlossen:  
Protocoll is finished.

## 5.6 CELLULITE-PROGRAMM

Aus praktischen topographischen Gründen wurde die Cellulite in diesem Programm in 3 Formen unterteilt, entsprechend der Korrelation mit den zugehörigen Meridianen:

Ga/Le, (Gallenblase/Leber), MP/Ma (Milz/Pankreas-Magen) und N/Bl (Niere/Blase)

Ga/Le-Cellulite wird behandelt, während der Klient auf der rechten oder linken Seite liegt, MP/Ma-Cellulite in Rückenlage und die N/Bl-Cellulite in Bauchlage. Da die MP/Ma-Funktion bei allen Cellulite-Arten eine wichtige Rolle spielt, empfehlen wir, jede Cellulite-Behandlung mit der Behandlung der MP/Ma-Meridiane/Zonen zu kombinieren.

*Während des Cellulite-Programms werden Bilder von den Cellulite-Zonen, den Dermatomen, den Shu-Punkten und den Alarm-Punkten gezeigt.*

### **3 EDA-Messungen bestimmen den Konstitutionstyp des Klienten (normal, hypo- oder hyper)**

Nach Auswahl des Cellulite-Programms erscheinen 3 Arten von Cellulite auf Ihrem Bildschirm:

Please select type of cellulitis:

		
<b>Legs side (G/Le)</b>	<b>legs front side(MP/M)</b>	<b>legs back side (N/B)</b>

Alle Cellulite-Programme liefern eine Cellulite-Behandlung


insbesondere der Beine und sind ähnlich aufgebaut. Der Unterschied besteht nur bezüglich der Behandlungszonen. Deswegen wird nur das Ga/Le-Programm im Detail beschrieben.

### 5.6.1 CELLULITE-PROGRAMM GA/LE (AUSSENSEITE DER BEINE)



3 EDA-Messungen sind notwendig für die Bestimmung von Elementtyp, Energieniveau, Regulationsfähigkeit, Energieverteilung und des schwächsten Meridians. Als Ergebnis zeigt der nächste Bildschirm die empfohlene Bewegungsrichtung für die Schröpfköpfe mit dem persönlichen Ölkomplex an.

## 5.6.2 CELLULITE-PROGRAMM GA/LE BEHANDLUNG DES RÜCKENS MIT DEM I-VAC

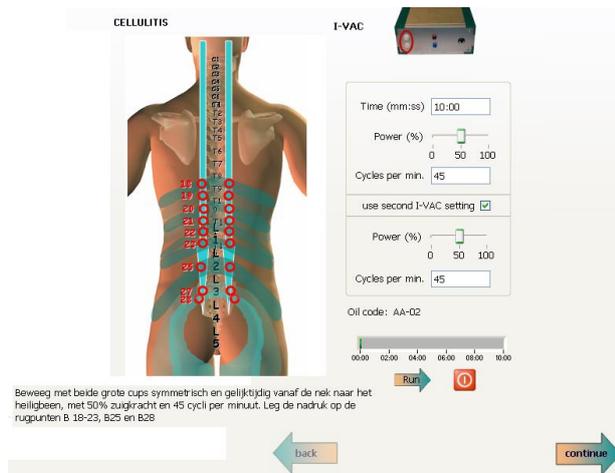

CELLULITE: Behandlung des Rückens mit dem i-VAC:

- Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken (im Bereich des Blasenmeridians) auf.
- Aktivieren das i-VAC mit Klick auf den RUN-Pfeil
- Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian/ in Höhe des 7.Halswirbels und des Steißbeins) und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.
- Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil rechts unten fahren Sie im Programm fort.

## 5.6.3 CELLULITEPROGRAMM GA/LE: BEHANDLUNG DER PROBLEMZONEN MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT


Beginnen Sie mit dem Bein 1



CELLULITE: Vorbehandlung mit dem i-LIGHT

- Klient in Seitenlage links
- 10Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die lateralen Problemzonen auf
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

## Cellulite Beinbehandlung mit dem i-ON

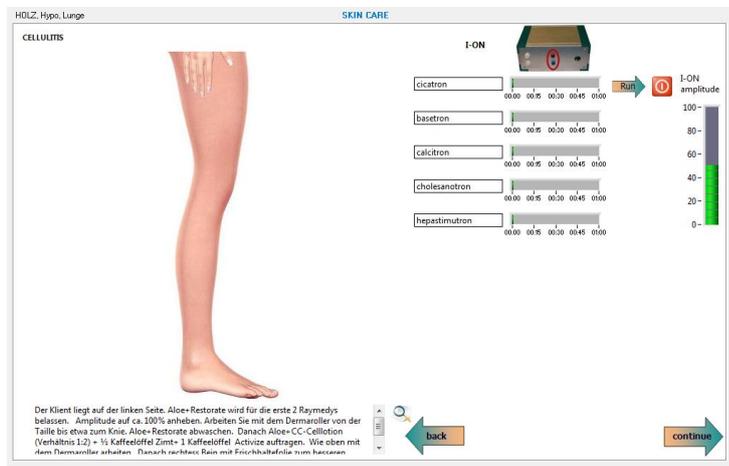


- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie ein (Wärmebildung)




## CELLULITE: Vorbehandlung mit dem i-LIGHT

- Klient in Seitenlage rechts
- 10Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die lateralen Problemzonen auf
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

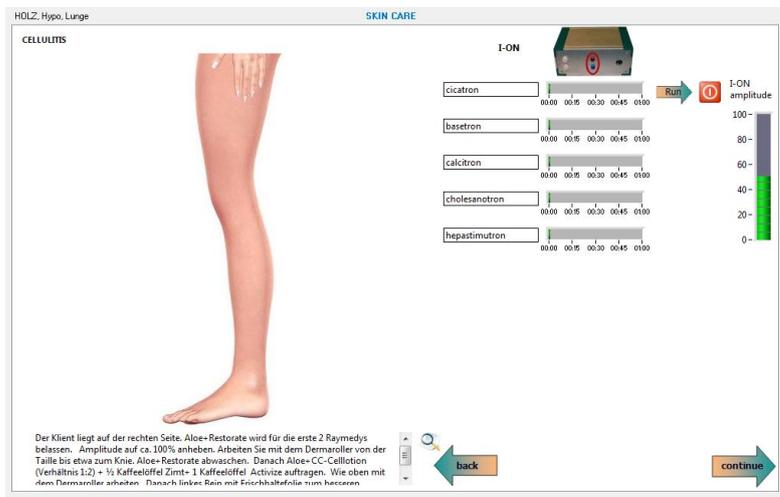

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie ein (Wärmebildung)

## I-VAC Cellulite rechts

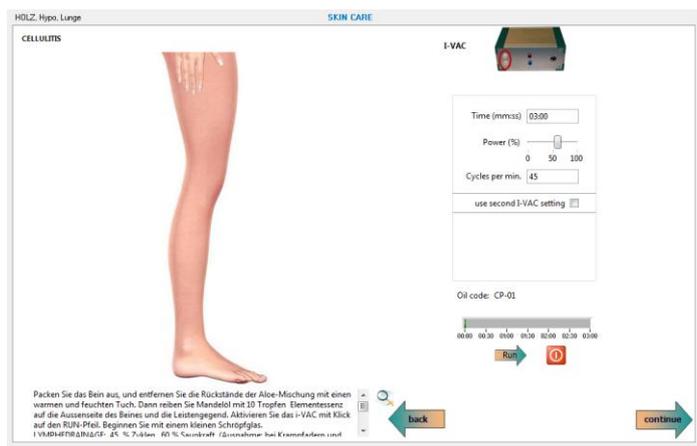

## I-Vac Lymphdrainage


- Entfernen Sie nun sorgfältig die Aloe Mischung mit einem feucht warmen Tuch
- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den kleinen RUN-Pfeil.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:

1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
  2. Zwischen dem Großzoh und 2. Zeh /Akupunkt Leber 3): 7-8x pumpen
- Wechseln Sie bitte auf das große Schröpfglas:
    4. Auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8): 7-8x pumpen
    5. Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten) um die Lympheseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian)
  - Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
  - Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Außenseite des Beines ab (siehe Bild)
  - Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss



### i-Vac Bindegewebemassage

- **Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Außenseite des Beines zügig ab**

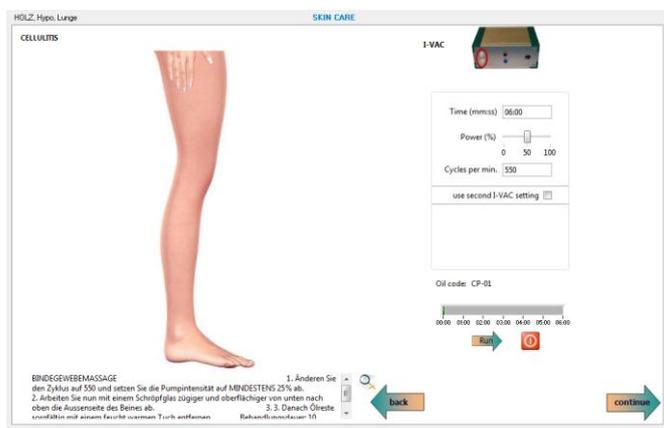


### I-Vac Matrixdrainage

- passen Sie die Pumpintensität an den Schmerz an (mindestens 25%)
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Außenseite des Beines ab .Hier ist das Zeitfenster auf 6Minuten voreingestellt, da Sie mit dieser Frequenz 550 die größten Effekte erzielen
- Danach Öreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)




## I-Vac Lymphdrainage links

- Entfernen Sie sorgfältig die Aloe-Mischung mit einem feucht warmen Tuch
- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzone auf
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den kleinen RUN-Pfeil.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:
  1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
  2. Zwischen dem Großzehen und 2. Zeh / Akupunkt Leber 3): 7-8x pumpen
- Wechseln Sie bitte auf das große Schröpfglas:
  6. Auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8): 7-8x pumpen
  7. Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten) um die Lymphseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian)
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Außenseite des Beines ab (siehe Bild)
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss

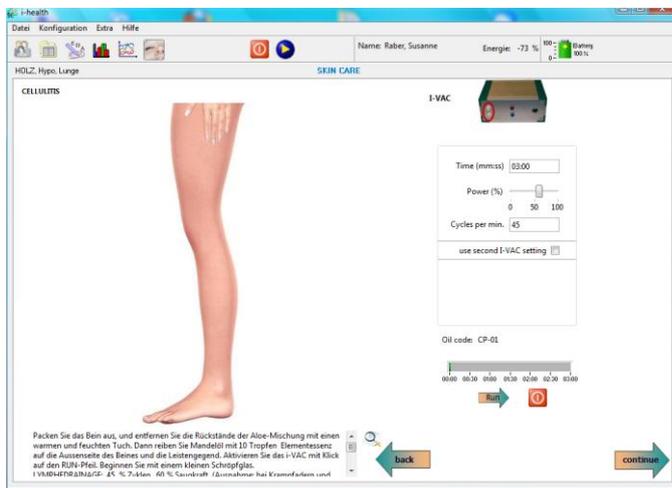

## i-Vac Bindegewebemassage

- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Außenseite des Beines zügig ab

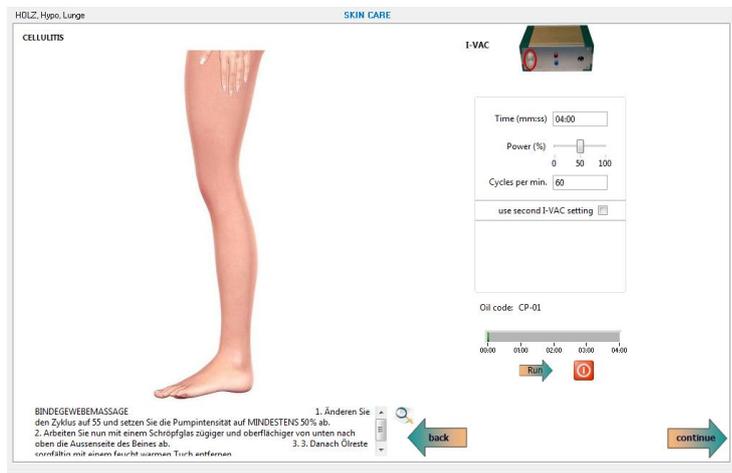

## I-Vac Matrixdrainage

- passen Sie die Pumpintensität an den Schmerz an (mindestens 25%)
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Außenseite des Beines ab .Hier ist das Zeitfenster auf 6Minuten voreingestellt, da Sie mit dieser Frequenz 550 die größten Effekten
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)





### Beinbehandlung mit dem I-LIGHT


- Klient in Seitenlage links
- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem I-Light (Ständer)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den “run”-Pfeil
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf “continue” um weiterzukommen



- Klient in Seitenlage rechts
- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem I-Light (Ständer)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den “run”-Pfeil
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf “continue” um weiterzukommen

## EDA Messung

### I-VAC Bauchbehandlung

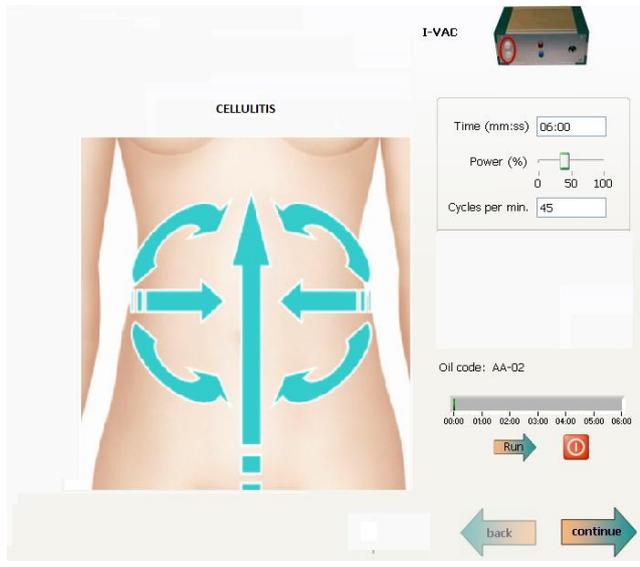

- Tragen Sie auf den Bauchbereich angewärmte Ölmischung auf.
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Passen Sie eventuell die Pumpintensität an. Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Bei HYPO- und NORMALE Energie: Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite(Taille) an und bewegen Sie diese wie angezeigt von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins, dann von der Taille zur Bauchmitte hin, dann von der Taille (linken und rechten Bauchseite) nach unten seitwärts bis zum Schambein. Zuletzt von Schambein zum Unterrand des Brustbeins
- Bei HYPER-Energie: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe von der Taille bis zur Schambein, danach von der Taille bis zur Nabel, anschließend von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt von Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein
- Folgen Sie jedenfalls mit den Schröpfköpfen der im Bild angegeben Pfeilrichtung auf dem Konzeptionsgefäß
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen


### EDA – Messung Cellulite

Please do 1 EDA measurement for the i-Health skin analysis.

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301

- Für die abschließende Konsolidierungsphase ist eine neue EDA-Messung notwendig
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

## 5.6.5 CELLULITEPROGRAMM GA/LE: KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

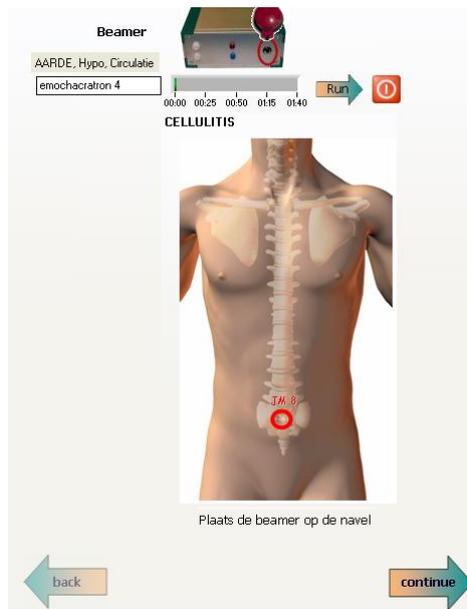

- Passend zum aktuellen Energiemangel im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Emochakration 4, welches Energie aus dem Feuerelement zuführt
- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil

Nach Beendigung der Konsolidierungsphase wird mit einem Klick auf den "continue"-Pfeil das Celluliteprogramm geschlossen:

Procoll is finished.

## Das CELLULITE-PROGRAMM Milz-Pankreas/Magen

- ❖ 10-minütige Bestrahlung der Problemzonen mit der Infrarot-Lampe
- ❖ 3 EDA-Messungen
- ❖ Lymphdrainage nach Protokoll
- ❖ Auftragen von Aloe+Restorate auf die Problemzonen der Vorder-oder der Rückseite auf dem 1. Bein
- ❖ Weißes Licht mit dem i-LIGHT
- ❖ Cicatron und Basetron mit dem Dermalroller des i-ON
- ❖ Entfernung der Aloe-Restorate-Rückstände und Auftragen von Aloe + CC-Cell-Lotion (Verhältnis 1:2)+Zimt+Activize. Weiterbehandlung mit dem i-ON. Die Reste von Aloe + CC-Cell-Lotion+Zimt+Activize werden nicht entfernt: danach das Bein mit Frischhaltefolie zum besseren Einwirken einwickeln.
- ❖ Auftragen von Aloe+Restorate auf die Problemzonen von Vorder- oder Rückseite des 2. Beines
- ❖ Weißes Licht mit dem i-LIGHT
- ❖ Cicatron und Basetron mit dem Dermalroller des i-ON
- ❖ Entfernung der Aloe-Restorate-Rückstände und Auftragen von Aloe + CC-Cell-Lotion (Verhältnis 1:2)+Zimt+ Activize. Weiterbehandlung mit dem i-ON. Die Reste von Aloe + CC-Cell-Lotion werden nicht entfernt: danach das Bein mit Frischhaltefolie zum besseren Einwirken einwickeln.
- ❖ Reinigen Sie das 1. Bein mit einem feucht warmen Tuch.
- ❖ I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
- ❖ Reinigen Sie das 2. Bein mit einem feucht warmen Tuch.
- ❖ I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
- ❖ Entfernen Sie die sorgfältig die Ölmischung mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert) von beiden Beinen
- ❖ i-Light gemäß Protokoll
- ❖ Lymphdrainage des Abdomens
- ❖ EDA –Messung
- ❖ Emochakraton mit dem Beamer

## 5.6.2 CELLULITE-PROGRAMM MA/MI BEHANDLUNG DES RÜCKENS MIT DEM I-VAC

**CELLULITIS**

**I-VAC**

Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

use second I-VAC setting

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

Oil code: AA-02

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00

RUN

3

Beweg met beide grote cups symmetrisch en gelijktijdig vanaf de nek naar het heiligbeen, met 50% zuigkracht en 45 cycli per minuut. Leg de nadruk op de rugpunten B 18-23, B25 en B28

back continue

CELLULITE: Behandlung des Rückens mit dem i-VAC:

- Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken (im Bereich des Blasenmeridians) auf.
- Aktivieren das i-VAC mit Klick auf den RUN-Pfeil
- Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung

entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian/ in Höhe des 7.Halswirbels und des Steißbeins))und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.

- Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil rechts unten fahren Sie im Programm fort.
- 

## CELLULITEPROGRAMM MA/MI: BEHANDLUNG DER PROBLEMZONEN MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT




### CELLULITE: **Vorbehandlung mit dem i-LIGHT**

- Klient in Rückenlage 10Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die lateralen Problemzonen auf
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen



- Klient in Rückenlage 10Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die lateralen Problemzonen auf
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

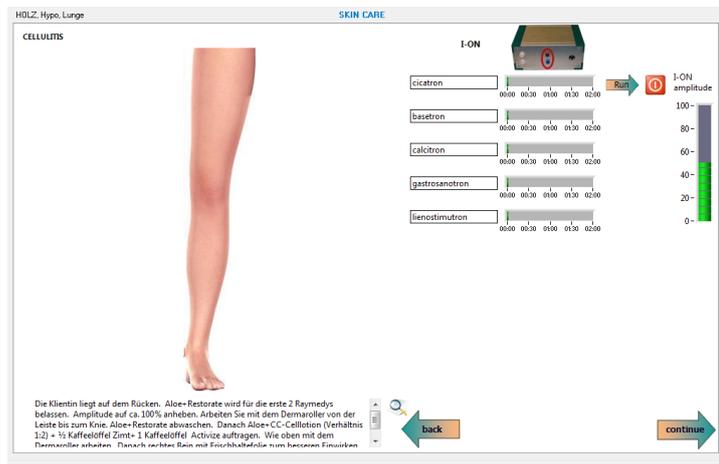

### Behandlung mit I-On links


- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie ein (Wärmebildung)



### Behandlung mit I-On rechts


- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie ein (Wärmebildung)

### Behandlung mit I-vac

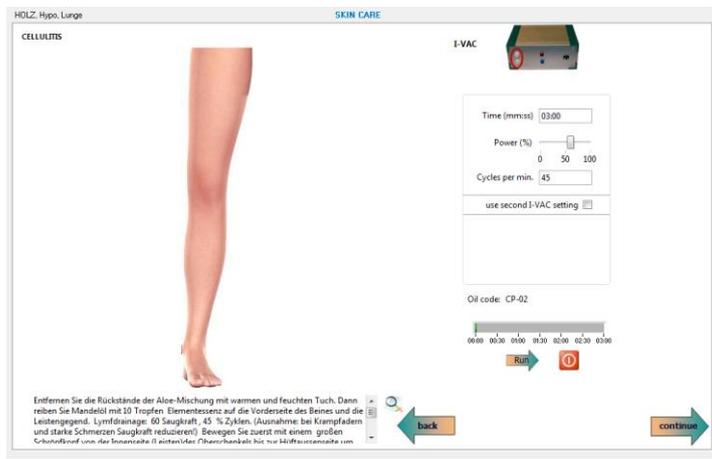


## I-Vac Lymphdrainage links

- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch
- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den kleinen RUN-Pfeil.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:
  1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
  2. Zwischen dem Großzeh und 2. Zeh /Akupunkt Leber 3): 7-8x pumpen
- Wechseln Sie bitte auf das große Schröpfglas:
  8. Auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8): 7-8x pumpen
  9. Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten) um die Lympheseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian)
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Vorderseite des Beines ab (siehe Bild)
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss

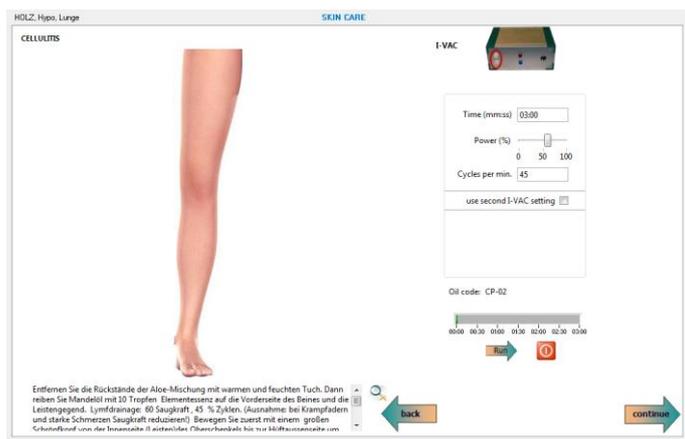

## i-Vac Bindegewebemassage

- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Vorderseite des Beines zügig ab

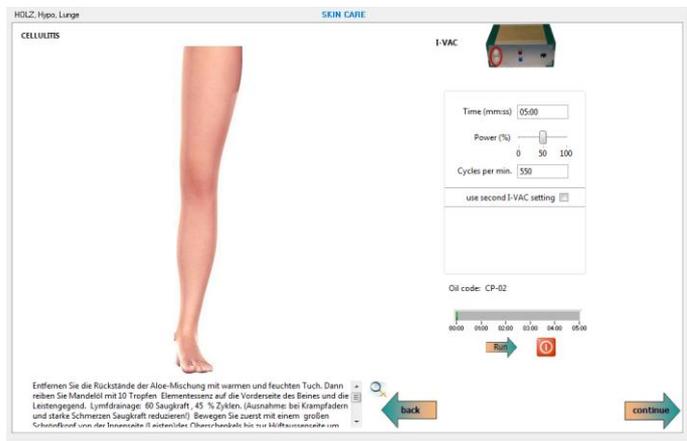

## I-Vac Matrixdrainage

- passen Sie die Pumpintensität an den Schmerz an (mindestens 25%)
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Vorderseite des Beines ab .Hier ist das Zeitfenster auf 6Minuten voreingestellt, da Sie mit dieser Frequenz 550 die größten Effekten erzielen
- Danach Öreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)




## I-Vac Lymphdrainage rechts

- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch
- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den kleinen RUN-Pfeil.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:
  1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
  2. Zwischen dem Großzeh und 2. Zeh /Akupunkt Leber 3): 7-8x pumpen
- Wechseln Sie bitte auf das große Schröpfglas:
  10. Auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8): 7-8x pumpen
  11. Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten) um die Lympheseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian)
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Vorderseite des Beines ab (siehe Bild)
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss




## i-Vac Bindegewebsmassage

- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Vorderseite des Beines zügig ab

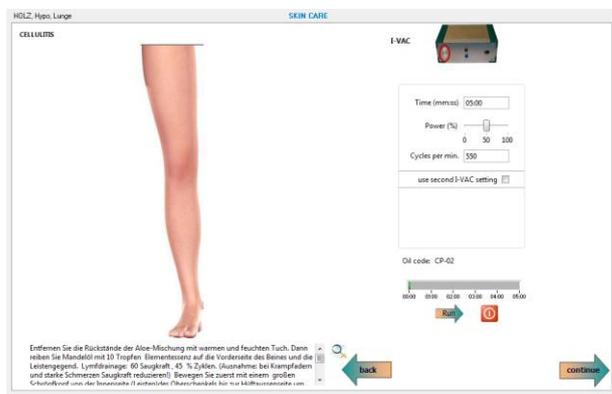

## I-Vac Matrixdrainage

- passen Sie die Pumpintensität an den Schmerz an (mindestens 25%)
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Vorderseite des Beines ab .Hier ist das Zeitfenster auf 6Minuten voreingestellt, da Sie mit dieser Frequenz 550 die größten Effekten erzielen
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)

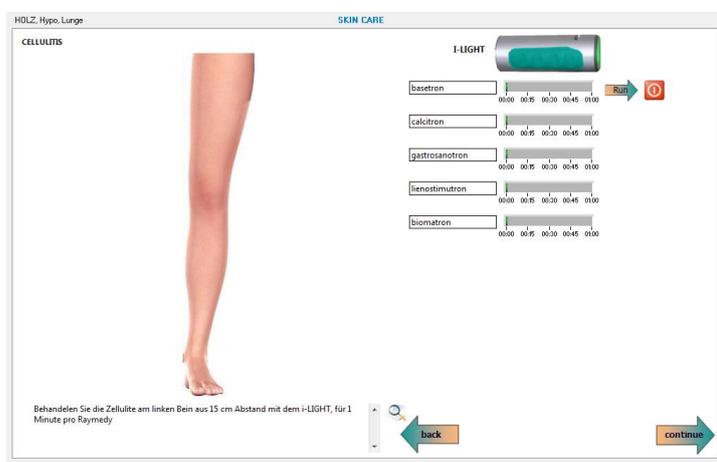

## I-Light Behandlung

- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem I-Light (Ständer)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen



## I-Light Behandlung

- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem I-Light (Ständer)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den "run"-Pfeil  
Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

## EDA Messung

### 5.6.4 CELLULITEPROGRAMM GA/LE: BAUCHBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

#### I-VAC Bauchbehandlung




- Tragen Sie auf den Bauchbereich angewärmte Ölmischung auf.

- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Passen Sie eventuell die Pumpintensität an. Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den “run”-Pfeil
- Bei HYPO- und NORMALE Energie: Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite(Taille) an und bewegen Sie diese wie angezeigt von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins, dann von der Taille zur Bauchmitte hin, dann von der Taille (linken und rechten Bauchseite) nach unten seitwärts bis zum Schambein. Zuletzt von Schambein zum Unterrand des Brustbeins
- Bei HYPER-Energie: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe von der Taille bis zur Schambein, danach von der Taille bis zur Nabel, anschließend von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt von Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein
- Folgen Sie jedenfalls mit den Schröpfköpfen der im Bild angegebenen Pfeilrichtung auf dem Konzeptionsgefäß
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf den “continue”-Pfeil um weiterzukommen

### EDA – Messung Cellulite

Please do 1 EDA measurement for the i-Health skin analysis.

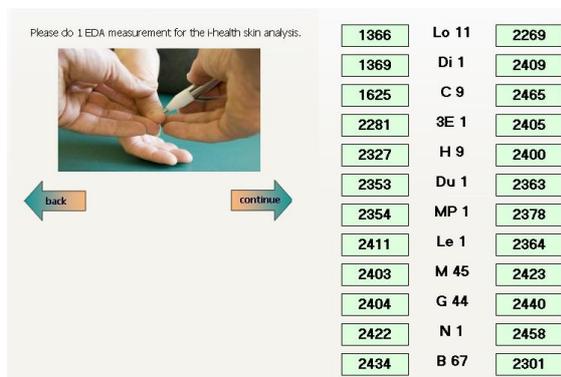

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301

- Für die abschließende Konsolidierungsphase ist eine neue EDA-Messung notwendig
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm


### 5.6.5 CELLULITEPROGRAMM MA/MI: KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

Beamer

AARDE, Hypo, Circulate  
emochakraton 4

00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

CELLULITIS

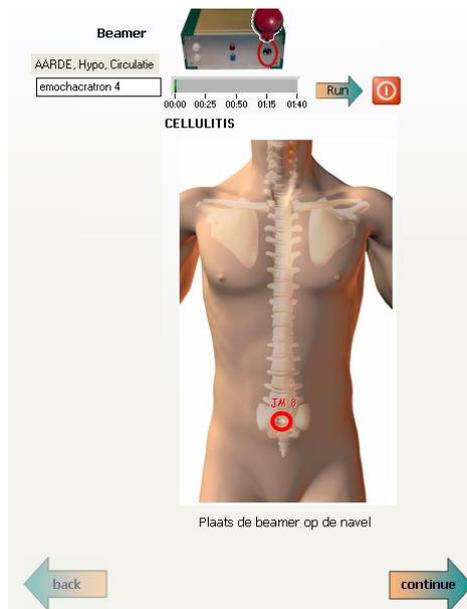

Plaats de beamer op de navel

- Passend zum aktuellen Energiemangel im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Eموchakraton 4, welches Energie aus dem Feuerelement zuführt
- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den “run”-Pfeil

Nach Beendigung der Konsolidierungsphase wird mit einem Klick auf den “continue”-Pfeil das Celluliteprogramm geschlossen:

Protocoll is finished.

## Das CELLULITE-PROGRAMM BL/NI

- ❖ 10-minütige Bestrahlung der Problemzonen mit der Infrarot-Lampe
- ❖ 3 EDA-Messungen
- ❖ Lymphdrainage nach Protokoll
- ❖ Auftragen von Aloe+Restorate auf die Problemzonen der Rückseite auf dem 1. Bein
- ❖ Weißes Licht mit dem i-LIGHT
- ❖ Cicatron und Basetron mit dem Dermaroller des i-ON
- ❖ Entfernung der Aloe-Restorate-Rückstände und Auftragen von Aloe + CC-Cell-Lotion (Verhältnis 1:2)+Zimt+Activize. Weiterbehandlung mit dem i-ON. Die Reste von Aloe + CC-Cell-Lotion+Zimt+Activize werden nicht entfernt: danach das Bein mit Frischhaltefolie zum besseren Einwirken einwickeln.
- ❖ Auftragen von Aloe+Restorate auf die Problemzonen von Rückseite des 2. Beines
- ❖ Weißes Licht mit dem i-LIGHT (wie bei Cellulite LE/GA)
- ❖ Cicatron und Basetron mit dem Dermaroller des i-ON
- ❖ Entfernung der Aloe-Restorate-Rückstände und Auftragen von Aloe + CC-Cell-Lotion (Verhältnis 1:2)+Zimt+Activize. Weiterbehandlung mit dem i-ON. Die Reste von Aloe + CC-Cell-Lotion werden nicht entfernt: danach das Bein mit Frischhaltefolie zum besseren Einwirken einwickeln.
- ❖ Reinigen Sie das 1. Bein mit einem feucht warmen Tuch.
- ❖ I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex (wie bei Cellulite LE/GA von unten nach oben)
- ❖ Reinigen Sie das 2. Bein mit einem feucht warmen Tuch.
- ❖ I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex (wie bei Cellulite LE/GA von unten nach oben)
- ❖ Entfernen Sie die sorgfältig die Ölmischung mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert) von beiden Beinen
- ❖ i-Light gemäß Protokoll (wie bei Cellulite LE/GA)
- ❖ Lymphdrainage des Abdomens (wie bei Cellulite LE/GA)
- ❖ EDA –Messung
- ❖ Emochakraton mit dem Beamer

### 5.6.2 CELLULITE-PROGRAMM BL/NI BEHANDLUNG DES RÜCKENS MIT DEM I-VAC

CELLULITIS I-VAC

Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

use second I-VAC setting

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

Oil code: AA-Q2

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00

1

Beweeg met beide grote cups symmetrisch en gelijktijdig vanaf de nek naar het heiligbeen, met 50% zuigracht en 45 cycli per minuut. Leg de nadruk op de rugpunten B 18-23, B25 en B28


back continue

CELLULITE: Behandlung des Rückens mit dem i-VAC:

- Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken (im Bereich des Blasenmeridians) auf.
- Aktivieren das i-VAC mit Klick auf den RUN-Pfeil

- Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian/ in Höhe des 7. Halswirbels und des Steißbeins) und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.
- Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil rechts unten fahren Sie im Programm fort.
- 

## CELLULITEPROGRAMM BL/NI: BEHANDLUNG DER PROBLEMZONEN MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

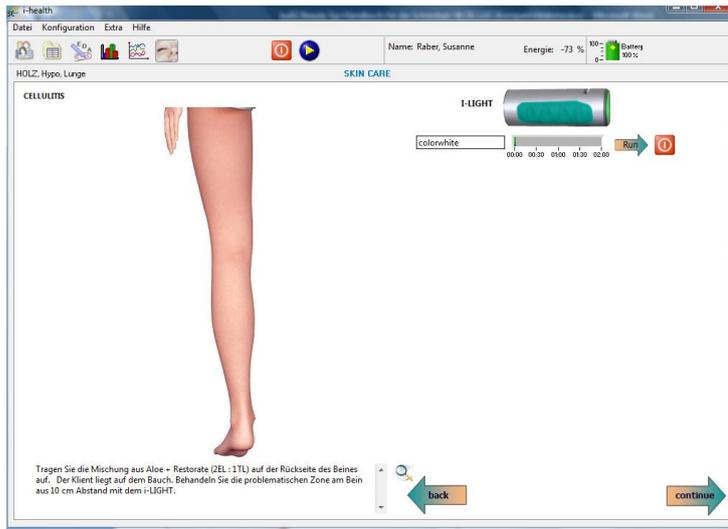


### CELLULITE: Vorbehandlung mit dem i-LIGHT

- Klient in Bauchlage 10Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die lateralen Problemzonen auf
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen




- Klient in Bauchlage 10Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen

- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die lateralen Problemzonen auf
- Klick auf den “run”-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den “continue”-Pfeil um weiterzukommen

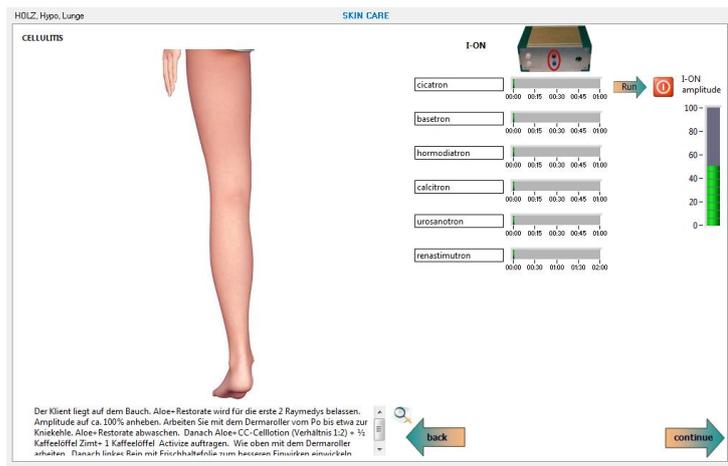

### Behandlung mit I-On links

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den “run”-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie ein (Wärmebildung)

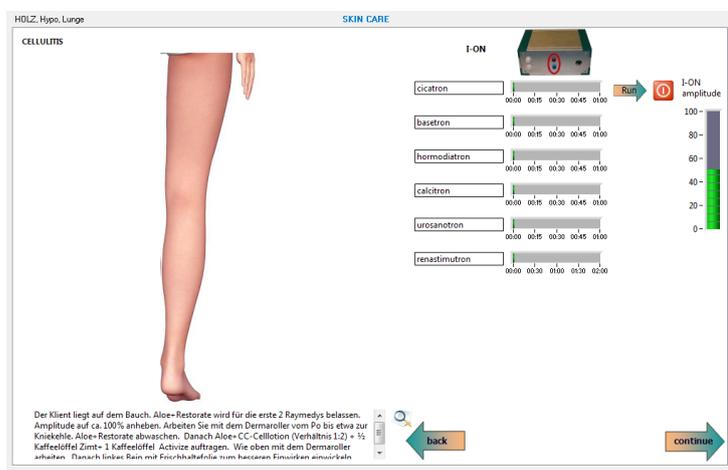

### Behandlung mit I-On rechts

- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den “run”-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie ein (Wärmebildung)

## Behandlung mit I-vac



### I-Vac Lymphdrainage links

Entfernen Sie die Rückstände der Aloe-Mischung mit warmen und feuchten Tuch. Dann reiben Sie Mandelöl mit 10 Tropfen Elementessenz auf die Rückseite des Beines und die Pogegegend. Lymphdrainage: Beginne mit 45 % Zyklen, 60 Saugkraft. (Ausnahme: bei Krampfadern und starke Schmerzen Saugkraft reduzieren!) Bewegen Sie zuerst mit einem großen Schröpfkopf von der Innenseite der Pofalte bis zur Oberschenkel (Aussenseite) um die Lymphseen zu leeren. Danach vom Knie beginnend mit zwei Schröpfköpfe wieder zum Po. Abschliessend wieder die Lymphseen entleeren.



### i-Vac Bindegewebemassage

- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Rückseite des Beines zügig ab




### I-Vac Matrixdrainage

- passen Sie die Pumpintensität an den Schmerz an (mindestens 25%)
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Vorderseite des Beines ab .Hier ist das Zeitfenster auf 6Minuten voreingestellt, da Sie mit dieser Frequenz 550 die größten Effekten erzielen
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)



### I-Vac Lymphdrainage rechts

Entfernen Sie die Rückstände der Aloe-Mischung mit warmen und feuchten Tuch. Dann reiben Sie Mandelöl mit 10 Tropfen Elementessenz auf die Rückseite des Beines und die Pogegegend. Lymphdrainage: Beginne mit 45 % Zyklen , 60 Saugkraft. (Ausnahme: bei Krampfadern und starke Schmerzen Saugkraft reduzieren!) Bewegen Sie zuerst mit einem großen Schröpfkopf von der Innenseite der Pofalte bis zur Oberschenkel (Aussenseite) um die Lymph seen zu leeren. Danach vom Knie beginnend mit zwei Schröpfköpfe wieder zum Po. Abschliessend wieder die Lymphseen entleeren.

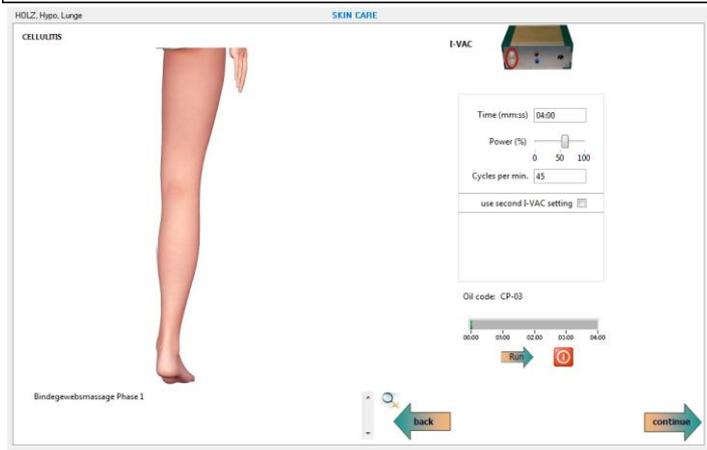


### i-Vac Bindegewebemassage

- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Vorderseite des Beines zügig ab



### I-Vac Matrixdrainage

- passen Sie die Pumpintensität an den Schmerz an (mindestens 25%)
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Vorderseite des Beines ab .Hier ist das Zeitfenster auf 6Minuten voreingestellt, da Sie mit dieser Frequenz 550 die größten Effekten erzielen
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)

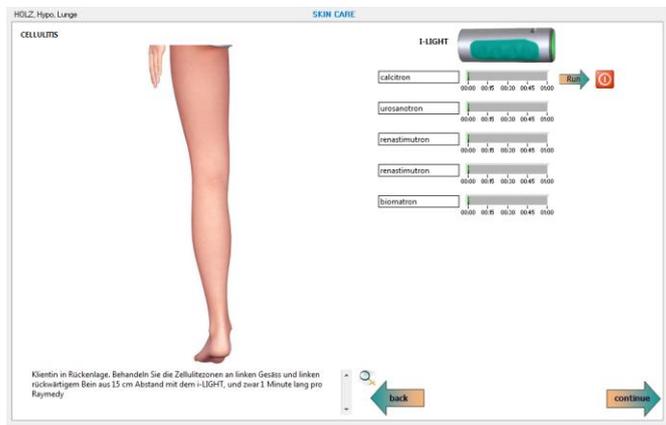

### I-Light Behandlung

- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem I-Light (Ständer)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den “run”-Pfeil
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf “continue” um weiterzukommen



### I-Light Behandlung

- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem I-Light (Ständer)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den “run”-Pfeil  
Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf “continue” um weiterzukommen

## EDA Messung




### 5.6.4 CELLULITEPROGRAMM BL/NI: BAUCHBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

#### I-VAC Bauchbehandlung

- Tragen Sie auf den Bauchbereich angewärmte Ölmischung auf.
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Passen Sie eventuell die Pumpintensität an. Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Bei HYPO- und NORMALE Energie: Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite(Taille) an und bewegen Sie diese wie angezeigt von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins, dann von der Taille zur Bauchmitte hin, dann von der Taille (linken und rechten Bauchseite) nach unten seitwärts bis zum Schambein. Zuletzt von Schambein zum Unterrand des Brustbeins
- Bei HYPER-Energie: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe von der Taille bis zur Schambein, danach von der Taille bis zur Nabel, anschließend von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt von Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein
- Folgen Sie jedenfalls mit den Schröpfköpfen der im Bild angegebenen Pfeilrichtung auf dem Konzeptionsgefäß
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

### EDA – Messung Cellulite

Please do 1 EDA measurement for the i-Health skin analysis.

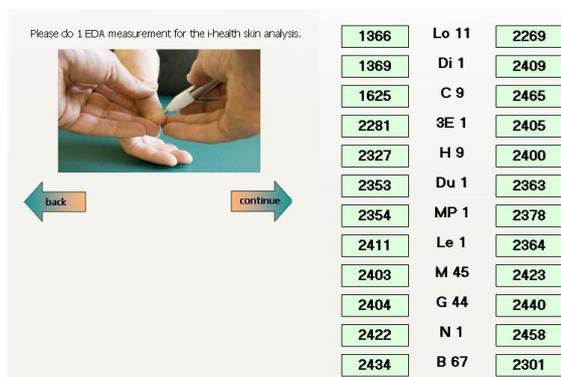

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301

- Für die abschließende Konsolidierungsphase ist eine neue EDA-Messung notwendig
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

### 5.6.5 CELLULITEPROGRAMM NI/BL: KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER


Beamer

AARDE, Hypo, Circulate

emochakrator 4

00:00 00:25 00:50 01:15 01:40 Run

CELLULITIS

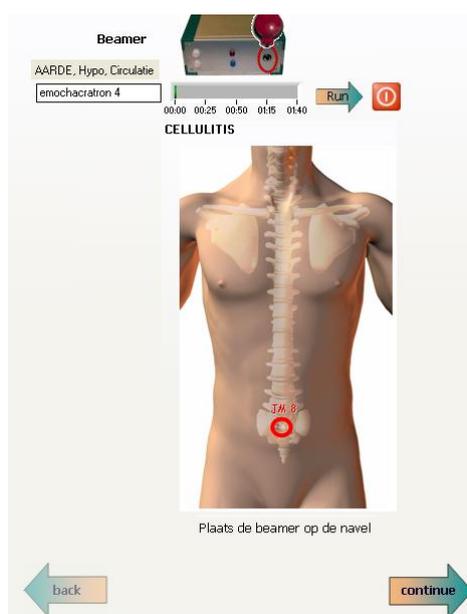

Plaats de beamer op de navel

- Passend zum aktuellen Energiemangel im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Eموchakrator 4, welches Energie aus dem Feuerelement zuführt
- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil

Nach Beendigung der Konsolidierungsphase wird mit einem Klick auf den "continue"-Pfeil das Celluliteprogramm geschlossen:

Protocoll is finished.

## 5.7 SPEZIELLE LÖSUNGEN

Ganz neu in „Spezielle Lösungen“ sind die Programme für Kuperose/Rosacea, Besenreiser, Striae(Schwangerschaftstreifen), und Arm und Schulter-cellulite, Arm-Cellulite. Auch findet man hier AKNE 2 zurück. Diese Kapitel fängt an mit einem typischen „Demo-Protokoll“, das der Kosmetikerin erlaubt, Interessenten und neue Klienten mit sämtlichen Inhalten des IQ BEAUTY SYS vertraut zu machen.

### 5.7.1 Demo-programm Rückenbehandlung mit dem i-ON, i-Vac und i-LIGHT **Nur zu Demonstrationszwecken!!!**

ERDE, Hyper, Leber

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO

I-LIGHT

colorwhite

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 Run

Zoom

Tragen Sie die Mischung aus Aloe + Restorate (2EL : 1TL) auf die angezeigten Hautareale auf. Behandeln Sie diese Areale mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Bewegen Sie das i-LIGHT dabei von der Wibelsäule aus nach rechts und nach links aussen. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "Continue"-Pfeil

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO



I-ON



basetron


00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

Run

I-ON amplitude

pneumasanotron


00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

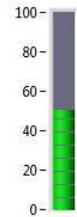

**Zoom**

Mit der Null-Elektrode (+) verbinden Sie das Handgelenk des Klienten mit der roten i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes mit. Verbinden Sie den Dermalroller (-) mit der schwarzen Buchse. Passen Sie die Amplitude an. Die Amplitude muss daher immer gerade eben unterhalb des sensiblen Levels eingestellt werden. Bewegen Sie langsam den Dermalroller angezeigten Hautzonen entlang, von der Wirbelsäule aus nach links und rechts

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO

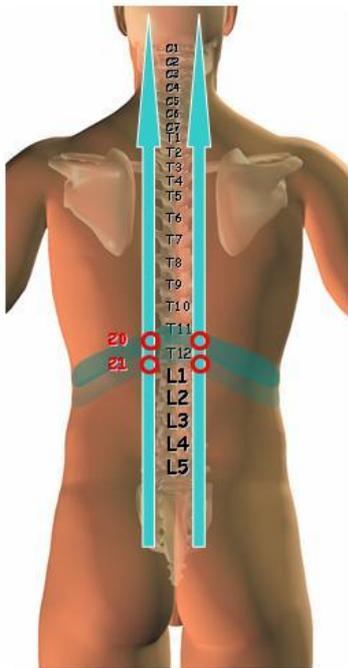

I-VAC



Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

**Zoom**

Entfernen Sie die Rückstände der Aloe-Mischung mit einem feucht-warmen Tuch. Mischen Sie dann 2 EL Mandelöl mit 10 Tropfen des auf dem Bildschirm angegebenen Elementeöls. Bewegen Sie beide Schröpfköpfe gleichzeitig und symmetrisch in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule. Verweilen Sie 7-8 Saugimpulsen auf den markierter Punkte. Benützen Sie die grossen Schröpfköpfe für den Rücken, und die mittelgrossen Schröpfköpfe im Nackenbereich. Nachdem sorgfältig das Öl entfernen mit einem feucht-warmen Tuch.

## SPECIAL SOLUTIONS: DEMO




I-LIGHT


 basetron Run 

00:00 00:15 00:30 00:45 01:00

 pneumasanotron Run 

00:00 00:15 00:30 00:45 01:00

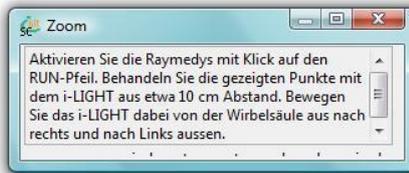

back

continue

## 5.7.2 DEMOPROGRAMM GESICHTSBEHANDLUNG MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

## Nur zu Demonstrationszwecken

Bereiten Sie zwei Mischungen vor: eine Aloe-Restorate-Mixtur und eine aus Aloe + Q10 + Rebuild25.

Reinigen Sie das Gesicht mit Rosenwasser. Tragen Sie eine Maske aus Aloe und Restorate auf und bestrahlen Sie das Gesicht mit weißem Licht. Bitten Sie den Klienten, während dieser Bestrahlung die Augen zu schließen.

Please do 1 EDA measurement for the i-Health skin analysis.

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301

back continue

## NEUE EDA-MESSUNG

- Für die nächste Phase, die Gesichtsbehandlung, ist eine weitere EDA-Messung notwendig
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um zum nächsten Schritt zu kommen

ERDE, Hypo, Leber SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO



I-LIGHT

colorwhite 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 Run

Zoom

Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser. Tragen Sie eine Mischung aus Aloe + Restorate (ZEL : I TL) auf das Gesicht auf.  
Behandeln Sie dann das gesamte Gesicht aus ca 10 cm Abstand mit dem i-LIGHT, auf Höhe der Nasenspitze

ERDE, Hypo, Leber SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO



I-ON

cicatron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 Run

basetron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

biomatron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00


calcitron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

I-ON amplitude 100- 80- 60- 40- 20- 0-

Zoom

Mit der Null-Elektrode (Klettband und feuchtes Wattepad) (+) verbinden Sie das Handgelenk des Klienten mit der roten i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes. Der Dermaroller wird an der schwarzen Buchse angeschlossen. Passen Sie die Amplitude an. Behandeln Sie das gesamte Gesicht und Hals mittels Dermaroller mit einer Mischung aus Aloe+Restorate (Z EL: 1 Teelöffel) und den ersten zwei Raymedys Cicatron und Basetron. Pause einführen. Entfernen Sie nachdem die Aloe+Restorate-Rückstände mit einem feuchtwarmen Tuch. Dann tragen Sie Aloe+ Q10+ 12h-Aktiv-Serum (ZEL:7 Tr6 Hübe) auf das ganze Gesicht und Nacken auf und gehen Sie weiter mit der Dermarollerbehandlung, mit seitwärtsgerichteten Bewegungen

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO

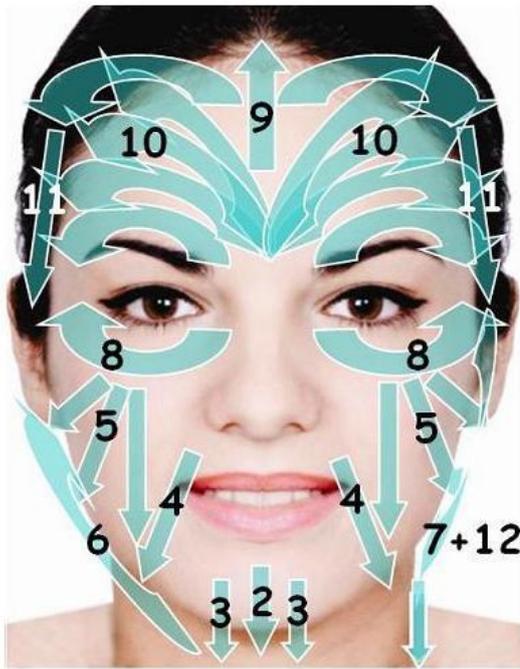

I-VAC



Zoom

Lymphdrainage mit einer Saugkraft von 45 % und 45 Zyklen/Minute  
 Entfernen Sie die Rückstände der Aloe-Mischung. Mischen Sie 2 EL Mandelöl mit 5 Tropfen des auf dem Bildschirm angegebenen Elementessenz. Tragen Sie diese Mischung auf das Gesicht auf. Schröpfen Sie mit dem kleinsten runden Gläschen wie folgt:

1. Beginnen Sie in den Schlüsselbeingruben (M11) mit 5-6 Pumpzyklen.
2. Danach bewegen Sie die kleinsten Schröpfköpfe unterhalb des Mundes,
3. Von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns.
4. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns.
5. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns.
6. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach aussen bis zur Mulde unter dem Ohr läppchen (3E17).
7. Von dort zur Claviculagrube (M11): 7-8x pumpen.
8. Dann von inneren Augenwinkel bis zur äusseren Augenwinkel (8) (akupunkt ext. Tai Yang).
9. Beginnend zwischen den Augenbrauen Akupunkt ext. Yin Tang) bis zum Haaransatz.
10. Dann von der Sternmitte jeweils nach aussen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext. Tai Yang: 3-4x pumpen.
11. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohr läppchen (Akupunkt 3E17): 3-4x pumpen.
- 12 Zur Schlüsselbeingrube (Akupunkt M11): 7-8x pumpen.

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO



I-LIGHT

dicatron 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00 Run

baseatron 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00

biomatron 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00

calcitron 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00

procutrone 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00

Zoom

Richten Sie das I-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht.

Please do 1 EDA measurement for the i-Health skin analysis.



back continue

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301


NEUE EDA-MESSUNG

Eine nächste EDA-Messung ist notwendig für die Konsolidierung

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Dann klicken Sie auf "continue", um weiterzukommen

### 5.7.3 DEMO-PROGRAMM-KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

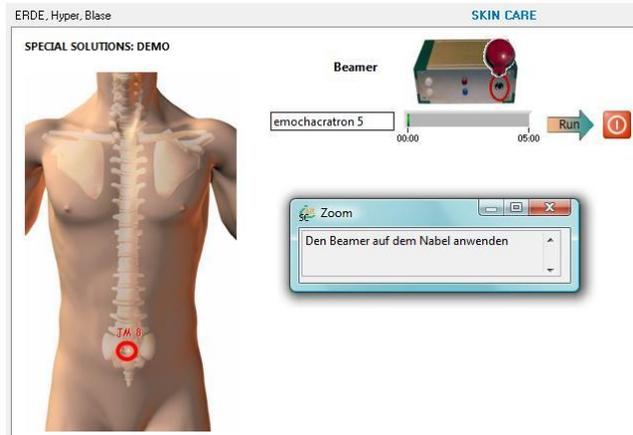

#### KONSOLIDIERUNG

- Klient in Rückenlage

Entsprechend dem in diesem Beispiel gegebenen Energieüberschuss im Erde-Element hat das Programm automatisch das Raymedy Emochakraton 5: Ableitung des Energieüberschusses an des Element Metall

- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy durch Klick auf den "run"-Pfeil


Mit Klick auf den "continue"-Pfeil schließt sich dieses Demo-Programm. Sie lesen:

**Procoll is finished.**

## 5.7.4 BAUCHPROGRAMM MIT I-ON, I-VAC, I-LIGHT UND KONSOLIDATION

ERDE, Hyper, Kreislauf SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: BAUCHPROGRAMM

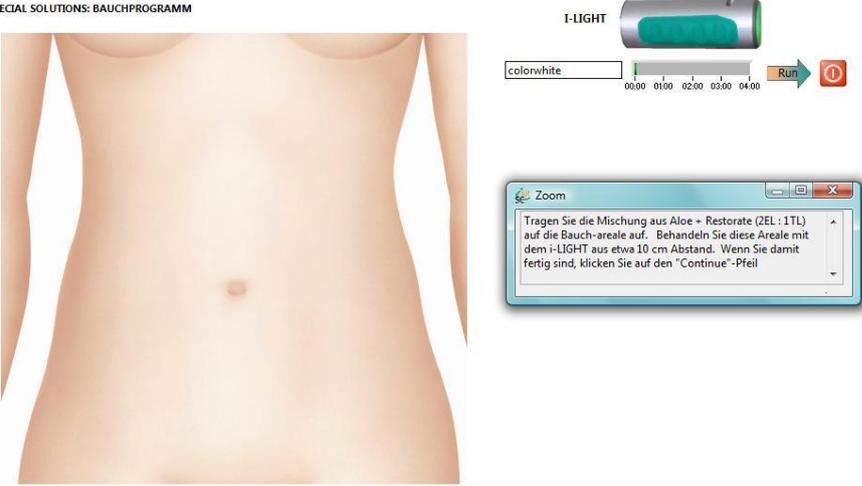

I-LIGHT


colorwhite 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 Run

Zoom

Tragen Sie die Mischung aus Aloe + Restorate (2EL : 1TL) auf die Bauch-areale auf. Behandeln Sie diese Areale mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "Continue"-Pfeil

ERDE, Hyper, Kreislauf SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: BAUCHPROGRAMM

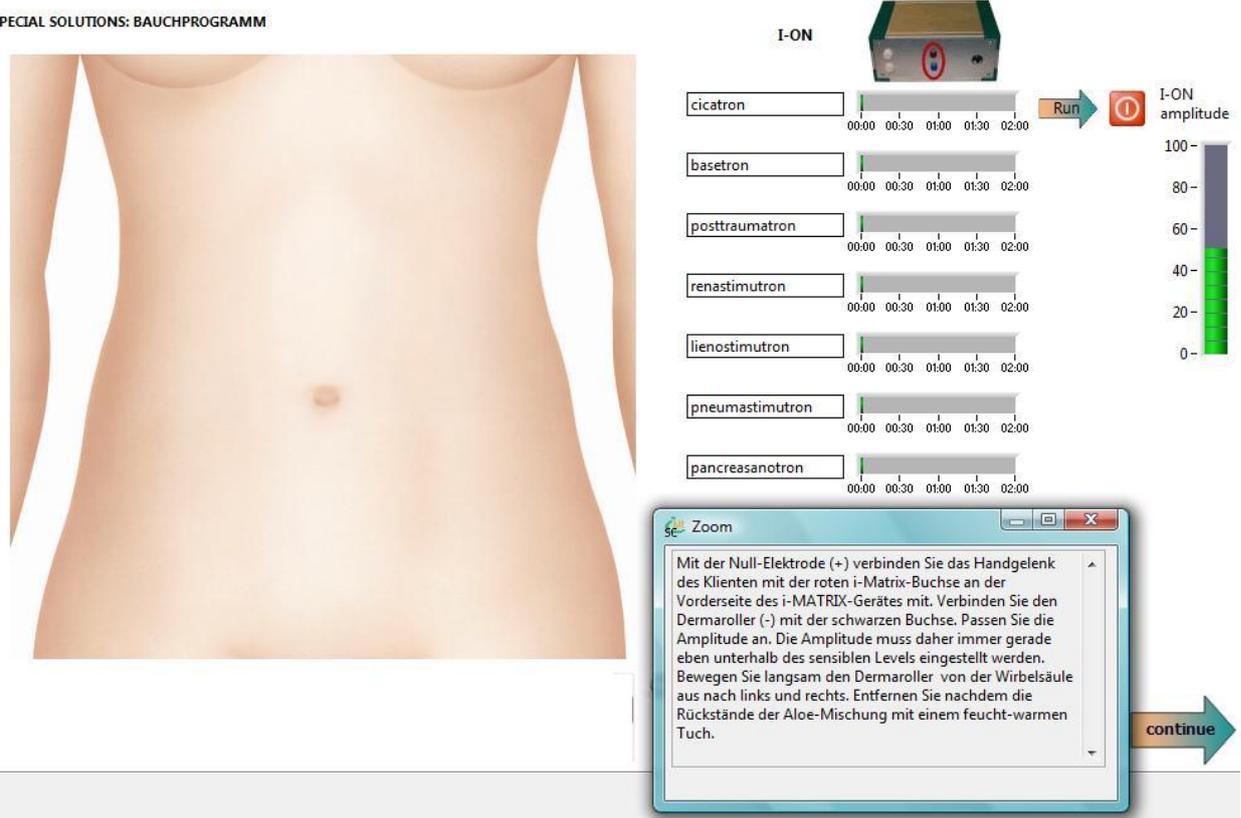

I-ON

cicatron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 Run I-ON amplitude 100-80-60-40-20-0

basatron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

posttraumatron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

renastimutron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

lienostimutron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

pneumastimutron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00


pancreasanotron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

Zoom

Mit der Null-Elektrode (+) verbinden Sie das Handgelenk des Klienten mit der roten i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes mit. Verbinden Sie den Dermaroller (-) mit der schwarzen Buchse. Passen Sie die Amplitude an. Die Amplitude muss daher immer gerade eben unterhalb des sensiblen Levels eingestellt werden. Bewegen Sie langsam den Dermaroller von der Wirbelsäule aus nach links und rechts. Entfernen Sie nachdem die Rückstände der Aloe-Mischung mit einem feucht-warmen Tuch.

continue

SPECIAL SOLUTIONS: BAUCHPROGRAMM

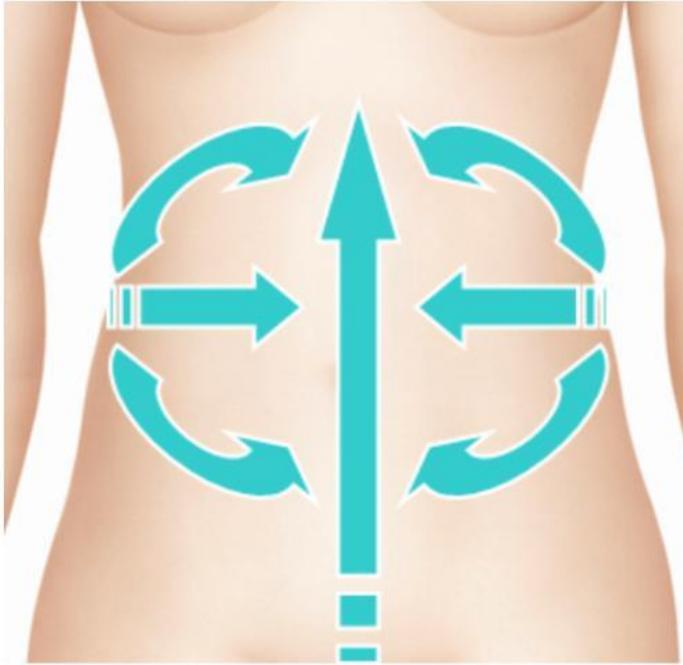

I-VAC




Zoom

Tragen Sie die dazugehörigen Ölkombination auf die unten angegebenen Hautregionen auf. Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:

1. In der Grube der Clavicular (Akupunkt M11: 7-8x pumpen)
2. Zwischen 1. und 2. Zeh (Le 3: 7-8x pumpen)
3. Wechseln Sie bitte das kleine Glas gegen den grössten Schröpfkopf und arbeiten Sie an der Innenseite des Knies auf Le 8 (ebenfalls 7-8x pumpen) Tragen Sie jetzt ausreichend die dazugehörigen Mandelölkombination auf den Übergang von Oberschenkel zur Leiste auf, und bewegen Sie den Schröpfkopf von der Oberschenkelaußenseite zur Innenseite (verlauf von Lebermeridian)
5. Danach arbeiten Sie mit beiden grossen Schröpfköpfen gleichzeitig und symmetrisch am Bauch weiter. Folgen Sie einfach die Pfeilrichtungen

SPECIAL SOLUTIONS: BAUCHPROGRAMM

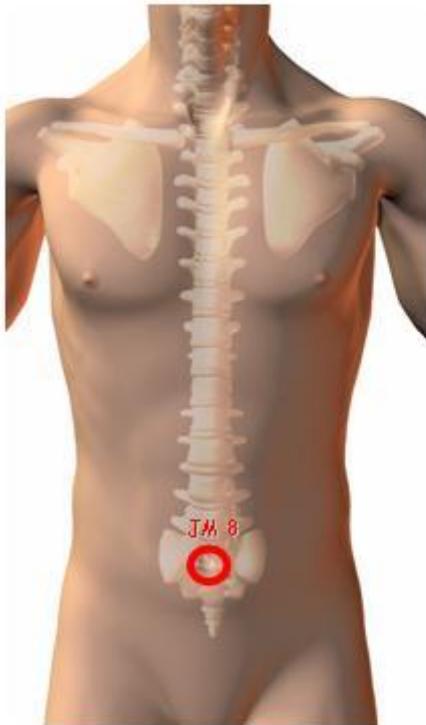

I-LIGHT




cardiosanotron

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00



Zoom

Entfernen Sie die Öl-Rückstände. Richten Sie das i-LIGHT auf den Nabel. aus 10 cm Abstand.

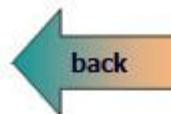

Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.



back

continue

907	Lu 11	1005
2621	Di 1	339
1307	KS 9	3909
69	3E 1	2312
3119	H 9	1581
321	Dü 1	749
2544	MP 1	162
333	Le 1	3700
3362	M 45	2112
2650	G 44	2996
1615	N 1	1442
1374	B 67	3519

Alles löschen

100-Hz-Provokation

ERDE, Hypo, Kreislauf SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: BAUCHPROGRAMM

Beamer

emochacratron 4

00:00 05:00 Run


Zoom

Halten Sie den Beamer auf den Nabel

Protocoll is finished.


## 5.7.5 CUPEROSEPROGRAMM MIT I-ON, I-VAC, I-LIGHT UND KONSOLIDATION

### VORBEREITUNG I-ON-BEHANDLUNG MIT I-LIGHT WEISS

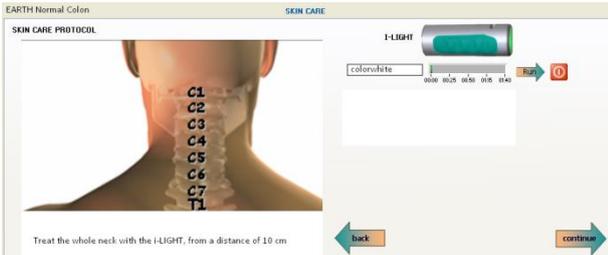

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf die zu behandelnden Zonen auf (2KI Aloe :1KI Restorate)
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals (Ständer)
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**

### Nackenbehandlung mit i-ON

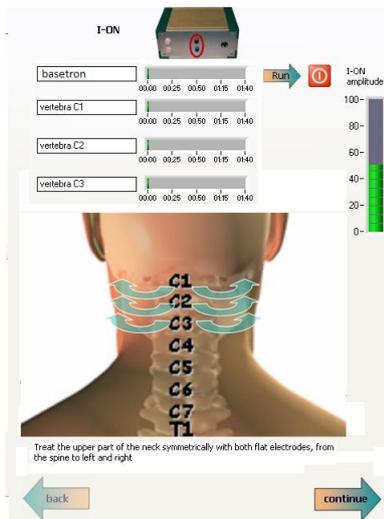


- Klient in Bauchlage
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy Basetron mit dem Dermaroller im ganzen Halsbereich ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf
- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt, passend zu den einzelnen Vertebrae. (Raymedy C1 auf den Wirbel C1 plus das Dermatom)
- Klicken Sie auf den "run"-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht

warmen Tuch

- Mit Klick auf den "Continue"-Pfeil kommen Sie weiter

### HALSBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC


- Bereiten Sie 2KI Mandelöl : 8Tropfen der angegebenen Elementessenz vor (in diesem Fall Erdennormal-AA-02)

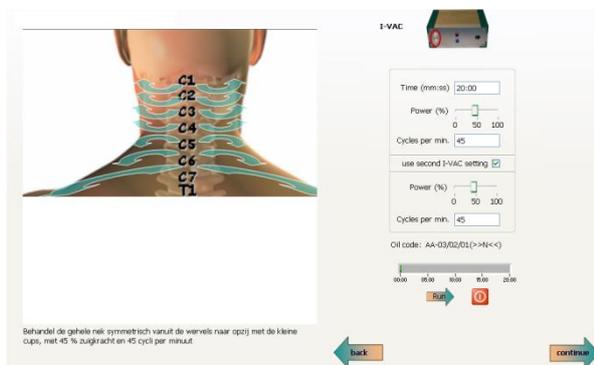

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie die angesagte aufgewärmte Ölkombination auf die Behandlungszone auf
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-VAC**
- Verwenden Sie die mittleren Schröpfköpfe nach Anweisung an (siehe Bild)
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)

- Klicken Sie auf "Continue" um weiterzukommen

## HALSBEHANDLUNG MIT i-LIGHT

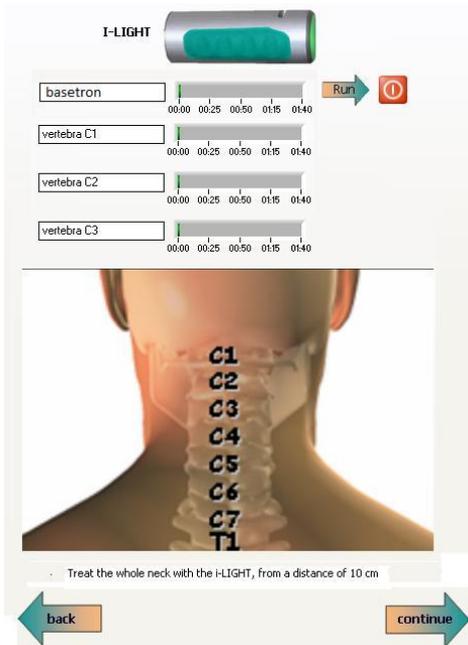


- Klient in Bauchlage
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT
- Behandeln Sie den Hals mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand (Ständer)

## 5.3.2 CUPEROSE MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT



Treat the whole face with the i-Light from a distance of 10 cm at nose tip level

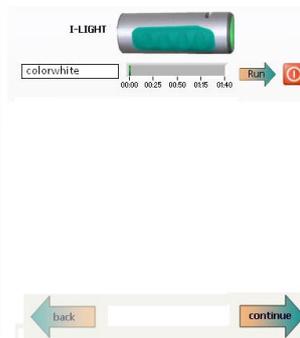


### i-ON Vorbehandlung mit i-LIGHT WEISS

#### Klient in Rückenlage

- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser
- Tragen Sie die Aloe+Restoratemischung auf das Gesicht auf (2KI Aloe : 1KL Restorate)
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT

### I-On Gesichtsbehandlung

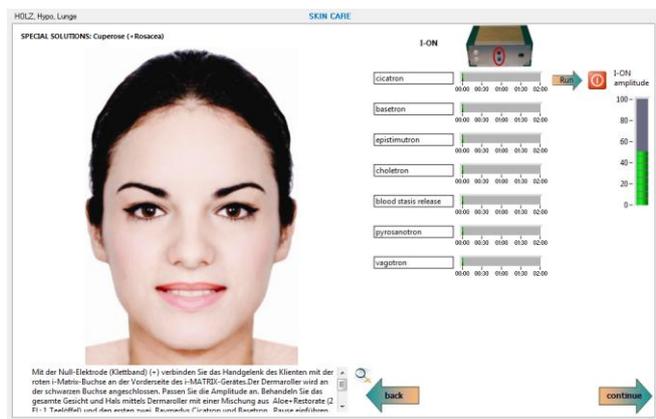


- Passen Sie die Amplitude an. Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie die ersten beiden Raymedys Basetron und Cicatron mit dem Dermaroller im ganzen Gesicht ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch
- Tragen Sie nun großzügig eine angewärmte Mischung aus Aloe-Q10-Beauty Line 12h Serum (2Kl : I:7Tr:6Hübe) auf das ganze Gesicht auf
- Behandeln Sie weiter das ganze Gesicht mit den verbliebenen Raymedys
- Entfernen Sie die restliche Aloe-Mischung mit einem feucht warmen Tuch

### 5.3.3 I-VAC-BEHANDLUNG IN 2 SCHRITTEN: LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE.

Je nach Saugkraft, Pulsation und Bewegungsrichtung hat die i-VAC-Behandlung einen Drainageeffekt auf das lymphatische System oder eine entgiftende und regenerierende Wirkung auf das Bindegewebe.

Wichtig: Passen Sie die Pumpintensität an die Hautbeschaffenheit Ihres Klienten an! Vorsicht im Bereich der Äderchen!!

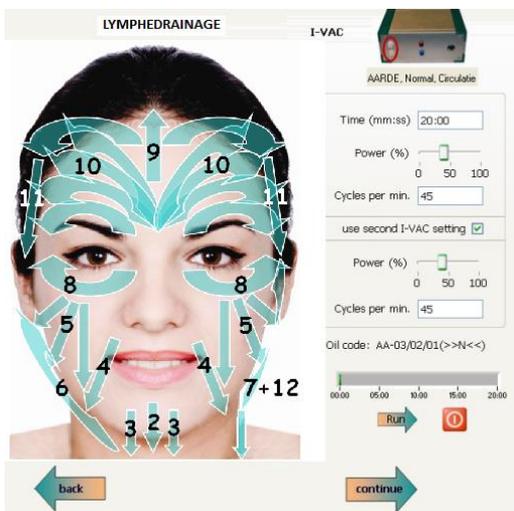


- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf. Dann schröpfen Sie mit den kleinsten runden Gläschen wie folgt:

- **Lymphdrainage**


13. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
14. Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
15. Dann weiter mit beiden kleinsten Schröpfgläschen von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
16. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
17. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
18. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17)
19. Von dort zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen

20. Dann vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang)
21. Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext.Intrang) bis zum Haaransatz
22. Von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext. Taiyang: 3-4xPumpen
23. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohr läppchen(Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen
24. Zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen

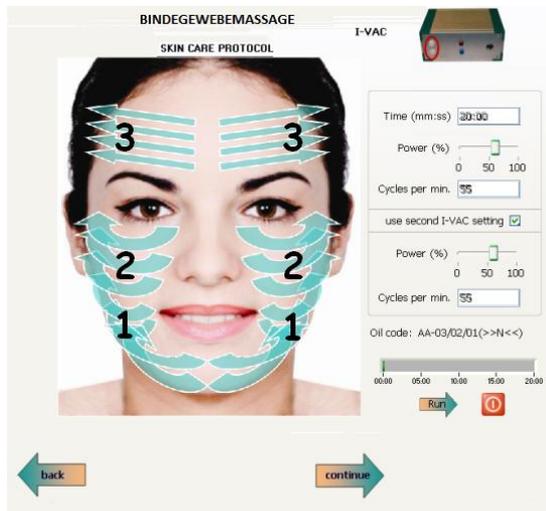

### 1. Bindegewebemassage Stufe 1 (55 Cycle)


4. Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
5. Ebenso an den Wangen
6. Von der Mitte der Stirn aus nach außen

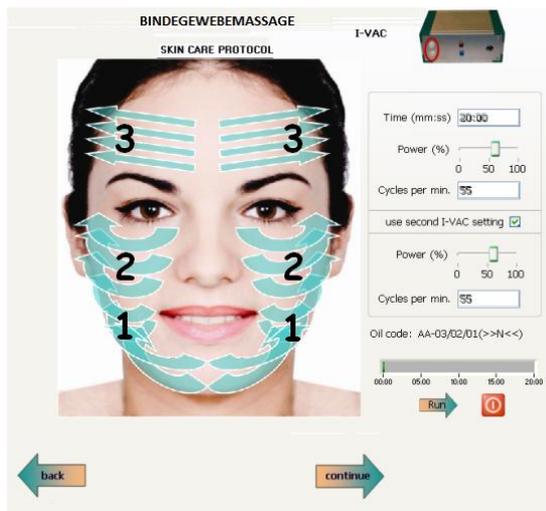

### 2. Bindegewebemassage Stufe 2 (550 Cycle)


5. Benutzen Sie nur ein flaches Schröpfgläschen
6. Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
7. Ebenso an den Wangen
8. Von der Mitte der Stirn aus nach außen

## 5.3.4 I-LIGHT GESICHT

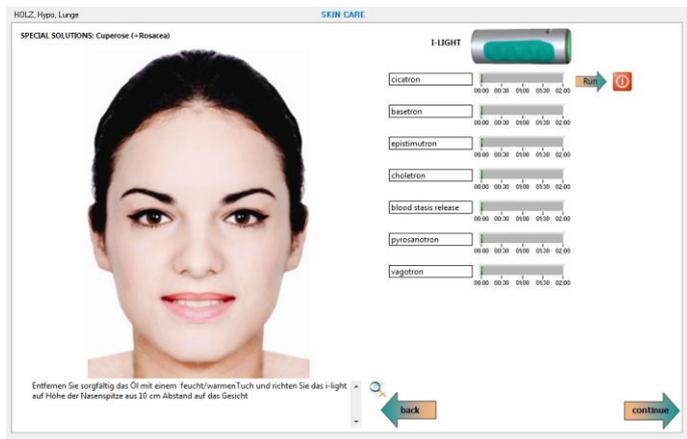


- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht
- (Ständer)
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT mit den Raymedys

## EDA-MESSUNG

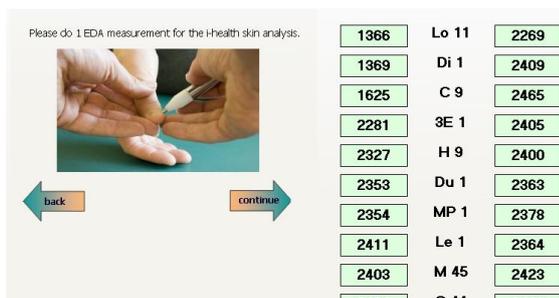

Machen Sie eine EDA Messung

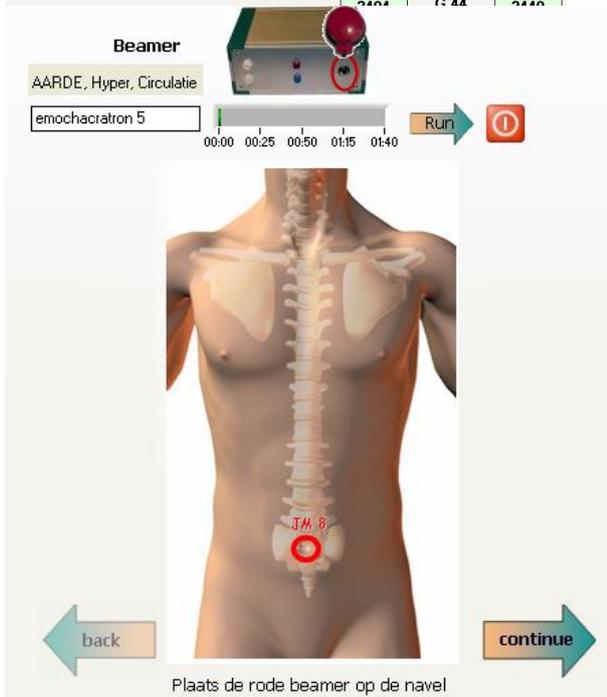

### 5.3.5 KONSOLIDIERUNG MIT DEM BEAMER

In diesem Beispiel hat das Programm, passend zum aktuellen Energieüberschuss im Erde-Element, automatisch das Raymedy Emochakratron 5 gewählt: Abführung des Energieüberschusses an das Metall.

- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"- Pfeil

Nach Klick auf den "continue"-Pfeil ist das Programm beendet:

**Protocoll is finished.**

## Besenreiser

CELLULITIS

I-VAC

Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

use second I-VAC setting

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

Oil code: AA-02

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00

Run

back continue

Beweg met beide grote cups symmetrisch en gelijktijdig vanaf de nek naar het heiligbeen, met 50% zuigkracht en 45 cycli per minuut. Leg de nadruk op de rugpunten B 19-23, B25 en B28

Sie im Programm fort.

Besenreiser: Behandlung des Rückens mit dem i-VAC:

- Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken (im Bereich des Blasenmeridians) auf.
- Aktivieren das i-VAC mit Klick auf den RUN-Pfeil
- Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian/ in Höhe des 7.Halswirbels und des Steißbeins) und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.
- Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil rechts unten fahren

HOLZ: Hypo, Lunge

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: BESENREISER

I-LIGHT

colorwhite

00:00 01:00 02:00

Run


Packung mit Aloe+Restorate  
Behandeln Sie die problematischen Zonen aus 10 cm Abstand mit dem i-LIGHT

back continue

## BESENREISER: BEHANDLUNG DER PROBLEMZONEN MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

### Besenreiser: Vorbehandlung mit dem i-LIGHT

- Klient in Bauchlage 10Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die Problemzonen auf des ersten Beines auf.
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen
- Wiederholen Sie o.g. Anweisung auch für das zweite Bein

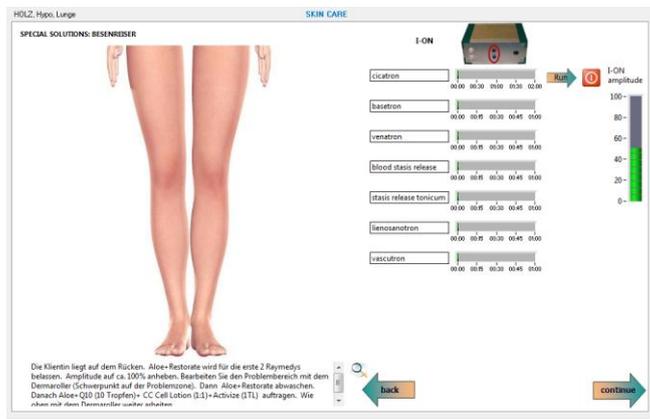


## Besenreiser:Behandlung mit I-On linkes Bein

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie ein (Wärmebildung)

## Besenreiser:Behandlung mit I-On rechtes Bein


- Wiederholen Sie die o.g. Anweisungen auch für das zweite Bein

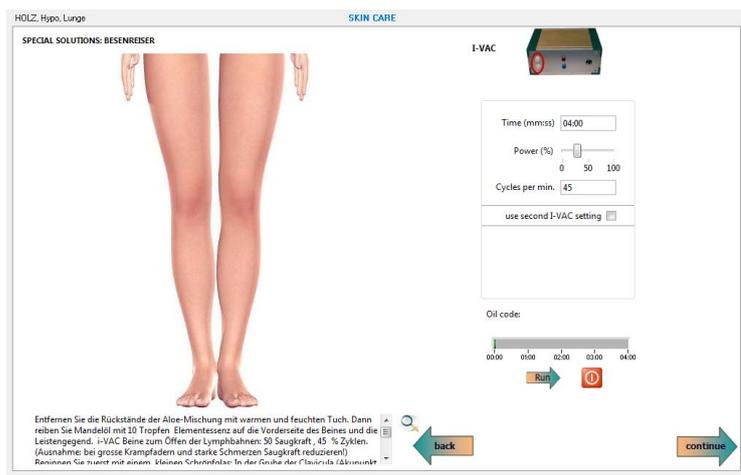

## Besenreiser:I-Vac Lymphdrainage links


- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch

- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den kleinen RUN-Pfeil.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:
  1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
  2. Zwischen dem Großzeh und 2. Zeh /Akupunkt Leber 3): 7-8x pumpen
- Wechseln Sie bitte auf das große Schröpfglas:
  3. Auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8): 7-8x pumpen
  4. Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten) um die Lympheseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian)
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Problemzonen des Beines ab (siehe Bild)
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss

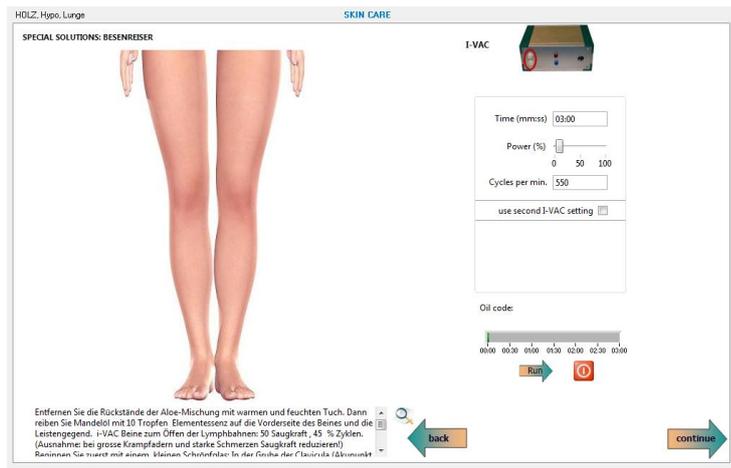


## Besenreiser: I-Vac Matrixdrainage

- passen Sie die Pumpintensität an den Schmerz an
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Problemzonen des Beines ab
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)

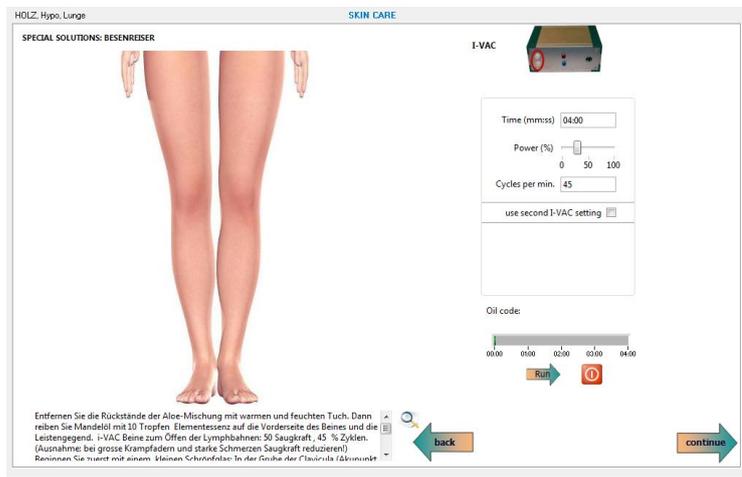

## Besenreiser: I-Vac Lymphdrainage rechts

- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch
- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den kleinen RUN-Pfeil.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:
  1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
  2. Zwischen dem Großzeh und 2. Zeh /Akupunkt Leber 3): 7-8x pumpen
- Wechseln Sie bitte auf das große Schröpfglas:
  12. Auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8): 7-8x pumpen
  13. Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten) um die Lympheseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian)
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Problemzonen des Beines ab (siehe Bild)
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss

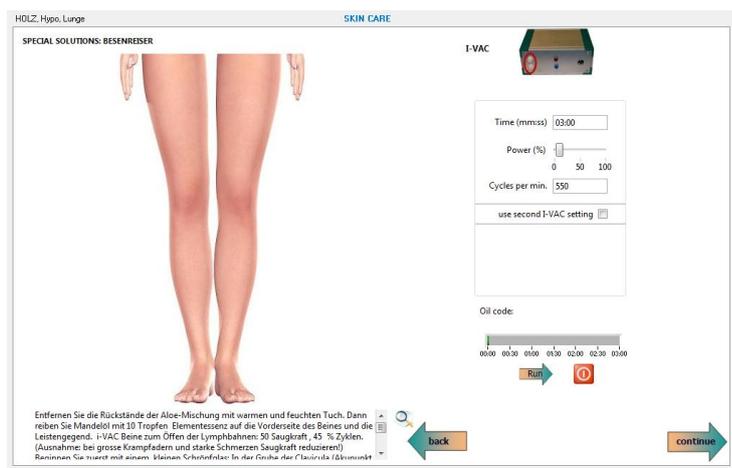

## Besenreiser: I-Vac Matrixdrainage

- passen Sie die Pumpintensität an den Schmerz an

- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Problemzonen des Beines ab
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)




### I-Light Behandlung linkes Bein

- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem I-Light (Ständer)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den "run"-Pfeil  
Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

### I-Light Behandlung rechten Bein


- Wiederholen Sie die o.g. Anweisungen für das rechte Bein

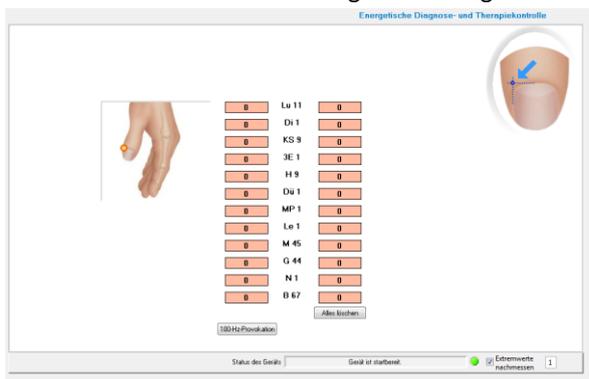

### EDA -Messung

## 5.6.4 BESENREISER: BAUCHBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

### I-VAC Bauchbehandlung

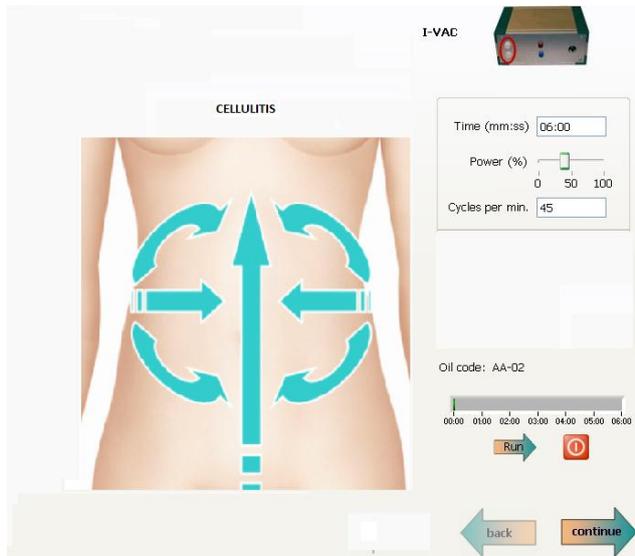

- Tragen Sie auf den Bauchbereich angewärmte Ölmischung auf.
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Passen Sie eventuell die Pumpintensität an. Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Bei HYPO- und NORMALE Energie: Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite(Taille) an und bewegen Sie diese wie angezeigt von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins, dann von der Taille zur Bauchmitte hin, dann von der Taille (linken und rechten Bauchseite) nach unten seitwärts bis zum Schambein. Zuletzt von Schambein zum Unterrand des Brustbeins
- Bei HYPER-Energie: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe von der Taille bis zur Schambein, danach von der Taille bis zur Nabel, anschließend von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt von Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein
- Folgen Sie jedenfalls mit den Schröpfköpfen der im Bild angegebenen Pfeilrichtung auf dem Konzeptionsgefäß
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen


### EDA – Messung Cellulite

Please do 1 EDA measurement for the i-Health skin analysis.

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301

- Für die abschließende Konsolidierungsphase ist eine neue EDA-Messung notwendig
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

## 5.6.5 BESENREISER: KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

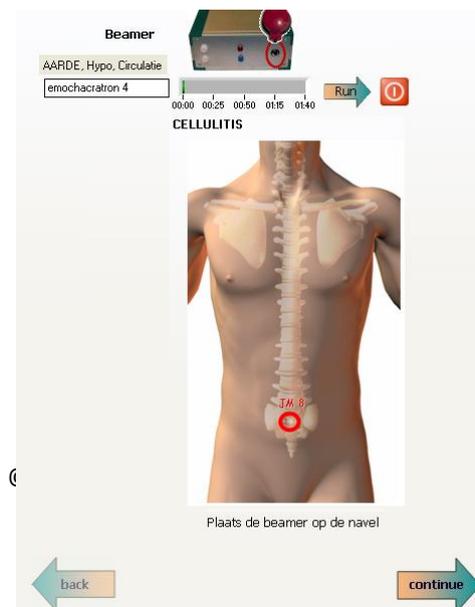

- Passend zum aktuellen Energiemangel im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Eموchakraton 4, welches Energie aus dem Feuerelement zuführt

- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den “run”-Pfeil

Nach Beendigung der Konsolidierungsphase wird mit einem Klick auf den “continue”-Pfeil das Celluliteprogramm geschlossen:

Protocoll is finished.

## 5.7.7 STRIAE/SCHWANGERSCHAFTSSTREIFEN PROGRAMM MIT I-ON, I-VAC, I-LIGHT UND KONSOLIDATION

### PROGRAMM BL/NI BEHANDLUNG DES RÜCKENS MIT DEM I-VAC


The screenshot displays the I-VAC control interface. On the left, a human back diagram is shown with 27 numbered points along the spine. On the right, the control panel includes a timer set to 10:00, two power sliders set to 50%, and two cycle rate settings set to 45. A 'Run' button is visible at the bottom of the control panel. Below the diagram, there is a small text box with instructions in Dutch: 'Beweeg met beide grote cups symmetrisch en gelijktijdig vanaf de nek naar het heiligbeen, met 50% zuigkracht en 45 cycli per minuut. Leg de nadruk op de rugpunten B 19-23, 25 en B26'. At the bottom of the interface, there are 'back' and 'continue' buttons.

Schwangerschaftsstreifen: Behandlung des Rückens mit dem i-VAC:

- Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken (im Bereich des Blasenmeridians) auf.
- Aktivieren das i-VAC mit Klick auf den RUN-Pfeil
- Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian/ in Höhe des 7.Halswirbels und des Steißbeins)) und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.
- Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil rechts unten fahren


Sie im Programm fort.

-

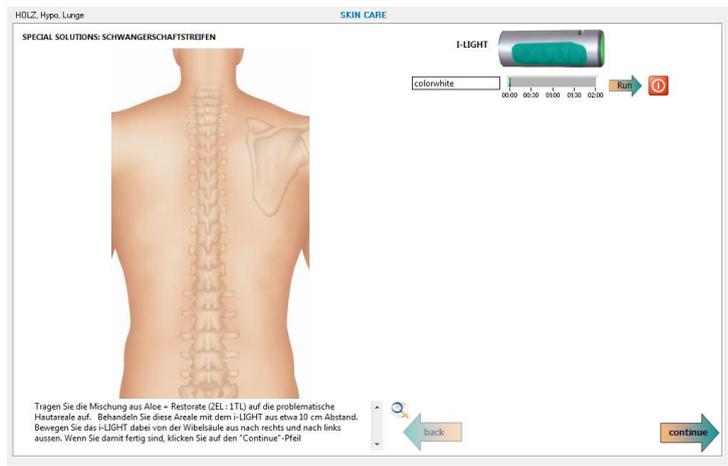

## Striae/Schwangerschaftsstreifen: Vorbehandlung mit dem i-LIGHT

- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die Problemzonen
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf den Bauch (Ständer)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

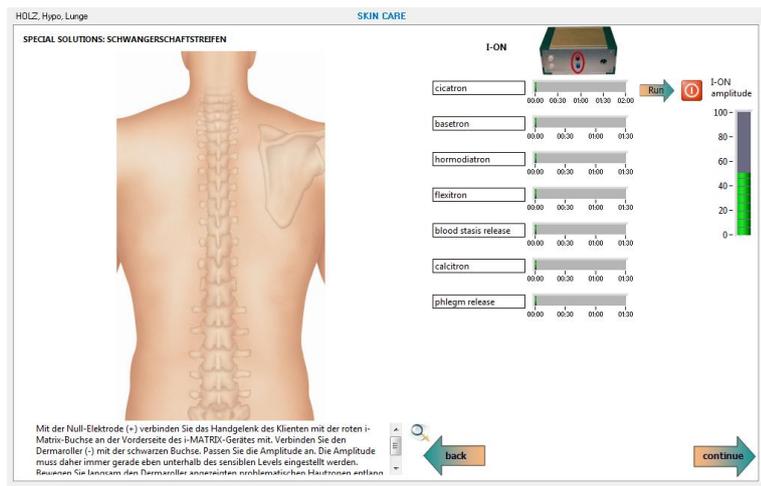

## Striae/Schwangerschaftsstreifen: Behandlung mit I-On Rücken

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys
- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch




## Striae/Schwangerschaftsstreifen: I-Vac Lymphdrainage

- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den kleinen RUN-Pfeil.
- Arbeiten Sie nun von außen nach innen die Problemzonen ab
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss




## Striae/Schwangerschaftsstreifen: I-Vac Matrixdrainage

- passen Sie die Pumpintensität an den Schmerz an
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schöpfglas zügiger und oberflächlicher von außen nach innen die Problemzonen ab
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)

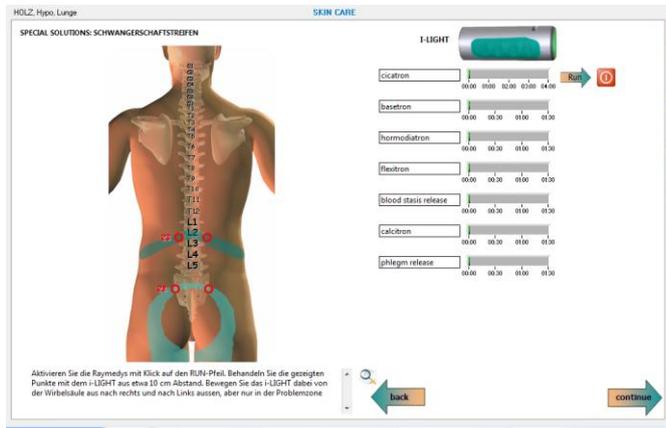

## • Striae/Schwangerschaftsstreifen:I-light

- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem I-Light (Ständer)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den “run”-Pfeil  
Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf “continue” um weiterzukommen

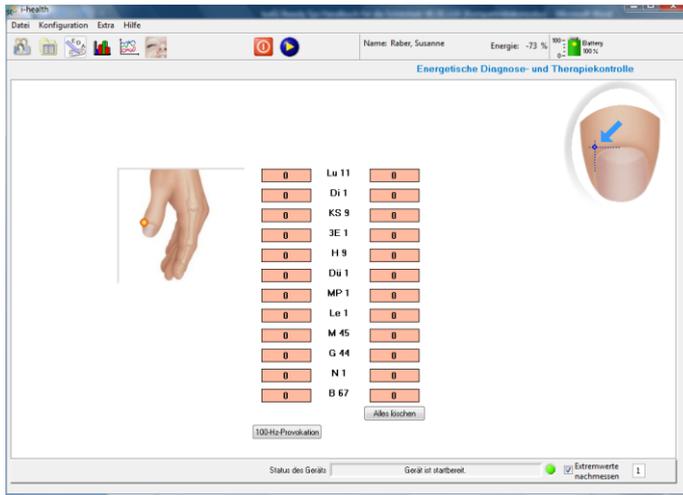


## EDA Messung




## Striae/Schwangerschaftsstreifen: Vorbehandlung mit dem i-LIGHT Bauch

- Klient in Rückenlage
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die Problemzonen
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf den Bauch (Ständer)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

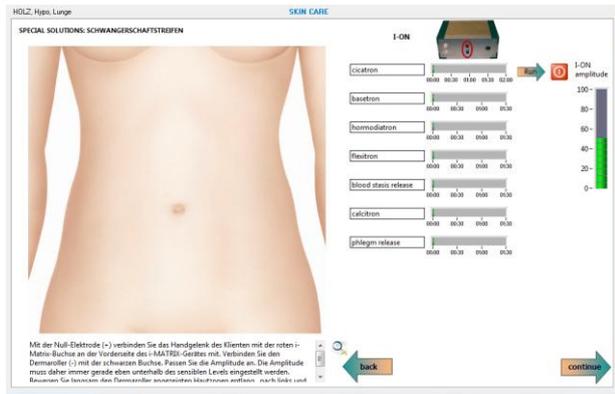

## Striae/Schwangerschaftsstreifen: Behandlung mit I-On Bauch


- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys
- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch

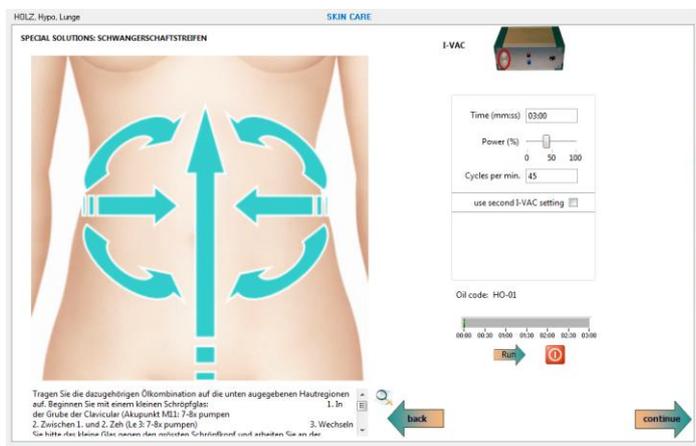

# STRIAE/SCHWANGERSCHAFTSTREIFEN: BAUCHBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC


## I-VAC Lymphdrainage

- Tragen Sie auf den Bauchbereich angewärmte Ölmischung auf.
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Passen Sie eventuell die Pumpintensität an. Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Bei HYPO- und NORMALE Energie: Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite(Taille) an und bewegen Sie diese wie angezeigt von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins, dann von der Taille zur Bauchmitte hin, dann von der Taille (linken und rechten Bauchseite) nach unten seitwärts bis zum Schambein. Zuletzt von Schambein zum Unterrand des Brustbeins
- Bei HYPER-Energie: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe von der Taille bis zur Schambein, danach von der Taille bis zur Nabel, anschließend von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt von Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein
- Folgen Sie jedenfalls mit den Schröpfköpfen der im Bild angegebenen Pfeilrichtung auf dem Konzeptionsgefäß
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

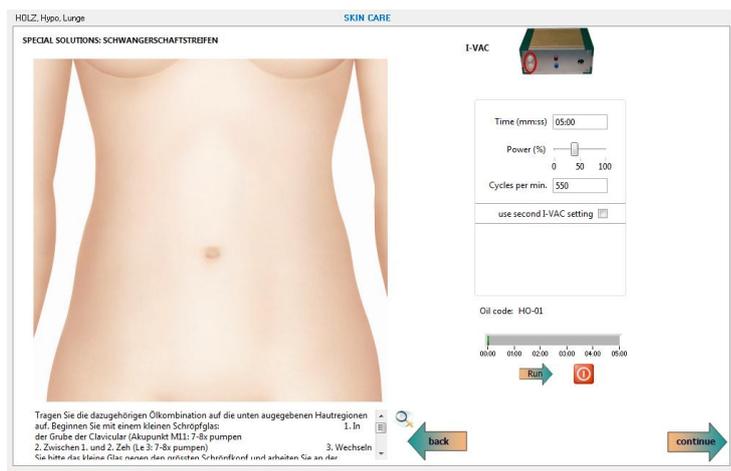


## Striae/Schwangerschaftsstreifen:I-Vac Matrixdrainage

- passen Sie die Pumpintensität an den Schmerz an
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Problemzonen des Bauches ab
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)

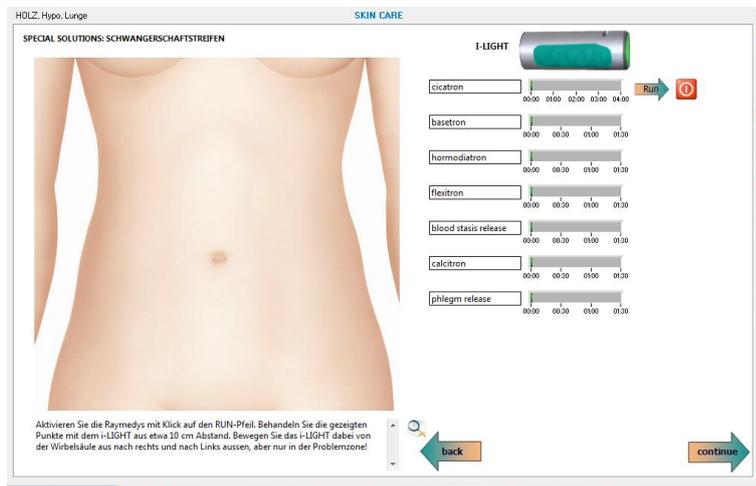


## • Striae/Schwangerschaftsstreifen:i-light

- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem I-Light (Ständer)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den “run”-Pfeil  
Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf “continue” um weiterzukommen

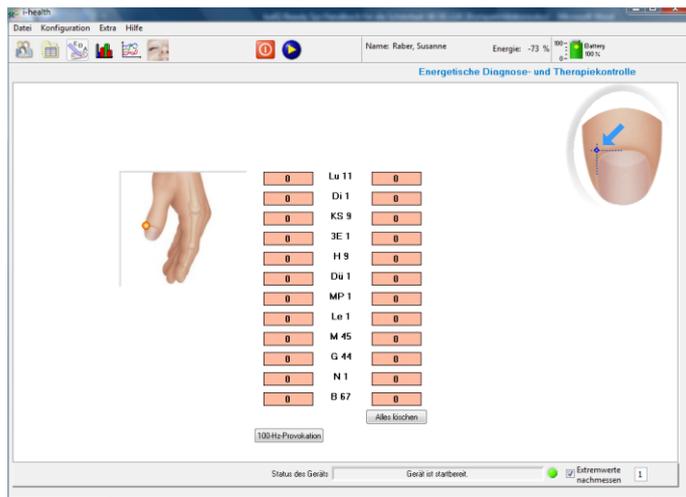

## EDA Messung

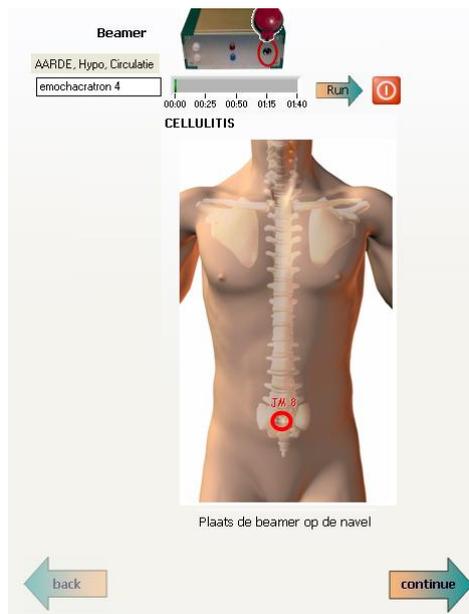


- Passend zum aktuellen Energiemangel im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Enochakraton 4, welches Energie aus dem Feuelement zuführt
- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil

Nach Beendigung der Konsolidierungsphase wird mit einem Klick auf den "continue"-Pfeil das Celluliteprogramm geschlossen:

Procoll is finished.

### 5.7.8 CELLULITE ARM-SCHULTER PROGRAMM MIT I-ON, I-VAC, I-LIGHT UND KONSOLIDATION


Dieses Programm bezieht sich auf Verschlackungen im Bereich des Nackens, der Schulter und der Arme. Bearbeiten sie mit Schwerpunkt die Problemzonen.

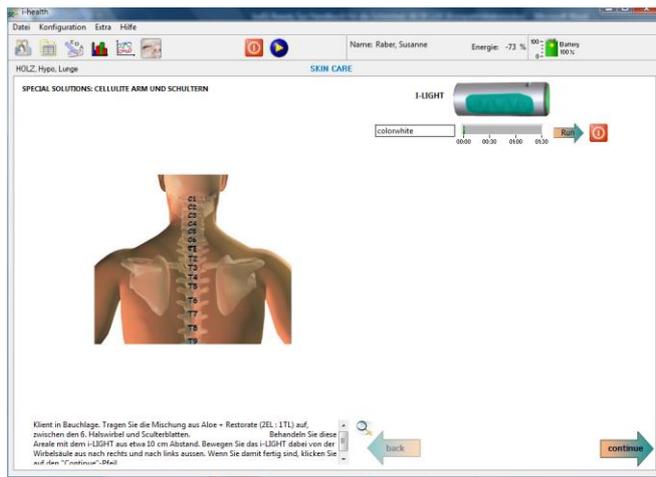

### Cellulite Arm-Schulter: Vorbehandlung mit dem i-LIGHT


- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung (2KL:1KL) auf die Problemzonen
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf den Bauch (Ständer)

- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den “continue”-Pfeil um weiterzukommen

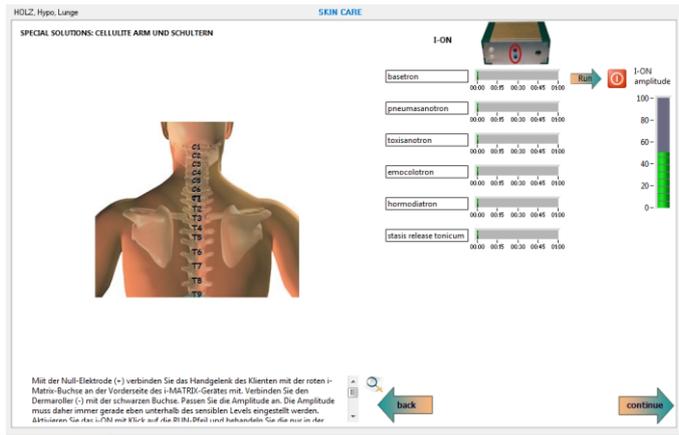


## Cellulite Arm\_Schulter:Behandlung mit I-On Rücken

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den “run”-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedy Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys
- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch

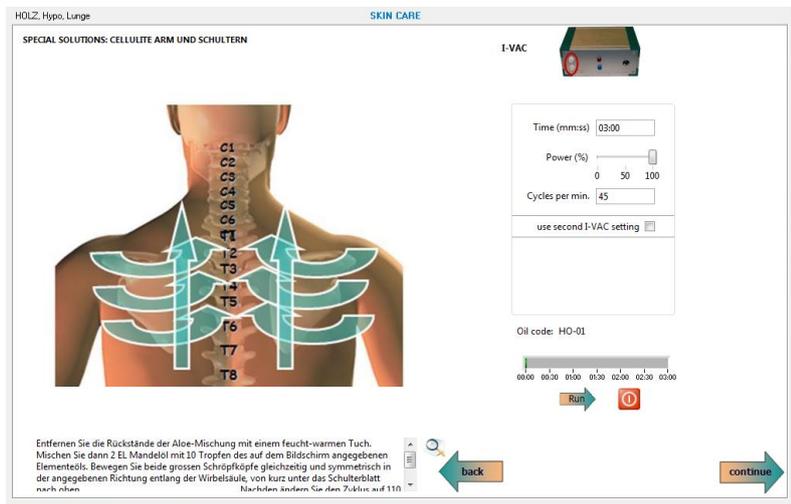


## Cellulite Arm-Schulter: I-Vac Lymphdrainage

- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf
- Bewegen Sie die beiden großen Schröpfköpfe in angegebener Richtung auf dem Blasenmeridian
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den kleinen RUN-Pfeil.
- Arbeiten Sie danach von außen nach innen die Problemzonen ab

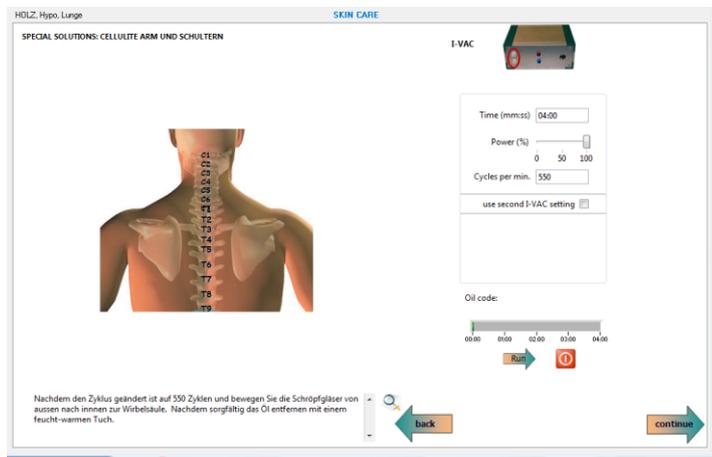


## Cellulite Arm-Schulter:I-Vac Matrixdrainage

- passen Sie die Pumpintensität an den Schmerz an
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von außen nach innen die Problemzonen ab
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)

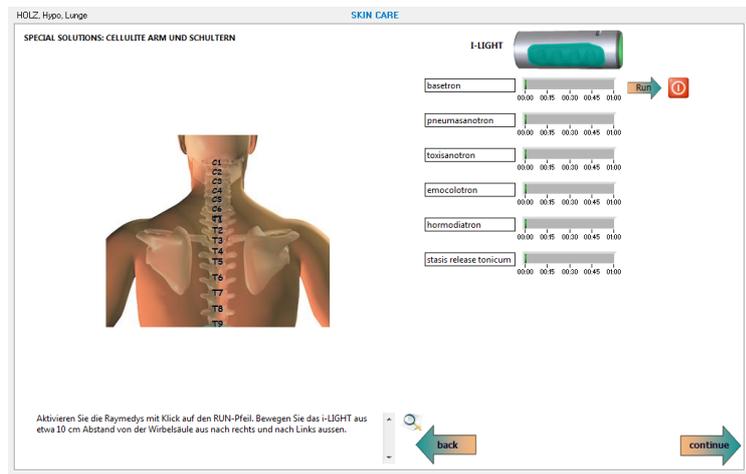


## Cellulite:Arm-Schulter:I-light

- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem I-Light (Ständer)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den "run"-Pfeil  
Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

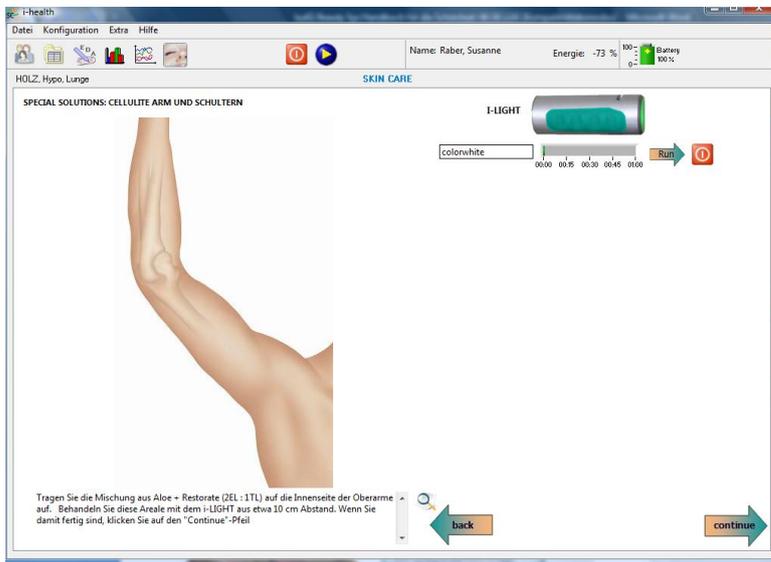


## Cellulite Arm-Schulter: Vorbehandlung mit dem i-LIGHT Arm

- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung (2Kl:1KL) auf die Problemzonen
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf den Bauch (Ständer)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

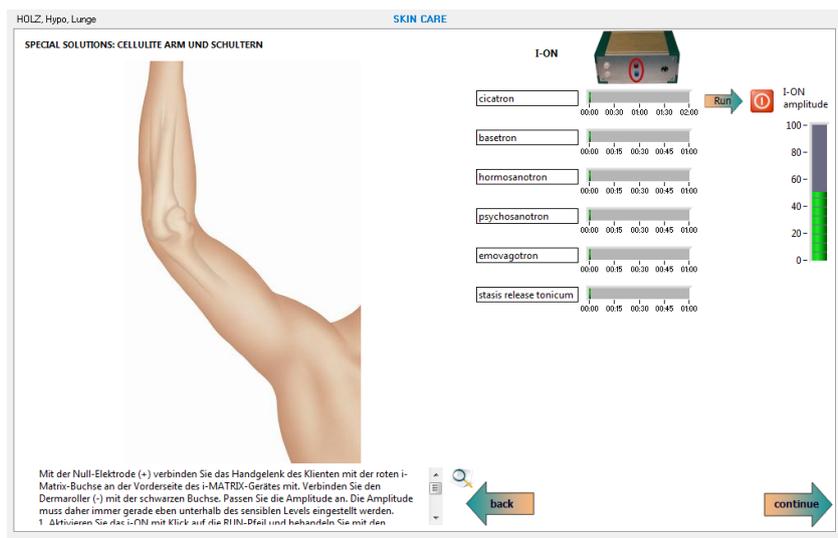


## Cellulite Arm\_Schulter:Behandlung mit I-On Arm

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys

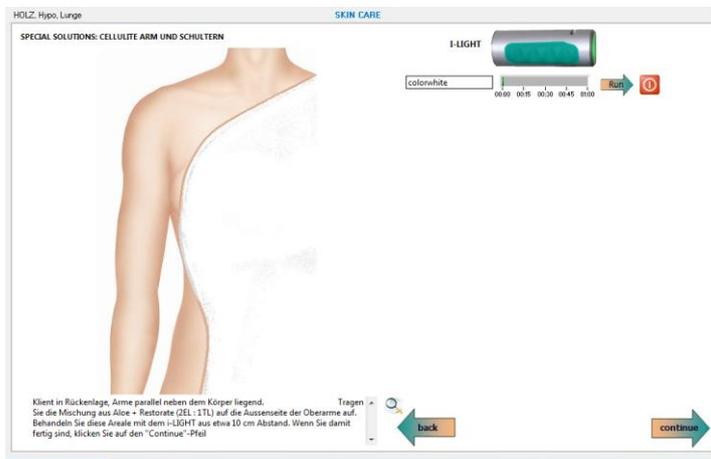

## Cellulite Arm-Schulter: Vorbehandlung mit dem i-LIGHT Arm

- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung (2KI:1KL) auf die Problemzonen
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf den Bauch (Ständer)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

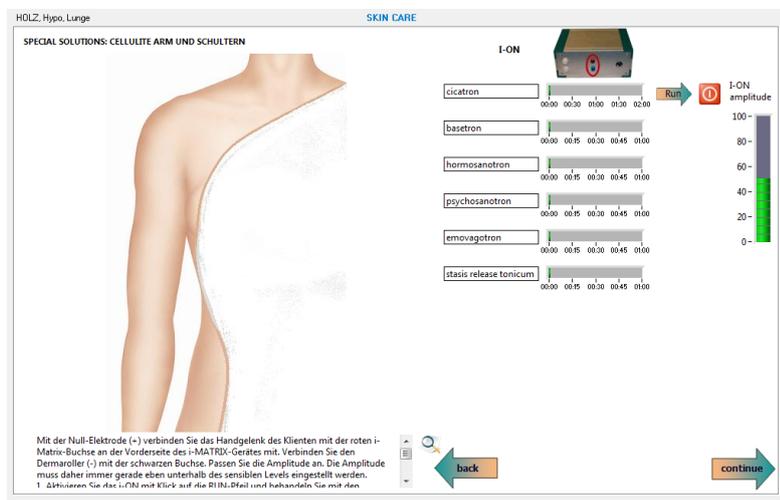

## Cellulite Arm\_Schulter:Behandlung mit I-On Arm


- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys
- Um eine bessere Tiefenwirkung zu erreichen wickeln Sie den Arm in Folie ein

**Danach wiederholen Sie bitte die Behandlungsschritte am zweiten Arm**




## Cellulite Arm-Schulter: I-Vac Lymphdrainage

- Entfernen Sie nun sorgfältig die Aloe Mischung
- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf
- 1. Mit dem großen Schröpfglas 7-8x in der Achselhöhle pumpen
  2. Mit dem kleinsten Schröpfglas in der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
- 3. Wechseln Sie nun auf das mittlere Glas. Arbeiten Sie nun von unten nach oben zum Rumpf hin
- 4. Abschließend mit dem großen Schröpfglas 7.8x in der Achselhöhle pumpen

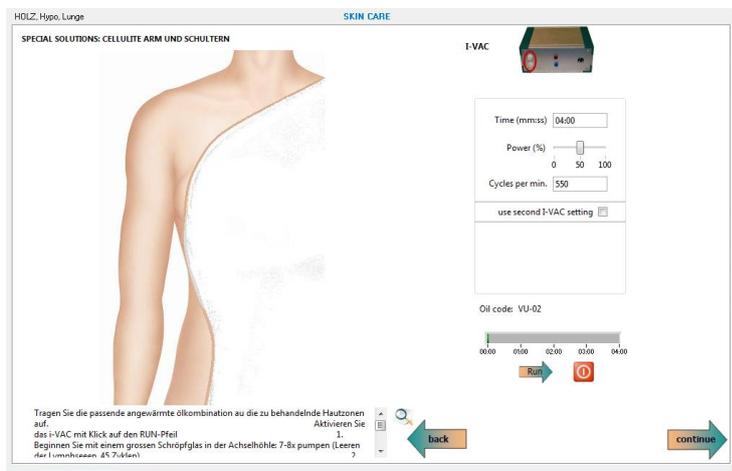


## Cellulite Arm-Schulter:I-Vac Matrixdrainage

- passen Sie die Pumpintensität an den Schmerz an
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Problemzonen ab
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)
- **Danach wiederholen Sie bitte die Behandlungsschritte I-Vac am zweiten Arm**

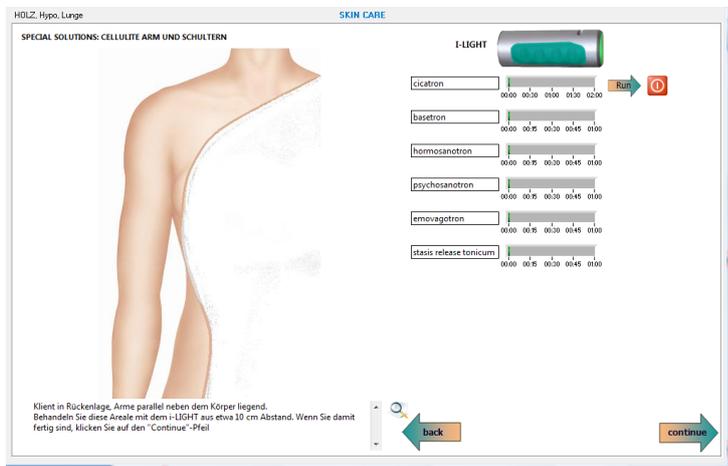


## • Cellulite:Arm-Schulter:I-light

- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem I-Light (Ständer)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den "run"-Pfeil  
Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

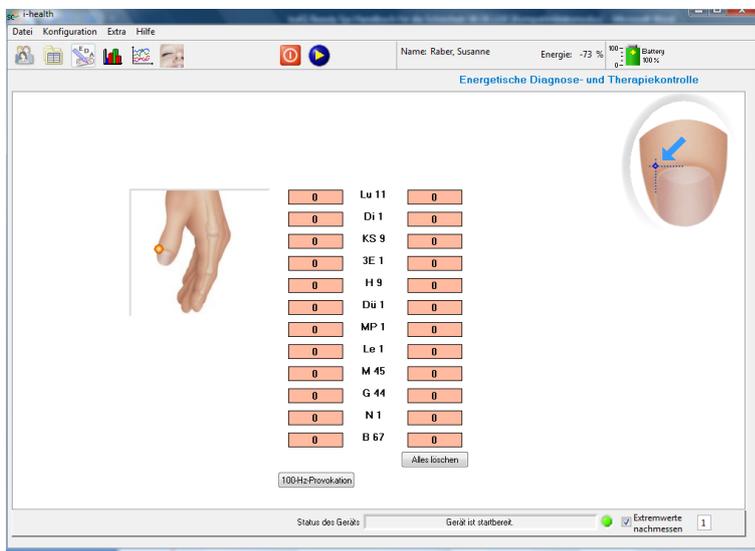


## EDA Messung

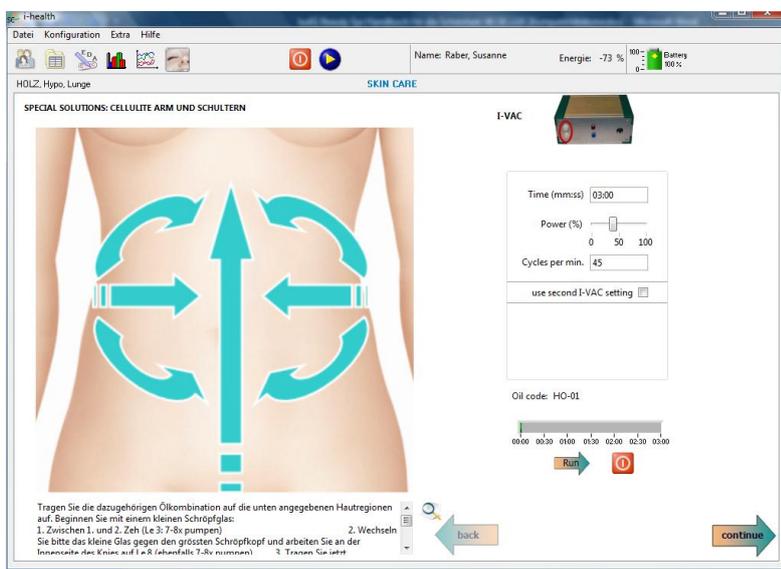

# STRIAE/SCHWANGERSCHAFTSSTREIFEN: BAUCHBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

## I-VAC Lymphdrainage

- Tragen Sie auf den Bauchbereich angewärmte Ölmischung auf.
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Passen Sie eventuell die Pumpintensität an. Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Bei HYPO- und NORMALE Energie: Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite(Taille) an und bewegen Sie diese wie angezeigt von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins, dann von der Taille zur Bauchmitte hin, dann von der Taille (linken und rechten Bauchseite) nach unten seitwärts bis zum Schambein. Zuletzt von Schambein zum Unterrand des Brustbeins
- Bei HYPER-Energie: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe von der Taille bis zur Schambein, danach von der Taille bis zur Nabel, anschließend von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt von Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein
- Folgen Sie jedenfalls mit den Schröpfköpfen der im Bild angegebenen Pfeilrichtung auf dem Konzeptionsgefäß
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

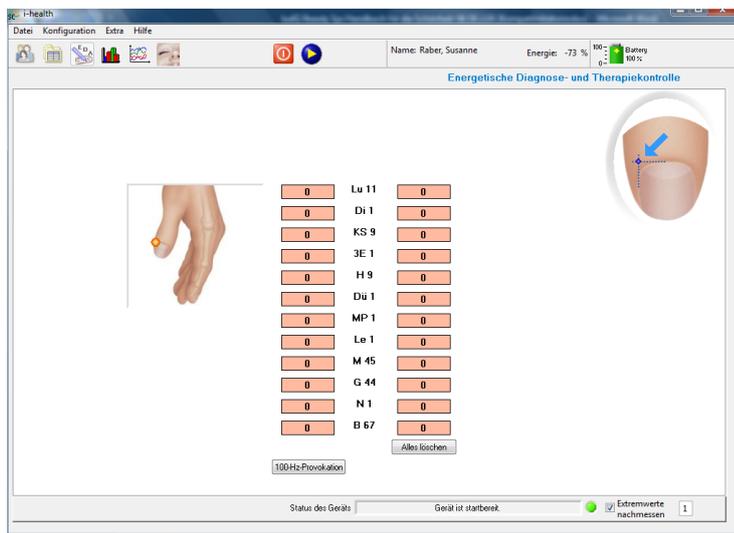


## CELLULITE ARM-SCHULTER: KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

- In Anbetracht des aktuellen Energiemangels im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Enochakraton 4, welches Energie aus dem Feuelement zuführt
- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil

Nach Beendigung der Konsolidierungsphase wird mit einem Klick auf den "continue"-Pfeil das Celluliteprogramm geschlossen:


Protocoll is finished.

## 5.7.8 CELLULITE ARM PROGRAMM MIT I-ON, I-VAC, I-LIGHT UND KONSOLIDATION

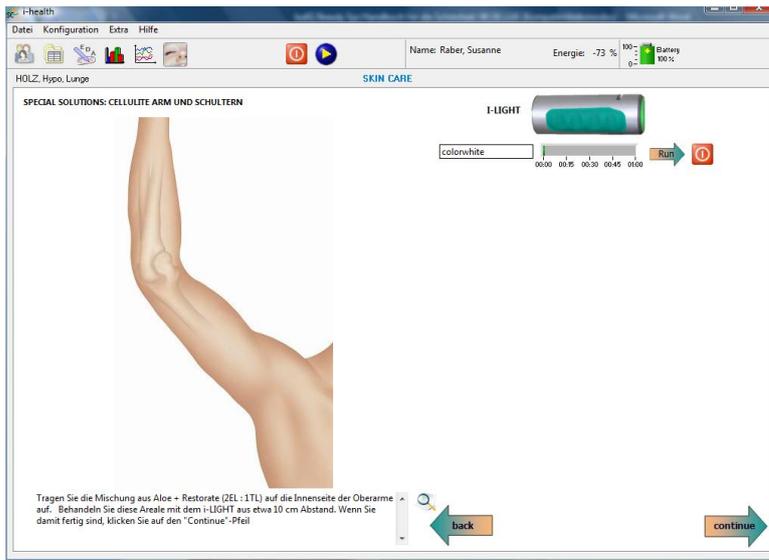


### Cellulite Arm: Vorbehandlung mit dem i-LIGHT Arm

- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung (2KL:1KL) auf die Problemzonen
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf den Bauch (Ständer)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

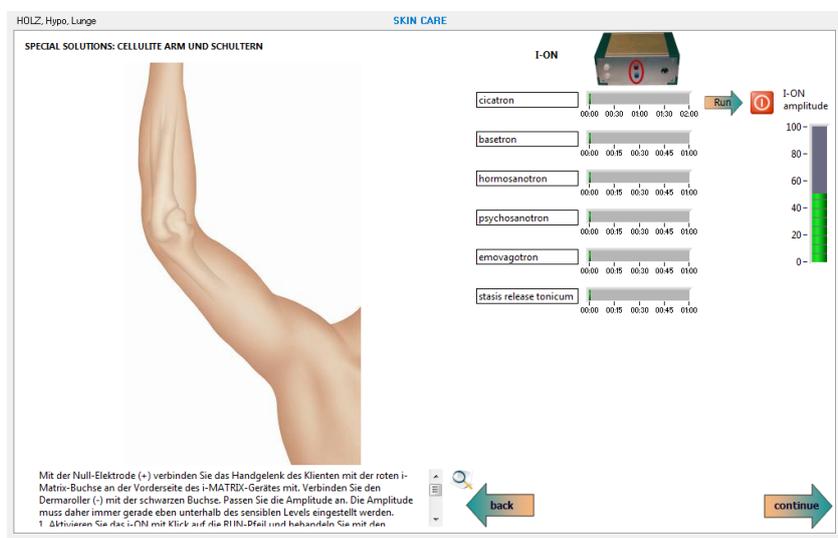


### Cellulite Arm: Behandlung mit I-On Arm

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys

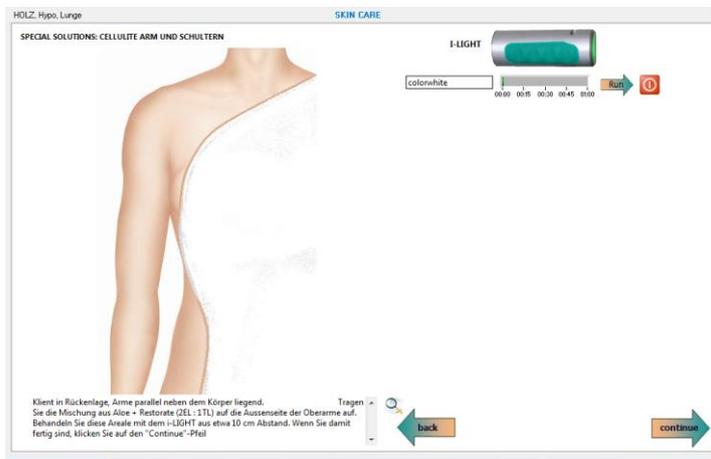

## Cellulite Arm: Vorbehandlung mit dem i-LIGHT Arm

- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung (2KI:1KL) auf die Problemzonen
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf den Bauch (Ständer)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

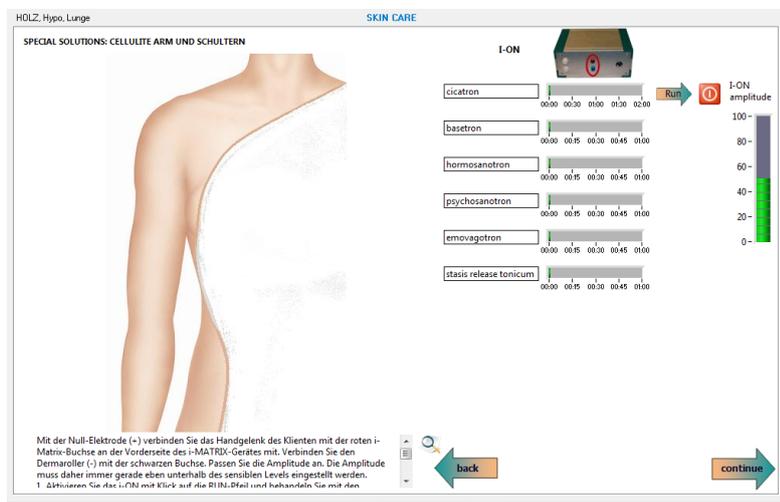

## Cellulite Arm: Behandlung mit I-On Arm

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys
- Um eine bessere Tiefenwirkung zu erreichen wickeln Sie den Arm in Folie ein

**Danach wiederholen Sie bitte die Behandlungsschritte am zweiten Arm**




## Cellulite Arm-Schulter: I-Vac Lymphdrainage

- Entfernen Sie nun sorgfältig die Aloe Mischung
- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf
- 1. Mit dem großen Schröpfglas 7-8x in der Achselhöhle pumpen
  2. Mit dem kleinsten Schröpfglas in der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
- 3. Wechseln Sie nun auf das mittlere Glas. Arbeiten Sie nun von unten nach oben zum Rumpf hin
- 4. Abschließend mit dem großen Schröpfglas 7.8x in der Achselhöhle pumpen




## Cellulite Arm-Schulter:I-Vac Matrixdrainage

- passen Sie die Pumpintensität an den Schmerz an
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Problemzonen ab
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)
- **Danach wiederholen Sie bitte die Behandlungsschritte I-Vac am zweiten Arm**

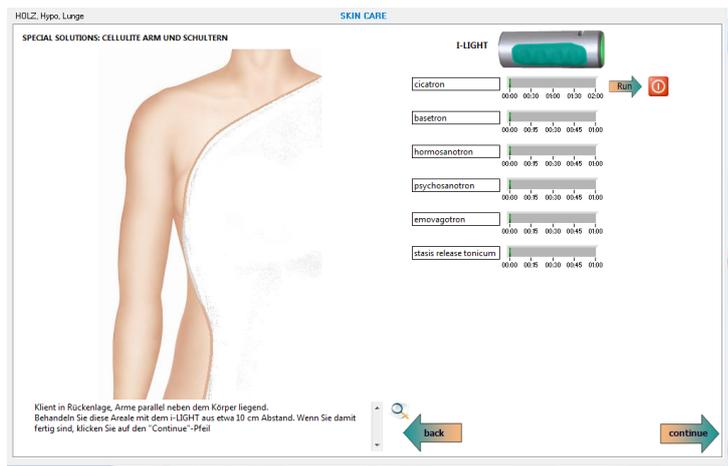


## • Cellulite:Arm-Schulter:i-light

- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem I-Light (Ständer)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den "run"-Pfeil  
Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

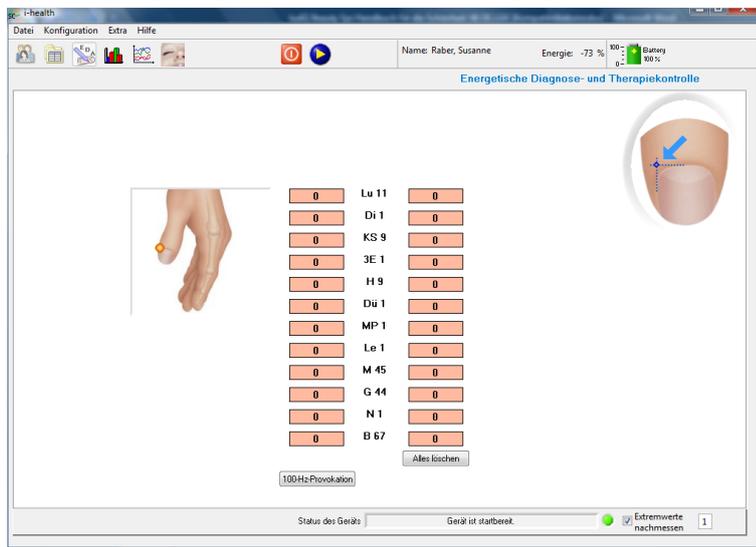


## EDA Messung

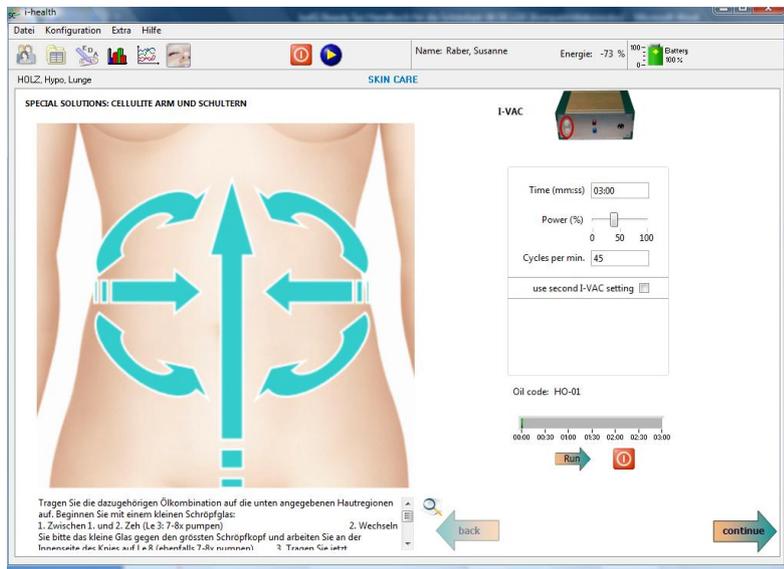

## BAUCHBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

### I-VAC Lymphdrainage

- Tragen Sie auf den Bauchbereich angewärmte Ölmischung auf.
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Passen Sie eventuell die Pumpintensität an. Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Bei HYPO- und NORMALE Energie: Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite(Taille) an und bewegen Sie diese wie angezeigt von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins, dann von der Taille zur Bauchmitte hin, dann von der Taille (linken und rechten Bauchseite) nach unten seitwärts bis zum Schambein. Zuletzt von Schambein zum Unterrand des Brustbeins
- Bei HYPER-Energie: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe von der Taille bis zur Schambein, danach von der Taille bis zur Nabel, anschließend von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt von Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein
- Folgen Sie jedenfalls mit den Schröpfköpfen der im Bild angegebenen Pfeilrichtung auf dem Konzeptionsgefäß
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

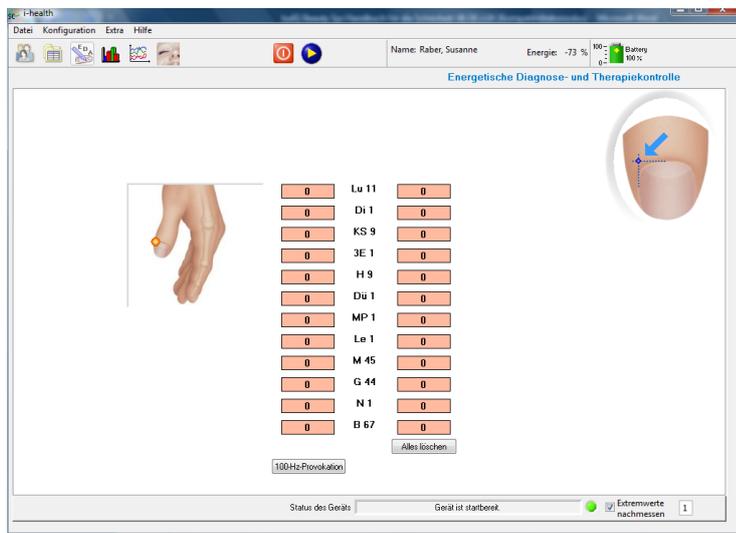

## CELLULITE ARM: KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER



- assend zum aktuellen Energiemangel im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Enochakraton 4, welches Energie aus dem Feuerelement zuführt
- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil

Nach Beendigung der Konsolidierungsphase wird mit einem Klick auf den "continue"-Pfeil das Celluliteprogramm geschlossen:

Protocoll is finished.

## 5.7.9 SPEZIFISCHE I-VAC LYMPHEDRAINAGEPUNKTBILDER


### Leber 3 Quell/Erdepunkt

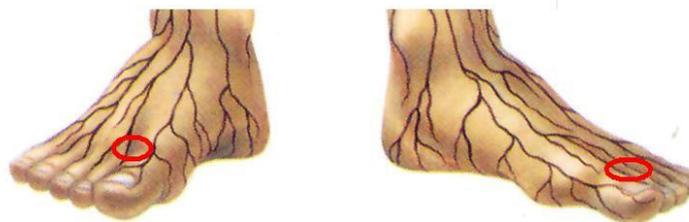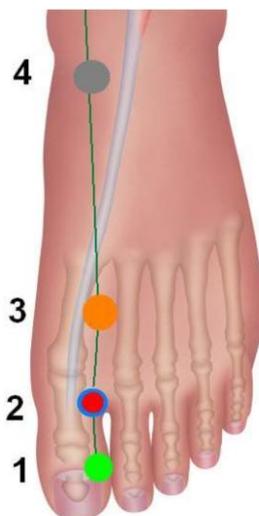

*Lage: Zwischen dem Mittelfusssknochen der 1. und 2. Zehe in einer Vertiefung*

*Indikationen: Schwellungen, Blähungen, Krampfen und Spannungen, wirkt kühlend und absenkend*


## Leber 8 Wasserpunkt, Tonisierungspunkt

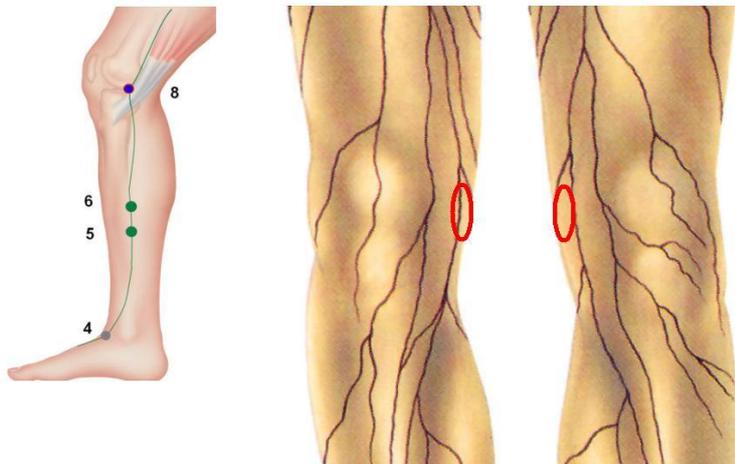

*Lage: Innenseite bei gebeugtem Knie  
am Ende der medialen Hautfalte*

*Indikationen: Schwellungen, wirkt  
zerstreuend, kühlend, und hautsauerend*

## M11: "Haus des Qi", Entknüpfungspunkt

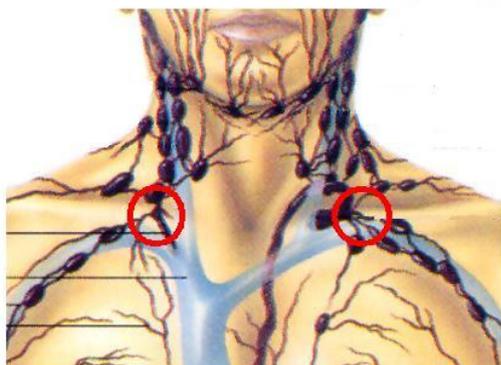

*Lage: am oberen Rand der Klavikula, zwischen der  
beiden Köpfen des m. sternocleidomastoideus*

*Indikationen: Kopf-Nacken-Schulterverspannungen  
und- Schwellungen, wirkt Energie entfaltend,  
austreibend und zerstreuend*