





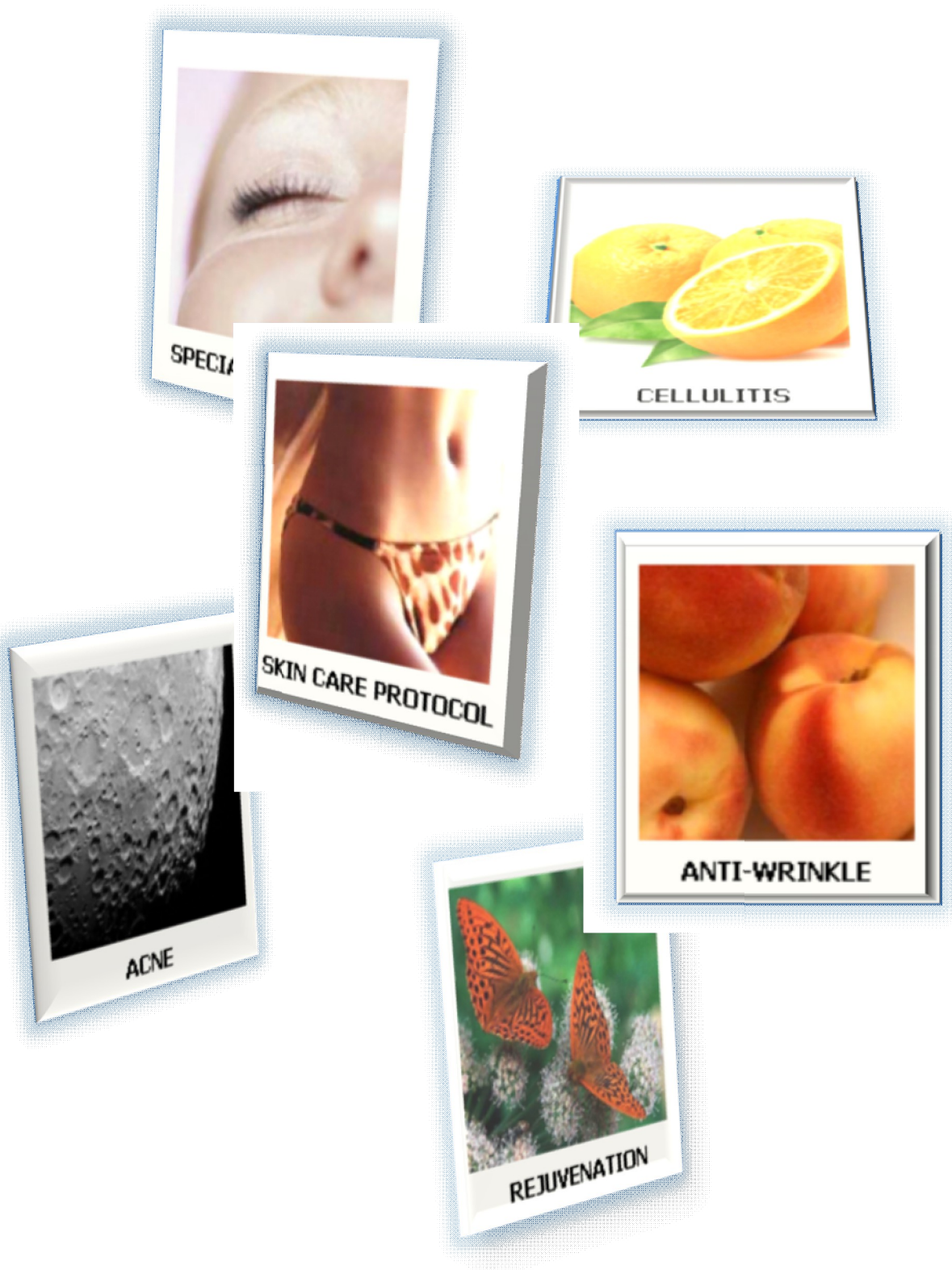

**Die Anwendung der elektromagnetischen Stimulation ist
kontraindiziert, wenn:**

- **Der Patient einen Herzschrittmacher trägt,**
- **Der Patient einen implantierten Defibrillator (I.C.D) trägt,**
- **Der Patient schwanger ist.**
- **Der Patient ein erhöhtes Thromboserisiko hat,**
- **Der Patient ein implantiertes Hörgerät hat.**
- **Bei i-LIGHT Anwendung:**
 - **Der Patient hatte in der Vergangenheit epileptische Anfälle**
 - **Unbedingt zu vermeiden ist die direkte Bestrahlung der offenen Augen**

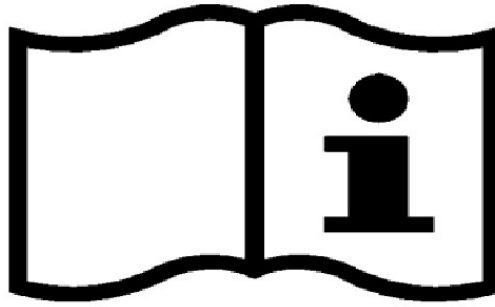

Das i-Health® System darf nur nach angemessener Schulung angewandt werden.

Besuchen Sie die entsprechenden Seminare aus unserem Trainingsprogramm, welches Sie bei Ihrem i-Health-Repräsentant beziehen können.

Beachten Sie bei der Nutzung des Gerätes die im Handbuch genannten Warnungen und Kontraindikationen

Wenden Sie sich mit ihren Fragen zum Produkte an die i-Health Vertriebs GmbH in Würzburg.

Standardisierte Diagnoseverfahren und Protokolle, die von einem Professionellen Therapeuten verordnet wurden, sind während der Anwendung des Gerätes zu berücksichtigen.

1 INTERAKTIVE UND INTEGRIERTE BEHANDLUNGSPROGRAMME	4
1.2 MERIDIANE UND ORGANE	5
1. IQ BEAUTY SYS: ZUSAMMENFASSUNG VON BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN	7
2.1 COMPUTERBERECHNETE KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN	7
2.2 BEHANDLUNG MIT i-LIGHT UND i-MATRIX	7
3. AUSWAHL DES PASSENDEN PROGRAMMS	11
3.1 WANN WENDE ICH WELCHES PROGRAMM AN ?	11
3.2 KONTRAINDIKATIONEN	13
4. BEHANDLUNGSSEGMENTE/ZU BEHANDELNDE BEREICHE IM DETAIL	14
4.1 BEHANDLUNG DES BINDEGEWEBES	14
4.2 LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE	15
4.3 REVITALISIERUNG/REGENERATION	16
4.4. LOKALISATION DER GESICHTSZONEN	16
4.5 ELIMINATION ÜBER ABDOMEN UND THORAX	19
4.6. KONSOLIDIERUNG	19
4.7 START DES ENERGY SKIN CARE PROGRAMMS	19
5.1. REGENERATIONSPROGRAMM 1	22
5.2 REGENERATIONSPROGRAMM 2 – GESICHTSREVITALISIERUNG	26
5.3 REJUVENATION PROGRAMM	32
5.4 ANTI-FALTEN-PROGRAMM	37
5.5 ACNE PROTOCOL	44
5.6 CELLULITE-PROGRAMM	48
5.7 SPEZIELLE LÖSUNGEN	54

IQ BEAUTY SYS: Hautregeneration auf Basis der EDA (Electro Dermal Assessment)

1 INTERAKTIVE UND INTEGRIERTE BEHANDLUNGSPROGRAMME

Die i-health-Software für die elektronische Hautwiderstandsmessung wurde kombiniert mit den Geräten für die Anwendung von moduliertem galvanischem Strom, der rhythmischen Vakuummassage, der Stimulation mit Farbsequenzen und der elektromagnetische Regulation von Dermatomen, Reflexzonen und Akupunkturpunkten.


Alle Schritte des Programms wurden automatisiert; die Anweisungen des Programms sind dabei das direkte Ergebnis der letzten Messungen. Der Vergleich der Hautwiderstandsgrafiken vor, während und nach der kosmetischen Behandlung zeigt die genaue Reaktion des Klienten auf die Behandlung. Diese Herangehensweise gewährleistet eine wirksame und den aktuellen Erfordernissen entsprechende Behandlung.

1.2 MERIDIANE UND ORGANE

Der menschliche Körper ist ein offenes System in Bezug auf den Austausch von Energie und Information. Laut TCM sind Meridiane Kommunikationskanäle für Energie und Information. Sie sind wahrscheinlich das am längsten bekannte Regulationssystem innerhalb des Organismus. Seine Entwicklung beginnt im Embryonalstadium mit der Bildung der Blastomeren. Meridiane sind Proteinketten mit extrem hoher Leitfähigkeit, die den Bindegewebestrukturen folgen. Der elektrische Widerstand dieser Proteinketten liefert Information über den Zustand der Organe, die Funktion und Regulationsprozesse, die in Bezug zu diesen Meridianen stehen. Der Strom, der für die i-health-Messung verwendet wird, ist so minimal, dass er keine nennenswerte Wirkung auf Organe und Meridiane hat.

MERIDIAN	ORGAN	BEISPIELE FÜR DIE ZUSAMMENHÄNGE MERIDIAN-ORGAN-FUNKTION
Lunge	Lunge	Immunsystem, Haut, Gasaustausch
Dickdarm	Dickdarm	Lymphatisches System, Entgiftung
Magen	Magen	pH-Regulation
Milz/Pankreas	Milz, Pankreas, Blut	N. vagus, Kohlehydratstoffwechsel und Pankreas
Herz	Herz und Blutkreislauf	Emotionale Einflüsse, cardiale Blutversorgung
Dünndarm	Dünndarm	Enzymatische Verdauung
Blase	Blase	Urogenitalsystem, Nebenhöhlen, Augen, Wirbelsäule
Niere	Niere	Elimination von wasserlöslichen Substanzen, Flüssigkeitshaushalt
Kreislauf	Kreislauf und Epiphyse	Blutdruck, nervale Versorgung des arteriellen Systems, Kreislauf
Dreifach-Erwärmer	Hypophyse	Endokrines System

Leber	Leber	Proteinmetabolismen
Gallenblase	Gallenblase	Cholesterol- und Fettmetabolismen

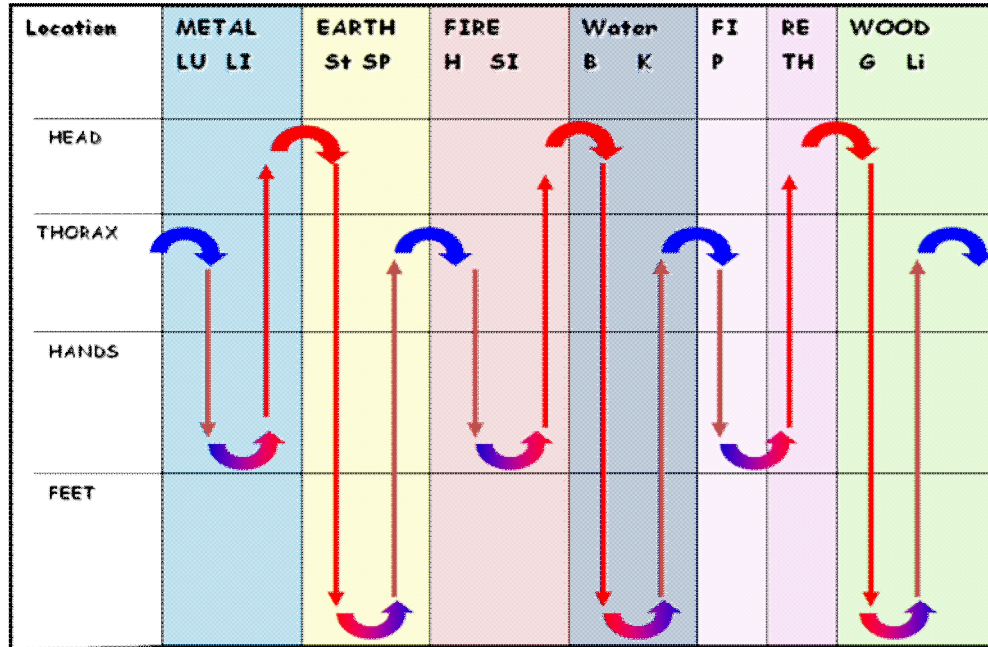

Topographie von Energie und Polarität im Meridiansystem der klassischen TCM. Der Kopf ist vollständig der Yang-Energie zugeordnet, die Brust zu 100% der Yin-Energie, während in Händen und Füßen die Polarität wechselt.

2.1 COMPUTERBERECHNETE KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN

-Bewertung von vegetativem Stress und Übersäuerung mittels EDA, vorgenommen an den distalen Meridianpunkten an Händen und Füßen, wie sie in der TCM beschrieben sind.

-Verbesserung von vegetativer Stressregulation und Widerstandsfähigkeit, Optimierung von Blut- und Lymphkreislauf, Entgiftung, Entsäuerung und Hautregeneration mittels Elektromagnetismus, moduliertem galvanischem Strom, Vakuummassage und Farbsequenzen.

Das IQ BEAUTY SYS ist denkbar vielseitig und flexibel. Es und bietet ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten.

2.2 BEHANDLUNG MIT I-LIGHT UND I-MATRIX

2.2.1 DIE HARDWARE.

Speziell für das IQ BEAUTY SYS entwickelt wurden das i-LIGHT (eine sehr starker LED-Farb-Beamer) und das i-MATRIX, ein kompaktes Gerät mit eingebauter Vakuumpumpe (i-VAC), einem galvanischen Modulator (i-ON) und einem Magnetfeldgenerator. Das i-VAC bietet digital gesteuertes rhythmisches Vakuumschröpfen der Haut und den damit verbundenen Bindegewebe- und Lymphstrukturen. Der modulierte galvanische Strom aus dem i-ON wird mit einem Dermaroller und Stabelektroden auf die Dermatome appliziert. Die Magnetfeldfrequenzen werden mit einem roten Beamer auf den Körper appliziert.

Die i-LIGHT-Batterie kann mit einem 5-Volt-Batterieladegerät aus dem Netz geladen werden. Wenn das Haut-Programm einmal gestartet und die beiden Geräte mit dem Laptop verbunden wurden, wird das passende Raymedy über die USB-Antenne auf das i-LIGHT heruntergeladen.

Das i-MATRIX-Gerät erhält seine Power ebenfalls aus dem Netz. Der modulierte galvanische Strom und die Magnetfeldsignale werden automatisch über die USB-Antenne an der Rückseite des Gerätes heruntergeladen.

2.2.2.DIE SOFTWARE.

Die eigentliche Auswahl, der Befehl und die Dauer der Behandlungssignale ("Raymedys"), die während der kosmetischen Anwendung verwendet werden, werden automatisch (als Ergebnis einer EDA-Messung) angezeigt. Folgen Sie nur den Anweisungen auf dem Computerbildschirm. Die Raymedys sind verfügbar als Farbsequenzen, als modulierte galvanische Signale und als Magnetfeldsignale. Die Farbsequenzen werden mit dem i-LIGHT, die modulierten galvanischen Signale mit dem i-ON und die magnetischen Feldsignale mit dem Beamer appliziert.

Das IQ BEAUTY SYS beinhaltet angesichts der verschiedenen individuellen kosmetischen Probleme mehrere Programme.

Beispiel: Die Energy-Beauty-Care-Gesichtsrevitalisierung. Oft bringt schon die erste Behandlung mit diesem Protokoll sichtbare Ergebnisse. Darüber hinaus sind spezielle Programme verfügbar für die Behandlung von Cellulite, Falten, Verjüngung von Gesicht, Hals und Dekolleté, außerdem spezielle Lösungen für die Hautfestigung an Brust, Armen, Beinen und Gesäß, Narben, Streifen, Male, (De-) Pigmentierungen, Couperose, Akne, Ekzem, Psoriasis und Rosacea.

2.2.3 AUFBAU DES PROGRAMMS

Alle Programme sind ähnlich aufgebaut in Technologie und Durchführung wie die beiden Basis-Regenerationsprogramme, aber mit besonderem Augenmerk auf spezielle Problemzonen. In ca. 60-bis 90-minütigen Sitzungen werden Gesicht, Wirbelsäule, Bauch, Brust und Beine in 4 aufeinander folgenden Schritten auf angenehme, gründliche und effektive Art behandelt:

1. Matrixregulation
2. Revitalisierung/Regeneration
3. Entgiftung
4. Festigung

Insbesondere dieser Aufbau und die Integration der Technologie werden für adäquate Stimulation von Fibroblasten und Kollagenen sorgen, die für die Revitalisierung und Hautverjüngung notwendig sind, ebenso wie Entsäuerung, Entgiftung und verbesserte Durchblutung für die Erhaltung der sichtbaren Ergebnisse.

2.2.4 MATRIX-REGULATION

Im Regenerationsprogramm I wird die Entgiftung des Bindegewebes vorbereitet. Dieses Gewebe wird auch als Matrix, BBRS (Basic Bio Regulation System) oder Pischinger's Basic System bezeichnet.

Das Bindegewebe kontrolliert die Aufrechterhaltung der Homöostase, die durch kontinuierliche Anpassung den innerlichen biologischen Ausgleich darstellt zu den äußerlich wechselnden Gegebenheiten. Homöostase gewährleistet die Stabilität der Vitalfunktionen wie Temperaturregelung, Blutdruck, Blutzucker, Abwehr und pH-Wert. In vielen Situationen ist das Bindegewebesystem verschmutzt worden. Um Entgiftung zu fördern und Homöostase zu ermöglichen, werden spezifische Dermatome behandelt. Ein wichtiger und wirksamer Zugang zu diesen Dermatomen sind die sogenannten Back-Shu- oder YÜ-Punkte entlang der Wirbelsäule, auf dem inneren Ast des Blasenmeridians. Die Auswahl dieser Punkte wird vom Programm automatisch getroffen, als Ergebnis der vorangegangenen EDA-Messungen. Die unten stehende Tabelle zeigt die Korrelation zwischen YÜ-Punkten, Organen, Dermatomen und ihrer Lokalisation. Die verschiedenen Farben der Punkte auf dem Bild entsprechen den 5 Elementen: Metall (B13 und B25) silbergrau, Holz (B18 und B19) grün, Feuer (B14,15,22 und 27) rot und Wasser (B23 und B28) blau.

Name	Organ	Element	Bindegewebszone	Lokalisation
B13	Lunge	Metall	Lungen, Bronchien, Pleura, Brust	ICR 3
B14	Pericard	Feuer	Gallenblase, Magen und Milz	ICR 4
B15	Herz	Feuer	Leber, Magen, Solarplexus und Blut	ICR 5
B18	Leber	Holz	Nebennierenrinde	ICR 9
B19	Gallenblase	Holz	Nieren, Darm- und Gefäßwände	ICR 10
B20	Milz/Pankreas	Erde	Nieren, Blase, Urethra, Prostata	ICR 11
B21	Magen	Erde	Dünndarm, Ovarien, Lymphkreislauf	unterhalb der 12. Rippe
B22	Dreifach-Erwärmer	Feuer	Colon, Leisten	zwischen L1 und L2
B23	Nieren	Wasser	Appendix, Unterbauch, Oberschenkel	zwischen L2 und L3
B25	Dickdarm	Metall	Prostata, Unterschenkel, Knöchel, Füße, Zehen	zwischen L4 und L5
B27	Dünndarm	Feuer	Hüften, Becken, Hintern	neben der Unterkante von S1
B28	Blase	Wasser	Hüften, Becken, Hintern	neben der Unterkante von S2



- Die Matrix-Regulation in 3 Schritten: Frequenzmodulierte Elektrophorese mit dem *i-ON*-Dermaroller bringt einen direkten Strom in den Körper auf Zonen und mit Frequenzen, die der Körper selbst ausgewählt hat, als Ergebnis der vorangegangenen EDA-Messungen. Die meisten dieser problembezogenen Dermatome wurden im Gesicht lokalisiert, entlang der Wirbelsäule und im Unterleib. Mit der Behandlung dieser Dermatome wird die Durchblutung unterstützt und damit auch Entgiftung und Entsäuerung. Die Stimulierung der Fibroblastenproduktion führt zu einer bemerkenswerten Kräftigung, Verjüngung und Verbesserung von Gesichtshaut und Bindegewebeelastizität.
- Desweiteren wird die Homöostase kräftig unterstützt durch das *i-MATRIX*: rhythmisches, tiefes Vakuumschröpfen aktiviert Zellmetabolismus und Lymph- und Kapillarkreislauf. Es entfernt Ablagerungen und Knoten im Unterhautgewebe und reguliert das autonome Nervensystem über das Feedback der behandelten Dermatome.

- c. Alle problemrelevanten Wirbelsäulensegmente werden behandelt, vom Kopf bis zum Gesäßbereich. Zur energetischen Konstitution passende essentielle Öle verbessern das Behandlungsergebnis. Es gibt 15 Kombinationen, 3 pro Element, abhängig von den energetischen Zustand:

HOLZ	HO 03 (hyper), HO 02 (normal), HO 01 (hypo)
FEUER	VU 03 (hyper), VU 02 (normal), VU 01 (hypo)
ERDE	AA 03 (hyper), AA 02 (normal), AA 01 (hypo)
METALL	ME 03 (hyper), ME 02 (normal), ME 01 (hypo)
WASSER	WA 03 (hyper), WA 02 (normal), WA 01 (hypo)

- d. Dieselben ausgewählten Hautsegmente werden mit dem *i-LIGHT* bestrahlt. Dieser sehr kraftvolle LED-Farbbeamer führt zur Photomodulation der Mitochondrien und der DNA-Synthese und Photonentransport in Haut-, Bindegewebs- und Muskelzellen. Die Kraftstoffversorgung des Organismus wird buchstäblich wiederhergestellt. Flexibilität, Stabilität und Glanz werden sichtlich profitieren. Neben der Stressregulation führt die *i-LIGHT*-Behandlung auch zu Harmonisierung, Entspannung und Revitalisierung. Kontraindiziert ist diese Behandlung bei Krampfanfällen in der Anamnese. Das *i-LIGHT* darf nicht direkt auf die Augen gerichtet werden.

2.2.5 GESICHTSREGENERATION/REVITALISATION: "DAS GALVANISCHE FACELIFTING".

Das Regenerationsprogramm II startet mit der Behandlung der Halswirbelsäule, nacheinander mit dem *i-ON*, dem *i-VAC* und dem *i-LIGHT*. Diese Behandlung aktiviert indirekt die Gesichtsdermatome. Die drei vorausgegangenen Messungen sind notwendig, um die Gesichtsdermatome auszuwählen, die mit dem schwächsten Meridian zusammenhängen, außerdem auch für die Auswahl der Frequenz/des Raymedys, um ein direktes "galvanisches Lifting" durchzuführen.

Eine Verbesserung von Entsäuerung, Entgiftung, Durchblutung und Elastizität wird jetzt mit dem *i-ON*-Dermaroller und den Stabelektroden auf die problematischen Gesichtszonen in Gang gesetzt.

Danach wird das ganze Gesicht und der Hals mit den Vakuum-Schröpfköpfen des *i-VAC* massiert. Mit regulierbarer Saugkraft und Impulsfrequenz, kombiniert mit den zur energetischen Konstitution passenden essentiellen Ölen, wird eine Lymphdrainage und Massage des Bindegewebes erreicht.

Anschließend wird mit Hilfe des *i-LIGHT* die Verteilung der Photonen und die Stimulation der DNA-Synthese aktiviert, und zwar mit jenen Farbsequenzen, auf die der schwächste Meridian besonders ansprechen sollte.

2.2.6 ELIMINATION: BINDEGEWEBE- UND LYMPHDRAINAGE IM BAUCH- UND BRUSTBEREICH

Besondere abdominale und thorakale Entgiftungszonen werden ebenfalls mit der *i-VAC*-Schröpftechnik behandelt, unterstützt durch die individuell zusammengestellten essentiellen Öle. Die vorangegangenen Messungen sind notwendig, um die Bewegungsrichtung für diese Vorgänge zu ermitteln.

- Im Falle eines Energieüberschusses im Konstitutionselement werden Abwärtsbewegungen überwiegen.

- Im Falle eines Energiemangels oder eines normalen Energieniveaus im Konstitutionselement werden Aufwärtsbewegungen dominieren.

2.2.7 KONSOLIDIERUNG MIT MAGNETFELDFREQUENZEN UND INFRAROT

Der letzte Schritt jedes Behandlungsprogramms ermöglicht dem Klienten, auf die Wirkung der Matrixregulation, Gesichtsrevitalisierung und Entgiftung mittels Bewertung der vegetativen Regulation zu antworten: Eine abschließende EDA-Messung errechnet das günstigste Magnetfeldsignal für eine optimale vegetative Regulation und zeigt so den bisherigen Behandlungserfolg.

Dieses spezielle Regulationssignal wird mit dem roten Beamer (dem EM-Transmitter) auf Brust-, Bauch- oder Halsregion appliziert. Die Durchblutung der peripheren Kapillaren wird so ausgeglichen, ebenso der zelluläre und der Neurotransmittermetabolismus. Es kommt zu einem tiefen und sehr angenehmen Gefühl von Ruhe und Entspannung.

3. AUSWAHL DES PASSENDEN PROGRAMMS

3.1 WANN WENDE ICH WELCHES PROGRAMM AN?

In den meisten Fällen wird empfohlen, mit dem Regenerationsprogramm I (allgemeine Entgiftung) zu beginnen und mit dem Regenerationsprogramm II (Gesichtsrevitalisierung) nach einer Woche fortzufahren.

Daneben beinhaltet das IQ BEAUTY SYS besondere Programme für Cellulite, Falten, Verjüngung, Akne und “spezielle Lösungen” für Allergie, Couperose, Ekzeme, Narben, (De-) Pigmentierungen, Psoriasis und Rosacea. Alle Programme sind gleichartig aufgebaut und sorgen für eine ordentliche Reaktivierung und freien Energiefluss, indem saure und toxische Stoffe entfernt und stagnierende, festsitzende Energien ins Fließen gebracht werden. Der Körper reagiert darauf mit:

- Verbesserung der Regenerationsfähigkeit der Haut
- Steigerung von zellulärer Aktivität und Stoffwechsel
- Stimulation der natürlichen Fibroblastenproduktion
- Verbesserung des Feuchtigkeitshaushaltes der Haut
- Verbesserung von Hautdurchblutung und Stoffwechsel
- Verbesserte Oberfläche (weicher, elastischer, mehr Glanz)
- Verbesserte Bindegewebsstruktur
- Glättung von Linien und tiefen Falten
- Feinere Hautporen

Die Programmoptionen

Hautzustand	mögliche Ursachen	welches Programm?
Trockene und schuppige Haut	Insuffizientes Flüssigkeits- und Entgiftungsmanagement	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
gespannte und rissige Haut	Flüssigkeitsmangel	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
Fleckige und irritierte Haut	Mangel an Schutz, hoher pH, mangelnde Balance zwischen Feuchtigkeit und Fett	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
farblose Haut	schlechte Durchblutung	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
schlechte Wundheilung	verminderte Fibroblastenaktivität	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
Falten generell	Mangelnde Deckung der Zellschichten	Regenerationsprogramm I und II Anti-Falten
markante Nase-Mund-Falte	eingefallene schlaaffe Wangen, verminderte Elastizität	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung, Anti-Falten
Augenringe	verminderte Entschlackung, reduziertes Sauerstoff- und Nährstoffangebot	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
Stirnfalten	Risse und Verklebungen im Bindegewebe	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung, Anti-Falten
Zornfalten	Verklebungen der Hautschichten	Regenerationsprogramm I und II Anti-Falten
Wangenfalten	Risse und Verklebungen des Bindegewebes	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung, Anti-Falten
Couperose	Vascular capillar sclerosis	Regenerationsprogramm I und II Couperosis, Verjüngung
Unregelmäßige Pigmentation	allgemeine Alterung der Haut und unausgeglichenes Fett-Flüssigkeits-Verhältnis	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
Oberlippenfalten	Lichenifikationen, Verdickungen	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung, Anti-Falten
Akne vulgaris	Androgene Hormone, unausgeglichener Stoffwechsel, bakterielle Infektionen, äußere Umstände	Regenerationsprogramm I und II Akne
Cellulite	Hormone, Anhäufung und Verklebung von Fettzellen, Flüssigkeit und Toxinen	Regenerationsprogramm I und II Cellulite

3.2 KONTRAINDIKATIONEN

Einige Zustände oder Umstände sind nicht tauglich für die komplette oder partielle Energy-Beauty-Care-Anwendung, wie beispielsweise:

- Verbrennungen, Verbrühungen, offene Wunden
- Hautinfektionen oder Entzündungen, virale und bakterielle Hauterkrankungen
- Furunkel und andere ansteckende Hautausschläge
- ernsthafte organische und/oder ansteckende Erkrankungen
- Elektromagnetische Stimulation ist kontraindiziert in der Schwangerschaft, bei erhöhter Thromboseneigung, bei Patienten mit implantiertem Schrittmacher oder Defibrillator und bei Patienten mit implantiertem Hörgerät
- Die i-LIGHT-Anwendung im Gesicht ist kontraindiziert bei Klienten mit Epilepsie (Krampfanfälle) in der Anamnese.

4. BEHANDLUNGSSEGMENTE/ZU BEHANDELNDE BEREICHE IM DETAIL

4.1 BEHANDLUNG DES BINDEGEWEBES

4.1.1 EINFÜHRUNG

Das Bindegewebesystem ist in der Tat unser größtes Organ. Zusammen mit der extrazellulären Flüssigkeit beinhaltet sie mehr als 60% des menschlichen Gewebes. Es verbindet Haut, Muskeln, Fett, Flüssigkeiten, Zellen und Organe. Es ist ein unabhängiges System und wird als B.B.R.S.(Basic-Bio-Regulation System), Matrix oder Pischinger's System.

Dieses System reguliert alle Vitalfunktionen wie Atmung, Kreislauf, Energiehaushalt, Stoffwechsel, Temperatur und pH.

Es kontrolliert den permanenten Austausch zwischen dem autonomen und dem zentralen Nervensystem, dem endokrinen System und dem Immunsystem.

Verteiler in diesem kompliziertem Austausch sind Neurotransmitter und den Stoffwechsel betreffende, immunregulierende und endokrine Substanzen. Alle wesentlichen Gegenmaßnahmen gegen pathogene Faktoren wie Kälte, Wind, Hitze, Schwüle, Nässe, Infektionen, Verletzungen, Narben und Fremdstoffen werden innerhalb des Bindegewebes ergriffen.

Lebensstil, Gewohnheiten und Lebensumstände, die Einstellung zum Leben und die Ernährung spielen eine wesentliche Rolle in der Aufrechterhaltung der Effektivität dieser autonomen, sich selbst regulierenden Anpassungsfähigkeit.

Biochemische Verschmutzung des Bindegewebesystems durch ständige Überladung scheint eine der wichtigsten Ursachen von chronischer Krankheit zu sein.

Aus diesem Grund ist die gründliche und konsequente Entgiftung des Bindegewebesystems der erste Schritt auf dem Weg zurück zu Vitalität, Schönheit und Gesundheit.

4.1.2 BINDEGEWEBEZONEN: EIN WESENTLICHER BEHANDLUNGSBEREICH

Chronische, durch permanente Fehlregulation verursachte Bindegewebsveränderungen können in bestimmten Hautzonen anhand von Verfärbungen, Änderungen in Struktur, Temperatur und Durchblutung beobachtet werden. Diese Hautzonen stehen durch die segmentale Innervation in Bezug zu den inneren Organen.

Das Verhältnis zwischen bestimmten inneren Organen und (sub)dermalen Bereichen wurde um 1900 von dem britischen Neurologen Head entdeckt. Daher werden diese Bindegewebebereiche auch als "Head'sche Zonen" bezeichnet.

Alle inneren Organe und Organfunktionen haben ihr eigenes Projektionsfeld in Bindegewebezonen, genau unter der Haut. Die integrative Behandlung dieser Bindegewebezonen fördert die Selbstheilungskräfte sämtlicher Körperteile auf hormonale, neurologische und immunologische Weise.

4.1.3 DER URSPRUNG DER BINDEGEWEBEZONEN

Die embryonale Entwicklung zeigt in der Tat einen segmentalen Aufbau: eine aufeinanderfolgende Reihe miteinander verbundener Scheiben ähnlicher Zusammensetzung. Diese "slices" heißen auch "Somiten", "Ursegmente" und beinhalten verschiedene Strukturen. Diese Strukturen sind die Quellen besonderer Gewebe, die in einem späteren Entwicklungsstadium gebildet werden:

Sclerotome	die Quelle für die Bildung von Knochengewebe
Myotome:	die Quelle für die Bildung von Muskelgewebe
Dermatome:	die Quelle für die Bildung von Hautgewebe
Vasotome:	die Quelle für die Bildung von Blutgefäßen
Viscerotome:	die Quelle für die Bildung von inneren Organen
Neurotome:	die Quelle für die Bildung von Nervengewebe

Ein bestimmtes Segment enthält all diese Strukturen, was verständlich macht, dass jedes Teilchen von Haut, Muskel, Knochen, Nerv, Gefäß oder Organ aus einem Spinalsegment entspringt.

4.2 LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE

Lymphdrainage und Massage des gesamten Bindegewebesystems werden mit Vakuum-Schröpf-Technik mit rhythmisch wechselndem Sog (i-VAC) vorgenommen. Dies fördert die Gefäßdurchblutung, den extrazellulären Stoffwechsel, den Lymphabfluss und den interstitiellen Toxinabtransport, und erreicht damit eine tiefe und gründliche Reinigung sämtlicher Gewebe und der gesamten Haut.

Vorzeitige und beschleunigte Alterung wird signifikant gebremst durch systematische Anwendung von Lymphdrainage und Bindegewebemassage, zusammen mit "galvanischem Facelifting", Farbtherapie und elektromagnetischer Feldtherapie. Dadurch fühlt sich jeder Klient nach einer Energy-Beauty-Care-Behandlung sehr entspannt und fit.

4.3 REVITALISIERUNG/REGENERATION

Die Behandlung mit dem i-On bewirkt eine indirekte Alkalisierung und eine Verbesserung von Durchblutung und Elastizität in den korrespondierenden Gesichtszonen. Lymphdrainage und Bindegewebemassage von Gesicht und Hals werden mit dem i-VAC durchgeführt.

Die abschließende Behandlung des Gesichtes mit dem i-LIGHT fördert die Stimulation der Photonenverteilung und DNA-Synthese durch die Applikation von speziell die Haut revitalisierenden Farbsequenzen.

4.4. LOKALISATION DER GESICHTSZONEN

OBERE HORIZONTALE STIRNZONE, AM HAARANSATZ (QUER)

Diese Zone hat Bezug zur Blasenenergie. Horizontale Falten mit schuppiger und trockener Haut könnten das Resultat von stagnierender Flüssigkeit bei schwacher Nieren- und Blasenenergie sein.

MITTLERE HORIZONTALE STIRNZONE

Dieser Bereich hat Bezug zum Dünndarm. Schwache Verdauung durch Enzymmangel ist oft die Folge von unvollständiger Ausscheidung von Schlacken und Toxinen, und führt zu Falten und Pickel in diesem Bereich. Ausscheidung und Entgiftung können verbessert und erleichtert werden durch Korrektur der Ernährung, mehr körperlicher Aktivität und Zufuhr von natürlichem Wasser. Neben Erbfaktoren kann auch ein Zuviel an ungeeigneter, schlecht organisierter oder subjektiv ermüdender Arbeit frühzeitige Faltenbildung in diesem Bereich verursachen.

Eine blasse oder rote Stirn kann ein Anzeichen sein für gesteigerte Durchblutung oder emotionale Unausgeglichenheit.

TEMPORAL ZONE (SCHLÄFE)

Dieser Bereich hat Bezug zur Gallenblase. Hauterscheinungen an dieser Stelle können eine Anhäufung von Fettschlacken anzeigen und eventuelle Enttäuschungen aufgrund von zu hohen Erwartungen und Ungeduld.

ZONE ZWISCHEN DEN AUGENBRAUEN

Diese Zone hat Bezug zur Leber. Vertikale Falten zeugen von exzessivem Essen und Trinken, chronischem Stress, Schlafmangel und emotionaler Unausgeglichenheit durch nicht ausgedrückten, angestauten Ärger und dem Gefühl, generell unfähig zu sein.

ZONE UM DIE AUGEN

Der Bereich unter den Augen hat Bezug zu den Nieren. Schwarz-blaue Augenringe können ein Zeichen sein für schwache Nieren- und Blasenenergie. Diese dunklen Ringe sind oft erblich bedingt und zeigen eine Dehydration, Flüssigkeitsstau und eine geringe Flüssigkeitsausscheidung an. Der Bereich oberhalb der Augen steht in Zusammenhang mit der Milz-Pankreas-Energie. Flüssigkeitsstau an dieser Stelle dürfte auf Probleme mit dem Kohlehydrat- und Zuckerstoffwechsel hinweisen. Gelb-braune Fettansammlungen um die Augen könnten chronische Probleme mit Leber- und Gallenblasenfunktion bedeuten. Ist der Bereich um die Augen grau gefärbt, dürften Erschöpfung, Stress und Durchblutungsstörungen vorliegen.

NASE

Die Nase steht in Verbindung mit der Lunge bzw. der Atmung.

Nasenspitze und -rücken stehen in Bezug zur Herzenergie. Eine rote Nase mit weiten Kapillaren könnte ein Zeichen sein für ein Gefäßproblem, möglicherweise in Zusammenhang mit Blutdruck- oder Ernährungsproblemen.

NASEN-MUNDWINKEL-FALTE (NASOLABIAL)

Dieser Bereich steht in Bezug zum Dickdarm. Hauterscheinungen oder eine tiefe Falte entlang der Nase könnten auf angestauten Müll und Toxine hinweisen, verursacht durch mangelhafte Colonaktivität (Obstipation oder Dysbiose).

WANGEN

Falten im Bereich des Kieferknochens dürften auf unausgeglichene Lungenenergie hinweisen. Der Teil oberhalb des Kieferknochens, aber unterhalb der Nierenzone gehört zum Magen.

Empfindliche Couperose-Wangen könnten Ausdruck einer unausgeglichene Lungen-, Magen-, Milz- und/oder Herzenergie sein. Leichte Schwellungen dürften auf eine gestörte Kolonenergie hinweisen.

ZONE UM DEN MUND

Die Haut um den Mund steht in Bezug zum Kreislaufmeridian.

Vertikale Falten um den Mund dürften hormonale Probleme anzeigen.

Pickel und Entzündungen in den Mundwinkeln können auf eine gestörte Herzenergie und/oder Colonenergie hinweisen.

KINN

Diese Zone steht, zusammen mit dem Augenbereich, in Bezug zu den Nieren. Entzündungen und Obstruktionen dürften auf Toxinansammlungen in den Nieren hinweisen, auf schwachen Flüssigkeitskreislauf und Menstruationsprobleme. Hautprobleme wie extremer Bartwuchs können mit hormonalen Dysbalancen zu tun haben. Hautunreinheiten können eine schwache intestinale Funktion bedeuten.

ÄUSSERER KIEFERWINKEL

Diese Zone bezieht sich auf die Gallenblasenenergie.

HALS

Rote Flecken oder unreine Haut mit Pickel stehen oft in Bezug zum Stresshormon Cortisol. Hauteruptionen im Hals- oder Brustbereich haben oft zu tun mit emotionaler Unausgeglichenheit und Problemen mit Lunge und Kreislauf.

GESICHTSZONEN

Gesichtszonen	Lokalisation	RAYMEDY
Blasenzone	Oberer horizontaler Stirnbereich	Renastimutron
Nierenzone	Unterhalb von Augen und Kinn	Renastimutron
Leberzone	Zwischen den Augen	Hepastimutron
Gallenblasenzone	Schläfenbereich Kieferwinkel	Hepastimutron
Herzzone	Nasenspitze und -rücken	Corstimutron
Dünndarmzone	Mittlerer horizontaler Stirnbereich	Lienostimutron
Kreislaufzone	Bereich um den Mund	Thalastimutron
Dreifach-Erwärmer-Zone	Äußerer Augenbrauenwinkel	Corstimutron
Magenzone	Wangen oberhalb des Wangenknochens	Lienostimutron
Milzzone	Oberhalb der Augenlider	Lienostimutron

Lungenzone	Wangenknochen, Nase	Pneumastimutron
Dickdarmzone	Nasen-Mundwinkel-Falte	Pneumastimutron

4.5 ELIMINATION ÜBER ABDOMEN UND THORAX

Bindegewebemassage und Lymphdrainage im Abdominal- und Thorakalbereich mit dem i-VAC.

4.6. KONSOLIDIERUNG

Der letzte Schritt jedes Behandlungs-Programms gilt der Konsolidierung mittels Magnetfeldfrequenzen. Dies gibt dem Klienten das Gefühl von tiefer Ruhe und Entspannung, während das Vegetativum nachreguliert. Das Programm berechnet das hierfür günstigste Magnetfeldsignal und zeigt, wo es mit dem roten Beamer zu applizieren ist.

LOKALISATION DER AKUPUNKTURPUNKTE FÜR DIE KONSOLIDIERUNG

JM-3	vordere Mittellinie, 1 cun oberhalb des Schambeins
JM-8	auf den Nabel
JM-12	vordere Mittellinie, auf halbem Weg zwischen Brustbein und Nabel
JM-17	vordere Mittellinie, in der Mitte des Brustbeins
DM-14	rückwärtige Mittellinie, unterhalb von Vertebra C7 (Hals-Schulter-Niveau)

4.7 START DES ENERGY BEAUTY CARE - PROGRAMMS

Die TDP Lampe

Nach neuester wissenschaftlicher Forschung hat die Infrarot-Wärmebehandlung einen signifikant revitalisierenden Effekt auf die Gesichtshaut. Deswegen empfehlen wir nachdrücklich, jede Energy-Beauty-Care-Behandlung mit einer 8-minütigen Bestrahlung des Gesichtes mit der TDP-Lampe zu beginnen.

Die TDP-Minerallampe ist als Ferninfrarot-Wärmetherapiegerät ein medizinisch-technisches Gerät der FDA-Klasse II. Die Lampe ist NICHT Bestandteil der Hardware des Behandlungsprogramms.

Während die meisten Lampen eine gewöhnliche Nahinfrarotbirne nutzen, gibt die TDP-Lampe eine besondere



Bandbreite ferninfraroter elektromagnetischer Energie ab (im 2-50 Mikrometerbereich). Dieses Spektrum ähnelt dem der heilsamen Ferninfrarot-Strahlung der Moorbäder-Anwendungen in der Balneotherapie. Analysen der Tonerde und spätere Versuche führten zur Entwicklung von medizinischem Gerät, das nun als TDP-Minerallampe bekannt ist, als eine therapeutische Ergänzung der Moxabustion. Die Lampe weist eine Mineralplatte auf, die mit einer einzigartigen geschützten mineralischen Rezeptur aus 33 Spurenelementen beschichtet ist. Diese Spurenelemente finden sich in verschiedenen chemischen Verbindungen auch im menschlichen Körper. Da der menschliche Körper Ferninfrarotenergie leichter

absorbiert als Nahinfrarotenergie, werden mögliche Defizite an Spurenelementen aufgefüllt. Klinische Untersuchungen bestätigen, dass die Kombination aus Ferninfrarot mit Spurenelementemission die Mikrozirkulation steigert und den Stoffwechsel ausgleicht, die Aktivität spezieller Enzyme steigert, Immunfunktion und Zellerneuerung fördert, die Haut regeneriert und das Bindegewebeverklebungen löst und so den natürlichen Heilungsprozess beschleunigt.

TDP ist ein Akronym für "Teding Diancibo Pu", was in etwa das spezielle elektromagnetische Spektrum meint. Die TDP-Minerallampe wurde 1978 in China erfunden und dort 1992 patentiert.

Sie wird von Akupunkteuren, asiatischen Körpertherapeuten und anderem medizinischen Fachpersonal genutzt. Der Stand der Forschung von 1985 zeigte, dass die Behandlung mit der TDP-Minerallampe bei über 30 verschiedenen Erkrankungen bei Mensch und Tier erfolgreich war.

In den USA ist die Behandlung mit der TDP-Minerallampe mit den Versicherern abrechenbar. Die Gerätekategorie, der sie zugeordnet ist, ist von der FDA anerkannt für die zeitweise Linderung von Schmerzen und Arthritis.

Die aktuellen Änderungen im Energy Skin Care Modul ab 15. Februar 2011

HARDWARE

Lieferung eines zusätzlichen schwarzen Kabels.

Die praktische Erfahrung hat einen deutlich verstärkten Lifting-Effekt während und nach der galvanischen i-ON – Behandlung gezeigt, wenn beide Stabelektroden die selbe (negative) Polarität haben. Auf diese Weise wird der Ionenaustausch nicht auf das lokal behandelte Gebiet beschränkt, sondern ausgedehnt bis zur (positiven) Null-Elektrode, die am Handgelenk befestigt ist. Verbinden Sie den Stecker des zusätzlichen schwarzen Kabels mit dem Stecker des anderen schwarzen Kabels.

SOFTWARE

Wir haben das Raymedy Acidiatron in allen EnergySkinCare-Programmen durch ein neues alkalisierendes Raymedy ersetzt. Der richtige Reihenfolge von Gesichtslymphdrainage und Bindegewebsbehandlung mit dem i-VAC wird mit den Zahlen in den zugehörigen Bildern gezeigt. Die Bildschirmtexte wurden in allen EnergySkinCare-Programmen deutlich erweitert. Das Akne 2-Programm ist aktualisiert und versetzt worden nach SPECIAL SOLUTIONS.

In **“special solutions”** werden demnächst drei weitere Hautprobleme angegangen:

STRIAE

COUPEROSE/ ROSACEA

SPIDER VEINS (BESENREISER)

In diesen drei Programmen wird insbesondere die typische kapilläre Bindegewebsschwäche behandelt, mit ergänzenden Raymedys

Zusätzliche synergistische Kosmetikprodukte

Wir empfehlen synergistische Kosmetikprodukte, die online www.907.pm-international.com oder telefonisch mit Unterstützung von Frau Itt (Raber) unter 00352 621 140 737 bestellt werden können.


- RESTORATE für die Remineralisierung und Alkalisierung der Haut, entsäuernd
- ACTIVIZE OXYPLUS, verbesserte Sauerstoffversorgung und Durchblutung
- Q10 Tropfen, Zellregeneration und Zellfunktion
- Beauty Line12 h Aktiv Serum für optimale Ergebnisse bei der Antifaltenbehandlung
- CC CELL LOTION für die Optimierung der Cellulitebehandlung. Wirkt stark erwärmend und durchblutungsfördernd auf Fett- und Bindegewebe.

Diese Produkte in Kombination mit den i-ON-Behandlungen zeigten einen derart bemerkenswerten synergistischen Therapieeffekt, dass wir sie in die Behandlungsprotokolle integrierten.


Folgenden Mischungen müssen für die i-ON-Anwendung zubereitet werden:

- Für alle Protokolle: Aloe vera (2 EL) + Restorate (1 TL)
- Akne: Aloe vera (1 EL) + Q10 (7 Tropfen)
- Rejuvenation, Falten u. Sonderprogramme: Aloe vera (1 EL) + Q10 (7) + Beauty Line 12h aktiv Serum (6 Hübe)
- Cellulite: Aloe vera + CC Cell Lotion (1:2) + 1TL Zimt + 1TL Activize oxy plus

Jedes Behandlungsprogramm startet mit der Durchführung von 3 EDA-Messungen. Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil erscheint die Energy-Beauty-Care-Alkaline-Balance-Einführung auf dem Bildschirm, die Ihr Klient lesen sollte. Wir empfehlen, diese Einführung dem Klienten mindestens eine Woche vor seinem ersten Praxisbesuch zu mailen, um eine gute Vorbereitung sicherzustellen. Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil gelangen Sie auf das Auswahl-Menü des IQ BEAUTY SYS.

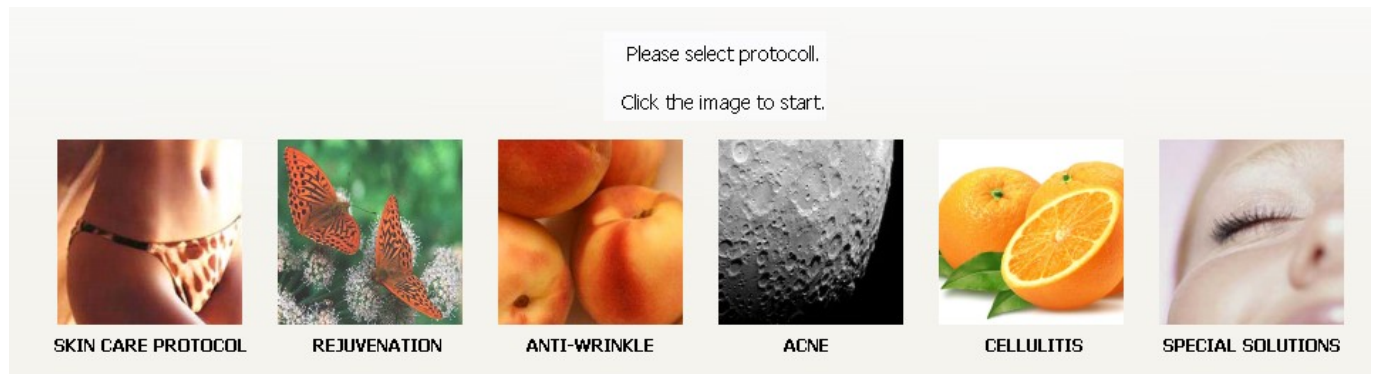

Das linke Bild heißt "SkinCare-Protokoll". Mit Klick auf dieses Bild öffnet sich der nächste Bildschirm:

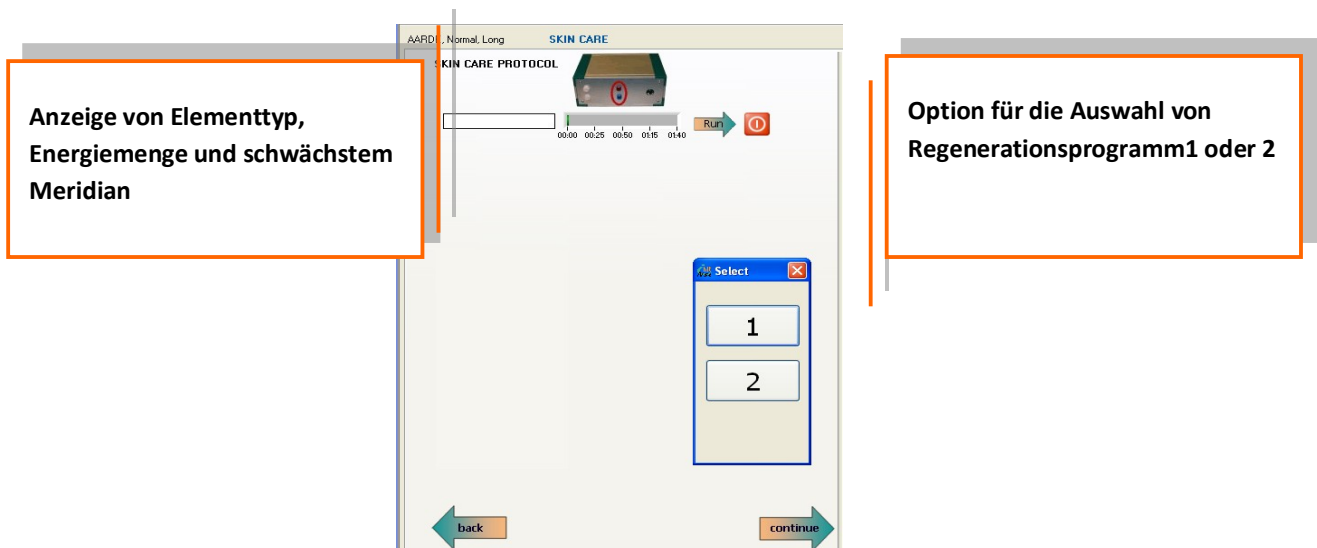


5.1. REGENERATIONSPROGRAMM I

5.1.1 Regenerationsprogramm I, Schritt 1


Für den ersten Schritt der Matrix-Regeneration werden, basierend auf den vorangegangenen EDA-Messungen, Frequenzen ("Raymedys") ausgewählt und in Form von galvanischem Strom angewandt.

- Der Klient liegt auf dem Bauch.
- Tragen Sie die Aloe-Restorate-Mischung (2EL:1TL, eventuell angewärmt) auf die angezeigten Hautareale auf.

- Behandeln Sie die gezeigten Punkte mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Bewegen Sie das i-LIGHT dabei von der Wirbelsäule aus nach rechts und links außen.
- **Schließen Sie den Dermalroller (-) an die schwarze i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes an.**
- **Mit der Null-Elektrode (+)** verbinden Sie das Handgelenk des Klienten mit der **roten** i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes mit.
- Stellen Sie den Schalter auf "ON". Stellen Sie sicher, dass die Stabantenne an der Rückseite des Gerätes angeschlossen ist. Wenn die kabellose Übertragung nicht ausreichend arbeitet, erscheint eine Error-Meldung, die wieder verschwindet, sobald die notwendigen Maßnahmen durchgeführt worden sind. (siehe Bild).
- **Passen Sie die Amplitude an.** Die Stromamplitude kann mittels Cursor entlang der vertikalen Säule auf der rechten Seite des Bildschirms angepasst werden. Abhängig von Klient und der zu behandelnden Körperregion wird die Stromstärke unterschiedlich stark empfunden. Die Amplitude muss daher immer gerade eben unterhalb des sensiblen Levels eingestellt werden.

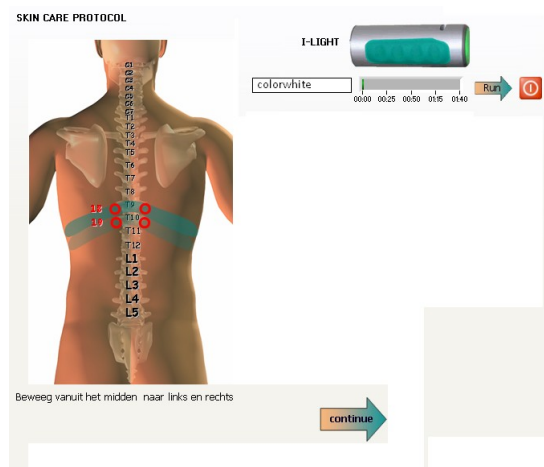


- Behandeln Sie die gezeigten Punkte mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Bewegen Sie das i-LIGHT dabei von der Wirbelsäule aus nach rechts und links außen.
- Klicken Sie auf den RUN-Pfeil neben dem oben angezeigten Raymedy.

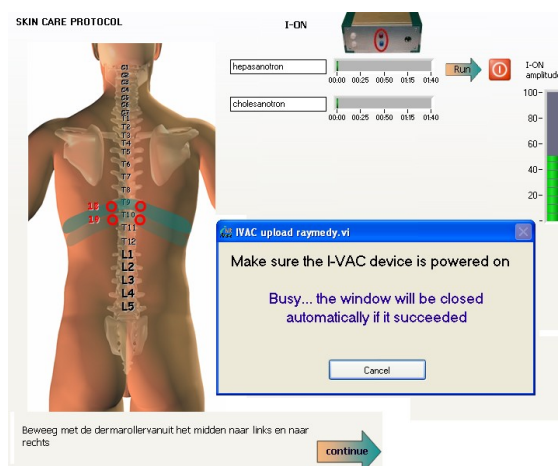


- Behandeln Sie die angegebene Zone mit dem Dermalroller. Bewegen Sie den Dermalroller **angezeigten Hautzonen entlang**, von der Wirbelsäule aus nach links und rechts. Die Behandlungszeit ist auf länger als 1 Minute voreingestellt, aber Sie können das Procedere für jedes Dermatome wiederholen oder auch jederzeit abbrechen. Mit Klick auf den RUN-Pfeil neben dem zweiten angezeigten Raymedy wird dieses aktiviert.
- **Klicken Sie auf den Continue-Pfeil, um zum nächsten Schritt zu kommen**

5.1.2 REGENERATIONSPROGRAMM 1, SCHRITT 2 DIE PULSIERENDE VACUUMMASSAGE

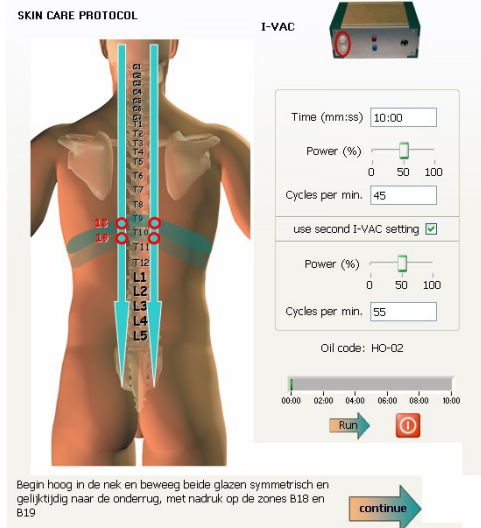

- Entfernen Sie die Aloe-Restorate-Mischung sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch.
- Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken auf.
- Aktivieren das i-VAC mit Klick auf den RUN-Pfeil
- Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian) und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.
- Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil rechts unten fahren Sie im Programm fort.
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)

5.1.3 REGENERATIONSPROGRAMM 1, SCHRITT 3

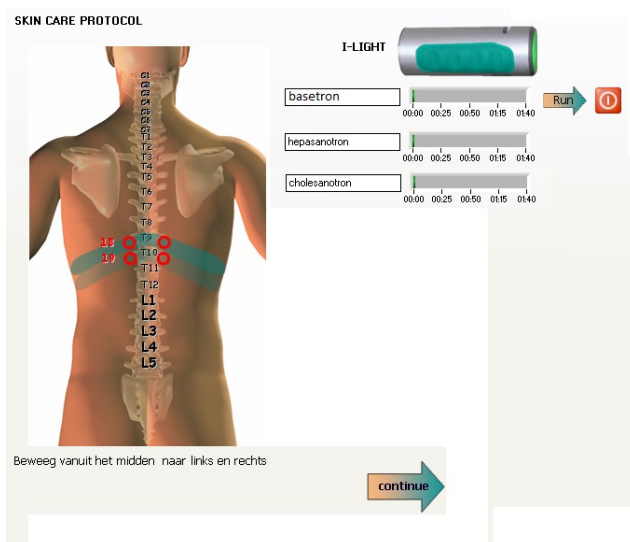

- Aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den RUN-Pfeil.
- Behandeln Sie die gezeigten Punkte mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Bewegen Sie das i-LIGHT dabei von der Wirbelsäule aus nach rechts und links außen.
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den CONTINUE-Pfeil.
- Das Programm bittet Sie, eine weitere EDA-Messung vorzunehmen.

Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.




- Klicken Sie wieder auf den großen Pfeil.

5.1.4 REGENERATIONSPROGRAMM 1, SCHRITT 4 ELIMINATION

- Klicken Sie auf den blinkenden Pfeil in der oberen Bildschirmhälfte, um in das 4. Stadium des Regenerationsprogramms zu gelangen, die Elimination. Ihr Klient liegt auf dem Rücken, der Bauch ist frei.

- Tragen Sie die dazugehörige Ölkombination auf die unten angegebenen Hautzonen auf (in diesem Fall Öl mit Essenz AA-3).
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den kleinen RUN-Pfeil.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfungsglas:
 1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
 2. Zwischen dem Großzeh und 2. Zeh /Akupunkt Leber 3): 7-8x pumpen
- Wechseln Sie bitte auf das große Schröpfungsglas:
 1. Auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8): 7-8x pumpen
 2. Bewegen Sie das Schröpfungsglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Verlauf von Lebermeridian)
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite an und bewegen Sie diese wie angezeigt zur Bauchmitte hin, dann von der linken und rechten Bauchseite nach oben und wieder von der linken und rechten Bauchseite seitwärts bis zum Schambein.
- Folgen Sie dann mit den Schröpfköpfen der im Bild angegeben Pfeilrichtung auf dem Konzeptionsgefäß
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)

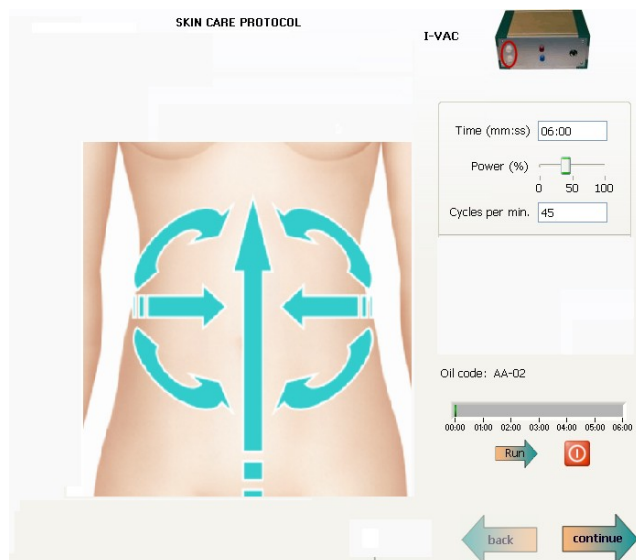


- Das Programm bittet Sie wieder, eine EDA-Messung vorzunehmen. Danach führt ein Klick auf den "continue"-Pfeil Sie zum 5. Schritt dieses Programms.



5109	Lo 11	3540
4937	Di 1	3498
4144	C 9	3926
3634	3E 1	4588
3383	H 9	4869
3419	Du 1	4873
4889	MP 1	4941
4726	Le 1	5086
4844	M 45	5852
4836	G 44	6827
4912	N 1	7203
4928	B 67	6319

5.1.4 REGENERATIONSPROGRAMM 1, SCHRITT 5 KONSOLIDIERUNG

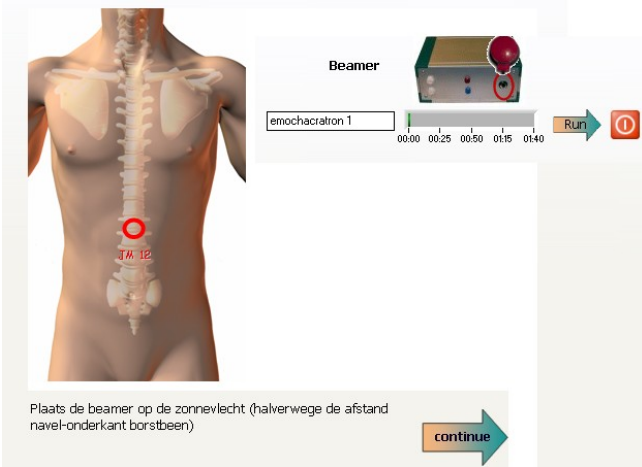

dass das Protokoll zu Ende ist:

- Protocoll is finished.


- Verbinden Sie den Stecker des roten Beamers mit dem i-Matrix-Gerät.
- Klient in Rückenlage
- Halten Sie den Beamer auf den auf dem Bild angezeigten Punkt.
- Aktivieren Sie das entsprechende Raymedy mit Klick auf den “run”-Pfeil neben dem angezeigten Raymedy.
- Da das „Regenerationsprogramm 1“ eher abkühlend wirkt, geben Sie mit der „China- Lampe“ 15 Minuten Wärme auf den Bauch!
- Mit Klick auf den “continue”-Pfeil erfahren Sie,

5.2 REGENERATIONSPROGRAMM 2 –GESICHTSREVITALISIERUNG

5.2.1 Regenerationsprogramm 2 Schritt 1

Behandlung des Halses mit i-ON, i-VAC und i-LIGHT

Folgenden Mischung müssen vor der i-ON-Anwendung zubereitet werden:

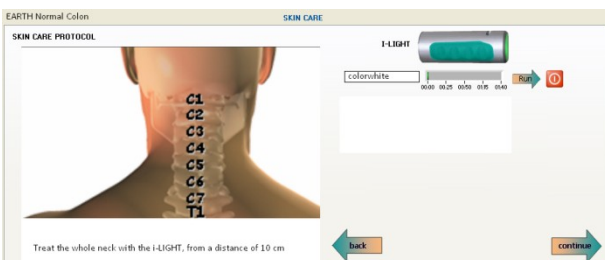

Hals


- Mit Klick auf “run” aktivieren Sie das **i-LIGHT**

- Aloe vera (2 EL) + Restorate (1 TL)

Vorbereitung der i-ON-Behandlung mit dem i-LIGHT

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf die zu behandelnden Zonen auf
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den


Nackenbehandlung mit i-ON

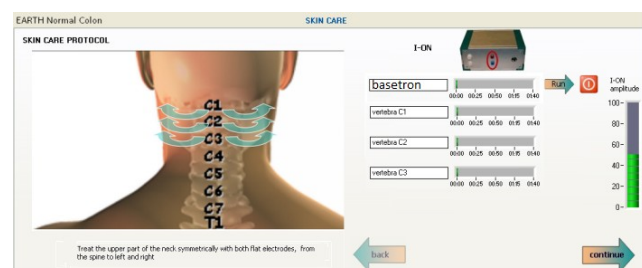

- Klient in Bauchlage

- Passen Sie die Stromamplitude an
- Verbinden Sie das ROTE Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy Basetron mit dem Dermalroller im ganzen Halsbereich ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. Schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf
- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt passend zu den einzelnen Vertebrae.
- Klicken Sie auf den “run”-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch
- Mit Klick auf den “Continue”-Pfeil kommen Sie weiter


Nackenbehandlung mit dem I-VAC

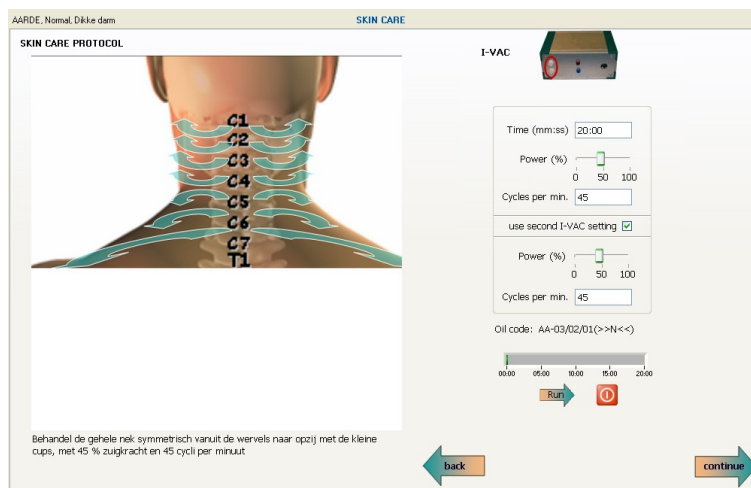


- Klicken Sie auf “Continue” um weiterzukommen

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie die angesagte aufgewärmte Ölkombination auf die Behandlungszone auf (in diesem Fall Erde-normal-AA-02)
- Mit Klick auf “run” aktivieren Sie das **i-VAC**
- Wenden Sie die kleinen Schröpfköpfe nach Anweisung an (siehe Bild)
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)


Nackenbehandlung mit i-LIGHT

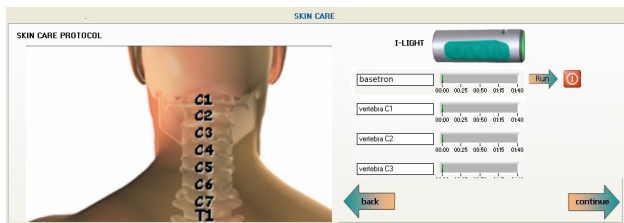

- Klient in Bauchlage
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals
- Mit Klick auf “run” aktivieren Sie das **i-LIGHT**
- Mit Klick auf “Continue” kommen Sie zur nächsten **EDA-Messung**

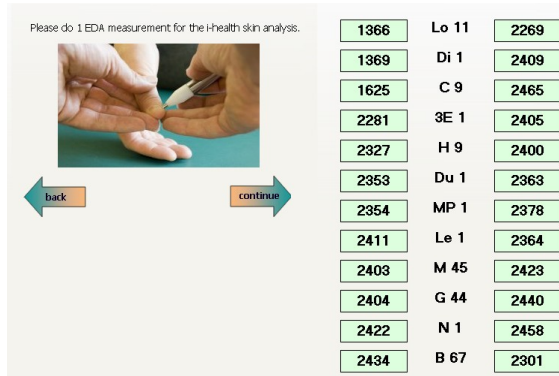


5.2.2 REGENERATIONSPROGRAMM 2, SCHRITT 2A: GESICHTSBEHANDLUNG MIT I-ON

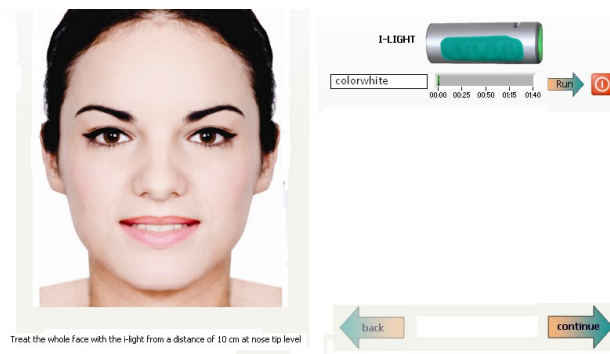



- Reinigen Sie die Gesichtshaut
- Tragen Sie ausreichend eventuell angewärmte Aloe-Restorate-Mischung auf
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals
- Mit Klick auf “run” aktivieren Sie das **i-LIGHT**

I-On

- Passen Sie die Amplitude an. Verbinden Sie das ROTE Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie die ersten beiden Raymedy Basetron und Cicatron mit dem Dermaroller im ganzen Gesicht ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. Schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf.
- Behandeln Sie nun die angegebenen Zonen im Gesicht mit den beiden Flach-Stabelektroden des **i-ON**.
- Achten Sie darauf, dass immer genug Aloe –Mischung aufgetragen ist
- Klicken Sie auf den “run”-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
- **Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch**

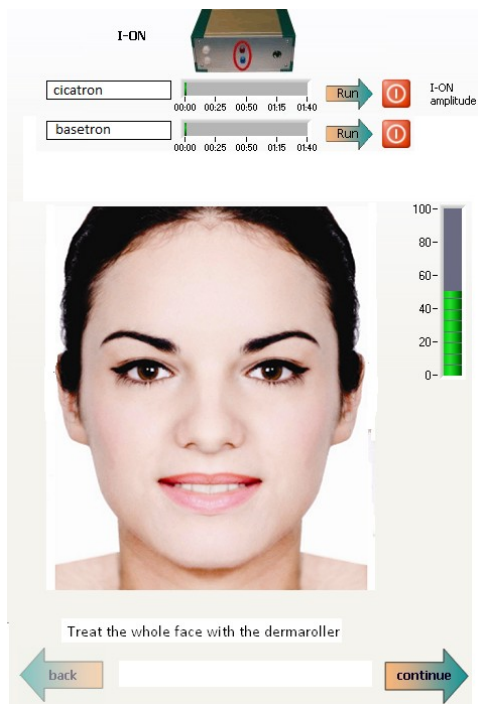


Passend zu dem laut vorangegangener EDA-Messung schwächsten Meridian werden 3 Gesichtszonen nacheinander mit den beiden Stabelektroden behandelt.

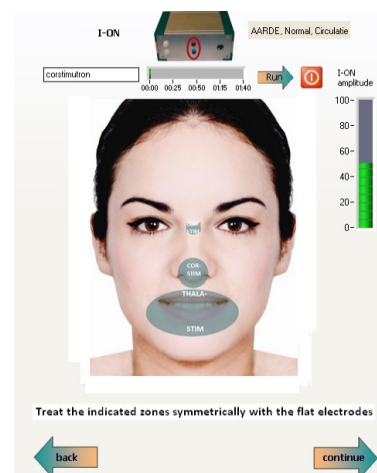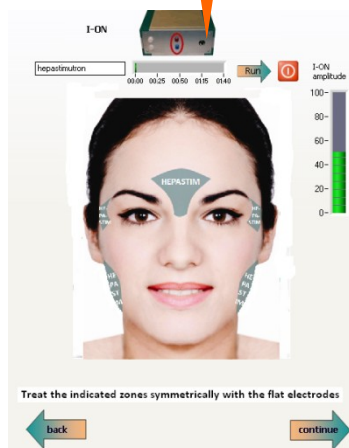


5.2.3 REGENERATIONSPROGRAMM 2, SCHRITT 2B. GESICHTSSCHRÖPFUNG

Behandlung mit dem i-VAC in 2 Schritten: Lymphdrainage und Bindegewebsmassage. **Je nach Saugkraft, Pulsation und Bewegungsrichtung hat die i-VAC-Behandlung einen Drainageeffekt auf das lymphatische System oder eine entgiftende und regenerierende Wirkung auf das Bindegewebe.**


- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf. Dann schröpfen Sie mit dem kleinsten runden Gläschen wie folgt:
- Lymphdrainage
 1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
 2. Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
 3. Dann weiter mit beiden kleinsten Schröpfgläschen von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
 4. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
 5. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
 6. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen(Akupunkt 3E17)
 7. Von dort zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
 8. Dann vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang)
 9. Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext. Yin Tang) bis zum Haaransatz
 10. Von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext. Tai Yang: 3-4xPumpen
 11. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen(Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen
 12. Zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
- **Bindegewebemassage Stufe 1 (55 Zyklen)**
 1. Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
 2. Ebenso an den Wangen
 3. Von der Mitte der Stirn aus nach außen
- **Bindegewebemassage Stufe 2 (550 Zyklen)**
 1. Ändern Sie den Cycle auf 550 und benutzen Sie nur ein flaches Schröpfgläschen
 2. Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
 3. Ebenso an den Wangen
 4. Von der Mitte der Stirn aus nach außen
- Entfernen Sie sorgfältig das restliche Öl mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)

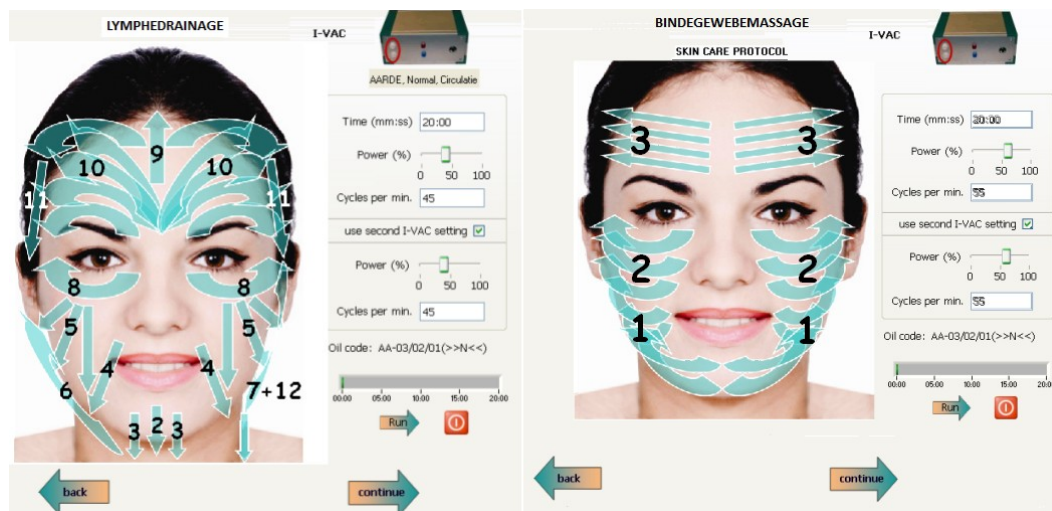


5.2.3 REGENERATIONSPROGRAMM 2 SCHRITT 2C. GESICHTSBEHANDLUNG MIT I-LIGHT.

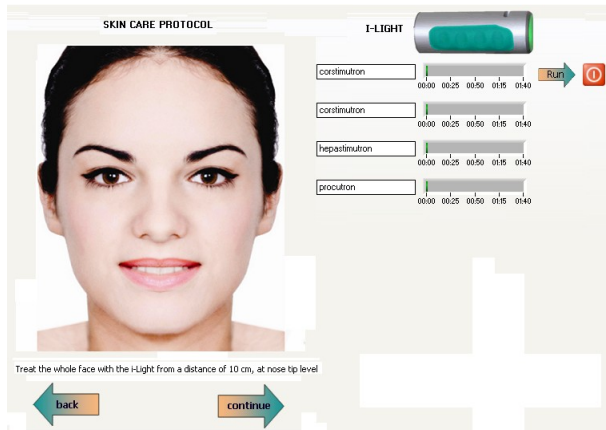

- Das Gesicht wird mit ähnlich meridianregulierenden Raymedys wie in Schritt 2a behandelt, nun aber mit Farblight, mit einem kräftigen hautvitalisierendem Raymedy als Abschluss
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**
- Mit einer weiteren EDA-Messung wird das Raymedy für die Konsolidierung bestimmt.

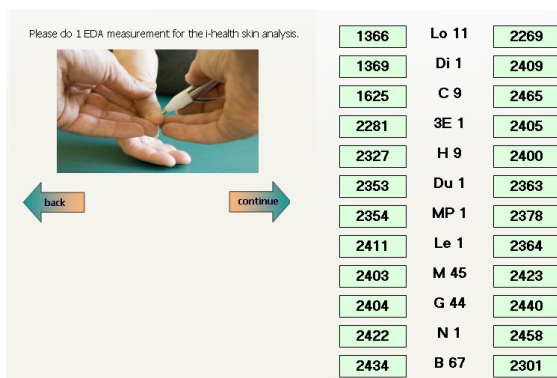

5.2.5 REGENERATIONSPROGRAMM 2; SCHRITT 3 KONSOLIDIERUNG

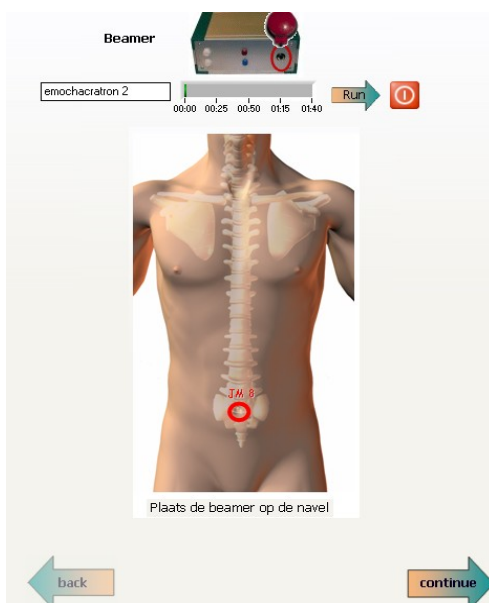


- Klient in Rückenlage
- Verbinden Sie den roten Beamer mit dem i-Matrix-Gerät
- Halten Sie den Beamer auf den angezeigten Bereich.
- Aktivieren Sie das entsprechende Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil neben diesem Raymedy.

Protocoll is finished.

- Mit Klick auf den “continue”-Pfeil wird Ihnen mitgeteilt, dass das Programm zu Ende ist.

5.3 REJUVENATION PROGRAMM

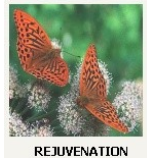

Das REJUVENATION-PROGRAMM (ANTI-AGE) im Überblick


1. Bestrahlung des Gesichtes für 10 Minuten mit der Infrarot-Lampe (TDP-lamp)
2. 3 EDA-Messungen
3. Auftragen der Aloe+Restorate-Mixtur auf den Hals
4. Weißes Licht mittels i-LIGHT
5. I-ON nach Protokoll: Der gesamte Nacken wird mit dem Dermalroller mit dem ersten Raymedys (Cicatron+Basetron) behandelt.
6. I-ON siehe Bild: die ersten drei Halswirbel +Dermatom mit dem zugehörigen Raymedy und den flachen Stabelektroden
7. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
8. I-LIGHT nach Protokoll
9. Gesichtsmaske mit Aloe+Restorate
10. I-LIGHT mit weißem Licht
11. i-ON mit dem Dermalroller mit Cicatron und Basetron
12. Entfernung der Reste von Aloe+Restorate, dann weiter mit dem I-ON Protokoll, mit Aloe + Q10 + Beauty Line 12h aktiv Serum
13. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
14. I-LIGHT nach Protokoll
15. EDA-Messung
16. Emodacraton mit Beamer

Starten Sie das Rejuvenation Programm

- Nehmen Sie 3 EDA-Messungen vor, um den Elementtyp, das Energielevel und die Energieverteilung des Klienten zu bestimmen.


Dann klicken Sie auf “Rejuvenation”.

Im Fenster „select“ wählen Sie die 1

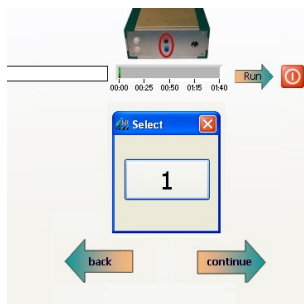


5.3.1 VERJÜNGUNG DES HALSES MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

VORBEREITUNG I-ON-BEHANDLUNG MIT I-LIGHT WEISS

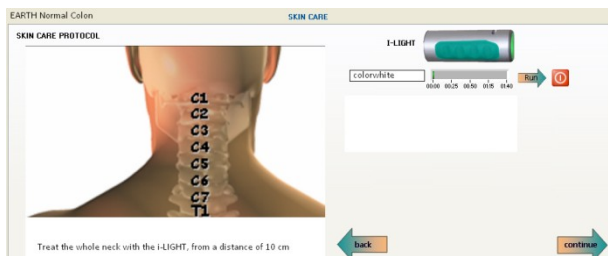


- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf die zu behandelnden Zonen auf
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals
- Mit Klick auf “run” aktivieren Sie das **i-LIGHT**

Nackenbehandlung mit i-ON

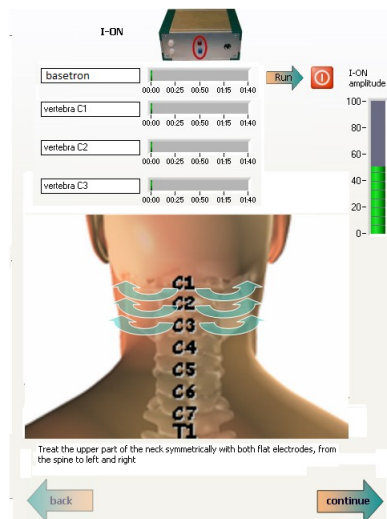


- Klient in Bauchlage
 - Passen Sie die Stromamplitude an
 - Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy Basatron mit dem Dermanroller im ganzen Halsbereich ein. Drücken Sie auf Stopp.
 - Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. Schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf
 - Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt, passend zu den einzelnen Vertebrae.
 - Klicken Sie auf den “run”-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
 - Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch
- Mit Klick auf den “Continue”-Pfeil kommen Sie weiter

HALSBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

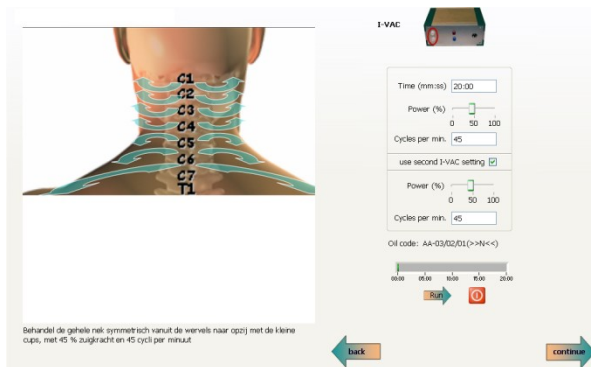


1. Klient in Bauchlage
2. Tragen Sie die angesagte aufgewärmte Ölkombination auf die Behandlungszone auf (in diesem Fall Erde-normal-AA-02)
3. Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-VAC**
4. Wenden Sie die kleinen Schröpfköpfe nach Anweisung an (siehe Bild)
5. Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)
6. Klicken Sie auf "Continue" um weiterzukommen

HALSBEHANDLUNG MIT I-LIGHT

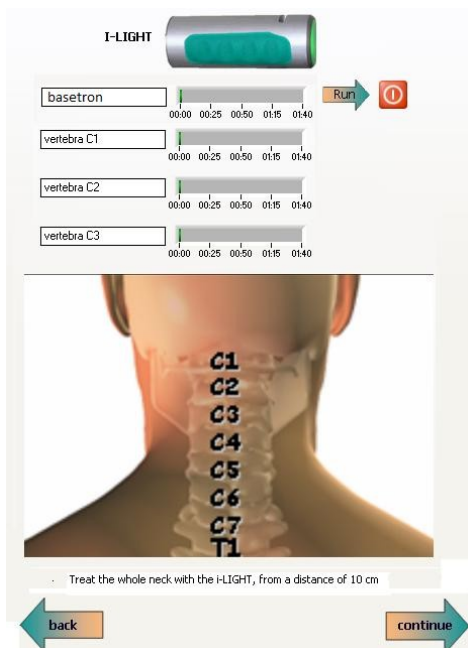

- Klient in Bauchlage
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT
- Behandeln Sie den Hals mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand

5.3.2 GESICHTSVERJÜNGUNG MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

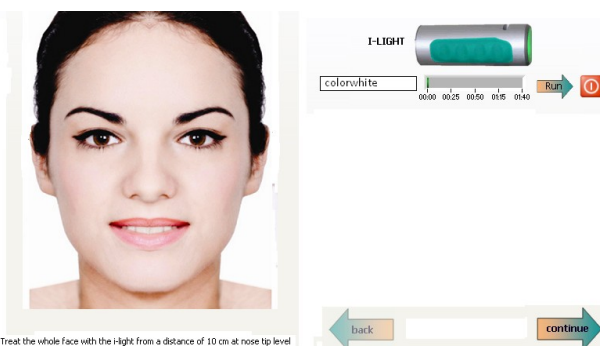


i-ON Vorbehandlung mit i-LIGHT WEISS

Klient in Rückenlage

- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser

- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf Gesicht und Hals auf
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**

I-On Gesichtsbehandlung

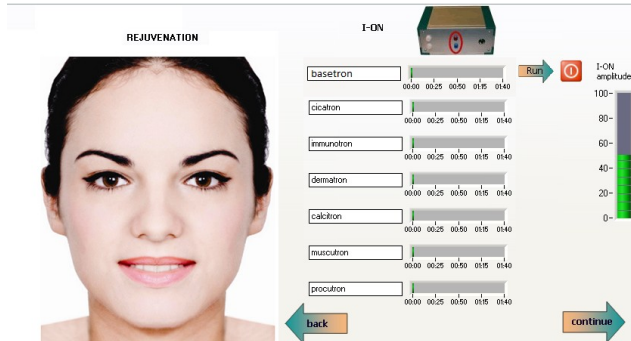

- Passen Sie die Amplitude an. Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie die ersten beiden Raymedys Basetron und Cicatron mit dem Dermalroller im ganzen Gesicht ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch
- Tragen Sie nun großzügig eine angewärmte



Mischung aus Aloe-Q10-Beauty Line 12h Serum(1El:7Tr:6Hübe) auf das ganze Gesicht auf

- Behandeln Sie weiter das ganze Gesicht mit den verbliebenen Raymedys
- Entfernen Sie die restliche Aloe-Mischung mit einem feucht warmen Tuch

5.3.3 I-VAC-BEHANDLUNG IN 2 SCHRITTEN: LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE.

Je nach Saugkraft, Pulsation und Bewegungsrichtung hat die i-VAC-Behandlung einen Drainageeffekt auf das lymphatische System oder eine entgiftende und regenerierende Wirkung auf das Bindegewebe.

Passen Sie die Pumpintensität an die Hautbeschaffenheit Ihres Klienten an!

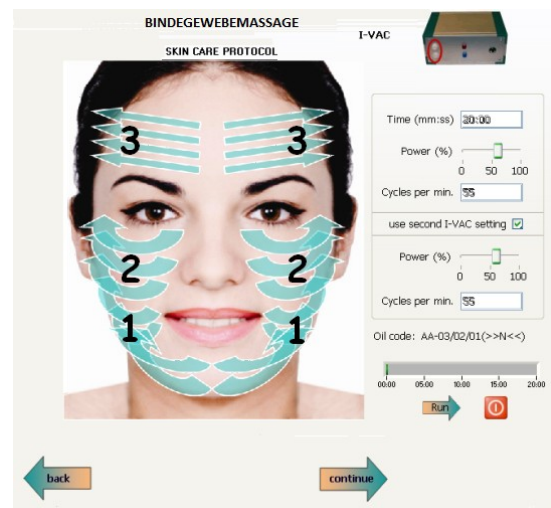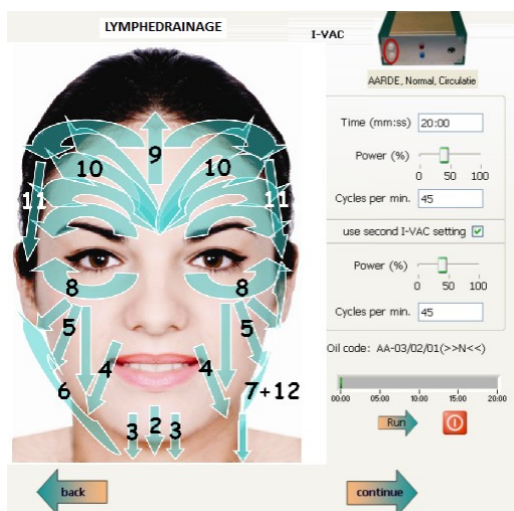

- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf. Dann schröpfen Sie mit dem kleinsten runden Gläschen wie folgt:

- **Lymphdrainage**

1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
2. Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
3. Dann weiter mit beiden kleinsten Schröpfungsgläschen von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
4. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
5. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
6. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17)
7. Von dort zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
8. Dann vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang)
9. Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext. Intragang) bis zum Haaransatz
10. Von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext. Taiyang: 3-4x Pumpen
11. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen
12. Zur Grube der Clavikula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen


- **Bindegewebemassage Stufe 1 (55 Cycle)**

1. Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
2. Ebenso an den Wangen
3. Von der Mitte der Stirn aus nach außen

- **Bindegewebemassage Stufe 2 (550 Cycle)**

1. Ändern Sie den Cycle auf 550 und benutzen Sie nur ein flaches Schröpfungsgläschen
2. Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
3. Ebenso an den Wangen
4. Von der Mitte der Stirn aus nach außen

5.3.4 I-LIGHT GESICHT

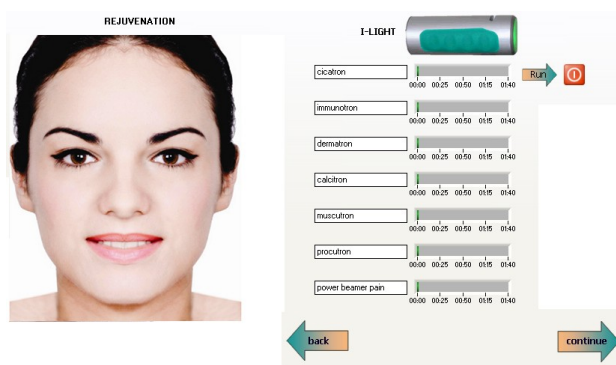

- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT mit den Raymedys


EDA-MESSUNG

Please do 1 EDA measurement for the i-Health skin analysis.

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301

Machen Sie eine EDA Messung

5.3.5 KONSOLIDIERUNG MIT DEM BEAMER

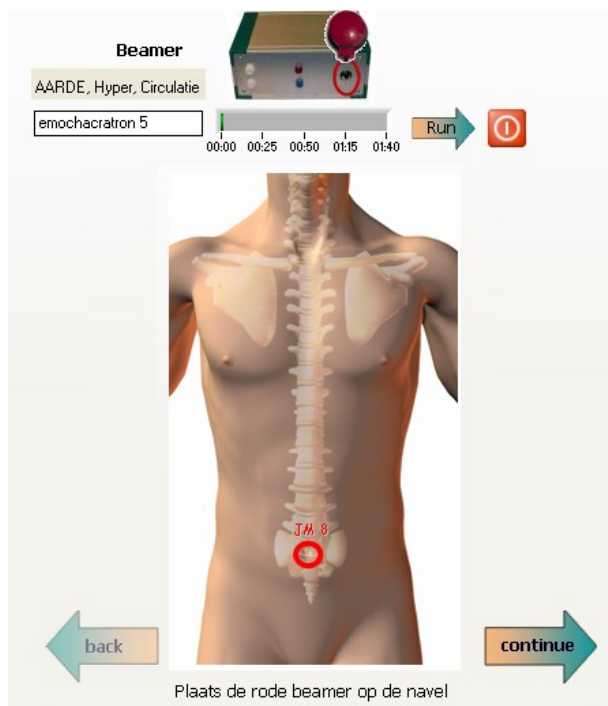


In diesem Beispiel hat das Programm, passend zum aktuellen Energieüberschuss im Erde-Element, automatisch das Raymedy Enochakraton 5 gewählt: Abführung des Energieüberschusses an das Metall.

- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil

Nach Klick auf den "continue"-Pfeil ist das Programm beendet:

Protocoll is finished.

5.4 ANTI-FALTEN-PROGRAMM

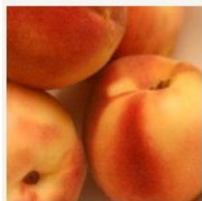

ANTI-WRINKLE


Das ANTI-WRINKLE-PROGRAMM im Überblick

Wählen Sie mit Ihrer Klientin eine, bis max zwei Faltenpartien aus, die in einer Sitzung bearbeitet werden sollen.

1. Bestrahlung des Gesichtes für 10 Minuten mit der Infrarot-Lampe (TDP-lamp)
2. 3 EDA-Messungen
3. Auftragen der Aloe+Restorate-Mixtur auf den Hals
4. Weißes Licht mittels i-LIGHT
5. I-ON nach Protokoll: Der gesamte Nacken wird mit dem Dermalroller mit dem ersten Raymedys (Basetron) behandelt.
6. I-ON siehe Bild: die ersten drei Halswirbel +Dermatom mit dem zugehörigen Raymedy und den flachen Stabelektroden
7. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
8. I-LIGHT nach Protokoll
9. Gesichtsmaske mit Aloe+Restorate
10. I-LIGHT mit weißem Licht
11. i-ON mit dem Dermalroller mit Cicatron und Basetron
12. Entfernung der Reste von Aloe+Restorate, dann weiter mit dem I-ON Protokoll, mit Aloe + Q10 + Beauty Line 12h aktiv Serum und den runden Stabelektroden
13. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
14. I-LIGHT nach Protokoll
15. EDA-Messung


5.4.1 VORBEREITENDE HALSBEHANDLUNG MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

VORBEREITUNG I-ON-BEHANDLUNG MIT I-LIGHT WEISS

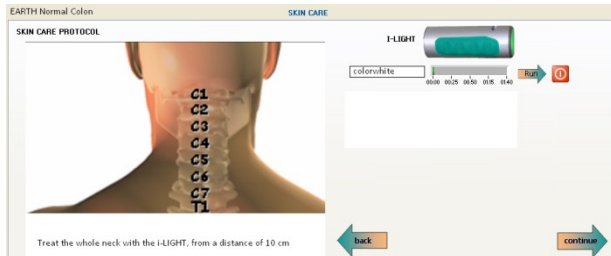


- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf die zu behandelnden Zonen auf
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**

NACKENBEHANDLUNG MIT I-ON

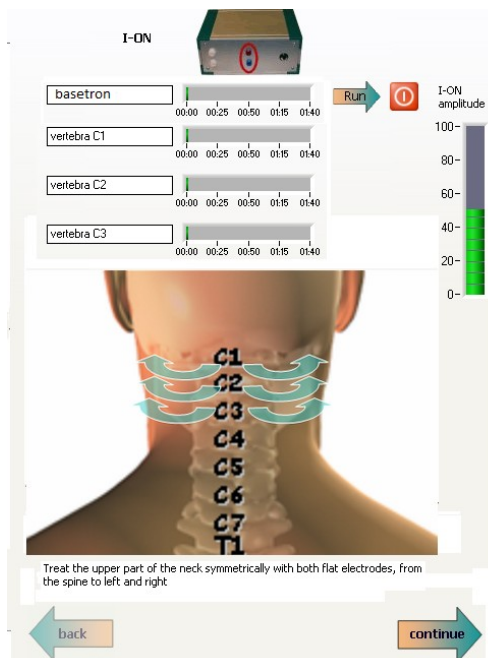


- Passen Sie die Stromamplitude an
- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy Basetron mit dem Dermaroller im ganzen Halsbereich ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. Schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf.
- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt, passend zu den einzelnen Vertebrae.
- Klicken Sie auf den "run"-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch
- Mit Klick auf den "Continue"-Pfeil kommen Sie weiter

NACKENBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

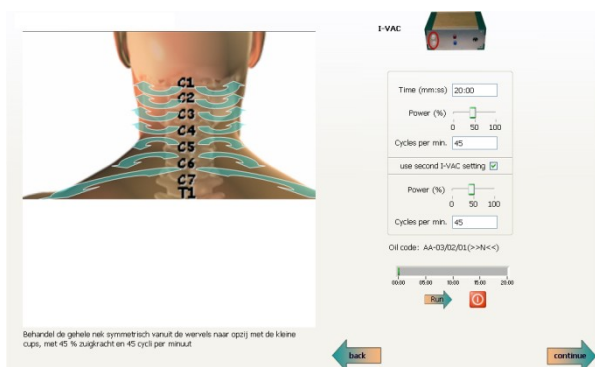

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie die angesagte aufgewärmte Ölkombination auf die Behandlungszone auf (in diesem Fall Erde-normal-AA-02)
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-VAC**
- Wenden Sie die kleinen Schröpfköpfe nach Anweisung an (siehe Bild)
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)
- Klicken Sie auf "Continue" um weiterzukommen


NACKENBEHANDLUNG MIT I-LIGHT

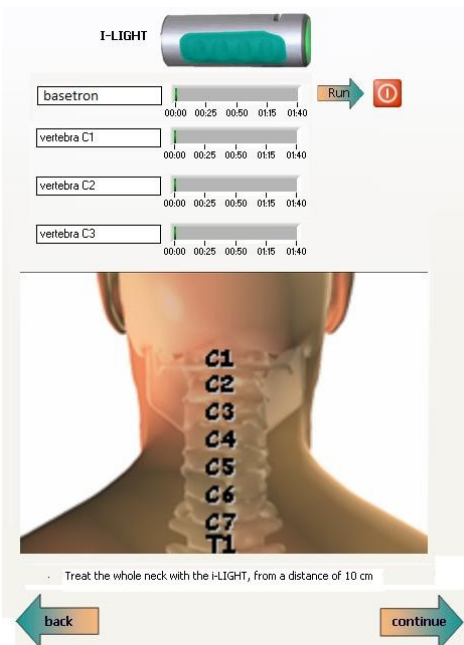

- Klient in Bauchlage
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT
- Behandeln Sie den Hals mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil

5.4.2 BEHANDLUNG DER GEWÜNSCHTEN FALTENPARTIE MIT DEM I-ON

Bereiten Sie zwei Mischungen vor: eine Mischung aus Aloe + Restorate, eine andere aus Aloe + Q10 + Beauty Line 12h aktiv Serum. Verwenden Sie zusätzlich Beauty Line 12h aktiv Serum direkt auf die Falten.






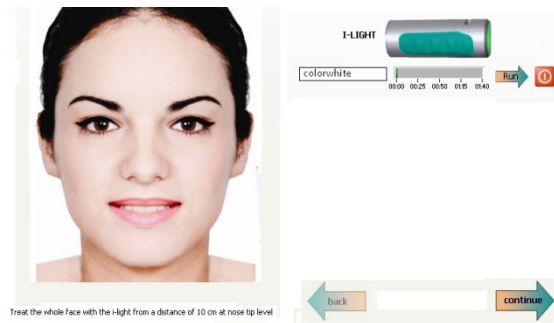


Vorbehandlung mit I-Light weiß

Klient in Rückenlage mit geschlossenen Augen

- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf Gesicht und Hals auf
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT

Im üblichen zeitlichen Rahmen eines Praxisbesuches ist es nicht möglich, alle Falten gründlich zu behandeln. Besprechen Sie also, welche Falten die Problemfälle darstellen, setzen Sie Prioritäten und folgen Sie den Behandlungsanweisungen auf den Screens, für die Sie sich eben entschieden haben. Die anderen überspringen Sie.

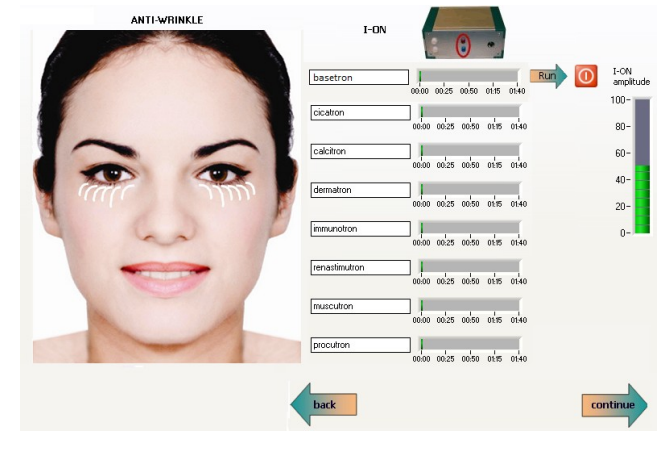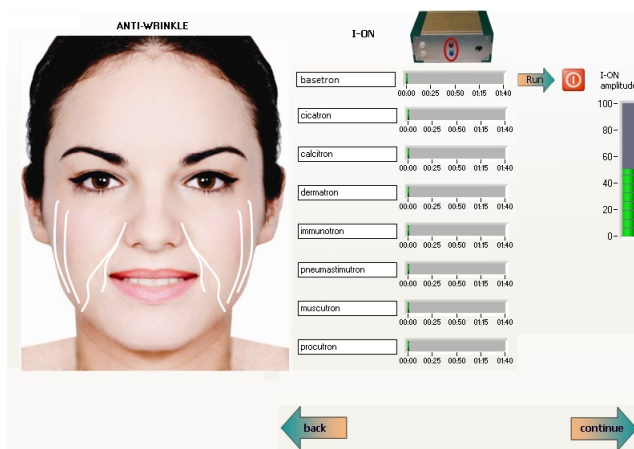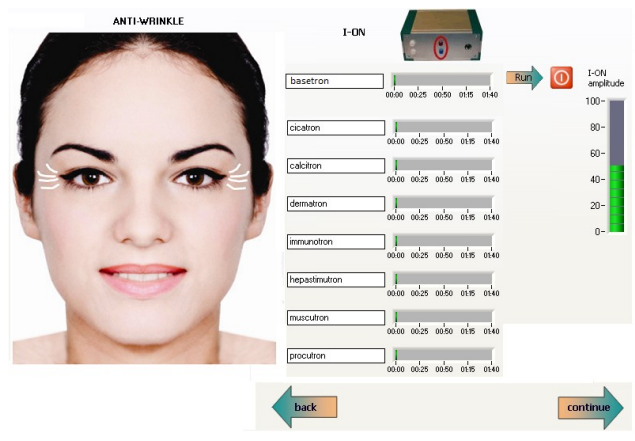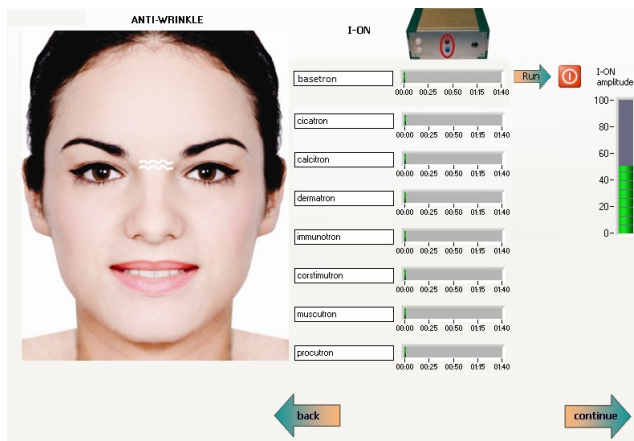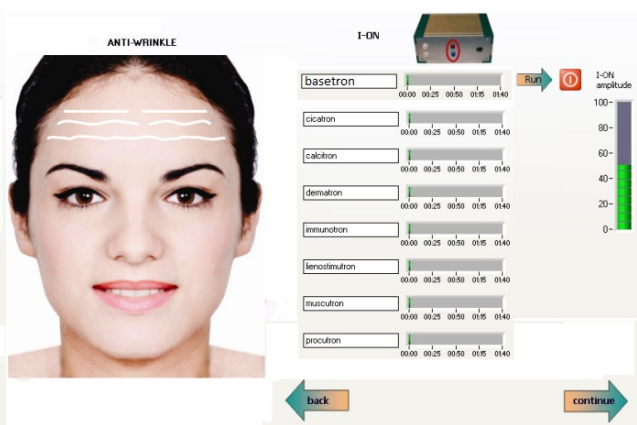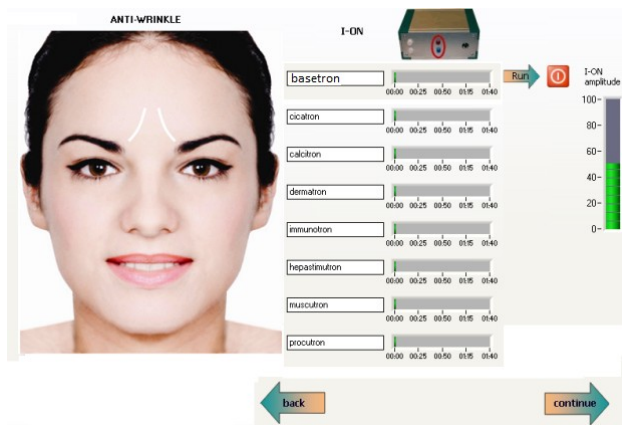



I-ON Schritt A

- Passen Sie die Amplitude an. Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie die ersten beiden Raymedy Basetron und Cicatron mit dem Dermalroller im ganzen Gesicht ein. Drücken Sie auf Stopp.

I-ON Schritt B

- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch
- Tragen Sie nun großzügig eine angewärmte Mischung aus Aloe-Q10-Beauty Line 12h Serum(1El:7Tr:6Hübe) auf das ganze Gesicht auf, besonders auf die zu behandelnde Faltenpartie.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. Schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken die beiden Stabelektroden mit den kugelförmigen Köpfen auf.


- Behandeln Sie nun die angegebenen Zonen im Gesicht mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** . Achten Sie darauf, dass immer genug Aloe-Mischung vorhanden ist.
- Klicken Sie auf den “run”-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
- Das letzte Raymedy tragen Sie wieder auf das ganze Gesicht mit dem Dermaroller auf.
- Entfernen Sie die restliche Aloe-Mischung mit einem feucht warmen Tuch

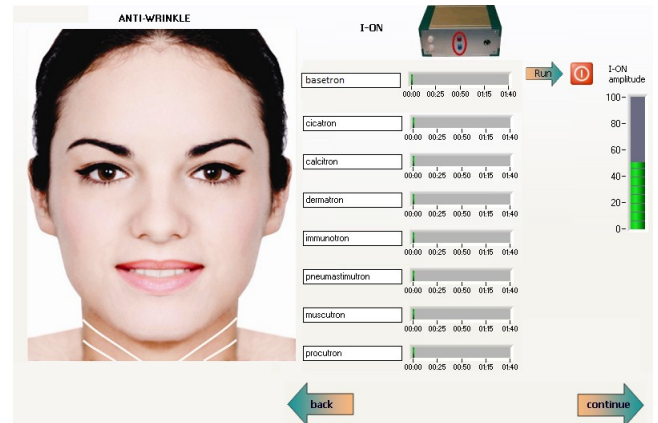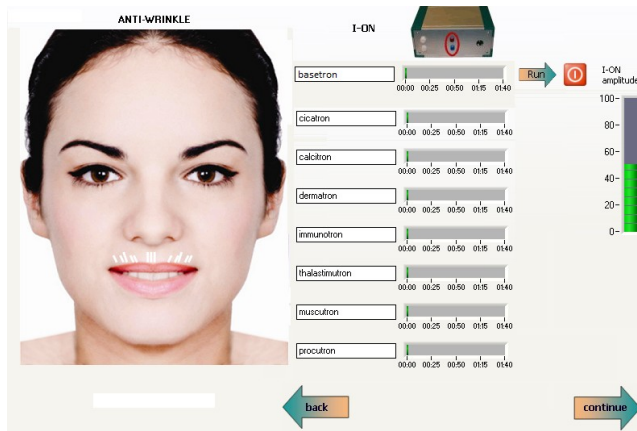

5.4.3 LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE MIT DEM I-VAC

Passen Sie die Pumpintensität an die Hautbeschaffenheit Ihres Klienten an!!

1.

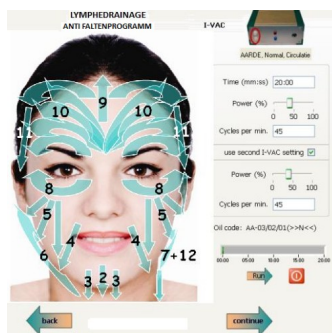

i-VAC: Entsprechend der Saugkraft, der Pulsation und der Bewegungsrichtung wird die i-VAC-Behandlung einen ausleitenden Effekt auf das lymphatische System oder eine entgiftende und regenerierende Wirkung auf das Bindegewebe haben.



• Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf. Dann schröpfen Sie mit dem kleinsten runden Gläschen wie folgt:

- Mit Klick auf “run” aktivieren Sie das **i-VAC**

• Lymphdrainage

1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
2. Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
3. Dann weiter mit beiden kleinsten Schröpfgläschen von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinn's (Siehe Bild)
4. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
5. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)

6. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen(Akupunkt 3E17)
7. Von dort zur Grube der Clavikular (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
8. Dann vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang)
9. Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext.Intrang) bis zum Haaransatz
10. Von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext. Taiyang: 3-4xPumpen
11. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen(Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen
12. Zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen


• **Bindegewebemassage Stufe 1 (55 Cycle)**

1. Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
2. Ebenso an den Wangen
3. Von der Mitte der Stirn aus nach außen

• **Bindegewebemassage Stufe 2 (550 Cycle)**


1. Ändern Sie den Cycle auf 550 und benutzen Sie nur ein flaches Schröpfpgläschen
2. Von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
3. Ebenso an den Wangen
4. Von der Mitte der Stirn aus nach außen
6. Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)
7. Klicken Sie auf "Continue" um weiterzukommen

5.4.4 GESICHTSBEHANDLUNG MIT DEM I-LIGHT

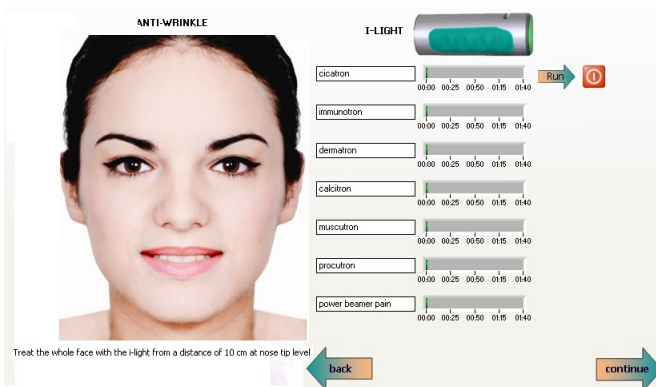

Klient in Rückenlage mit geschlossenen Augen

- -Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf Höhe der Nasenspitze auf das Gesicht
- -Aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den "Run"-Pfeil
- -Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

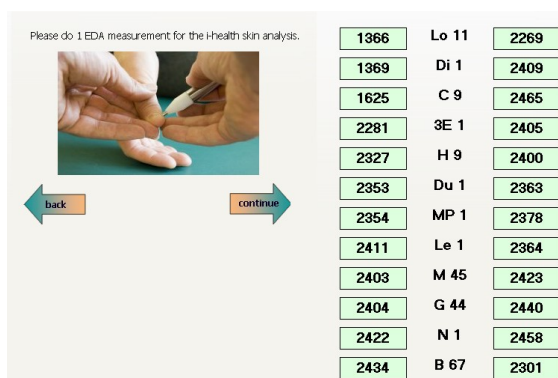

NEUE EDA-MESSUNG

- Eine weitere EDA-Messung ist notwendig für die folgende Konsolidierungsphase
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

5.4.5 KONSOLIDIERUNG MIT DEM BEAMER UM DAS ANTI-FALTENPROGRAMM ABZUSCHLIESSEN



KONSOLIDIERUNGSPHASE

Klient in Rückenlage


Passend zur aktuellen energetischen Balance im Erdelement wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Emochakraton 2: es stabilisiert die persönliche Elementenergie

Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil

Mit Klick auf den "continue"-Pfeil ist das Anti-Faltenprogramm beendet und wird geschlossen:

Procoll is finished.

5.5 AKNE-PROTOKOLL

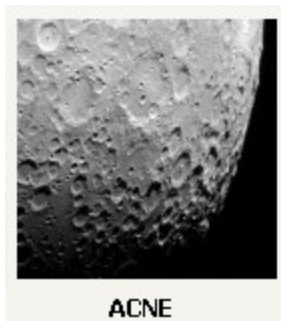


Überblick über das Akne-Programm

1. Bestrahlung des Gesichtes für 10 Minuten mit der Infrarot-Lampe (TDP-lamp)
2. 3 EDA-Messungen
3. Auftragen der Aloe+Restorate-Mixtur auf den Hals
4. Weißes Licht mittels i-LIGHT
5. I-ON nach Protokoll: Der gesamte Nacken wird mit dem Dermaroller mit dem ersten Raymedys (Basetron) behandelt.
6. I-ON siehe Bild: die ersten drei Halswirbel +Dermatome mit dem zugehörigen Raymedy und den flachen Stabelektroden
7. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
8. I-LIGHT nach Protokoll
9. Gesichtsmaske mit Aloe+Restorate
10. I-LIGHT mit weißem Licht
11. i-ON mit dem Dermaroller mit Cicatron und Basetron
12. Entfernung der Reste von Aloe+Restorate, dann weiter mit dem I-ON Protokoll, mit Aloe + Q10
13. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
14. I-LIGHT nach Protokoll
15. EDA-Messung
16. Emodakraton mit Beamer


5.5.1 VORBEREITENDE AKNEBEHANDLUNG DES HALSES MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

Vorbereitung der i-ON-Behandlung mit i-LIGHT WEISS

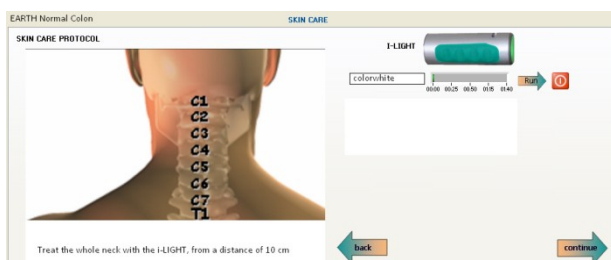

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf die zu behandelnden Zonen auf
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**

Aknebehandlung des Nacken mit i-ON:

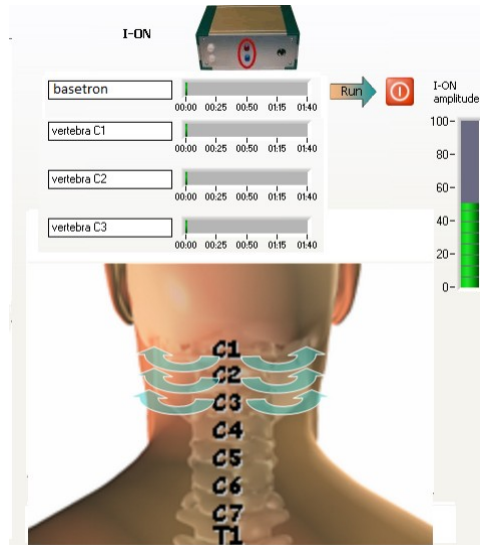


- Passen Sie die Stromamplitude an
- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy Basetron mit dem Dermalroller im ganzen Halsbereich ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. Schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf.
- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt, passend zu den einzelnen Vertebrae.
- Klicken Sie auf den "run"-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
- **Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem**

feucht warmen Tuch

- Mit Klick auf den "Continue"-Pfeil kommen Sie weiter

Nackenbehandlung mit dem i-VAC

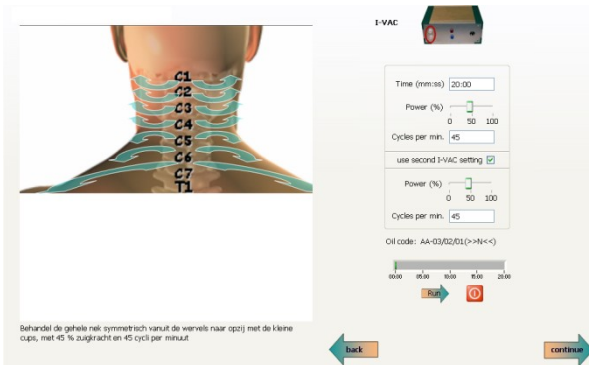


1. Klient in Bauchlage
2. Tragen Sie die angesagte aufgewärmte Ölkombination auf die Behandlungszone auf (in diesem Fall Erde-normal-AA-02)
3. Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-VAC**
4. Wenden Sie die kleinen Schröpfköpfe nach Anweisung an (siehe Bild)

5. Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)

6. Klicken Sie auf "Continue" um weiterzukommen


Nackenbehandlung mit i-LIGHT

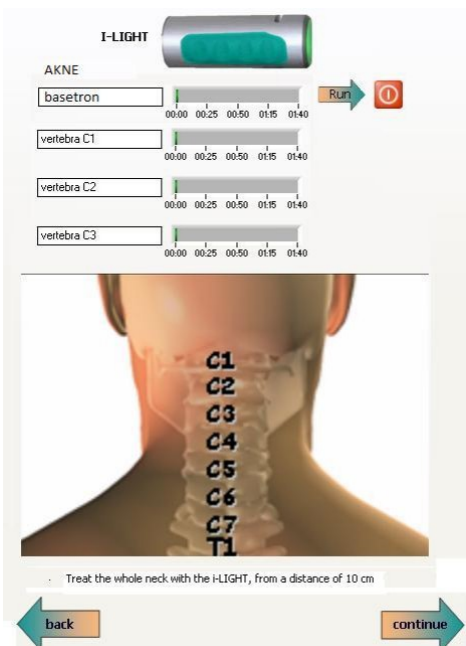

- Klient in Bauchlage
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**
- Behandeln Sie den Hals mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil

5.5.2 BEHANDLUNG DER GESICHTSAKNE MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT


i-ON Vorbehandlung mit i-LIGHT WEISS

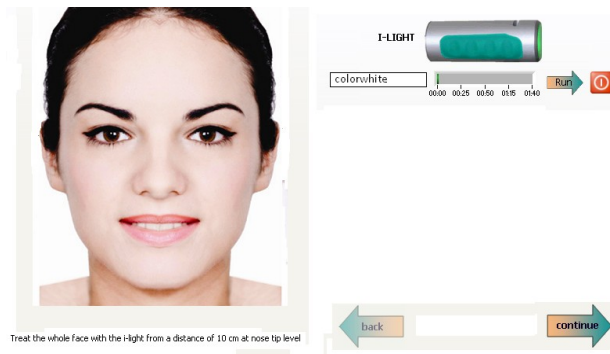

Klient in Rückenlage mit geschlossenen Augen

- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser
- Tragen Sie der Aloe + Restoratemischung auf Gesicht und Hals auf
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT


I-On Akne Gesicht:

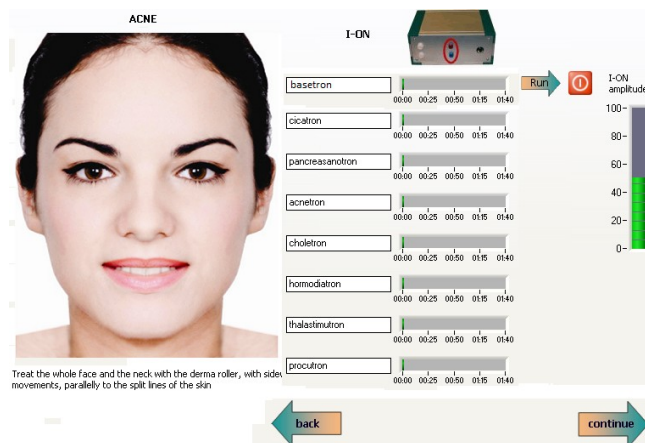

- Behandeln Sie weiter das ganze Gesicht mit den verbliebenen Raymedys
- Entfernen Sie die restliche Aloe-Mischung mit einem feucht warmen Tuch

- Passen Sie die Amplitude an. Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie die ersten beiden Raymedy Basetron und Cicatron mit dem Dermalroller im ganzen Gesicht ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch
- Tragen Sie nun großzügig eine angewärmte Mischung aus Aloe-Q10

I-Vac Akne Gesicht

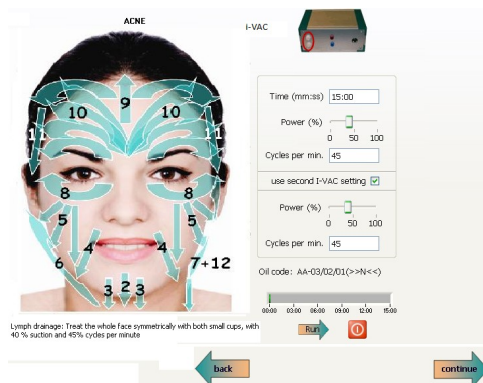


- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf. Dann schröpfen Sie mit dem kleinsten runden Gläschen wie folgt:
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-VAC
- Lymphdrainage
 1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
 2. Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
 3. Dann weiter mit beiden kleinsten Schröpfgläschen von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinn's (Siehe Bild)

4. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
5. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns (Siehe Bild)
6. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17)
7. Von dort zur Grube der Clavikular (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
8. Dann vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang)
9. Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext. Intrang) bis zum Haaransatz
10. Von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext.

Taiyang: 3-4x Pumpen


11. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen
12. Zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
13. Entfernen Sie sorgfältig das verbliebene Öl mit einem feucht warmen Tuch

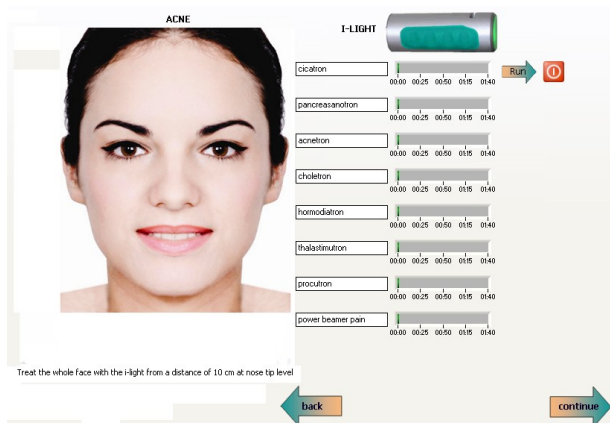

I-Light Akne Gesicht

- aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den "run"-Pfeil neben den Raymedys
- Richten Sie das i-Light auf Höhe der Nasenspitze aus ca. 10 cm Distanz auf das Gesicht
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm


NEUE EDA-MESSUNG

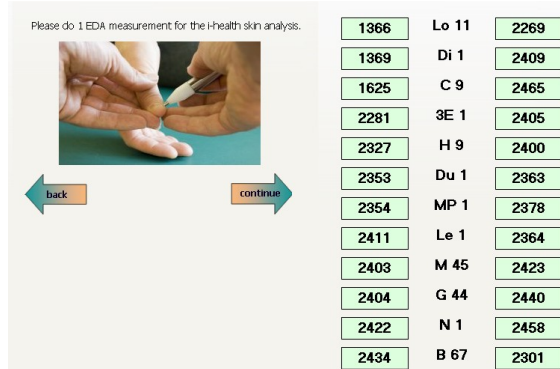

- Es ist eine weitere EDA-Messung notwendig, um die Konsolidierungsphase abzuschließen
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

5.5.3 AKNEPROGRAMM:KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

KONSOLIDIERUNGSPHASE

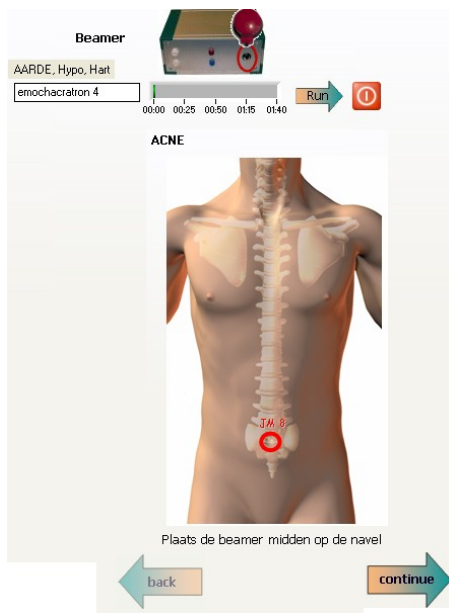

- Klient in Rückenlage
- Passend zum aktuellen Energiemangel im Erde-Element wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Eموchakration 4, um Energie aus dem Feuerelement zuzuführen.
- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Nach Klick auf den "continue"-Pfeil ist das Akneprogramm beendet und wird geschlossen:
Protocoll is finished.

5.6 CELLULITE-PROGRAMM

Aus praktischen topographischen Gründen wurde die Cellulite in diesem Programm in 3 Formen unterteilt, entsprechend der Korrelation mit den zugehörigen Meridianen:


Ga/Le, (Gallenblase/Leber), MP/Ma (Milz/Pankreas-Magen) und N/Bl (Niere/Blase)

Ga/Le-Cellulite wird behandelt, während der Klient auf der rechten oder linken Seite liegt, MP/Ma-Cellulite in Rückenlage und die N/Bl-Cellulite in Bauchlage. Da die MP/Ma-Funktion bei allen Cellulite-Arten eine wichtige Rolle spielt, empfehlen wir, jede Cellulite-Behandlung mit der Behandlung der MP/Ma-Meridiane/Zonen zu kombinieren.

Während des Cellulite-Programms werden Bilder von den Cellulite-Zonen, den Dermatomen, den Shu-Punkten und den Alarm-Punkten gezeigt.

3 EDA-Messungen bestimmen den Konstitutionstyp des Klienten (normal, hypo- oder hyper)

Nach Auswahl des Cellulite-Programms erscheinen 3 Arten von Cellulite auf Ihrem Bildschirm:

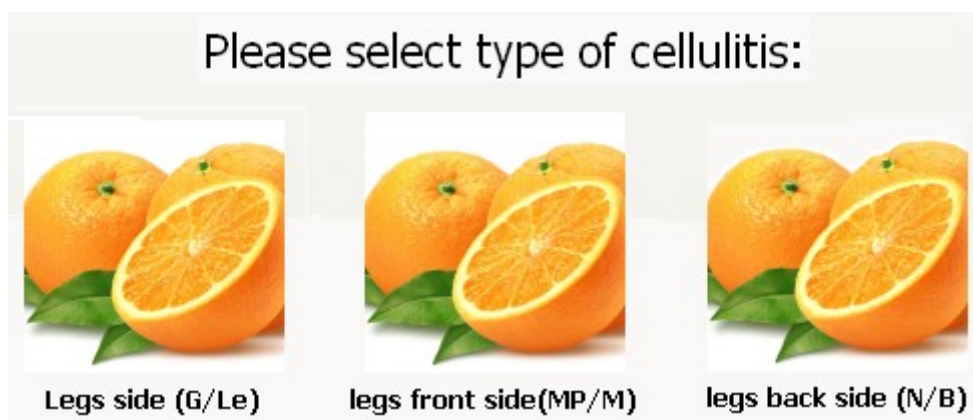


Alle Cellulite-Programme liefern eine Cellulite-Behandlung insbesondere der Beine und sind ähnlich aufgebaut. Der Unterschied besteht nur bezüglich der Behandlungszonen. Deswegen wird nur das Ga/Le-Programm im Detail beschrieben.

5.6.1 CELLULITE-PROGRAMM GA/LE (AUSSENSEITE DER BEINE)



3 EDA-Messungen sind notwendig für die Bestimmung von Elementtyp, Energieniveau, Regulationsfähigkeit, Energieverteilung und des schwächsten Meridians. Als Ergebnis zeigt der nächste Bildschirm die empfohlene Bewegungsrichtung für die Schröpfköpfe mit dem persönlichen Ölkomplex an.

5.6.2 CELLULITE-PROGRAMM GA/LE BEHANDLUNG DES RÜCKENS MIT DEM I-VAC

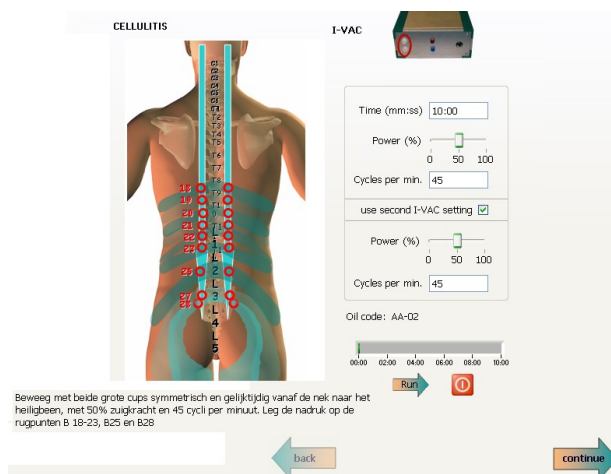


CELLULITE: Behandlung des Rückens mit dem i-VAC:

- Klient in Bauchlage
 - Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken auf.
 - Aktivieren das i-VAC mit Klick auf den RUN-Pfeil
 - Saugkraft ist voreingestellt, kann aber an die Beschaffenheit der Haut des Klienten angepasst werden
 - Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian) und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.
- Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil rechts unten fahren Sie im Programm fort.
 - Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch

5.6.3 CELLULITEPROGRAMM GA/LE: BEHANDLUNG DER PROBLEMZONEN MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT


Beginnen Sie mit dem Bein 1

CELLULITE: Vorbehandlung mit dem i-LIGHT

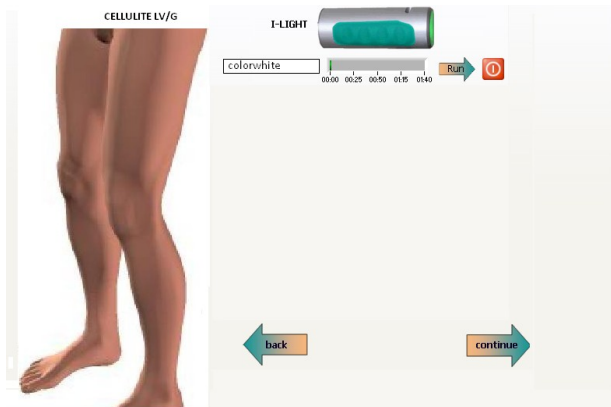

- Klient in Seitenlage rechts oder links
- 10Min. Infrarot-Bestrahlung der Problemzonen
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die lateralen Problemzonen auf
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

Cellulite Beinbehandlung mit dem i-ON

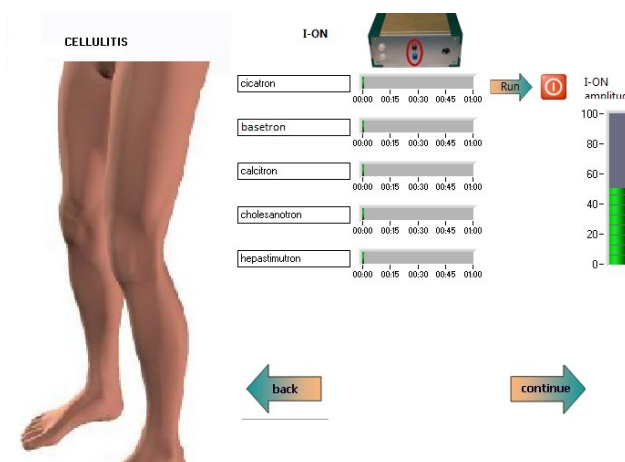

- Klient in Seitenlage
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron
- Klicken Sie auf STOPP
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+

Activize Mischung auf


- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie ein (Wärmebildung)

Wiederholen Sie nun die I-Light und I-On Behandlung am 2.Bein

I-VAC Cellulite 1. Bein

Packen Sie nun das 1.Bein aus und entfernen Sie sorgfältig die Aloe-CC-Cell-Activize-Zimt-Mischung mit einem feuchten warmen Tuch

• I-VAC LYMPHEDRAINAGE

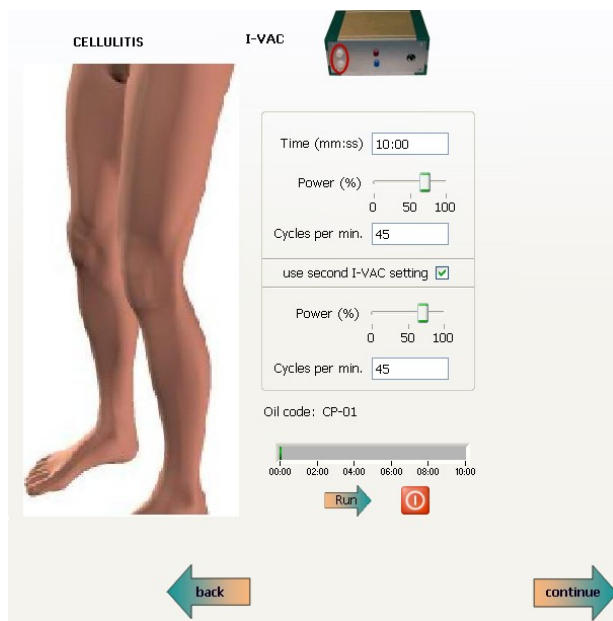

- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Außenseite des Beines ab (siehe Bild)
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss


- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den kleinen RUN-Pfeil.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:
 1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
 2. Zwischen dem Großzeh und 2. Zeh /Akupunkt Leber 3): 7-8x pumpen
- Wechseln Sie bitte auf das große Schröpfglas:
 3. Auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8): 7-8x pumpen
 4. Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten) um die Lympheseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian)
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.

• I-VAC BINDEGEWEBEMASSAGE

- Ändern Sie den Zyklus auf 550 und setzen Sie die Pumpintensität auf mindestens 25% herab (Schmerz)
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Außenseite des Beines ab
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch entfernen (reflektiert)

Wiederholen Sie nun die I-VAC Behandlung an Bein2

I-Light Cellulite

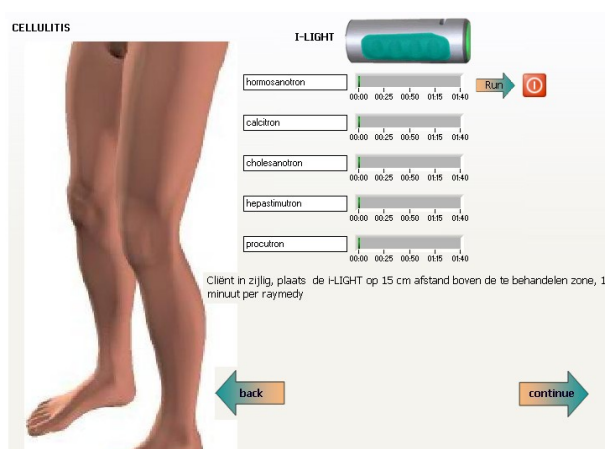


Beinbehandlung mit dem I-LIGHT

- Klient in Seitenlage rechts oder links
- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem I-Light
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

5.6.4 CELLULITEPROGRAMM GA/LE: BAUCHBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

I-VAC Bauchbehandlung

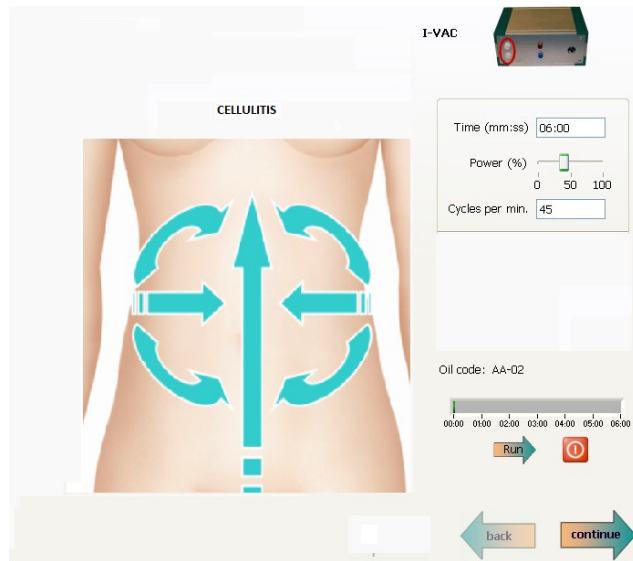


- Tragen Sie auf den Bauchbereich angewärmte Ölmischung auf.
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Passen Sie eventuell die Pumpintensität an.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Bei HYPO- und NORMALE Energie: Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite(Taille) an und bewegen Sie diese wie angezeigt von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins, dann von der Taille zur Bauchmitte hin, dann von der Taille (linken und rechten

Bauchseite) nach unten seitwärts bis zum Schambein. Zuletzt von Schambein zum Unterrand des Brustbeins


- Bei HYPER-Energie: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe von der Taille bis zur Schambein, danach von der Taille bis zur Nabel, anschließend von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt von Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein
- Folgen Sie jedenfalls mit den Schröpfköpfen der im Bild angegebenen Pfeilrichtung auf dem Konzeptionsgefäß
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert)
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

EDA – Messung Cellulite

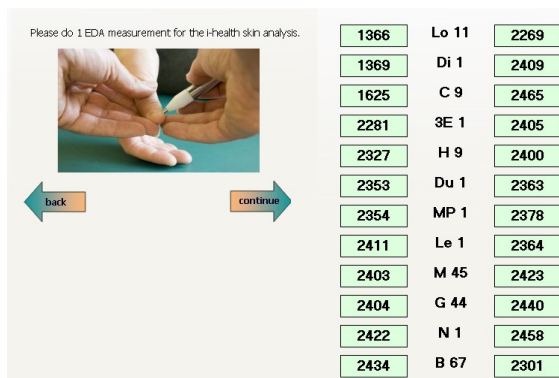

- Für die abschließende Konsolidierungsphase ist eine neue EDA-Messung notwendig
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

5.6.5 CELLULITEPROGRAMM GA/LE: KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

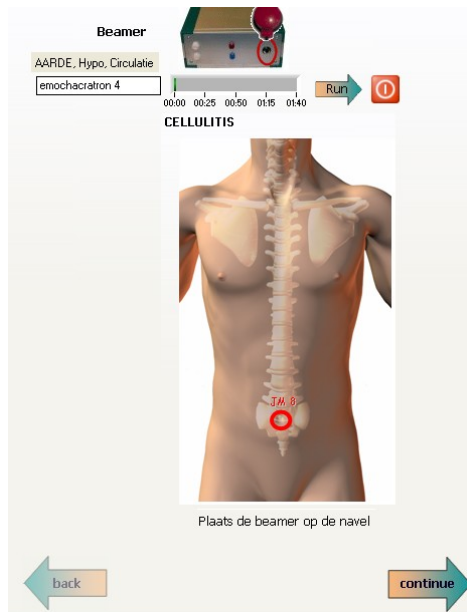

- Passend zum aktuellen Energiemangel im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Emochakraton 4, welches Energie aus dem Feuerelement zuführt
- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil

Nach Beendigung der Konsolidierungsphase wird mit einem Klick auf den "continue"-Pfeil das Celluliteprogramm geschlossen:

Protocoll is finished.

Das CELLULITE-PROGRAMM Milz-Pankreas/Magen und Niere/Blase

1. 10-minütige Bestrahlung der Problemzonen mit der Infrarot-Lampe
2. 3 EDA-Messungen
3. Lymphdrainage nach Protokoll
4. Auftragen von Aloe+Restorate auf die Problemzonen der Vorder-oder der Rückseite auf dem 1. Bein
5. Weißes Licht mit dem i-LIGHT
6. Cicatron und Basetron mit dem Dermalroller des i-ON
7. Entfernung der Aloe-Restorate-Rückstände und Auftragen von Aloe + CC-Cell-Lotion (Verhältnis 1:2)+Zimt+Activize. Weiterbehandlung mit dem i-ON. Die Reste von Aloe + CC-Cell-Lotion+Zimt+Activize werden nicht entfernt: danach das Bein mit Frischhaltefolie zum besseren Einwirken einwickeln.
8. Auftragen von Aloe+Restorate auf die Problemzonen von Vorder- oder Rückseite des 2. Beines
9. Weißes Licht mit dem i-LIGHT (wie bei Cellulite LE/GA)
10. Cicatron und Basetron mit dem Dermalroller des i-ON
11. Entfernung der Aloe-Restorate-Rückstände und Auftragen von Aloe + CC-Cell-Lotion (Verhältnis 1:2)+Zimt+Activize. Weiterbehandlung mit dem i-ON. Die Reste von Aloe + CC-Cell-Lotion werden nicht entfernt: danach das Bein mit Frischhaltefolie zum besseren Einwirken einwickeln.
12. Reinigen Sie das 1. Bein mit einem feucht warmen Tuch.
13. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex (wie bei Cellulite LE/GA von unten nach oben)
14. Reinigen Sie das 2. Bein mit einem feucht warmen Tuch.

15. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex (wie bei Cellulite LE/GA von unten nach oben)
16. Entfernen Sie die sorgfältig die Ölmischung mit einem feucht warmen Tuch (reflektiert) von beiden Beinen
17. i-Light gemäß Protokoll (wie bei Cellulite LE/GA)
18. Lymphdrainage des Abdomens (wie bei Cellulite LE/GA)
19. EDA –Messung
20. Emochakraton mit dem Beamer


5.7 SPEZIELLE LÖSUNGEN

Ganz neu in „Spezielle Lösungen“ sind die Programme für Kuperose/Rosacea, Besenreiser, Striae, und Schulter-Nacken-cellulite. Auch findet man hier AKNE 2 zurück. Diese Kapitel fängt an mit einem typischen „Demo-Protokoll“, das der Kosmetikerin erlaubt, Interessenten und neue Klienten mit sämtlichen Inhalten des IQ BEAUTY SYS vertraut zu machen.

5.7.1 DEMO-PROGRAMM RÜCKENBEHANDLUNG MIT DEM I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

ERDE, Hyper, Leber

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO

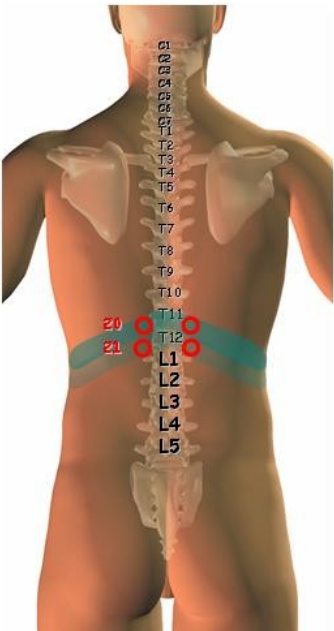

SKIN CARE

I-LIGHT

colorwhite



00:00
00:30
01:00
01:30
02:00

Run

⏻

Zoom

Tragen Sie die Mischung aus Aloe + Restorate (2EL : 1TL) auf die angezeigten Hautareale auf. Behandeln Sie diese Areale mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Bewegen Sie das i-LIGHT dabei von der Wirbelsäule aus nach rechts und nach links aussen. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "Continue"-Pfeil

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO




I-ON



basetron




pneumasanotron

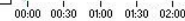

Run

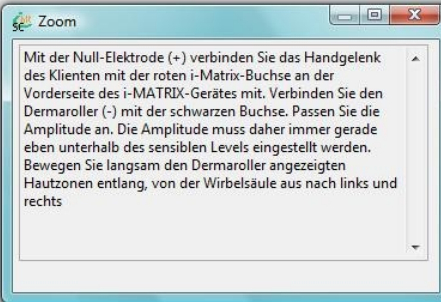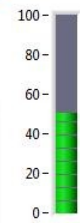I-ON
amplitude

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO

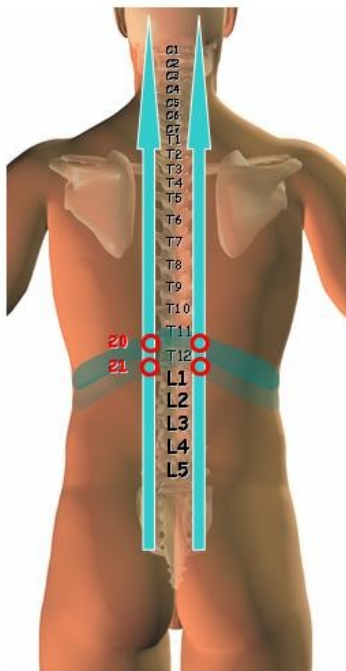


I-VAC




Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

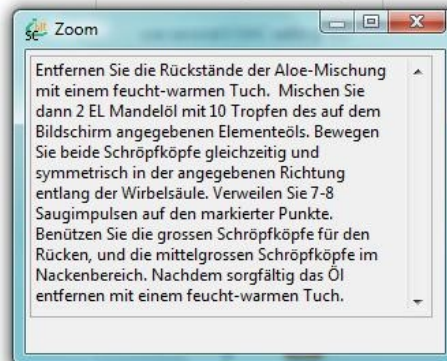

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO

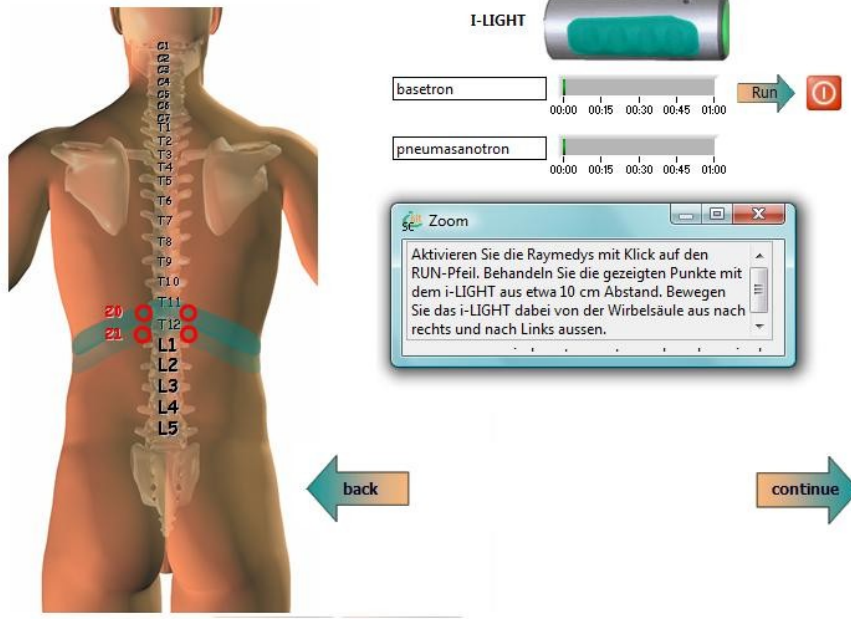

5.7.2 DEMOPROGRAMM GESICHTSBEHANDLUNG MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

Bereiten Sie zwei Mischungen vor: eine Aloe-Restorate-Mixtur und eine aus Aloe + Q10 + Rebuild25.

Reinigen Sie das Gesicht mit Rosenwasser. Tragen Sie eine Maske aus Aloe und Restorate auf und bestrahlen Sie das Gesicht mit weißem Licht. Bitten Sie den Klienten, während dieser Bestrahlung die Augen zu schließen.

Please do 1 EDA measurement for the i-Health skin analysis.



back continue

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301



NEUE EDA-MESSUNG

- Für die nächste Phase, die Gesichtsbehandlung, ist eine weitere EDA-Messung notwendig
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um zum nächsten Schritt zu kommen


SPECIAL SOLUTIONS: DEMO

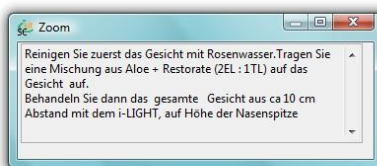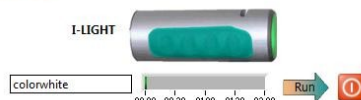


SPECIAL SOLUTIONS: DEMO

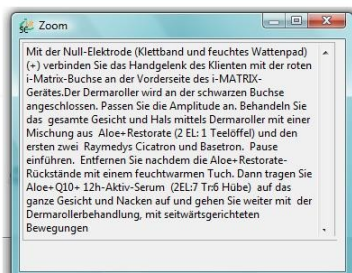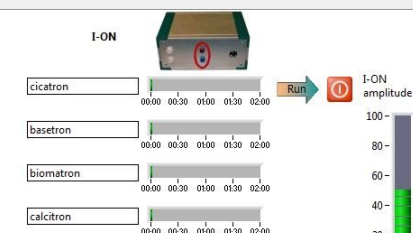


SPECIAL SOLUTIONS: DEMO

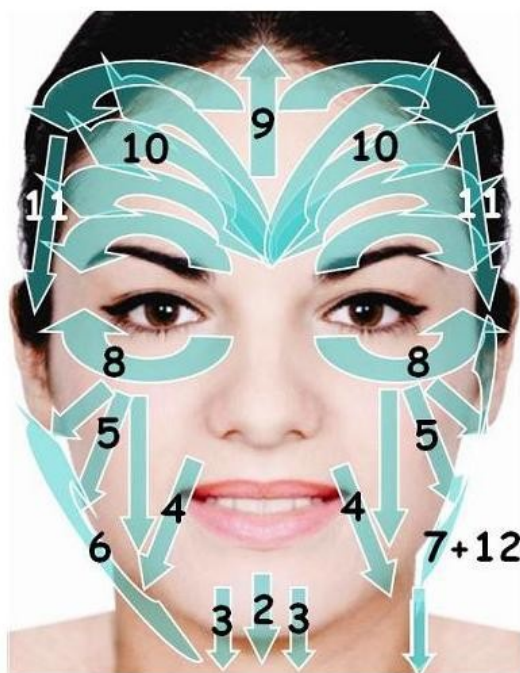

I-VAC

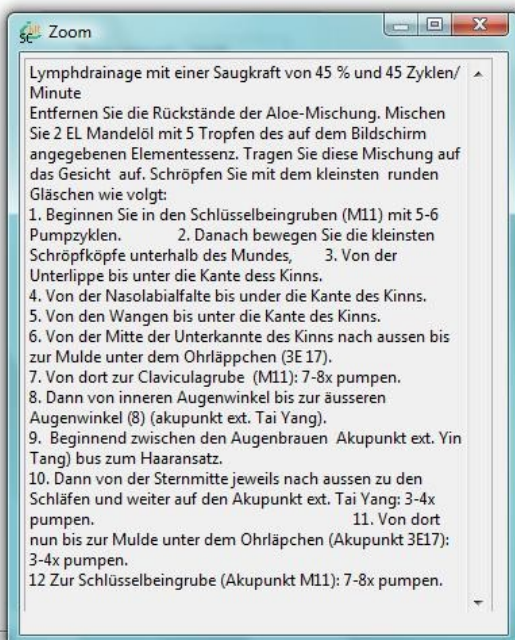

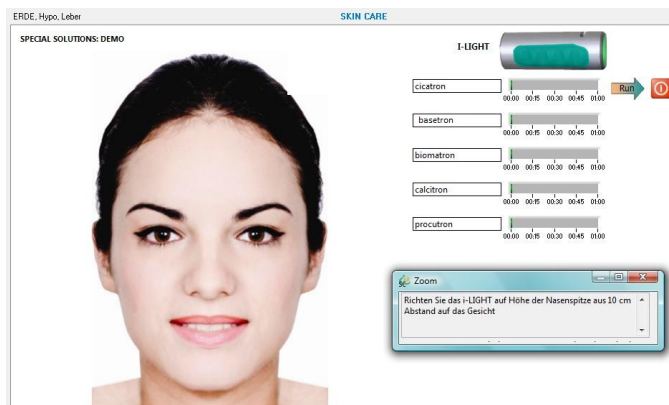

Please do 1 EDA measurement for the i-Health skin analysis.



back continue

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301


NEUE EDA-MESSUNG

Eine nächste EDA-Messung ist notwendig für die Konsolidierung

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Dann klicken Sie auf "continue", um weiterzukommen

5.7.3 DEMO-PROGRAMM-KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

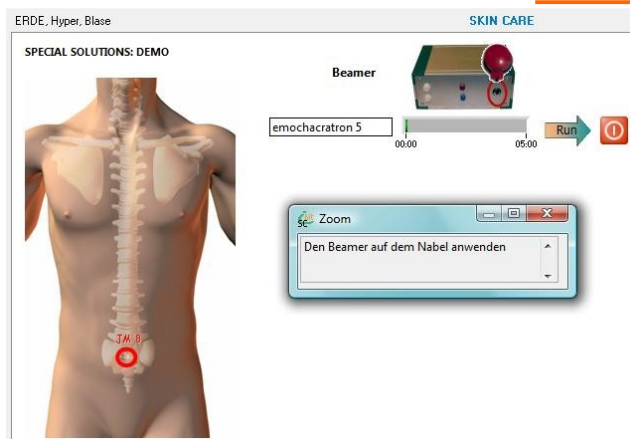

KONSOLIDIERUNG

- Klient in Rückenlage



Entsprechend dem in diesem Beispiel gegebenen Energieüberschuss im Erde-Element hat das Programm automatisch das Raymedy Enochacraton 5: Ableitung des Energieüberschusses an des Element Metall

- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy durch Klick auf den "run"-Pfeil


Mit Klick auf den "continue"-Pfeil schließt sich dieses Demo-Programm. Sie lesen:

Protocoll is finished.

5.7.4 BAUCHPROGRAMM MIT I-ON, I-VAC, I-LIGHT UND KONSOLIDATION

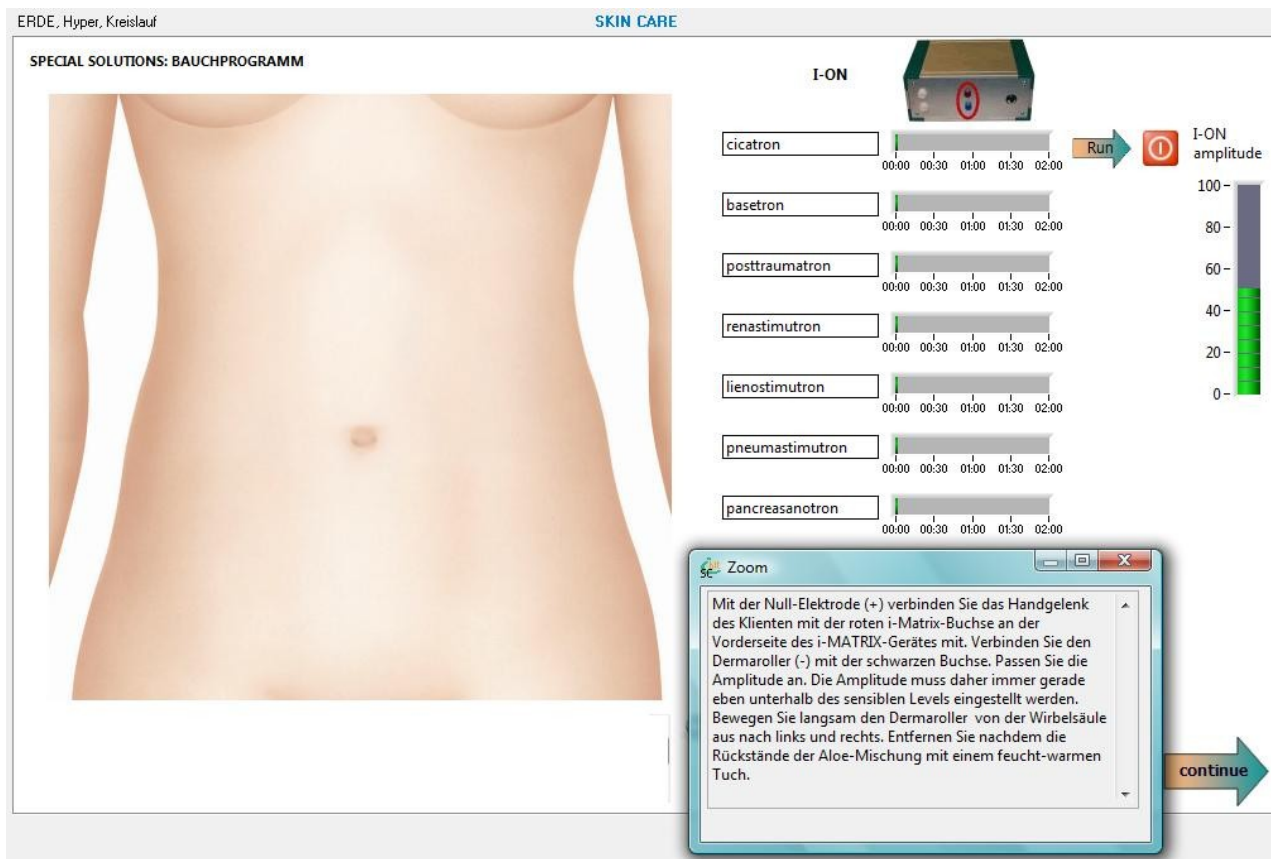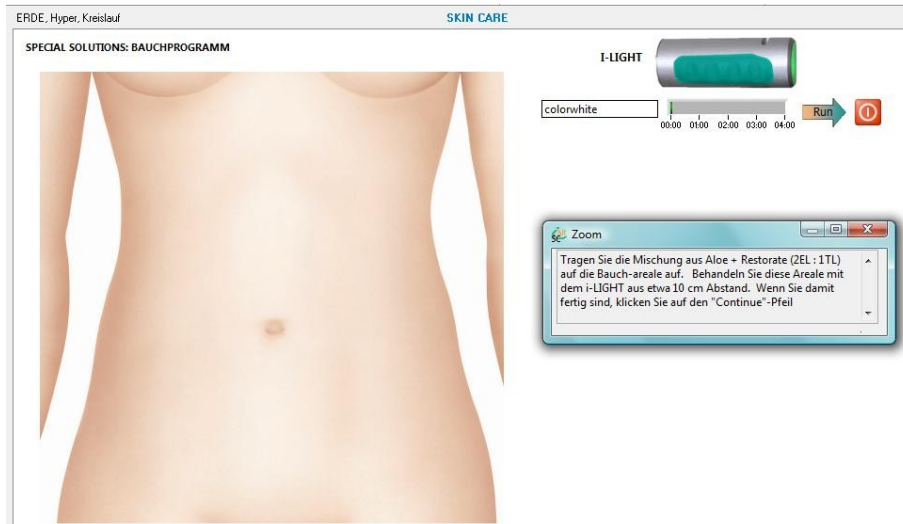

SPECIAL SOLUTIONS: BAUCHPROGRAMM

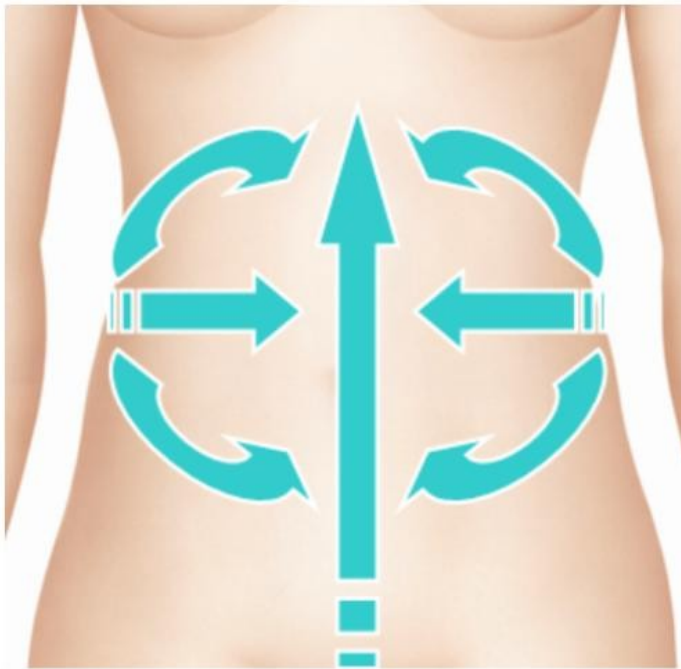

I-VAC




Zoom

Tragen Sie die dazugehörigen Ölkombination auf die unten ausgegebenen Hautregionen auf. Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfungsglas:

1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt M11: 7-8x pumpen)
2. Zwischen 1. und 2. Zeh (Le 3: 7-8x pumpen)
3. Wechseln Sie bitte das kleine Glas gegen den grössten Schröpfungsglas und arbeiten Sie an der Innenseite des Knies auf Le 8 (ebenfalls 7-8x pumpen) Tragen Sie jetzt ausreichend die dazugehörigen Mandelölkombination auf den Übergang von Oberschenkel zur Leiste auf, und bewegen Sie den Schröpfungsglas von der Oberschenkelaussenseite zur Innenseite (verlauf von Lebermeridian) 5. Danach arbeiten Sie mit beiden grossen Schröpfungsgläser gleichzeitig und symmetrisch am Bauch weiter. Folgen Sie einfach die Pfeilrichtungen

SPECIAL SOLUTIONS: BAUCHPROGRAMM

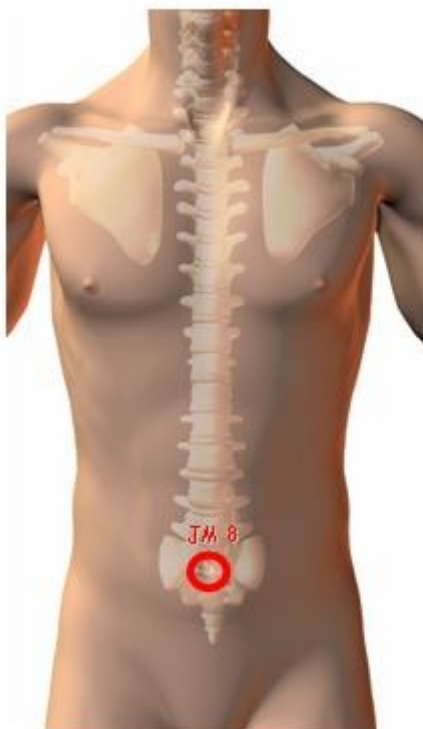

I-LIGHT



cardiosanotron

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00



Zoom

Entfernen Sie die Öl-Rückstände. Richten Sie das i-LIGHT auf den Nabel, aus 10 cm Abstand.



Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.



back

continue

907	Lu 11	1005
2621	Di 1	339
1387	KS 9	3909
69	3E 1	2312
3119	H 9	1581
321	Dü 1	749
2544	MP 1	162
333	Le 1	3700
3362	M 45	2112
2650	G 44	2996
1615	N 1	1442
1374	B 67	3519

Alles löschen

100-Hz-Provokation

ERDE, Hypo, Kreislauf

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: BAUCHPROGRAMM



Beamer




emochacratron 4

00:00

05:00

Run

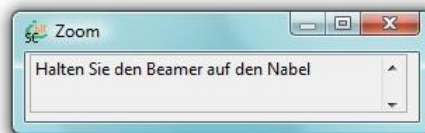

Protocoll is finished.

5.7.5 CUPEROSEPROGRAMM MIT I-ON, I-VAC, I-LIGHT UND KONSOLIDATION

ERDE, Normal, Dreifach-Erwärmer

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: Cuperose (+Rosacea)



I-LIGHT



colorwhite

00:00


00:30

01:00


01:30

02:00



Run

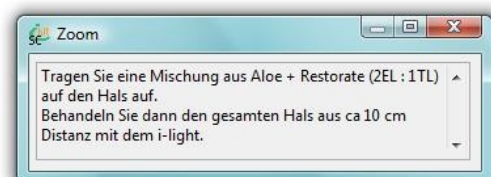

SPECIAL SOLUTIONS: Cuperose (+Rosacea)

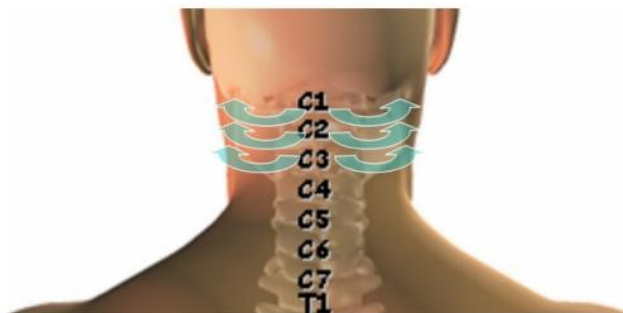

I-ON

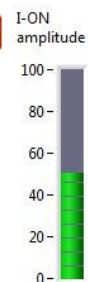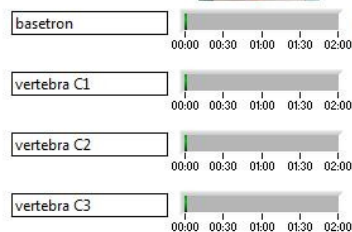

Zoom

Mit der Null-Elektrode (+) (Klettband und feuchtes Wattepad) verbinden Sie das Handgelenk des Klienten mit der roten i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes. Verbinden Sie den Dermalroller mit der schwarzen Buchse. Passen Sie die Amplitude an. Behandeln Sie den gesamten Nacken mittels Dermalroller mit dem ersten Raymedy Basetron. Drücken Sie auf Stopp. Danach verbinden Sie das 2. schwarze Kabel mit dem 1. und wechseln den Dermalroller gegen die zwei flachen Elektroden aus. Behandeln Sie mit den weiteren Raymedys auf Höhe C1 bis C3 symmetrisch und langsam von der Wirbelsäule aus nach links und rechts.

i-health

Datei Konfiguration Extra Hilfe




Name: Eng van der, Henk

Energie: +8 %

ERDE, Normal, Dreifach-Erwärmer

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: Cuperose (+Rosacea)

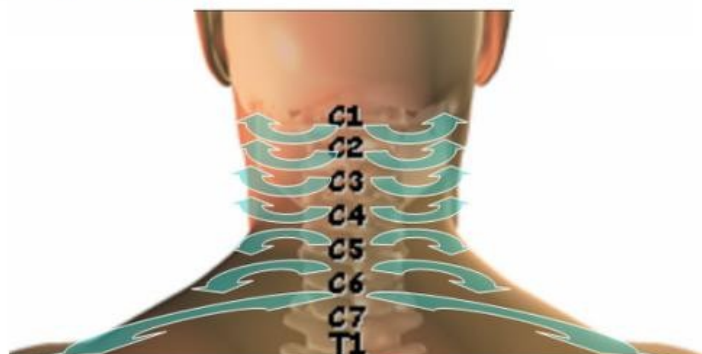

I-VAC



Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

use second I-VAC setting ☒

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45



Oil code: AA-03/02/01(>N<)




Zoom

Entfernen Sie die Rückstände der Aloe-Mischung. Mischen Sie 2 EL Mandelöl mit 5 Tropfen des auf dem Bildschirm angegebenen Elementessenz. Tragen Sie diese Mischung auf den Hals auf. Behandeln Sie den gesamten Hals langsam und symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts mit den beiden kleinen Schröpfköpfen, mit einer Saugwirkung von 75 % und 45 Zyklen/Minute

SPECIAL SOLUTIONS: Cuperose (+Rosacea)

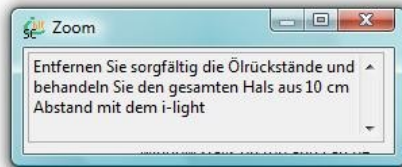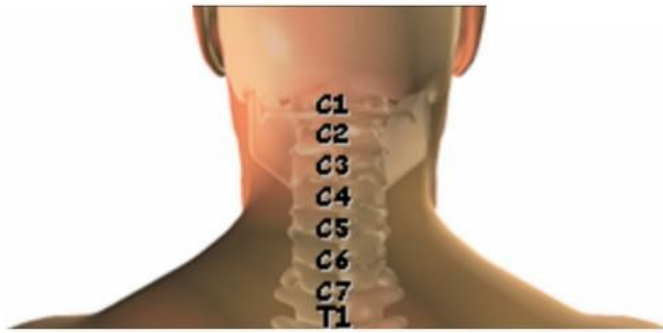


I-LIGHT

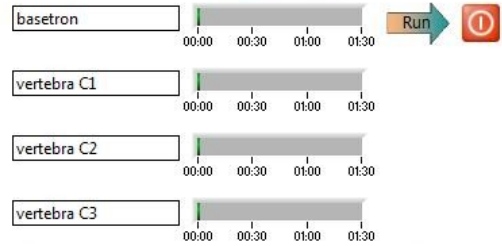

SPECIAL SOLUTIONS: Cuperose (+Rosacea)



I-LIGHT

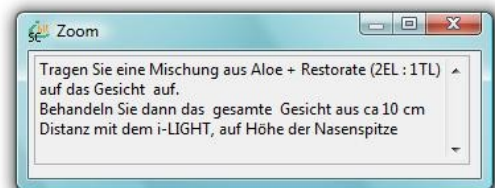

SPECIAL SOLUTIONS: Cuperoze (+Rosacea)



I-ON




Zoom

Mit der Null-Elektrode (Klettband) (+) verbinden Sie das Handgelenk des Klienten mit der roten i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes. Der Dermalroller wird an der schwarzen Buchse angeschlossen. Passen Sie die Amplitude an. Behandeln Sie das gesamte Gesicht und Hals mittels Dermalroller mit einer Mischung aus Aloe+Restorate (2 EL: 1 Teelöffel) und den ersten zwei Raymedys Cicatron und Basetron. Pause einführen. Entfernen Sie nachdem die Aloe+Restorate-Rückstände mit einem feucht warmen Tuch. Dann tragen Sie Aloe+Q10 (1EL:7 Tropfen) auf das Gesicht und Nacken auf und gehen Sie weiter mit der Dermalrollerbehandlung, mit seitwärtsgerichteten Bewegungen

window stays on top and can be resized ->

SPECIAL SOLUTIONS: Cuperoze (+Rosacea)

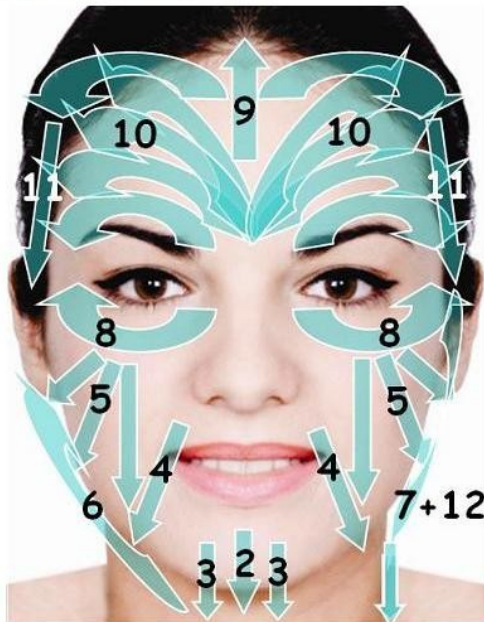

I-VAC



Zoom

Lymphdrainage mit einer Saugkraft von 40 % und 45 Zyklen/Minute
WICHTIG!! IM BEREICH DER KUPEROSE SAUGKRAFT AUF 0 REDUZIEREN!!
Entfernen Sie die Rückstände der Aloe-Mischung. Mischen Sie 2 EL Mandelöl mit 5 Tropfen des auf dem Bildschirm angegebenen Elementessenz. Tragen Sie diese Mischung auf das Gesicht auf. Schröpfen Sie mit dem kleinsten runden Gläschen wie folgt:



1. Beginnen Sie in den Schlüsselbeingruben (M11) mit 5-6 Pumpzyklen.
2. Danach bewegen Sie die kleinsten Schröpfköpfe unterhalb des Mundes.
3. Von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns.
4. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns.
5. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns.
6. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach aussen bis zur Mulde unter dem Ohrfläppchen (3E17).
7. Von dort zur Claviculagrube (M11): 7-8x pumpen.
8. Dann von inneren Augenwinkel bis zur äusseren Augenwinkel (8) (akupunkt ext. Tai Yang).
9. Beginnend zwischen den Augenbrauen Akupunkt ext. Yin Tang) bus zum Haaransatz.
10. Dann von der Sternmitte jeweils nach aussen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext. Tai Yang: 3-4x pumpen.
11. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohrfläppchen (Akupunkt 3E17): 3-4x pumpen.
- 12 Zur Schlüsselbeingrube (Akupunkt M11): 7-8x pumpen.

window stays on top and can be resized ->

SPECIAL SOLUTIONS: Cuperose (+Rosacea)



I-LIGHT

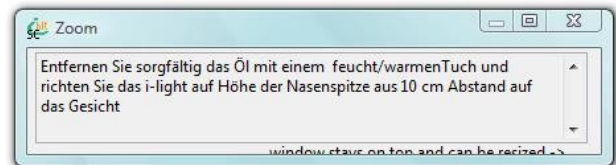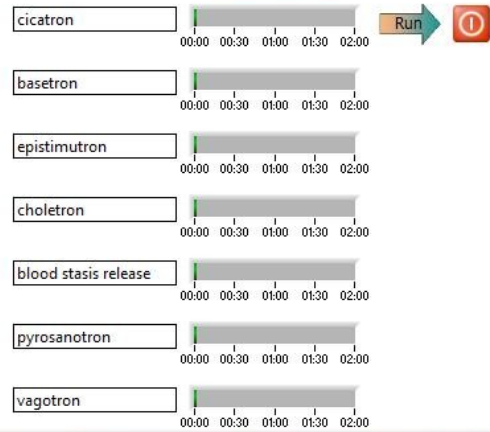

Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.



back

continue

907	Lu 11	1005
2621	Di 1	339
1387	KS 9	3909
69	3E 1	2312
3119	H 9	1581
321	Dü 1	749
2544	MP 1	162
333	Le 1	3700
3362	M 45	2112
2650	G 44	2996
1615	N 1	1442
1374	B 67	3519

100-Hz-Provokation

Alles löschen

ERDE, Hypo, Dreifach-Erwärmer

SPECIAL SOLUTIONS: Cuperose (+Rosacea)

Beamer




Protocoll is finished.

5.7.6 BESENREISERPROGRAMM MIT I-ON, I-VAC, I-LIGHT UND KONSOLIDATION

ERDE, Normal, Herz SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: BESENREISER

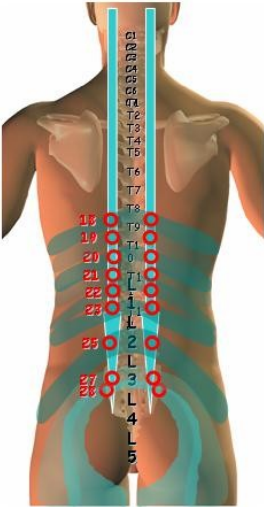

I-VAC



Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

Zoom

Beginnen Sie im Nacken und bewegen Sie beide Schröpfköpfe gleichzeitig und symmetrisch in Richtung Steissbein, mit 80% Saugkraft und 45 Zyklen/Minute, mit besonderer Betonung der Bereiche B18 bis B25 und B28

Oil code: AA-02

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00

Run

ERDE, Normal, Herz SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: BESENREISER



I-LIGHT



colorwhite

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

Run

Zoom

Packung mit Aloe+Restorate
Behandeln Sie die problematischen Zonen aus 10 cm Abstand mit dem i-LIGHT

ERDE, Normal, Herz SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: BESENREISER



I-ON



cicatron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

basatron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

venatron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

blood stasis release 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

stasis release tonicum 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

lienosanotron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

vascutron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

I-ON amplitude 100 - 80 - 60 - 40 - 20 - 0

Run

Zoom

Die Klientin liegt auf dem Rücken. Aloe+Restorate wird für die erste 2 Raymedys belassen. Amplitude auf ca. 100% anheben. Bearbeiten Sie den Problembereich mit dem Dermalroller (Schwerpunkt auf der Problemzone). Dann Aloe+Restorate abwaschen. Danach Aloe+Q10 (10 Tropfen)+ CC Cell Lotion (1:1)+ Activize (ITL) auftragen. Wie oben mit dem Dermalroller weiter arbeiten.

SPECIAL SOLUTIONS: BESENREISER



I-VAC



Time (mm:ss) 10:00

Power (%)

0 50 100


Cycles per min. 45

Zoom

Entfernen Sie die Rückstände der Aloe-Mischung mit warmen und feuchten Tuch. Dann reiben Sie Mandelöl mit 10 Tropfen Elementessenz auf die Vorderseite des Beines und die Leistengegend. i-VAC Beine zum Öffnen der Lymphbahnen: 50 Saugkraft, 45 % Zyklen. (Ausnahme: bei grosse Krampfaden und starke Schmerzen Saugkraft reduzieren!) Beginnen Sie zuerst mit einem kleinen Schröpfglas: In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen. Dann zwischen dem Grosszeh und 2. Zeh (Akupunkt Leber 3): 7-8x pumpen. Wechseln Sie bitte auf das großen Schröpfkopf:

1. Auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8): 7-8x pumpen
2. Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten) um die Lympheseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian)
3. i-VAC im Bereich der Besenreiser: WICHTIG!! SAUGKRAFT 0% mit mittleren runden Schröpfglas und 45 Zyklen (Lymphe drainage), und nachdem 550 Zyklen (Bindegewebe).
4. Danach Ölrückstände mit einem feuchten warmen Tuch sorgfältig entfernen.

SPECIAL SOLUTIONS: BESENREISER

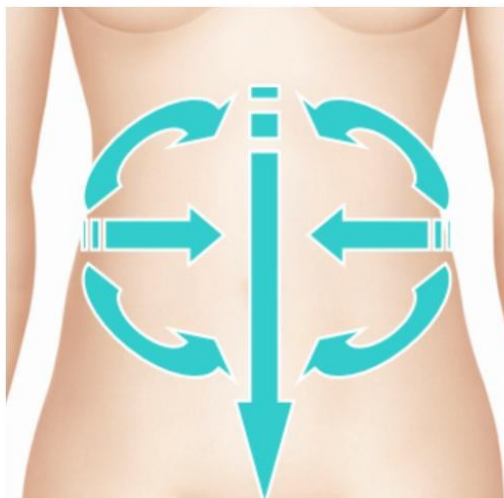

I-VAC



Time (mm:ss) 05:00

Power (%)

0 50 100

Cycles per min. 45

Zoom

HYPER: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe gleichzeitig und symmetrisch von der Taille bis zum Schambein, danach von der Taille bis zum Nabel, anschließend von der Taille bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt vom Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein.

HYPO oder NORMAL: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe gleichzeitig und symmetrisch von der Taille bis zum Schambein, danach von der Taille bis zum Nabel, anschließend von der Taille bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt vom Schambein bis zum Unterrand des Brustbeins.

window stays on top and can be resized ->

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Run



SPECIAL SOLUTIONS: BESENREISER
Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.



1514	Lu 11	3063
2361	Di 1	2478
1732	KS 9	1147
3092	3E 1	3506
495	H 9	205
3609	Dü 1	1146
3598	MP 1	481
3741	Le 1	3192
60	M 45	1133
136	G 44	1975
2075	N 1	3886
3152	B 67	3824

100-Hz-Provokation

Alles löschen

ERDE, Hypo, Nieren

SPECIAL SOLUTIONS: BESENREISER

Beamer

emochacratron 4

00:00 05:00 Run

Halten Sie den Beamer auf den Nabel

Protocoll is finished.

5.7.7 STRIAE PROGRAMM MIT I-ON, I-VAC, I-LIGHT UND KONSOLIDATION

ERDE, Normal, Blase

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: SCHWANGERSCHAFTSTREIFEN

I-LIGHT


colorwhite

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 Run

Zoom

Tragen Sie die Mischung aus Aloe + Restorate (2EL : 1TL) auf die problematischen Hautareale auf. Behandeln Sie diese Areale mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Bewegen Sie das i-LIGHT dabei von der Wöbelsäule aus nach rechts und nach links aussen. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "Continue"-Pfeil

SPECIAL SOLUTIONS: SCHWANGERSCHAFTSTREIFEN

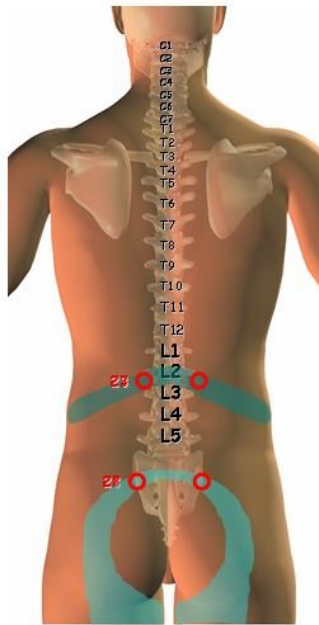

I-ON



cicatron

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

I-ON
amplitude

basetron

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

hormodiatron

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

flexitron

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

blood stasis release


00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

calcitron

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

phlegm release


00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

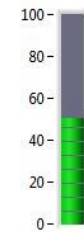

Zoom

Mit der Null-Elektrode (+) verbinden Sie das Handgelenk des Klienten mit der roten i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes mit. Verbinden Sie den Dermalroller (-) mit der schwarzen Buchse. Passen Sie die Amplitude an. Die Amplitude muss daher immer gerade eben unterhalb des sensiblen Levels eingestellt werden. Bewegen Sie langsam den Dermalroller angezeigten Hautzonen entlang, von der Wirbelsäule aus nach links und rechts, aber nur in der Problemzone.

SPECIAL SOLUTIONS: SCHWANGERSCHAFTSTREIFEN

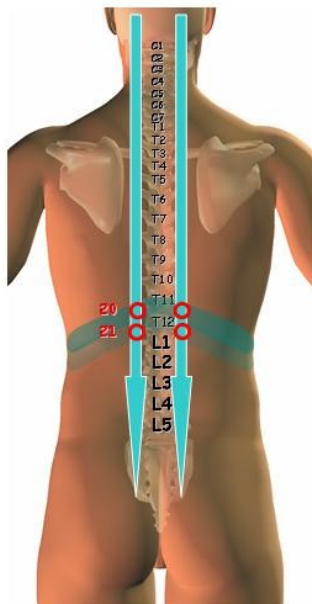

I-VAC



Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45



Zoom

Entfernen Sie die Rückstände der Aloe-Mischung mit einem feucht-warmen Tuch. Mischen Sie dann 2 EL Mandelöl mit 10 Tropfen des auf dem Bildschirm angegebenen Elementeöls. Bewegen Sie beide Schröpfköpfe gleichzeitig und symmetrisch in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule. Verweilen Sie 7-8 Saugimpulsen auf den markierter Punkte. Benützen Sie die grossen Schröpfköpfe für den Rücken, und die mittelgrossen Schröpfköpfe im Nackenbereich. Nachdem sorgfältig das Öl entfernen mit einem feucht-warmen Tuch.

SPECIAL SOLUTIONS: SCHWANGERSCHAFTSTREIFEN




I-LIGHT

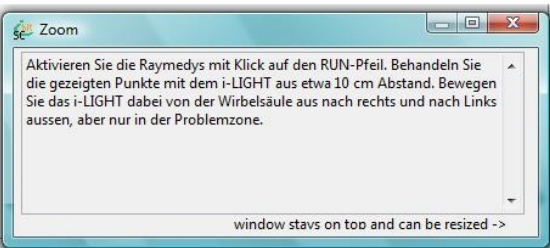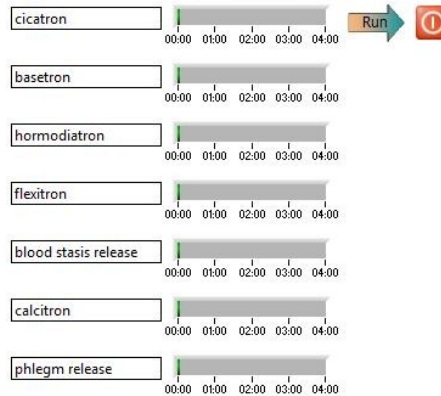

SPECIAL SOLUTIONS: SCHWANGERSCHAFTSTREIFEN



I-LIGHT

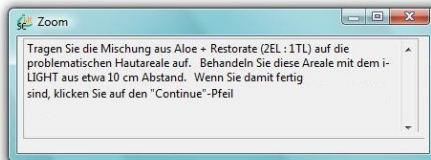

ERDE, Hypo, Dünndarm SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: SCHWANGERSCHAFTSTREIFEN



I-ON

cicatron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

basetron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

hormodiatron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

flexitron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

blood stasis release 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

calcitron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

phlegm release 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

I-ON amplitude 100 80 60 40 20 0


Zoom

Mit der Null-Elektrode (+) verbinden Sie das Handgelenk des Klienten mit der roten i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes mit. Verbinden Sie den Dermalroller (-) mit der schwarzen Buchse. Passen Sie die Amplitude an. Die Amplitude muss daher immer gerade eben unterhalb des sensiblen Levels eingestellt werden. Bewegen Sie langsam den Dermalroller angezeigten Hautzonen entlang nach links und rechts, aber nur in der Problemzone!

windows start on top and can be resized ->

ERDE, Hypo, Dünndarm SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: SCHWANGERSCHAFTSTREIFEN

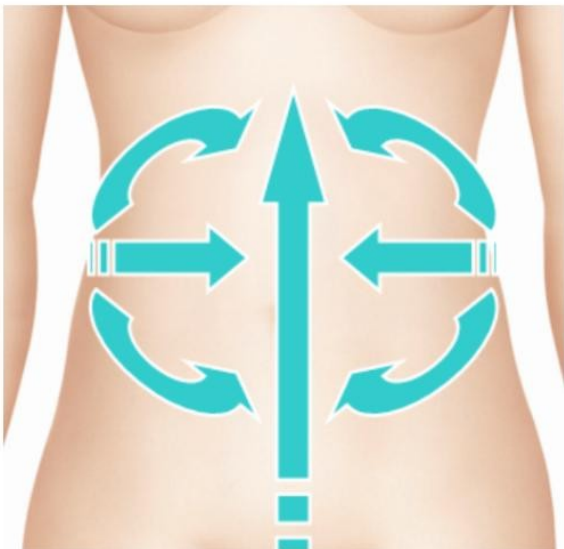

I-VAC

Time (mm:ss) 06:00

Power (%) 0 50

Cycles per min. 45

use second I-VAC setting

Oil code: AA-01

Zoom

Tragen Sie die dazugehörigen Ölkombination auf die unten ausgegebenen Hautregionen auf. Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:

1. In der Grube der Clavicular (Akupunkt M11: 7-8x pumpen)
2. Zwischen 1. und 2. Zeh (Le 3: 7-8x pumpen)
3. Wechseln Sie bitte das kleine Glas gegen den grössten Schröpfkopf und arbeiten Sie an der Innenseite des Knies auf Le 8 (ebenfalls 7-8x pumpen)

Tragen Sie jetzt ausreichend die dazugehörigen Mandelölkombination auf den Übergang von Oberschenkel zur Leiste auf, und bewegen Sie den Schröpfkopf von der Oberschenkelaussenseite zur Innenseite (verlauf von Lebermeridian)

5. Danach arbeiten Sie mit beiden grossen Schröpfköpfen gleichzeitig und symmetrisch am Bauch weiter. Folgen Sie einfach die Pfeilrichtungen

Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.



back continue

1856	Lu 11	233
2359	Di 1	3181
2776	KS 9	3147
1726	3E 1	2153
1151	H 9	2250
2456	Dü 1	3813
3009	MP 1	3291
785	Le 1	623
1405	M 45	1511
2191	G 44	2919
415	N 1	1362
3294	B 67	2268

100-Hz-Provokation

Alles löschen

ERDE, Hypo, Herz

SPECIAL SOLUTIONS: SCHWANGERSCHAFTSTREIFEN



Beamer

emochacratron 4 00:00 05:00

Zoom

Halten Sie den Beamer auf den Nabel

Protocoll is finished.

5.7.8 CELLULITE ARM-SCHULTER PROGRAMM MIT I-ON, I-VAC, I-LIGHT UND KONSOLIDATION

ERDE, Hypo, Dickdarm

SKIN CARE


SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite Arm und Schultern

I-LIGHT



colorwhite

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

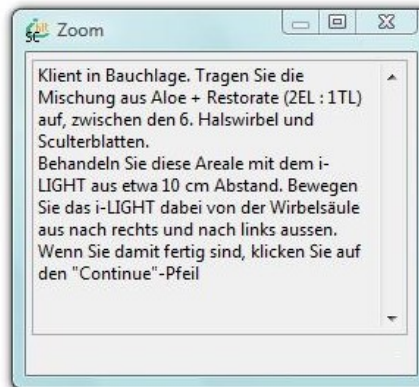

ERDE, Hypo, Dickdarm

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite Arm und Schultern

I-ON



basetron

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

pneumasanotron

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

toxisanotron

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

emocolotron

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

hormodiatron

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00



stasis release tonicum

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00


Run



I-ON amplitude

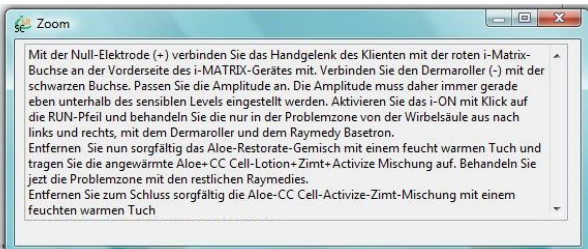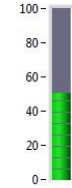

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite Arm und Schultern

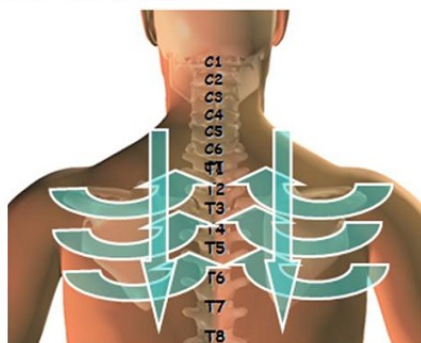

I-VAC



Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

use second I-VAC setting ☐

Oil code: AA-01

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00

Run



Zoom

Entfernen Sie die Rückstände der Aloe-Mischung mit einem feucht-warmen Tuch. Mischen Sie dann 2 EL Mandelöl mit 10 Tropfen des auf dem Bildschirm angegebenen Elementöls. Bewegen Sie beide grossen Schröpfköpfe gleichzeitig und symmetrisch in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule, bis kurz unter das Schulterblatt. Nachdem ändern Sie den Zyklus auf 550 Zyklen und bewegen Sie die Schröpfgläser von aussen nach innen zur Wirbelsäule. Nachdem sorgfältig das Öl entfernen mit einem feucht-warmen Tuch.

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite Arm und Schultern



I-LIGHT



basatron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

pneumasanotron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

toxisanotron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

emocolotron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

hormodiatron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

stasis release tonicum 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

Run



Zoom

Aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den RUN-Pfeil. Bewegen Sie das i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand von der Wirbelsäule aus nach rechts und nach Links aussen.

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite Arm und Schultern



I-LIGHT



colorwhite 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

Run




Zoom

Tragen Sie die Mischung aus Aloe + Restorate (2EL : 1TL) auf die Innenseite der Oberarme auf. Behandeln Sie diese Areale mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "Continue"-Pfeil

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite Arm und Schultern



I-ON

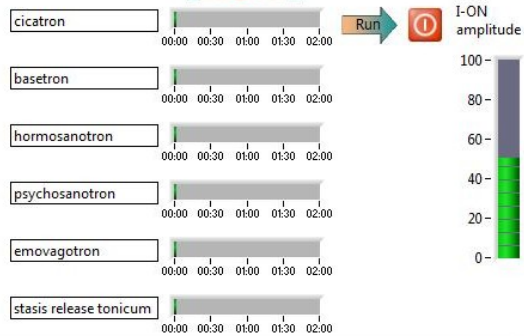

Zoom

Mit der Null-Elektrode (+) verbinden Sie das Handgelenk des Klienten mit der roten i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes mit. Verbinden Sie den Derraroller (-) mit der schwarzen Buchse. Passen Sie die Amplitude an. Die Amplitude muss daher immer gerade eben unterhalb des sensiblen Levels eingestellt werden.

1. Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf die RUN-Pfeil und behandeln Sie mit den Raymedys Cicatron und Basetron mit dem Derraroller auf den Problemzonen der Oberarme.
2. Entfernen sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+ cc Cell Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf.
3. Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys.
4. Entfernen Sie sorgfältig die Aloe-Mischung mit einem feuchten warmen Tuch

window stays on top and can be resized ->

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite Arm und Schultern



I-LIGHT




Zoom

Klient in Rückenlage, Arme parallel neben dem Körper liegend. Tragen Sie die Mischung aus Aloe + Restorate (ZEL : 1TL) auf die Aussenseite der Oberarme auf. Behandeln Sie diese Areale mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "Continue"-Pfeil


SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite Arm und Schultern



I-ON

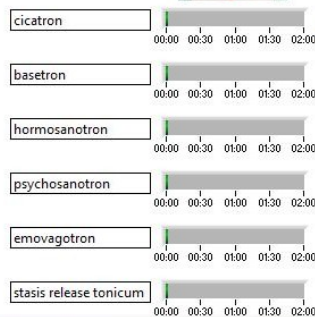

I-ON amplitude

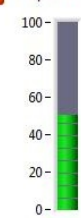

Zoom

Mit der Null-Elektrode (+) verbinden Sie das Handgelenk des Klienten mit der roten i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes mit. Verbinden Sie den Dermalroller (-) mit der schwarzen Buchse. Passen Sie die Amplitude an. Die Amplitude muss daher immer gerade eben unterhalb des sensiblen Levels eingestellt werden.

1. Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf die RUN-Pfeil und behandeln Sie mit den Raymedys Cicatron und Basetron mit dem Dermalroller auf den Problemzonen der Oberarme.
2. Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+ cc Cell Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf.
3. Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys.
4. Entfernen Sie sorgfältig die Aloe-Mischung mit einem feuchten warmen Tuch

window stays on top and can be resized ->

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite Arm und Schultern



I-VAC



Time (mm:ss)

Power (%)

Cycles per min.

Zoom

Tragen Sie die passende angewärmte ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf.

Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den RUN-Pfeil

1. Beginnen Sie mit einem grossen Schröpfglas in der Achselhöhle: 7-8x pumpen (Leeren der Lymphseen, 45 Zyklen)
2. Wechseln Sie auf das kleinste Schröpfglaschen in der Grube der Clavicula (akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen mit 45 Zyklen
3. Wechseln Sie dann auf den mittleren/grösseren Schröpfkopf (abhängig vom Umfang der Oberarme) und bewegen Sie ihn vom Ellbogen zum Rumpf
4. Abschliessend arbeiten Sie nochmals mit einem grossen Schröpfglas in der Achselhöhle: 7-8x pumpen (leeren der Lymphseen), 45 Zyklen.


Nachdem sorgfältig das Öl entfernen mit einem feucht-warmen Tuch.

window stays on top and can be resized ->

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite Arm und Schultern



I-LIGHT

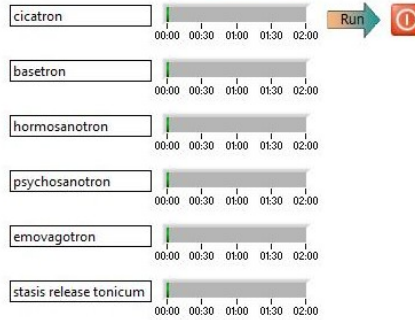

Zoom

Klient in Rückenlage, Arme parallel neben dem Körper liegend.
Behandeln Sie diese Areale mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "Continue"-Pfeil

Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.




back

continue

1856	Lu 11	233
2359	Di 1	3181
2776	KS 9	3147
1726	3E 1	2153
1151	H 9	2250
2456	Dü 1	3813
3009	MP 1	3291
785	Le 1	623
1405	M 45	1511
2191	G 44	2919
415	N 1	1362
3294	B 67	2268
Alles löschen		

100-Hz-Provokation

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite Arm und Schultern

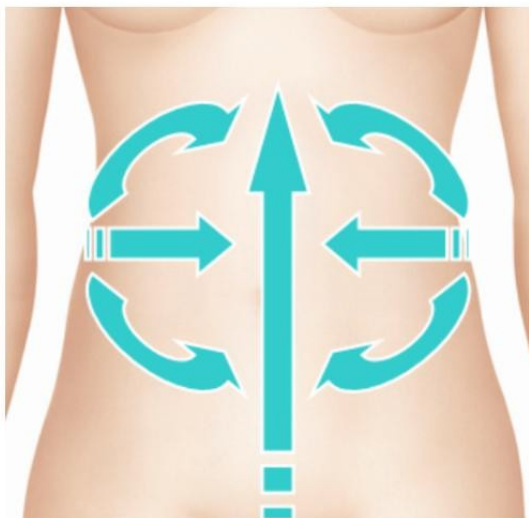

I-VAC



Time (mm:ss) 06:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

Zoom

Tragen Sie die dazugehörigen Ölkombination auf die unten angegebenen Hautregionen auf. Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:
1. In der Grube der Clavicular (Akupunkt M11: 7-8x pumpen)
2. Zwischen 1. und 2. Zeh (Le 3: 7-8x pumpen)
3. Wechseln Sie bitte das kleine Glas gegen den grössten Schröpfkopf und arbeiten Sie an der Innenseite des Knies auf Le 8 (ebenfalls 7-8x pumpen)
Tragen Sie jetzt ausreichend die dazugehörigen Mandelölkombination auf den Übergang von Oberschenkel zur Leiste auf, und bewegen Sie den Schröpfkopf von der Oberschenkelaußenseite zur Innenseite (verlauf von Lebermeridian)
5. Danach arbeiten Sie mit beiden grossen Schröpfköpfen gleichzeitig und symmetrisch am Bauch weiter. Folgen Sie einfach die Pfeilrichtungen

Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.

1856	Lu 11	233
2359	Di 1	3181
2776	KS 9	3147
1726	3E 1	2153
1151	H 9	2250
2456	Dü 1	3813
3009	MP 1	3291
785	Le 1	623
1405	M 45	1511
2191	G 44	2919
415	N 1	1362
3294	B 67	2268

100-Hz-Provokation

ERDE, Hypo, Herz

SPECIAL SOLUTIONS: CELLULITE ARM-SCHULTER

Beamer

emochacatron 4

00:00 05:00 Run


Zoom

Halten Sie den Beamer auf den Nabel

Protocoll is finished.

5.7.9 SPEZIFISCHE I-VAC LYMPHEDRAINAGEPUNKTBILDER


Leber 3 Quell/Erdepunkt

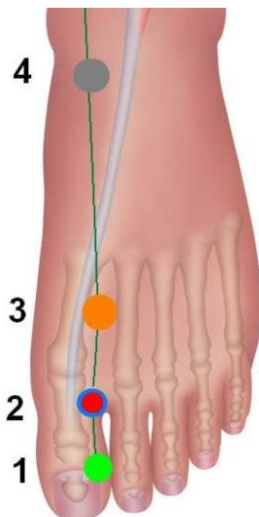

Lage: Zwischen dem Mittelfusssknochen der 1. und 2. Zehe in einer Vertiefung

Indikationen: Schwellungen, Blähungen, Krämpfen und Spannungen, wirkt kühlend und absenkend


Leber 8 Wasserpunkt, Tonisierungspunkt

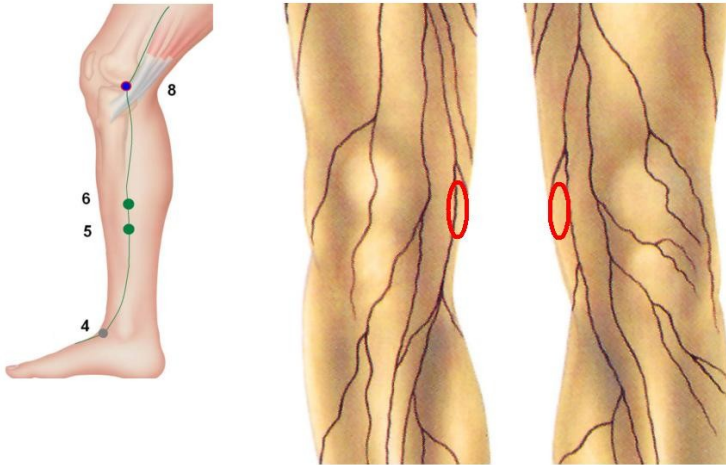

*Lage: Innenseite bei gebeugtem Knie
am Ende der medialen Hautfalte*

*Indikationen: Schwellungen, wirkt
zerstreuend, kühlend, und hautsauerend*

M11: "Haus des Qi", Entknüpfungspunkt

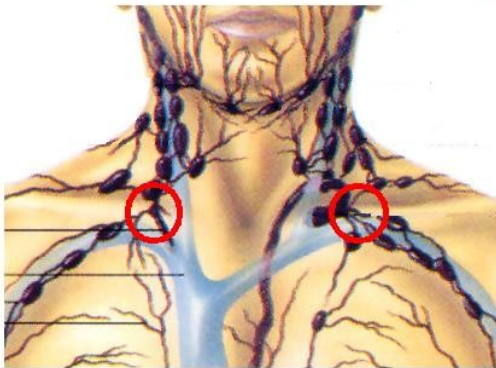

*Lage: am oberen Rand der Klavikula, zwischen der
beiden Köpfen des m. sternocleidomastoideus*

*Indikationen: Kopf-Nacken-Schulterverspannungen
und- Schwellungen, wirkt Energie entfaltend,
austreibend und zerstreuend*